



# LIBERTY SELKÄNOJA

FIN

Käyttöohje

CE


## STANDARD VAKIOMALLI



Liberty BC

## VAKIOKOOT

KOKO	Minimi ja maximi leveys selkäosan putkien välillä	
	CM	INCH
1	36 - 40	14¼ - 16
2	40 - 44	16 - 17½
3	44 - 48	17½ - 19

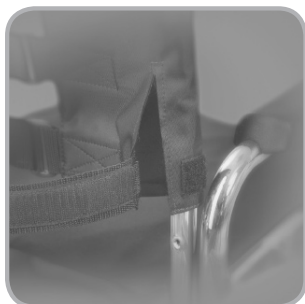

Kuva. A



Kuva. B



Kuva. C



Kuva. D

## ESITTELY

Vicair® Liberty -selkänöjä on suunniteltu käytettäväksi tämän käyttöohjeen mukaisesti. Lue käyttöohje huolella läpi ennen selkänöjan käyttöönottoa.

Selkänöja koostuu seuraavista osista:

### **Tarrasäädettävä kangas**

Tarrasäädettävä kangas kiinnitetään pyörätuolin selkänöjaputkiin ja kiristetään sopivaksi tarranauhoilla. Se korvaa pyörätuolin oman selkänöjan ja mahdollistaa tyynyn kiinnittämisen siihen. Tarrasäädettävää kangasta on saatavana useana eri kokona, jotta se sopii pyörätuolin ja tyynyn mittoihin.

### **Tyyny**

Tyyny on valmistettu polyvinyylistä ja se on täytetty tietyllä määrällä kolmikulmaisia ilmatäytteisiä SmartCell™-ilmakartoita sekä pienellä määrällä silikoniöljyä. Tyynyssä on kaksi osastoa. Ilmaventtiili sijaitsee oikeassa takakulmassa.

### **Päällinen**

Päällinen on valmistettu nylonista ja hengittävästä Comfair-kankaasta, joka on molempiin suuntiin joustava materiaali. Päällisen sisäpuolen takaosassa on irrallinen vaahtomuovi. Päällisen takaosan ulkopuolella on tarrakiinnitteinen läppä, jolla tyyny kiinnitetään tarrasäädettävään kankaaseen.

## ESIVALMISTELUT

Vicair suosittelee Liberty-selkänöjan kiinnittämistä, sovittamista ja säätämistä yhdessä terapeutin tai apuvälineen luovuttajan kanssa.

### **Koon tarkistus**

Varmista terapeutiltasi tai apuvälineen luovuttajaltasi, että selkänöjan koko on sopiva ja että se mahtuu pyörätuoliin. Selkänöjan leveyden tulisi olla sama kuin pyörätuolin istuinleveys tai vähän pienempi.

### **Tarrasäädettävän kankaan kiinnittäminen**

- Irrota pyörätuolista alkuperäinen selkänöja.
- Avaa tarrasäädettävän kankaan molemmista alakulmista lyhyet tarranauhat.
- Vedä tarrasäädettävä kangas pyörätuolin selkänöjaputkia pitkin paikalleen.
- Kiinnitä molempien alakulmien lyhyet tarranauhat (kuva A).
- Kiinnitä kiristimet tarrasäädettävän kankaan yläosassa oleviin reikiin. Käytä pienempiä kiristimiä selkänöjaputkiin, joiden halkaisija on 22 - 25 mm ja suurempia halkaisijaltaan 25 - 28 mm oleviin putkiin.
- Sulje kiristimet tiukasti selkänöjaputkien ympärille (kuva B).
- Kiristä tarrasäädettävän kankaan leveät tarranauhat. Tarranauhat pujotetaan solkien läpi, jotta ne ovat tukevasti paikoillaan.

## Tyynyn asettaminen tarrasäädettävään kankaaseen

- Poista tyynyn muovisuoja.
- Irrota tyynynpäällisen takaosassa oleva tarrakiinnitteinen läppä tyynyn alaosasta.
- Aseta tyyny tarrasäädettävää kangasta vasten ja päällisen läppäosa kankaan takaosaan kiinnittämällä samalla läpän alaosassa oleva tarranauha (kuva C). Selkänojan tulisi näyttää kuten kuvassa D on kuvattu.

## KÄYTTÖÖNOTTO

- Istu pyörätuolissa pari minuuttia, jotta selkänoja mukautuu itsellesi sopivaksi.
- Säädä selkänoja haluttuun asentoon terapeutiksi tai apuvälineen luovuttajasi avustuksella.
- Selkänojan ilmaventtiiliä ei pidä avata tyynyn säätämiseksi kuten tehdään Liberty-istuintyyneiden kanssa.

## Riittävän tuen tarkistaminen

Selkäsi ja selkärankasi ei pitäisi koskettaa tyynyn pohjaa. Tarkistus pitäisi tehdä ensimmäisellä käyttökerralla ja aina jokaisen säätökerran jälkeen.

- Istu selkä tyynyä vasten n. 20 min. ajan.
- Nojaa hieman eteenpäin pyörätuolissa.
- Anna terapeutiksi tai apuvälineen luovuttajasi työntää kätensä tyynyn ja selkäsi väliin.
- Varmista, että selkää vasten tulee ainakin yksi täysi kerros SmartCell™-ilmakartioita.
- Älä käytä selkänojatyyntä, mikäli tunnet pohjakosketuksen. Useissa tapauksissa ongelma poistuu valittaessa toinen tyynymalli tai koko.

## Vakaus

Liberty-selkänojan käyttö saattaa vaikuttaa pyörätuolin tasapainoon ja liikkuvuuteen. Varmista ja kokeile pyörätuolin tasapaino ja vakaus terapeutiksi tai apuvälineen luovuttajasi kanssa.

## KÄYTTÖ

### Ihon punoituksen tarkistus

Seuraa ihosi punoitusta säännöllisesti erityisesti parin ensimmäisen päivän aikana. Mikäli punoitusta ilmenee ja se ei häviä 15 min. jälkeen, älä jatka selkänojatyyntä käyttöä. Ota yhteyttä joko terapeutiksi tai apuvälineen luovuttajaasi.

## **Käyttö korkeassa ilmanalassa**

Koska tyynyn sisällä olevat ilmakartiot ovat ilmatäytteisiä, tyyny saattaa käyttäytyä erilailla korkeassa ilmanalassa tai lentokoneessa. Vicair ei suosittele tyynyn käyttöä yli 2400 m:n korkeudessa merenpinnan yläpuolella.

## **Käyttö moottoriajoneuvoissa**

Vicair-tyynyjen turvallisesta käytöstä moottoriajoneuvoissa ei tällä hetkellä ole olemassa tutkimustuloksia. Sen vuoksi emme suosittele tyynyn käyttöä moottoriajoneuvoissa.

## **Selkänöjatyynyn luovuttaminen toiselle henkilölle**

Ennen kuin annat toisen henkilön käyttää tyynyä, puhdista tyyny ja pese päällinen. Desinfioidi vielä molemmat. Tarkista lisäksi, että tyyny on säädetty oikein uudelle henkilölle.


## **Päällisen uusiminen**

Vicair suosittelee päällisen uusimista vuosittain normaalikäytössä. Päällisen saa ostettua erikseen.

## **Syttyvyys**

Älä käytä tai jätä tyynyä lähelle avotulta äläkä muutenkaan altista sitä korkeille lämpötiloille.

## **HUOLTO JA PUHDISTUS**

 Varoitus: Älä pese tyynyä höyrystämällä äläkä laita sitä autoklaaviin. Tyyny ei kestä korkeata lämpöä eikä painetta.

## **Kuluneiden ja rikkoutuneiden ilmakartioiden tarkistus**

Tarkista ilmakartioiden kunto joka kolmas kuukausi. Tarkista myös kaikki mekaaniset osat kulumiselta ja varmista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnossa. Mikäli tyyny on pahasti vahingoittunut tai suuri määrä ilmakartioita on rikkoutunut, älä enää käytä tyynyä. Ota yhteys apuvälineen luovuttajaan.

## **Tyynyn puhdistus**

- Pyyhi tyyny kostealla kankaalla käyttäen mietoa puhdistusainetta.
- Älä käytä voimakkaita ja hankaavia puhdistusaineita tai teräviä välineitä tyynyn puhdistamiseen.
- Älä pese tyynyä pesukoneessa.

## **Päällisen puhdistus**

Poista päällisen sisällä oleva irrallinen vaahtomuovi. Päällinen voidaan tämän jälkeen pestä pesukoneessa nurinpäin käännettynä. Katso päällisen sisäpuolelle kiinnitettyä tuoteselostetta pesuohjeineen.

## **Tyynyn desinfiointi**

Jos tyynty on likaantunut eritteistä, se on desinfioitava. Tyynty on myös desinfioitava, jos se annetaan toisen henkilön käyttöön.

- Puhdista tyynty sekä päällinen yllä olevien ohjeiden mukaisesti. Päällistä pestäessä käytetään mieluiten antiseptistä puhdistusainetta.
- Suihkuta desinfioivaa ainetta päälliselle ja tyyntyyn.

## **TAKUU**

Vicair myöntää tuotteelleen rajoitetun takuun, joka kattaa valmistusvirheestä tai viallisesta valmistusmateriaalista johtuvat viat kahden (2) vuoden ajan alkuperäisestä ostopäivästä laskettuna. Tämä koskee vain normaalissa käytössä ilmenneitä vikoja. Takuu ei kata tuotteen väärinkäytöstä, vääränlaisista puhdistusmenetelmistä tai huollon laiminlyönnistä johtuvia vikoja. Jos valmistusvirheestä tai viallisesta valmistusmateriaalista johtuva vika ilmenee kahden (2) vuoden sisällä alkuperäisestä ostopäivästä laskettuna, Vicair valintansa mukaan korjaa tuotteen tai korvaa sen uudella vastaavalla tuotteella. Päällinen on takuun ulkopuolella. Takuukorvaukset ovat täten rajoitetut tyyntyn korjaamiseen tai uusimiseen.

Lisää tuotetietoutta saat kotisivuiltamme [www.vicair.com](http://www.vicair.com).