

TUOTTAJA / MAINOSTAJA: MyWam Sp. z o.o.



HAVAINNOLLISTAVA KUVA



Käyttöohjeet

Painos 2 / 2025-08-21

Ortopedinen kävelijä go.spider

TÄMÄ ON LÄÄKINNÄLLINEN LAITE.

KÄYTÄ SITÄ KÄYTTÖOHJEEN TAI ETIKETIN MUKAISESTI.

OHJEEN KÄYTTÖTARKOITUS

Käyttöohjeet on tarkoitettu henkilöille, jotka hoitavat suoraan vammaisia (avustajat - vanhemmat, huoltajat), jotka käyttävät ortopedista kävelijää. Se on tarkoitettu myös lääkäreille ja fysioterapeuteille, jotka käyttävät rollaattoria.

HUOMAUTUS! Ennen rollaattorin käyttöä jokainen käyttäjä on velvollinen lukemaan nämä ohjeet ja noudattamaan niitä.

HUOMAUTUS! go.spider-ortopediseen kävelijään liittyvän lääketieteellisen vaaratilanteen sattuessa sinun on ilmoitettava siitä välittömästi kirjallisesti valmistajalle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa sinä tai potilas asuu, ottamalla meihin yhteyttä kirjattuna kirjeenä tai sähköpostitse vastaanottotodistuksella.

Valmistajan yhteystiedot:

- postiosoite: MyWam Sp. z o.o., Plebiscytowa 3, 41-100 Siemianowice Śląskie, Puola
- Yhteyshenkilön puhelinnumero: +48 32 733 11 31
- Sähköpostiosoite: mywam@mywam.eu



Käyttöohjeen versio: **FI Edition 2 / 2025-08-21**

Ohje käännettiin Microsoft Translatorilla.

MyWam Sp. z o.o. pidättää oikeuden tehdä teknisiä ja kaupallisia muutoksia käyttöohjeiden sisältöön ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki muutokset määräytyvät sen päivämäärän mukaan, jolloin lausunto on viimeksi päivitetty. Ohjeen sähköinen versio on saatavilla www.mywam.eu verkkosivuilla

HUOMAUTUS! Käyttöohjeissa olevat valokuvat ovat vain viitteellisiä, ja ne voivat poiketa ostetusta tuotteesta.

MyWam Sp. z o.o. on ottanut käyttöön ISO 13485 -standardin mukaisen laadunhallintajärjestelmän luokan I lääkinnällisten laitteiden suunnittelun, tuotannon ja myynnin alalla.



ISO 13485
LL-C (Certification)



SISÄLLYSLUETTELO

OHJEEN KÄYTTÖTARKOITUS	2
1. KÄYTTÖTARKOITUS JA KÄYTTÖAIHEET	4
2. LAATAT	4
3. SYMBOLIEN MERKINTÄ	4
4. TÄRKEITÄ TURVALLISUUSVINKKEJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ.....	5
5. YLEINEN RAKENTAMINEN	6
6. ORTOPEDISEN KÄVELIJÄN TOIMINNOT	8
6.1. Rollaattorin rungon avaaminen	8
6.2. Rollaattorin rungon taittaminen	10
6.3. Etupyörän suuntalukitus	11
6.4. Takapyörän kitkajarru	11
6.5. Käänteinen rullalukko	12
6.6. Ylempi jatke.....	12
6.7. Turvavaljaat.....	13
6.8. Tukikahvat	14
6.9. Kaatumisenestotuki	16
7. TYKÖTARPEET.....	16
7.1. Turvakahva	16
7.2. Käsinojat.....	17
7.3. Lonkan tuet	18
7.4. Istuin.....	22
7.5. Jarrut	23
7.6. Yksinkertaiset kahvat tukea varten.....	25
7.7. Matkalaukku.....	26
8. ORTOPEDISEN KÄVELIJÄN TEKNISET TIEDOT. HÄMÄHÄKKI	26
8.1. Kävelijän raaka-ainekoostumus	26
9. TOIMITUS JA TYÖKALUT	27
10. WALKERIN KOKOAMINEN JA PURKAMINEN	27
11. VALMISTELU KÄYTTÖÖN	27
12. ROLLAATTORIN SIIRTÄMINEN	28
13. OIKEA KÄVELYASENTO	28
14. WALKERIN KÄYTTÖ	28
15. KULJETUS AUTOSSA JA MUISSA AJONEUVOISSA.....	28
16. PUHDISTUS JA HOITO	29
17. KÄVELIJÄN SÄILYTTÄMINEN.....	29
18. HUOLTO- JA MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET	29
19. HÄVITTÄMINEN	30
20. LÄÄKINNÄLLISTEN LAITTEIDEN VAATIMUSTEN NOUDATTAMINEN	30
21. LUETTELO VALTUUTETUISTA HUOLTOPISTEISTÄ.....	31
22. TAKUUKORTTI	32
23. MUISTIINPANOT.....	33

1. KÄYTTÖTARKOITUS JA KÄYTTÖAIHEET

go.spider ortopedinen kävelijä on luokan I lääkinällinen laite, joka on suunniteltu vammaisille, jotka sairautensa vuoksi eivät pysty kävelemään itsenäisesti tai pysymään seisoma-asennossa. Tuote toimii erikoistuneena terapeuttisena järjestelmänä, joka tukee kävelyn oppimista ja uudelleen koulutusta. Sen avulla ihmiset, jotka osaavat liikuttaa jalkojaan, voivat liikkua aktiivisesti ja suorittaa alaraajoihin liittyviä harjoituksia.

Kliinisiä indikaatioita ovat m.in kuntoutus kirurgisten toimenpiteiden jälkeen, alaraajojen heikkouden ja tasapainohäiriöiden yhteydessä, kun käyttäjä ei pysty liikkumaan kainalosauvojen avulla jne.

Tuote on tarkoitettu käyttäjille:

- koko 1 – maksimikorkeus **100-135 cm** ja paino enintään **35 kg**,
- koko 2 – maksimikorkeus **130-150 cm** ja paino enintään **50 kg**,
- Koko 3 – maksimikorkeus **150-170 cm** ja paino jopa **80 kg**.

Käyttäjät eivät voi käyttää ortopedista kävelijää yksin, vaan vain hoitajan avulla. Laitetta tulee käyttää hoitavan lääkärin tai fysioterapeutin suositusten mukaisesti.

Vasta:


Yläraajojen vammat, jotka tekevät mahdottomaksi tukea itseäsi kävelijällä.

2. LAATAT

Tyypikilpi



Varoituskilpi

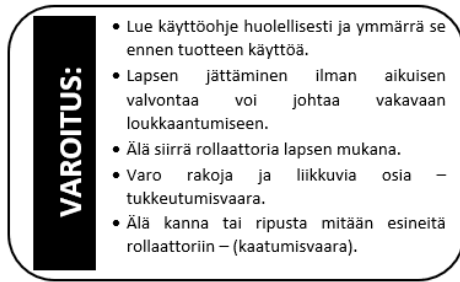

3. SYMBOLIEN MERKINTÄ

	Tuotteen sarjanumero		Valmistajan nimi
	Käyttäjän sallittu kokonaispaino		Tuote on lääkinällinen laite
	Valmistuspäivämäärä	KUVAUS "VAROITUS!" ja tämän ohjeen symbolia käytetään lisäämään lukijan huomiota tällä merkillä merkittyyn sisältöön. Tällä kuvauksella merkityn sisällön noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa riskin käyttäjän ja mukana olevien henkilöiden terveydelle ja turvallisuudelle sekä johtaa tuotteen vaurioitumiseen. 	
	Vaativuustienmukaisuuden arviointimerkki asiaankuuluvien eurooppalaisten määräysten ja direktiivien mukaisesti		
	Varoitus tuotteen käyttöohjeiden käsittelystä		

4. TÄRKEITÄ TURVALLISUUSVINKKEJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ

- Ortopedisen kävelijän käyttö tavalla, johon sitä ei ole tarkoitettu, on kielletty.
- Tuote sisältää pieniä osia, jotka voivat olla vaarallisia, jos lapsi nielee ne!
- **HUOMAUTUS!** Kahvoja ei voi kallistaa sivuttain rollaattorin ulkopuolelle – on olemassa vaara, että vakaus heikkenee.
- **HUOMAUTUS!** Ortopedista go.spider-kävelijää käytettäessä ja käytettäessä sekä mekanisme ja taittaessa ja säädettäessä voi olla vaara, että käyttäjän/hoitajan ruumiinosat jäävät puristuksiin ja/tai puristuvat komponenttien välisiin reikiin/rakoihin. Sinun tulee tehdä nämä vaiheet erityisen huolellisesti. Kun säätö on valmis, asento on vakiinnutettava kiristämällä mutterit/pultit perusteellisesti.
- **HUOMAUTUS!** Kun ajat ovien tai vastaavien ajosuuntaa rajoittavien supistajien läpi, varmista, että molemmilla puolilla on riittävästi tilaa, jotta kätesi tai muut kehon osat eivät jää puristuksiin ja että tuote ei vaurioidu.
- **HUOMAUTUS!** Älä ylitä käyttäjän suurinta sallittua painoa.
- **HUOMAUTUS!** Rollaattorin lämpötila voi nousta, kun kävelijä altistuu auringonvalolle. On suositeltavaa olla altistamatta kävelijää auringonvalolle.
- **HUOMAUTUS!** Rollaattoria ei ole tarkoitettu käytettäväksi matalissa lämpötiloissa (alle 5 °C).
- **HUOMAUTUS!** Jonkin verran puristimen vastusta voi tuntua korkeutta säädettäessä – tämä on normaalia ja varmistaa, että asento on kunnolla lukittu.
- **HUOMAUTUS!** Lantiotyynyn nupit sijaitsevat lähellä kiinnikkeitä, joten säädettäessä tulee olla varovainen käyttömukavuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi.

VAROITUS!



- Älä koskaan jätä käyttäjää ilman valvontaa rollaattoriin!
 - Älä tartu kahvoihin märillä ja likaisilla käsillä – putoamis- ja liukastumisvaara on olemassa.
 - Kävellessäsi pidä kahvoista kiinni molemmin käsin.
 - Varo rakoja ja liikkuvia osia – on olemassa jumiutumisvaara.
 - Älä kanna rollaattoria käyttäjän mukana.
 - Älä kanna tai ripusta mitään esineitä rollaattoriin (kallistusvaara).
 - Rollaattori on pakattu pussiin. Pidä poissa imeväisten ja pienten lasten ulottuvilta.
-
- **HUOMAUTUS!** Rollaattorin käyttö on kielletty, jos tuotteen tai sen yksittäisen osan tekninen kunto herättää käyttäjässä epäilyksiä tai on selvästi virheellinen, sitä ei saa käyttää. Tällaisessa tilanteessa on suositeltavaa ottaa yhteyttä myyjään kiireellisesti neuvoja varten.

5. YLEINEN RAKENTAMINEN

Perusvarusteet



- 1- Ylempi jatke
- 2- Ylemmän jatkeen korkeudensäätö
- 3- Turvavaljaat
- 4- Käänteinen rullalukko
- 5- Kaatumisenestotuki
- 6- Tukikahvat

- 7- Rungon taittomekanismi
- 8- Etupyörän suuntalukitus
- 9- Kääntyvät etupyörät
- 10- Takapyörän kitkajarru
- 11- Takapyörien

Tykötarpeet



- 1- Turvakahva
- 2- Käsinojat
- 3- Yksinkertaiset kahvat tukea varten
- 4- Istuin
- 5- Jarrut
- 6- Lonkan tuet
- 7- Matkalaukku

6. ORTOPEDISEN KÄVELIJÄN TOIMINNOT

6.1. Rollaattorin rungon avaaminen



HUOMAUTUS! Jos näin ei tehdä, rakenne voi vaurioitua!

1

Löysää rungon molemmilta puolilta olevaa nuppia ja nosta välikappaleita ylös (A) niin, että ruuvi ja mutteri poistuvat lovesta (B), jolloin runko voidaan avata vapaasti



2



3



Käännä nuppia molemmilta puolilta



5

4

6



Liu'uta ylempi lisäosa sisään

7



Säädä ylemmän jatkeen korkeutta

HUOMAUTUS! Älä ylitä ylemmän jatkeen minimi- ja maksimialueita.

8



Sulje lukko molemmilta puolilta

9



10



6.2. Rollaattorin rungon taittaminen



Irrota kiinnike molemmilta puolilta



Liu'uta ylempi jatke ulos



Löysää nuppia molemmilta puolilta



6.3. Etupyörän suuntalukitus

Etupyörien lukitseminen



Etupyörien lukituksen avaaminen



6.4. Takapyörän kitkajarru



Kiristämällä säädät
takapyörän hidastumista.

6.5. Käänteinen rullalukko



Lukko käytetty



Lukko poistettu

6.6. Ylempi jatke



Korkeudensäätö



1

Irrota lukko molemmilta puolilta



2

Aseta sama korkeus molemmille puolille

HUOMAUTUS! Älä ylitä ylemmän jatkeen minimi- ja maksimialueita.



Kiinnitä lukko molemmilta puolilta



Minimikorkeus



Maksimikorkeus


6.7. Turvavaljaat



Kokoaminen rollaattorilla



Ohjeet voiden kiinnittämiseen kävelijän runkoon

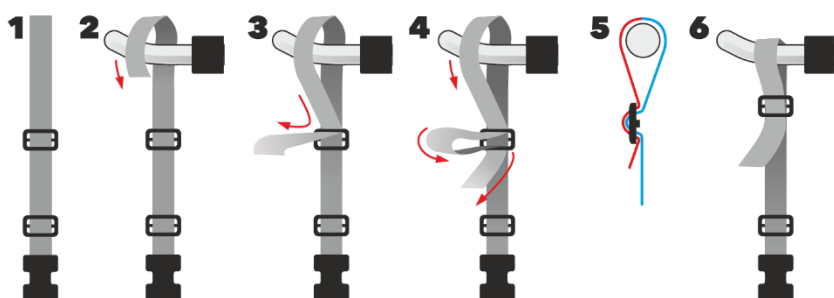

6.8. Tukikahvat



HUOMAUTUS! Käytä kahvojen kokoamiseen / purkamiseen 5 mm:n kuusiokoloavainta (mukana).

Kokous



1

Liu'uta kahvoja molemmilta puolilta



2

Kierrä ruuveja molemmilta puolilta

Poisto



1

Irrota ruuvit molemmilta puolilta



2

Liu'uta kahvat ulos molemmilta puolilta

Kahvan säätöalue



Oikea säätö



Ei sallittu

HUOMAUTUS! Älä kallista kahvoja sivuttain ulospäin – on olemassa vakautuksen menettämisen vaara.

6.9. Kaatumisenestotuki




Kokoaminen ja purkaminen merkityillä ruuveilla kävelijän molemmilla puolilla.

7. TYKÖTARPEET

7.1. Turvakahva

HUOMAUTUS!Käytä kahvan kokoamiseen/purkamiseen 5 mm:n kuusiokoloavainta (mukana).

Kokous

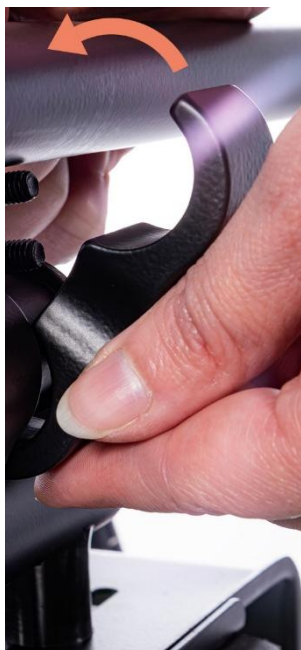

1



2

3



4



Aseta ruuvit ja mutterit paikalleen ja ruuvaa sisään

Poisto

1



2



Irrota ruuvit

7.2. Käsinajat

Kokoaminen / purkaminen:



HUOMAUTUS!Käytä käsinajan kokoamiseen / purkamiseen 5 mm:n kuusiokoloavainta (mukana).

Käsinojan kulman muuttaminen



HUOMAUTUS! Voit muuttaa käsinojan kulmaa käyttämällä 5 mm:n kuusiokoloavainta (mukana).

Käsinojan säätö



7.3. Lonkan tuet



HUOMAUTUS! Kokoa/pura lonkkatuet 5 mm:n kuusiokoloavaimella (mukana).

Kokous



1



2



3



4



5

Poisto

1



2



Lonkkatuen leveyden säätäminen



Löysää molemmat mutterit ja säädä lantiotukien leveyttä.

Kun lonkkatuen leveys on asetettu, kiristä mutterit.



Vähimmäisleveys



Suurin leveys

Lantion tukien säätö ylös - alas



Löysää merkittyjä ruuveja kuusiokoloavaimella (mukana) ja säädä lonkkatukien korkeutta.

Kun korkeus on asetettu, kiristä ruuvit.



Tukien säätäminen sivuttain



Löysää merkittyä ruuvia kuusiokoloavaimella (mukana) ja säädä tyynyä.

Kun tyyny on paikallaan, kierrä ruuvi kiinni.

7.4. Istuin



HUOMAUTUS!Käytä istuimen kokoamiseen / purkamiseen 4 mm:n kuusiokoloavainta (mukana).

Kokous



1

Kierrä nuppi irti



2

Vie ruuvi ja ruuvaa istuinputkeen



3

Kiristä ruuvi kuusiokoloavaimella



4

Kiinnitä istuin hihnoilla

Poisto



1

Irrota hihnat molemmilta puolilta



2

Irrota ruuvi kuusiokoloavaimella ja irrota istuin



3

Työnnä ruuvi sisään ja käännä nuppia

7.5. Jarrut



HUOMAUTUS! Käytä jarrujen kokoamiseen / purkamiseen 5 mm:n kuusiokoloavainta (mukana).

HUOMAUTUS! Jarrun kuluneet tai kuluneet hampaat voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä – ne on vaihdettava välittömästi.

Kokous



Työnnä kaapelin pää merkittyyn tilaan



Poisto



3



Irrota kaapelin pää rei'istä

Jarruvaijerin säätö



HUOMAUTUS! Jos vaijeri löystyy tai venyy, säädä sitä jarrutustehon ylläpitämiseksi.

Kierrä nuppeja 1 ja 2 irti, kunnes tehokas jarrutus on saavutettu, ja kiristä sitten nuppi 1 pysäyttääksesi mekanismin ja estääksesi sen pyörimisen

7.6. Yksinkertaiset kahvat tukea varten


Kahvojen kokoaminen ja purkaminen samalla tavalla kuin 6.8 kohdassa kuvatut perinteiset kahvat.



7.7. Matkalaukku



Laukun enimmäiskuorma on 2kg.

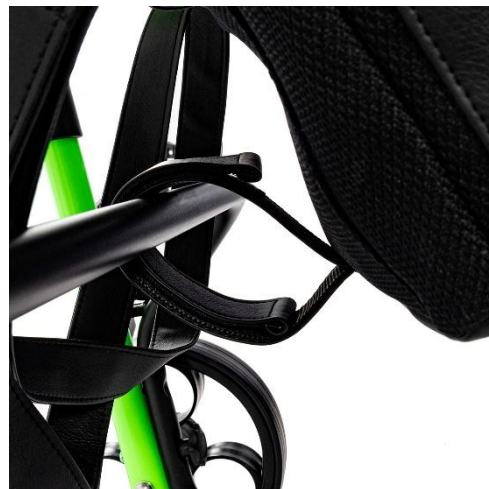

8. ORTOPEDISEN KÄVELIJÄN TEKNISET TIEDOT. HÄMÄHÄKKI

Parametri	Koko 1	Koko 2	Koko 3
Kävelijän pituus	80 cm	92 cm	94 cm
kävelijän leveys	66 cm	69 cm	69 cm
Kävelijän korkeus	58 – 80 cm	64 – 92,5 cm	74 – 114 cm
korkeus maasta kahvaan	47 – 59 cm	53 – 72 cm	64 – 92 cm
massa	8,8 kg	9,2 kg	10,5 kg
Rollaattorin pituus taitettuna kuljetusta varten	86 cm	100 cm	103 cm
Rollaattorin leveys taitettuna kuljetusta varten	66 cm	69 cm	69 cm
Rollaattorin korkeus taitettuna kuljetusta varten	29 cm	29 cm	31 cm
Laukun kantavuus	2 kg	2 kg	2 kg
Max. käyttäjän paino	35 kg	50 kg	80 kg
Käyttäjien kasvu	100 – 135 cm	130 – 150 cm	150 – 170 cm

KOMMENTIT:

Mittausarvojen toleranssi +/- 20 mm, +/- 1,5 kg.

Valmistaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia teknisiin parametreihin.

8.1. Kävelijän raaka-ainekoostumus

Jauhemaalattu teräs ja alumiini, 100 % polyesterikankaat ja muovi (PA, PP, PU, PVC).

9. TOIMITUS JA TYÖKALUT

Alkuperäisen pakkauksen tulee sisältää seuraavat tuotteet:

- Taitettu rollaattorirunko ja ylempi jatke,
- Tilauksen mukaiset lisävarusteet,
- Käyttöohjeet takuukortin kanssa,
- Kuusiokoloavain 5mm
- 4 mm kuusiokoloavain (istuinta ostettaessa).

Ennen käyttöä:

- a. tarkista, että pakkaus ei ole vaurioitunut (jos pakkaus on vaurioitunut, pura pakkaus toimittajan läsnä ollessa ja tarkista, ettei mikään osa ole vaurioitunut),
- b. tarkista lähetyksen sisältö eritelmän mukaisesti (jos jokin komponenteista puuttuu, ota yhteyttä myyjään).

Lue koko ohje huolellisesti ennen käyttöä.

Tukikahvojen, lonkkatukien, turvakahvan ja jarrujen asentamiseen tarvitset 5 mm:n kuusiokoloavaimen (mukana). Istuimen asentamiseen tarvitset 4 mm:n kuusiokoloavaimen (sisältyy istuinta ostettaessa).

10. WALKERIN KOKOAMINEN JA PURKAMINEN

• **Kävelijän asennus.** Alkuperäiseen pakkaukseen valmiiksi pakattu tuote on valmiiksi koottu. Viimeistele asennus seuraavasti:

- avaa kävelijän runko,
- asenna ja säädä ylempi jatke,
- Asenna lisälaitteet.
- **Rollaattorin purkaminen:**
 - purkaa lisälaitteita,
 - pura ylempi jatke,
 - Taita rollaattori.

11. VALMISTELU KÄYTTÖÖN

Ennen kuin käytät sitä, sinun tulee:

- Tarkista, että rollaattori on avattu kunnolla ja että rungon taittomekanismi on kunnolla kiinni (lukittu).
- Tarkista kaikkien neljän pyörän oikea asennus ja tekninen kunto (ei mekaanisia vaurioita – murtumia, halkeamia).
- Tarkista takapyörän kitkajarrun toiminta kytkemällä takapyörän kitkajarru.
- Kytke etupyörän suuntalukko.
- Tarkista peruutusrullalukon toiminta aktivoimalla peruutusrullalukko.
- Tee kaikki säädöt oikein ja säädä rollaattori käyttäjän tarpeiden mukaan, mukaan lukien koko ylemmän jatkeen sopivan korkeuden ja leveyden asettaminen. Tarkista, että kaikki säätöelementit ovat kunnolla paikoillaan ja kiinnitettynä.

- Varmista, että käyttäjää ei aseteta rollaattoriin ilman vartaloa suojaavia vaatteita turvavaljaiden kosketuskohdissa. Tämä on käyttäjän kehon hankaumien estämiseksi ja hygieniasyistä.
- Varmista, että käyttäjän jalkineet ovat mukavat ja vakauttavat nilkkanivelen hyvin.
- Jos ortopedisten laitteiden (kohdunkaulan kaulus, korsetti, ortoosit, ortopediset kengät) käytöstä on viitteitä, niitä tulee käyttää.
- Jos käytetään muita apuvälineitä, kuten hengityskoneita, viemäreitä, pusseja, katetreja jne. Varmista, että ne ovat hyvin suojattuja putoamiselta, vetäytymiseltä, puristumiselta eivätkä häiritse kävelijän käyttöä.

12. ROLLAATTORIN SIIRTÄMINEN

Paras tapa kantaa ortopedista kävelijää on ohjata sitä pyörillä.

Kävelijän runkoa kuljetettaessa tai nostettaessa tulee olla äärimmäisen varovainen. Runkoa on siirrettävä, kun kuljetuslukko on taitettu ja kiinnitetty.

Älä käytä lisävarusteita rollaattorin kantamiseen – se voi vaurioitua.

13. OIKEA KÄVELYASENTO

Turvallisuus- ja terveyssyistä on suositeltavaa, että käyttäjä on seisoma-asennossa, mahdollisimman lähellä kävelyasentoa, hieman koukussa polvet ja lantio. Asennon tulee mahdollistaa vapaa pääsy tukikahvaan, ja turvavaljaat tulee säätää oikein niin, että ne eivät rajoita kävelyn luonnollista mekaniikkaa, mutta samalla suojaavat putoamiselta.

14. WALKERIN KÄYTTÖ

Kun käytät ortopedista kävelijää, pidä aina kiinni tukikahvoista.

15. KULJETUS AUTOSSA JA MUISSA AJONEUVOISSA

- Jos haluat kuljettaa go.spider-ortopedista kävelijää autossa, taita kävelijä ja aseta se tavaratilaan. Jos taitettu kävelijä ei sijaitse matkustamosta erillään olevan auton tavaratilassa, kävelijän runko on kiinnitettävä huolellisesti ajoneuvoon. Voit tehdä tämän käyttämällä käyttämättömiä turvavöitä.
- Ortopedisen rollaattorin kuljettaminen muissa ajoneuvoissa, kuten junissa, raitiovaunuissa, busseissa, lentokoneissa, laivoissa jne. Kysy näiden liikennevälineiden kuljetuksista vastaavilta henkilöiltä, millaisia edellytyksiä turvalliselle matkalle määränpäähäsi rollaattorilla voidaan matkustaa ja mitä vaatimuksia se vaatii.

16. PUHDISTUS JA HOITO

Turvavaljaat voidaan pestä vain käsin varovasti, enintään 30 °C:n lämpötilassa.

Älä pese koneessa. Tahrat on poistettava heti, kun ne ovat muodostuneet pinnalle.

Ylemmän jatkeen kääre tulee pestä käsin (kääreen tahra tulee pyyhkiä kostealla liinalla).

HUOMAUTUS! Älä puhdista liuottimia ja valkaisuaineita sisältävillä kemikaaleilla. Valmistaja ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat sopimattomien puhdistusaineiden käytöstä.

Varmista, että tuote on aina kuiva ennen käyttöä.

Kun käytät tämän tyyppisille materiaaleille tarkoitettuja pesuaineita – noudata käytetyn tuotteen ohjeita.



Vain käsinpesu



Ei valkaisua



Ei rumpukuivausta



Kuivaa vaaka-
asennossa



Älä silitä

17. KÄVELIJÄN SÄILYTTÄMINEN

Tuote tulee säilyttää puhtaassa, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa. Pitkäaikaisessa varastoinnissa on lisäksi suoritettava kohdassa 14 kuvatut toimet "joka kuukausi".

18. HUOLTO- JA MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET

Jotta tuotetta voidaan käyttää turvallisesti ja virheettömästi, se on tarkastettava ja huollettava säännöllisesti ja perusteellisesti niille tarkoitetuissa huoltokeskuksissa.

Jos käyttäjä ei pysty suorittamaan yllä olevia toimintoja itse, hänen tulee palauttaa tuote erikoistuneeseen huoltopisteeseen tai suoraan valmistajalle, joka tarkastaa asianmukaisesti ja suorittaa tarvittavat huoltotoimenpiteet. Näistä aktiviteeteista voidaan periä lisämaksuja.

Kaikki korjaukset on suoritettava erikoistuneissa, valtuutetuissa huoltoliikkeissä (katso kohta 21) tai suoraan valmistajan toimesta. Walkerin korjaukset, jotka on suorittanut joku muu kuin valtuutettu palveluntarjoaja tai valmistaja, mitätöivät takuun. Valmistaja ei ole vastuussa henkilövahingoista tai tuotteen vahingoista, jotka voivat johtua muiden henkilöiden kuin valtuutetun huollon tai valmistajan suorittamista korjauksista.

Tuotteessa saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia, jotka valmistaja toimittaa tai suosittelee.

Huolto tulee suorittaa:**• Joka kerta ennen käyttöä**

- Takapyörän kitkajarrun ja peruutusrullalukituksen tehokkuuden tarkistaminen - Kun takapyörän kitkajarru on kytkettynä, kävelijän molempien takapyörien tulee pyöriä tuntuvalta vastuksella. Kun peruutusrullalukko on kytkettynä, pyörän pitäisi lukkiutua, kun kävelijä liikkuu taaksepäin.
- Rakenneosien kiinnityksen tarkistaminen - Kaikki kävelijämekanismit ja niiden liikkuvat osat on tarkistettava, ja erityisesti on kiinnitettävä huomiota: ylemmän jatkeen oikea asennus, tukikahvojen oikein lukittu kulmansäätömekanismi, rungon oikea lukitus.
- Pyörien kunnon tarkistaminen - Tarkista, onko pyörissä mekaanisia vaurioita (halkeamia, murtumia).
- Kiinteiden runkoelementtien tarkastus - Tarkasta silmämääräisesti rakenneprofiilien kunto. Nämä osat eivät saa vaurioitua tai halkeilla.
- Loukkaantumisvaara jarruvian vuoksi. Tarkista säännöllisesti, että pyörän lukko toimii oikein ja korjaa tarvittaessa. Kuluneet tai vaurioituneet pyörät on vaihdettava.

Joka ikinen kuukausi

- Rollaattorin puhdistus - Puhdista kaikki liikkuvat osat, laakerit ja säätömekanismit pehmeällä liinalla ja voitele ne sitten muutamalla tipalla silikonirasvaa.
- Kaikkien ruuviliitosten välysten tarkastaminen - Tarkista huolellisesti, että kaikki opastimen ruuvit ja nupit on kiristetty kunnolla.
- Tarkista tyhjennysreikien läpinäkyvyys.

19. HÄVITTÄMINEN

go.spider ortopedinen kävelijä on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Tuotteen pakkaukset sekä teräs-, alumiini- ja muovituotteet voidaan kierrättää.

Hävittäminen ja kierrätys: maassasi voimassa olevien määräysten mukaisesti.

20. LÄÄKINNÄLLISTEN LAITTEIDEN VAATIMUSTEN NOUDATTAMINEN

Luokan I lääkinällinen laite, joka on lääkinnällisistä laitteista 5 päivänä huhtikuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/745 mukainen. Valmistaja on antanut tuotteelle asianmukaisen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen, joka löytyy www.mywam.eu sivulta

21. LUETTELO VALTUUTETUISTA HUOLTOPISTEISTÄ

PUOLA

MyWam sp. z o.o.

Wiosny Ludów 91, 40-373 Katowice, Puola

Puh.: +48 32 733 11 31

Verkkosivusto: www.mywam.eu

Sähköpostiosoite: mywam@mywam.eu

22. TAKUUKORTTI

Sarja ja numero:

Ostopäivä: - -

Myyjän leima ja allekirjoitus:

.....
.....
.....

Takuun ehdot

- Valmistaja (takaaja) antaa ostajalle ostetulle rollaattorille 24 kuukauden takuun ostopäivästä lukien.
- **Rollaattorista valittavan ostajan tulee toimittaa rollaattori myyjälle pakkauksessa, puhtaana (ilman tahroja, rollaattoriin kuulumattomia lisävarusteita, kosteutta, hiuksia jne.) yhdessä rollaattorielementtien kanssa suojattu vaurioilta.**
- **Kävelijän ja sen osien riittämättömästä suojauksesta aiheutuneet vauriot eivät kuulu takuukorjauksen piiriin.**
- Valituksen tekijä (ostaja) ei voi vaatia valmistajalta korvausta, jos lähetys on vaurioitunut, jos se merkitsee tai vakuuttaa väärin rollaattorin ja sen osien lähetyksen.
- Takuuaika valituksen hyväksymisen yhteydessä pidentyy rollaattorin korjausajalla, joka lasketaan siitä hetkestä, kun rollaattori luovutetaan myyjälle takuun mukaisesti, siihen päivään, jolloin rollaattori oli valmis noudettavaksi.
- Ohjeessa määrättyjä toimenpiteitä, jotka kävelijän käyttäjä on velvollinen suorittamaan itse ja omalla kustannuksellaan, ei voida suorittaa osana takuukorjausta.
- Väärinkäyttö, käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen tai rollaattorin oikea käyttö mitätöi takuun.
- Rollaattoriin tehtyjen rakenteellisten muutosten tekeminen mitätöi takuun (muutosten asiaankuuluvalla alueella tai kokonaisuudessa).
- Takuu ei kata rollaattorin vaurioita, jotka johtuvat väärästä käytöstä, virheellisestä huollosta, rollaattorin virheellisestä säilytyksestä, mekaanisista vaurioista ja osien (esim. verhoilu, pyörät) luonnollisesta hankauksesta ja kulumisesta.
- Valmistaja varoittaa takuukorjauksista luvattomissa huoltoliikkeissä. Tällaisen korjauksen tai mielivaltaisen muutoksen löytäminen kävelijästä mitätöi takuun.
- **Takuukortti on voimassa edellyttäen, että siinä on: myyjän yrityksen sinetillä vahvistettu myyntipäivä, myyjän allekirjoitus, rollaattorin tyyppi ja sarjanumero.**
- Takuukortti on voimassa edellyttäen, että se ei sisällä poistoja ja korjauksia.
- Rollaattorin valmistajalla on maksullinen takuun jälkeinen huolto pääkonttorissaan.
- Valmistaja määrittelee tuotteen odotetuksi käyttöajaksi 4 vuotta. Jatkokäyttö tämän ajanjakson jälkeen on mahdollista, mutta ottaen huomioon turvallisuuden ja käyttömukavuuden huolenpidon, suosittelemme valmistajan tai valtuutetun huoltoliikkeen suorittamaa teknistä tarkastusta. Tarkastuspalvelu on maksullinen ja sisältää laitteen teknisen kunnan arvioinnin, turvallisuustarkastuksen ja tarvittavat huoltotoimenpiteet.
- Asioissa, joita tämä takuukortti ei sääntele, sovelletaan Puolan siviililain säännöksiä.
- Kaikki rollaattorin takuun tai takuun mukaisiin vaatimuksiin liittyvät asiat tulee osoittaa myyjälle.

23. MUISTIINPANOT