

Bruksanvisning

SPACE LX

Lättvikts aluminium rollator (LX)

SPACE CF

Lättvikts colfibre rollator (CF)



more than mobility

1 Allmän information

Denna bruksanvisning beskriver den medicinska utrustningen och innehåller viktiga riktlinjer för en korrekt och säker användning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du använder utrustningen.

Det är extra viktigt att läsa igenom och följa säkerhetskraven.

REHASENSE utvecklar sina produkter kontinuerligt och förbehåller sig rätten att ändra produkternas specifikationer och funktioner utan separat meddelande.

Kontakta din återförsäljare eller REHASENSE direkt om du har några frågor. Kontaktuppgifterna står på bruksanvisningens sista sida.

2 Avsedd användning, indikationer och kontraindikationer

Avsedd användning: Rollator har utvecklats som ett hjälpmedel för personer som har svårt att stå eller gå på egen hand. Den gör det lättare för dem att stå och gå. Produktens huvudsakliga syfte är att ge balans och stabilitet, erbjuda en känsla av trygghet och delvis avlasta armarna. Användaren kan stödja sig på de två höjbara armstöden. Rollators konstruktion gör det extra lämpligt för personer som har svårt att greppa vanliga skjuthandtag.

Indikationer: Personer som (av olika hälsoskäl) behöver ett stabilt extrastöd när de går. Personer som behöver tillfälligt stöd efter att ha opererat t.ex. benet, foten eller höften.

Kontraindikationer: Rollatorer får inte användas av personer som har allvarliga problem med kroppsbalansen eller som har för lite muskelstyrka för att kunna stå och gå även med extra stöd från rollator. Patientens behov av och möjlighet att använda ett rollator ska alltid bedömas och indikeras av en läkare eller fysioterapist.

3 Mottagning av ny produkt

Rollatorn levereras hopfälld i en låda för enklare transport.

Lådans innehåll:

- ✓ 1 komplett hopfälld rollator
- ✓ 1 kepp hållare (i framväskan)
- ✓ 1 bruksanvisning

SPACE LX/CF är en lätt rollator med fyra hjul och ett hopfällbart krysstag. Rollatorn är tillverkad av aluminium eller colfibre och därför lätt att förvara och transportera. Den är lätt att manövrera, stabil och har justerbara skjuthandtag som kan anpassas efter användarens höjd. Rollatorn har en pulverlackerad fällbar ram av runda aluminium eller colfibre rör och ett hopfällbart krysstag. Den har också en tygsits och en väska som användaren kan lägga föremål i.

4 Säkerhetsvarningar.....

Se till att alla som använder produkten läser igenom denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte för skador på product och/eller personer som orsakas av att bruksanvisningen inte har följts.




Användningsbegränsningar :

- Produkten får inte belastas med mer än 150 kg.
- Produkten får INTE användas för något annat ändamål än som hjälpmedel.
- Rör dig inte med rollatorn när du sitter på sätet.
- Produktens parkeringsbromsar MÅSTE alltid låsas innan man sitter på eller kommer ut ur sätet.




Undvika olyckor:

- Använd endast produkten i det avsedda syftet.
- Använd endast produkten när den är i tekniskt gott skick.
- Gör inga ändringar i produktens konstruktion, såvida du inte har skriftligt medgivande från tillverkaren. Var försiktig så att du inte klämmer fingrar eller andra kroppsdelar mellan två rörliga delar när du gör olika justeringar på produkten.
Alla hjul MÅSTE vara i kontakt med golvet HELA TIDEN. Det tryggar god balans och ska förebygga olyckor.
- När produkten står still MÅSTE handbromsarna låsas.
- Bromsarna MÅSTE låsas när produkten lämnas utan tillsyn.

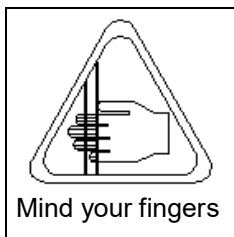

Var försiktig så att du/ledsagaren inte klämmer fingrar eller andra kroppsdelar mellan produktens delar vid montering, isärtagning eller justering. Var extra försiktig när du gör justeringar. Lagg märke till avståndet mellan produktens delar för att undvika att klämma fingrar eller andra kroppsdelar.

5 Rollator delar

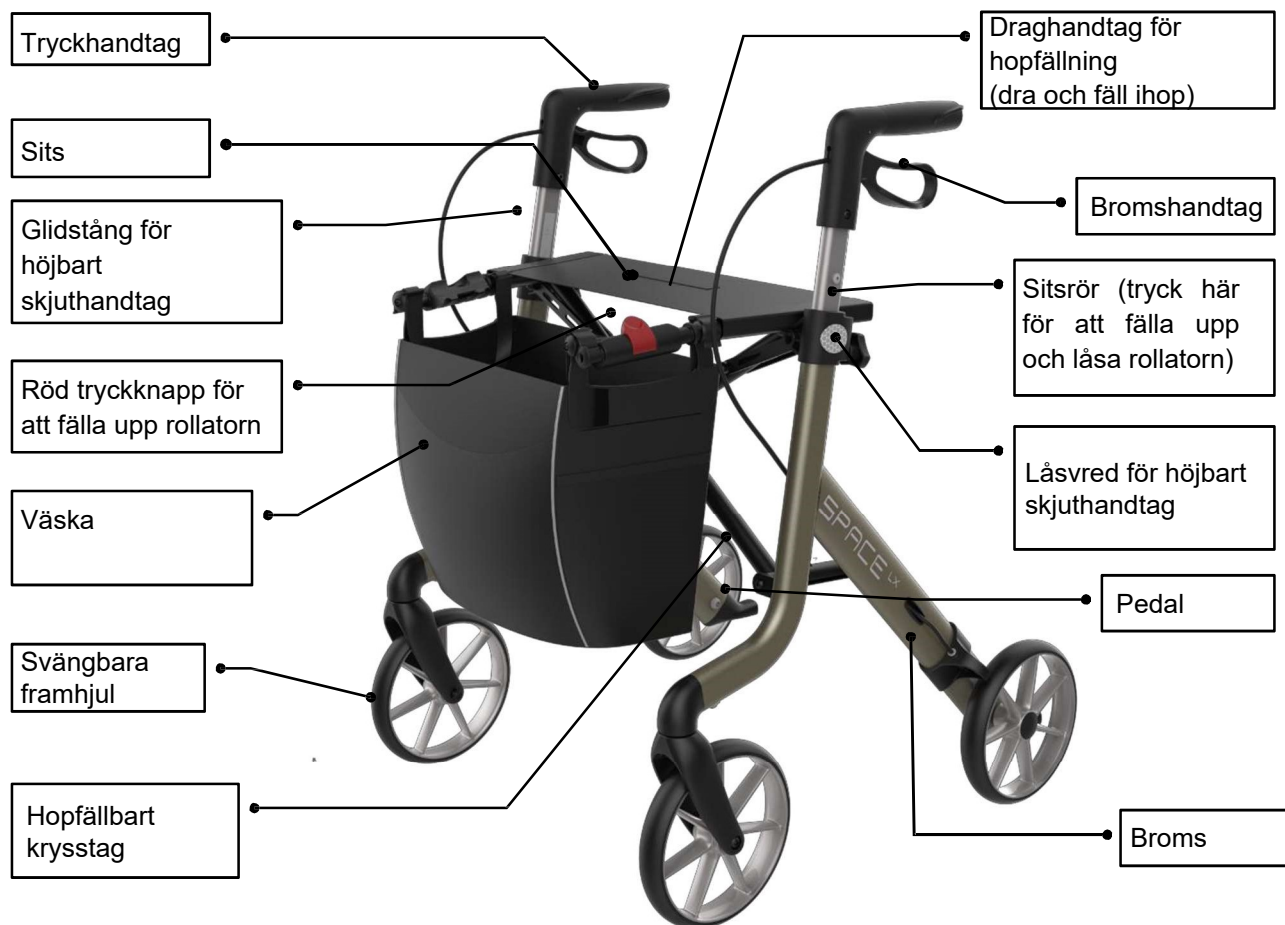

6 Användning

Gå igenom följande steg och titta på bilden ovan för att använda och justera rollatorn på bästa sätt.

Kontroll

- Ta ut rollatorn ur lådan och kolla att inget saknas (se bilden ovan). Fortsätt inte montera rollatorn om någon del saknas eller är skadad, utan kontakta din återförsäljare.

Fälla up rollatorn

- Tryck in den röda knappen som låser sitsrören.
- Ta tag i båda sitsrören och tryck ner dem samtidigt tills du hör ett klickljud (ramens låsmekanism). Försök dra upp sitsrören igen för att fälla ihop ramen. Om det inte går har ramen fällts upp och låsts fast ordentligt. Se bilden på en uppfälld rollator ovan.



Dra i sitsens draghandtag för att se till att den är ordentligt låst och att ramen inte rör sig efter att ha fällt upp rollatorn.

Se alltid till att båda skjuthandtagen är ordentligt fastlåsta i ramens rör och inte kan röra på sig och att de två låsvreden är ordentligt åtdragna.

Kontrollera alltid att tillbehören sitter ordentligt fast och är låsta INNAN du använder dem.

Underlåtenhet att följa dessa varningar kan leda till personskada.

Fälla ihop rollatorn

- Ta tag i sitsens draghandtag och dra upp för att fälla ihop rollatorn.
- Tryck ihop rollatorn tills den låser sig.

Justera skjuthandtagens höjd

- Öppna handtagets låsvred.
- Justera handtaget till önskad höjd.
- Dra åt vredet



- *Båda skjuthandtag ska ställas in på samma höjd.*
- *Handtagen ska vara i samma höjd som användarens höfter.*
- *Lämna aldrig rollatorn utan bromsarna åtdragna.*

Använda handbromsarna

- STANNA ROLLATORN genom att dra upp bromshandtagen mot grepphandtagen.
- STÅ STILL MED ROLLATORN genom att hålla bromshandtagen uppdraget läge.
- BÖRJA RÖRA PÅ DIG genom att släppa bromshandtagen. De åker ner automatiskt och frigör bromsarna.



- *Dra alltid åt bromsarna när du inte ska röra dig med rollatorn.*
- *Lämna aldrig rollatorn utan bromsarna åtdragna när någon sitter på den!*
- *Lämna aldrig rollatorn i sluttningar utan bromsarna åtdragna.*
- *Sitt aldrig för långt bakåt. Sitt inte (delvis) på väskan.*
- *Sitt alltid rakt när du sitter på rollatorn med underarmarna eller händerna vilande på skjuthandtagen.*
- *Luta dig aldrig bakåt när du sitter på rollatorn.*

Låsa/låsa upp handbromsarna

- Lås bromsarna genom att trycka ned bromshandtagen tills hör ett klickljud.
- Lås upp bromsarna genom att dra upp bromshandtagen tills du känner att de lossnar.



- *När rollatorn står still MÅSTE handbromsarna låsas.*

7. Rengöring

Allmänt:


- Rengör rollatorn regelbundet och håll den ren.
- Lättare smuts och damm kan torkas av med en fuktig trasa.
- Större mängder smuts kan torkas av med ett icke-frätande, mildt rengöringsmedel och varmt vatten.
- Använd inga slipande eller blekmedelsbaserade rengöringsmedel, då det kan skada eller missfärga rollatorn.
- Torka av delarna med en mjuk trasa.

Hjul:

- Rengör hjulen med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel. Torka av med en ren trasa.
- Smörj hjulen med universalolja regelbundet eller när hjulen börjar gnissla.

8. Information på etiketten

Produktetiketten sitter på ett av stommens nedre rör: Den innehåller viktig information om produkten: namn, serienummer, produktionsdatum, produktnummer, maximal användarvikt, maximal belastning av väskan, bredd, storlek och tillverkares information. Etiketten får aldrig ta bort från produkten.

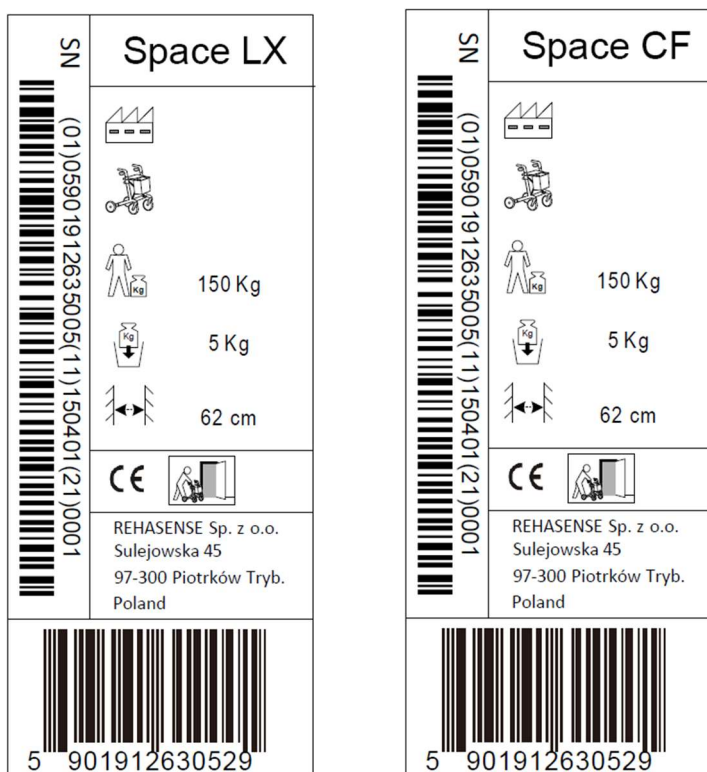

9. Tekniska data

"SPACE LX/CF" lättvikt rollator		
Modell	Aluminium	Carbon Fiber
Max. belastning	150 kg	150 kg
Väskans max. belastning	5 kg	5 kg
Totalt vikt utan väska	6,1 kg	5,3 kg
Väska	0,43 kg	0,43 kg
Längd	66 cm	66 cm
Total höjd hopfälld (lägst)	86 cm	86 cm
Bredd uppfälld	62 cm	62 cm
Bredd hopfälld	22 cm	22 cm
Sittbredd	46 cm	46 cm
Handtagens höjd (justerbar)	78 – 102 cm	78 – 102 cm
Sitthöjd	63 cm	63 cm
Bromsar	2 x två handbromsar med låsfunktion	
Hjul (diameter x bredd)	200 x 35 mm	200 x 35 mm

10 Transport

.....

Rollatorn är enkel att fälla ihop och därför lämplig att transportera. Om rollatorn ska transporteras bör den först fällas ihop enligt anvisningarna ovan. Rollatorn ska transporteras stabilt och utan risk för plötsliga och farliga rörelser.

11 Underhåll

.....

- Se till att samtliga delar sitter fast ordentligt HELA tiden.
- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna. Dra åt vid behov.
- Byt ut trasiga, skadade och slitna delar omedelbart.
- Smörj hjulen med universalolja regelbundet eller när hjulen börjar gnissla.

12 Återanvändning

.....

Denna rollator kan återanvändas. Innan den överlämnas till nästa användare måste den inspekteras av en kvalificerad fackman.

Följande punkten måste kontrolleras:

- Visuell inspektion av ramen
- Att sitsens muttrar och bultar är åtdragna
- Plastdelarnas skick
- Hjulens och kullagrens skick
- Bromsarnas effekt och skick

Om någon del är skadad eller trasig måste den bytas ut till en ny. Vi rekommenderar att hjulen byts ut vid återanvändning. Alla lösa bultar och muttrar måste dras åt. Rollatorn måste rengöras noggrant och desinficeras innan den återanvänds.

WARNING! Det är förbjudet att återanvända rollatorn när ramen är böjd eller trasig.

Bruksanvisningen måste medfölja rollatorn vid varje ägarbyte.

13 Bortskaffa produkten

.....

Produkten får inte slängas med hushållssoporna. Den ska lämnas in till en återvinningscentral för återanvändning eller återvinning

14 Garanti

.....

Tillverkaren erbjuder sju (7) års garanti till ramen och två (2) års garanti till andra delar mot tillverkningsfel. Garantin täcker inte delar som tar slut för normalt slitage och garantin täcker inte om produkten används på fel sätt.

Kontakta din lokala återförsäljare eller Rehasense direkt om du har några tekniska frågor.

Återförsäljare:

Camp Scandinavia / Camp Mobility:

Patamäenkatu 5, 33900 Tampere, Finland

09 350 76 310 info@campmobility.fi

Varaosat: 09 350 76 312

varaosat@campmobility.fi

www.campmobility.fi

Rehasense® Europe

Manufacturer Rehasense

Sp. z o.o. Sulejowska 45

97-300

Piotrkow Třybunalski Poland

www.rehasense.com

info@rehasense.com



REHASENSE