



Tuoteuutuudet

www.campmobility.fi

Camp Mobility on osa Camp Scandinavia Oy:tä ja Allard International -konsernia.

Myymme tarkasti valikoitujen valmistajien liikkumisen apuvälineitä ja päivittäisen toimintaympäristön apuvälineitä kuten sänkyjä, nostimia ja hygieniapuvälineitä sekä happirikastimia.

Uusi toimipiste Helsinkiin 2020

Päätoimipisteemme ja logistiikkakeskuksemme sijaitsevat Sarankulmassa Tampereella.

Keskitymme vahvaan paikalliseen yhteistyöhön ja parannamme palveluamme Uudenmaan alueella avaamalla uudet toimitilat **Helsingin Pitäjänmäkeen** syksyllä 2020.

Huollamme ja korjaamme kaikkia myymiämme tuotteita Suomessa. Kaikilla myynti-, huolto- ja tuote-spesialisteilamme on useamman kymmenen vuoden kokemus alalta.

Alueelliset myyntiedustajamme palvelevat sinua Etelä-, Itä-, Länsi- ja Pohjois-Suomessa.

Suomen Vahvimmat 2020 sertifikaatti

Camp Scandinavialle on myönnetty Suomen Vahvimmat (Strongest in Finland) -sertifikaatti

Suomen Vahvimmat -sertifikaatti myönnetään yritykselle, jonka luottoluokitus kuuluu kahteen korkeimpaan luokkaan (AAA tai AA+). Sertifikaatti perustuu Suomen Asiakastiedon 7-portaiseen Rating Alfa -luottoluokitukseen. Luokitus on merkki yrityksen hienoista taloudelli-

sertifioidun yrityksen kanssa on kestäväällä pohjalla.

Camp Scandinavia Oy:n Rating 29.6.2020 tilinpäätöstiedoin on AAA. Tästä kuuluu Kiitos asiakkailemme, yhteistyökumppaneillemme ja henkilökunnallemme.

Visionimme ja tavoitteemme

Visionimme on, että Camp Mobility on innovatiivinen ja hyvinvoiva perheyritys. Tavoitteenamme on säilyttää merkittävä asema Suomen lääkinnällisen kuntoutuksen apuväline-markkinoilla kannattavasti ja kestäväällä pohjalla.

Luovuus, tieto, joustavuus, jatkuva tuotekehitys, asiakaspalautteiden kuunteleminen, paras asiakaspalvelu ja tyytyväisimmät asiakkaat sekä hyvinvoiva työyhteisö tulevat edelleen vahvistamaan markkina-asemaamme Suomessa.

Tutustu tuoteuutuuk- siimme ja ota yhteyttä!

Yhteystiedot löydät takakannesta.

Tapani Vuorinen

General Manager
Camp Mobility

“Yhteistyötä kestävällä pohjalla”



ja AAA luottoluokitustaso. Camp Scandinavia Oy:hyn kuuluu Camp Mobilityn lisäksi Suomen ortoosi-liiketoiminta ja läheisessä yhteistyössä klinikkapalveluita tarjoava Camp Clinic.

sista tunnusluvuista, positiivisista taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Sertifikaatti kertoo asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja muille sidosryhmille, että yhteistyö

BATEC MINI 2

The minimum expression of Batec, the maximum expression of you



BATEC MINI2 sähköinen ajolaite max. 20 km/h

Batec MINI 2 manuaalipyörätuoliin asennettava ajolaite säästää aikaa ja voimia päivittäisissä asioinneissa ja lisää liikkuvuutta niin kaupungissa, maaseudulla, pitkillä matkoilla kuin vain lyhyilläkin retkillä.

Entistä pienemmässä MINI 2:ssa on pienempi 12" rengas, se taivutuu kasaan, mahtuu paremmin auton tavaratilaan, on kevyempi, kulkee pidemmälle ja liikkuu paremmin ylä- ja alamäessä. Pieni koko ja peruutusvaihde tekevät siitä lyömättömän liikkuksen apuvälineen ahtaissakin tiloissa.

Vakiona mm. All-in-one LCD-näyttö, 3 eri ajonopeutta ja kantokahva. Ajomatka 28 km 280 Wh akulla tai jopa 52 km 522 Wh akulla. Ajonopeus voidaan ohjelmoida yksilöllisesti, huippunopeus 20 km/h.

Saatavana versiot myös tetra- ja hemiplegiapotilaille. Lisätiedot ja lisävarusteet www.batec-mobility.com.

Ominaisuuksia



ENTISTÄ MINIMPI BATEC MINI2

BATEC MINI 2:n pieni koko, pienempi 12" rengas, kokoontaittuva ohjaustanko, Special kantokahva ja kevyempi paino tekevät siitä lyömättömän liikunnan apuvälineen ahtaissakin tiloissa. Se mahtuu paremmin auton tavaratilaan, on kevyempi, kulkee pidemmälle ja liikkuu paremmin ylä- ja alamäessä.

VAKIOVARUSTEET

BATEC MINI 2:ssä on vakiona mm. All-in-one LCD-näyttö, kolme eri ajonopeutta, 350 RPM ja 350W moottori ja peruutusvaihe, 100-lumenin etuvalo, LED-takavalot, äänitorvi ja USB-portti. Valittavana 280 Wh (7.8 Ah) akku, jolla ajomatka 28 km tai 522 Wh (14.5 Ah) akku, jolla ajomatka jopa 52 km.



KOLME ERI AJONOPEUTTA 6 km/h 15 km/h JA 20 km/h

Ajonopeus voidaan ohjelmoida yksilöllisesti, 6 km/h, 15 km/h tai huippunopeus 20 km/h.

BATEC MINI2 SPECIAL KANTOKAHLA

Batec MINI2:ssa erityisesti MINI2:seen suunniteltu special kantokahva, jonka avulla se on helppo nostaa vaikka auton tavaratilaan.

PIKAKIINNITYS ja -IRROTUS ja SEISONTATUKI

Helppo irrottaa ja kiinnittää takaisin pyörätuoliin Batec EASY-FIX-kiinnitysapapterin avulla. Helppokäyttöinen seisonatuki pitää Batecin pystyssä, kun sitä ei tarvita. QR-pikalukitus renkaassa helpottaa renkaan ja sisäkumin vaihtoa.





HEMIPLEGIA VERSIO

Versiossa hemiplegikoille on peukalo-ohjausjarrut ja mahdollista valita kaikki hallintalaitteet yhdelle kädelle, joko vasemmalle tai oikealle.



QUADROPLEGIA VERSIO

Saatavana myös versio nelirajahalvauspotilaille eli monitoimiohjaustanko ilman jarrukahvoja tai kaasukahvaa, joka mahdollistaa pehmeät liikkeet sekä jarruttaessa että kiihdyttäessä.



ERIKOISIA LISÄVARUSTEITA

Kaikissa MINI2 -laitteissa mukana ACOPLA selkäreun / matkalaukun pidike. Lisää lisävarusteita www.batec-mobility.com ja tilauskaavakkeessa.

**Lisää lisävarusteita
www.batec-mobility.com
ja tilauskaavakkeessa!**

TAITETTAVA OHJAUSTANKO

Ohjaustanko kokoonmitattuna MINI2 mahtuu hyvin vaikka työpöydän alle tai mukaan ravintolaan.



MINI vs. MINI 2

250 RPM
1050 W / 900 W
moottori

500-lumenin etuvalo

Akku
280 Wh (7.8 Ah) tai
522 Wh (14.5 Ah)




14, 7 kg < vs > 12,9 kg
22 km/40 km < vs > 28 km/52 km
83-97 cm < vs > 73,6-87 cm
16" < vs > 12"

350 RPM
600 W / 350 W
moottori

100-lumenin etuvalo

Akku
280 Wh (7.8 Ah) tai
522 Wh (14.5 Ah)







Tekniset tiedot



AVATTUNA

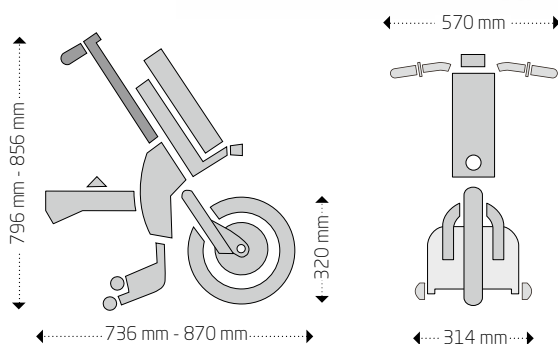

KOKOONTAITETTUNA

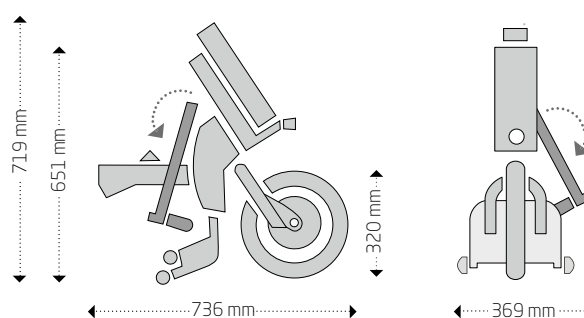

12,9 kg
ilman akkuja



km/h
Max. 20 km/h



Max. 28 km / 52 km



Väri:
grafiitinharmaa



Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
© 2020 Camp Mobility Finland

Valmistaja:
BATEC MOBILITY S.L.
Illa de Buda, 2
08192 Sant Quirze del Vallès
(Barcelona) - SPAIN
+34 93 544 2003
info@batec-mobility.com
www.batec-mobility.com

Küschall®

K-Series



Küschall® K-Series

Kiinteärunkoisten aktiivituolien designikoni ja trendsetter on uudistunut. Uusi modulaarinen istuinjärjestelmä kirjaimellisesti istuu kaikkiin käyttäjätarpeisiin ja dynaamisesti muokattava varustelu tarjoaa ylivoimaisen ajomukavuuden.

UUSI HYDROFORMING ETURUNKO

Uusi hydroforming menetelmällä valmistettu eturunko tuo K-Series tuolien designin uudelle tasolle. Uusi teknologia tuo lisää jäykkyyttä ja tarkkuutta vertaansa vailla oleviin ajo-ominaisuuksiin, silmiinpistävän puhtaat linjat ja selkeän, ajattoman muotokielen.

CAMP
MOBILITY

HYDROFORMING MUOTOILTU POLVIEN ALUE

Ergonominen ote, ideaali siirtymisiin ja asennon kohentamiseen. Saatavana sekä 90° että 75° eturungolla.

LIGHT ACTIVE BRAKE

Uudet, kevyet alumiiniset aktiivijarrut minimalistisella designilla tuo keveyden aivan uudelle tasolle. Tarkkuutta pienimpiinkin yksityiskohtiin.

UUSI KAVENNETTU ETURUNKO

Kavennettu runko mahdollistaa tuolin muotoutumisen pehmeän esteettisesti vartalon muodon mukaan.

UUSI JALKATUKI

Täysin uudelleensuunniteltu tasainen pinta mahdollistaa paremman asennon ja ajomukavuuden.



IKONINEN

Ikonisen minimalistinen ja kevyt open frame design, antaa mahdollisuuden nauttia päivittäisistä aktiviteeteistä; on kyse sitten töihin menosta tai aktiivisista harrastuksista, K-Series tuolit antavat sinulle vapauden olla sinä!



HYDROFORMING

Hydroforming teknologia tuo K-Series-sarjan tuoleihin lisää persoonallisuutta. Ikoninen ulkonäkö on entistä tunnistettavampi uuden polvien alueen suoralinjaisen designin ansiosta. Uusi vahvempi runko lisää ajokokemusta entistä miellyttävämmäksi.



UUSI SELKÄTUKI

Uusi ergonominen otekahva nosto- ja kuljetustilanteisiin. Matalampi asemointi on ideaali Matrx-selkätuille.

SELKÄOSA

Kokoontaittuvassa selkäosassa 6 eri kulman säätömahdollisuutta erilaisiin asentotarpeisiin.

ISTUINOSA

K-series tuolien sydän. Istuinosan painopisteen voi säätää 5 eri kohtaan, kun tuolista halutaan aktiivisempi.

UUSI TUKIPYÖRIEN RIPUSTUS

Uusi puhdas muotoilu ja integroidut laakerit. Kerää huomattavasti vähemmän likaa ja huolto on helpompaa.

UUDET TUKIPYÖRIEN HAARUKAT

Uusi eturunkoon hitsattu alumiiniprofiili - johdonmukaista designia läpi koko pyörätuolin.

DYNAAMINEN

K-Series tuoleissa on täydellinen geometria alusta loppuun, joten runkoa ei tarvitse säätää mitenkään. Renkaat pysyvät aina samassa linjassa runkoon nähden. Erittäin jäykkä rakenne mahdollistaa erinomaiset ajo-ominaisuudet.



MODULAARINEN

Näkymätön painopisteen säätö istuimen alla: Voit siirtää istuinmoduulia taakse- ja eteenpäin 5 eri asentoon ja muuttaa helposti myöhemmin ilman ylimääräisiä komponentteja.

TEKNISET TIEDOT

ISTUIN- LEVEYS

320 – 500 mm
20 mm välein



ISTUIN- SYVYYS

350 – 525 mm
25 mm välein



ISTUIN- KORKEUS

etu: 450 – 520 mm
taka: 390 – 490 mm
10 mm välein



JALKATUKIEN PITUUS

290 – 480 mm
10 mm välein



SELKÄOSAN KORKEUS

270 – 480 mm
15 mm välein



SELKÄOSAN KULMA

74° / 78° / 82° /
86° / 90° / 94°



ETURUNGON KULMA

75° / 90°
V-runko tai kavennettu



KOKONAI- LEVEYS

Ist.lev. + 170 mm



PAINOPISTE

80 mm / 95 mm / 110 mm /
125 mm / 140 mm



CAMBER

0° / 3° / 6°



TÖRMÄYSTE- STAUS

Hyväksytty- täyttää
ISO 7176-19 vaatimukset



75°: n. 830 - 1055 mm
90°: n. 760 - 985 mm



KOKONAI- PAINO

n. 7.8 kg



KULJETUS- PAINO

n. 5.1 kg



MAX. KÄYTTÄJÄ- PAINO

130 kg



Kaikki ilmoitetut mitat ja painot perustuvat 400 mm istuinleveyteen ja -syvyyteen kevyimmässä ja pienimmässä kokoonpanossa. Paino ja mitat voivat muuttua eri kokoonpanoissa. Katso lisätietoja käyttöohjeesta nettisivuiltamme.

Küschall®

Valmistaja:
Invacare International GmbH
Benkenstrasse 260
CH-4108 Witterswil
Switzerland
P: +41(0) 61487 7070
F: +41(0) 61487 7079
www.kuschall.com

Pidätämme itsellämme
oikeuden muuttaa tarvittaessa
tässä esitteessä ilmoitettuja
tuotespesifikaatioita.

© 2020
Camp Mobility Finland

VÄRIT JA TEHOSTEET

1 VALITSE RUNKOVÄRI



Pure White



Anthracite Grey



Space Black



Carmine Red



Azure Blue

2 VALITSE TEHOSTETYYLI



3 VALITSE TEHOSTEVÄRI



Red



Black



Light Grey



Gold



Red



Blue



Dark Grey



Black

Küschall®

Champion



Küschall® Champion

Kiinteärunkoisen aktiivituolin ajokokemus kokoonlaitettavan tuolin ominaisuuksilla! Yhdistelmä modernia designia ja todistettua hybridituolin suorituskykyä: SK (Swiss knife) optiolla Küschall Champion on super kompakti, selkäreppukokoinen, täydellinen matkakumpuni otettavaksi mukaan seikkailuhisi.

UUSI HYDROFORMING ETURUNKO

Jäykempi, kevyempi ja vakaampi. Uusi hydroforming menetelmällä valmistettu eturunko parantaa kelaus-ominaisuuksia, lisää jäykkyyttä ja mahdollistaa vaivattomat siirtymiset ja ergonomiset otteet.

CAMP
MOBILITY

HYDROFORMING ETURUNKO

Optimoidut ajo-ominaisuudet polvialueen pienemmän joustavuuden (suuremman jäykkyyden) ansiosta.

LIGHT ACTIVE BRAKE

Uudet, kevyet alumiiniset aktiivijarrut minimalistisella designilla tuo keveyden aivan uudelle tasolle. Tarkkuutta pienimpiinkin yksityiskohtiin.

SUPER KOMPAKTI

SK (Swiss knife) option ansiosta Champion kokoontaittuu jopa selkärepun kokoiseksi



SUPER KOMPAKTI

Yksinkertainen kokoontaittaa, kuljettaa ja matkustaa uniikin kokoontaittomekanismin ansiosta. Super kompakti SK (Swiss knife) optiolla, Champion kokoontaittuu vieläkin pienemmäksi.



HYBRIDI

Kokoontaittomekanismin ansiosta Championissa on ylivoimaiset ajo-ominaisuudet muihin kokoontaittaviin pyörätuoleihin verrattuna. Täydellisen suunnittelun tuloksena on syntynyt hybridituoli: Kokoontaitettava tuoli, kiinteärunkoisen jäykkyydellä ja vakaudella.



CARBOLIFE KELAUSVANTEET

Innovatiivinen vannerprofiili mahdollistaa paremman kontrollin, vaivattoman otteen ja stabiloi rannetta.

KOKOONTAITTO- MEKANISMI

Kokoontaita pyörätuoli ja selkäosa vaivattomasti yhdellä liikkeellä.

UNIIKKI SÄÄTÖMEKANISMI

Yhdellä huomaamattomalla mekanismilla painopisteen ja istuinkorkeuden säätö käyttäjän tarpeiden mukaiseksi.

KEEP ON TRACK

Intuitiivinen ja uniikki tukipyörien säätö pitää suunnan erinomaisen vakaana.

UNIIKKI SÄÄTÖMEKANISMI

Uniikin mekanismin ansiosta Championin voi säätää ja konfiguroida vaivattomasti jokaisen käyttäjän mukaiseksi. Yhdellä mekanismilla säädetään painopistettä, 9 eri istuma-asentoa, istuimen takakorkeutta ja 5 eri mahdollisuutta, kuinka asentaa adapterit eri kokoonpanoihin.



CAMP[®]
MOBILITY

TEKNISET TIEDOT

ISTUIN- LEVEYS

360 - 480 mm
20 mm välein



ISTUIN- SYVYYS

340 - 480 mm
20 mm välein



ISTUIN- KORKEUS

etu: 450 - 540 mm
taka: 390 - 490 mm



JALKATUKIEN PITUUS

320 - 500 mm
portaaton säätö



SELKÄOSAN KORKEUS

300 - 465 mm
15 mm välein



SELKÄOSAN KULMA

76° / 80.5° / 85° / 89.5° / 94°



ETURUNGON KULMA

75° / 90°
suora tai
kavennettu



KOKONAIS- LEVEYS

ist.lev + 160 - 240 mm



KOKONAISLEVEYS KOKOONTAITETTUNA

n. 280 - 340 mm



CAMBER

0° / 1° / 3°



TÖRMÄYSTESTAUS

Hyväksytty- täyttää
ISO 7176-19 vaatimukset



KOKONAIS- PITUUS

75° n. 930 mm
90° n. 830 mm



KOKONAIS- PAINO

n. 9,2 kg



KULJETUS- PAINO

n. 6,7 kg



MAX. KÄYTTÄJÄ- PAINO

120 kg



Kaikki ilmoitettut mitat ja painot perustuvat 400 mm istuinleveyteen ja -syvyyteen kevyimmässä ja pienimmässä kokoonpanossa. Paino ja mitat voivat muuttua eri kokoonpanoissa. Katso lisätietoja käyttöohjeesta nettisivuiltamme.

Küschall®

Valmistaja:
Invacare International GmbH
Benkenstrasse 260
CH-4108 Witterswil
Switzerland
P: +41(0) 61487 7070
F: +41(0) 61487 7079
www.kuschall.com

Pidätämme itsellämme
oikeuden muuttaa tarvittaessa
tässä esitteessä ilmoitettuja
tuotespesifikaatioita.

© 2020
Camp Mobility Finland

VÄRIT JA TEHOSTEET

1

VALITSE RUNKOVÄRI



Pure White



Anthracite Grey



Space Black



Carmine Red



Azure Blue

2

VALITSE TEHOSTETYYLI



3

VALITSE TEHOSTEVÄRI



Red



Black



Light
Grey



Gold



Red



Blue



Dark
Grey



Black

Küschall®

Compact



Küschall® Compact

Küschall Compact – luotettavuuden ja korkealuokkaisen laadun absoluuttinen standardi on uudistunut! Tarvitsetpa sitten aktiivisen tai erittäin konfiguroitavan tuolin, Compactin funktionaalisuus sopii jokaiseen elämäntyyliin. Valitse kiinteät tai swing away-jalkatuet, jotka voidaan säätää tarpeen mukaan.

HYDROFORMING RUNKO

Uusissa Compact-tuoleissa on hydroforming-menetelmää hyödyntäen valmistettu runko: Monipuolisuutta ja mukavuutta muuttamatta Compactin paino on vähentynyt jopa 500 g. Hydroforming-runko on entistä vakaampi ja tuo tuoleihin modernin, nykyaikaisen yleisilmeen.

CAMP
MOBILITY

HYDROFORMING ETURUNKO

Täysin uudelleen suunniteltu eturunko ja jalkatukien ripustus. Hydroforming-rungon ansiosta Compact on 500 g kevyempi.

JALKATUET

Valitse pyörätuoliisi sivullekääntyvät 80° tai 70° swing away-jalkatuet, jotka ovat ideaalit kuljetuksissa ja siirtymisissä tai tukevamman kiinteän 80° tai 70° eturungon.

JALKALEVYT

Uusi jalkatukivalikoima sopii kaikkiin istuinleveyksiin ja sopii yhteen modernin designin kanssa. Uutuutena uusi, yksiosainen, luistamaton anti-slip onepiece -jalkalauta.



LUOTETTAVA

Vaikuttavaa vakautta – useiden sisäänrakennettujen teknisten ratkaisujen ja yksiosaisen jalkalaudan ansiosta energiaa kuluu kelatessa vähemmän.

Uuden poikkiputken ansiosta tuoli myös taittuu helpommin kasaan kuin muut kokoontaitettavat pyörätuolit.



LISÄÄ KÄYTTÖ- MUKAVUUTTA

Useiden eri optioiden ansiosta voit valita tuolisi rakenteella, joka sopii tarpeisiisi kuten kavennettu eturunko jalkojen parempaa asentoa varten, jolloin pyörätuoli vie vähemmän tilaa, jalat on helpompi pitää jalkatuella ja tuolia on helpompi liikutella.



Küschall® COMPACT

TAITTOMEKANISMI

Helpon 'yhden sormen' lukituksen ja kevyen, helposti lukittuvan ja varmatoimisen lukitusmekanismin avulla voit avata istuimen turvallisesti.

POIKKIPUTKI

Suunniteltu erityisesti heikko-voimaisille helpompaa kokoon-taittoa varten sekä painavimmille käyttäjille lisäämään tukevuutta ilman, että runkoon tarvitsee lisätä muita erillisiä lisäputkia.

KEEP ON TRACK

Intuitiivinen ja uniikki tukipyörien säätö pitää suunnan erinomaisen vakaana.

HAARUKAT

Uusi puhdas muotoilu ja integroidut laakerit. Kerää huomattavasti vähemmän likaa ja huolto on helpompaa.

KOMPAKTIA KÄYTÄNNÖLLISYYTTÄ

Ainutlaatuisiin ominaisuuksiin kuuluu irrotettavat jalkatuet, jotka voi valita 70° tai 80° kulmaisina ja joissa on säädettävä, helppokäyttöinen pikalukitusmekanismi, joka tarvitsee vain vähän voimaa. Kokoonlaittava selkäosa mahdollistaa kuljetukset erittäin pienessä ja kompaktissa paketissa.



CAMP®
MOBILITY

TEKNISET TIEDOT

ISTUIN- LEVEYS

280 – 500 mm
20 mm välein



ISTUIN- SYVYYS

320 – 500 mm
20 mm välein



ISTUIN- KORKEUS

etu: 370 – 530 mm
taka: 360 – 500 mm
10 mm välein



JALKATUKIEN PITUUS

200 – 510 mm
10 mm välein



SELKÄOSAN KORKEUS

300 – 510 mm
15 mm välein



SELKÄOSAN KULMA

82°/86°/90°/
94°/98°/102°



ETURUNGON KULMA

70° / 80°
suora tai kavennettu



KOKONAI- LEVEYS

Ist.lev. + 180 mm



KOKONAI- LEVEYS KOKOONTAITETTUNA

n. 290 mm



CAMBER

0° / 3°



TÖRMÄYSTE- TAUS

Hyväksytty- täyttää
ISO 7176-19 vaatimukset



KOKONAI- PITUUS

70°: n. 940 mm
80°: n. 890 mm



KOKONAI- PAINO

n. 11 kg



KULJETUS- PAINO

n. 8.3 kg



MAX. KÄYTTÄJÄ- PAINO

130 kg



Kaikki ilmoitetut mitat ja painot perustuvat 400 mm istuinleveyteen ja -syvyyteen kevyimmässä ja pienimmässä kokoonpanossa. Paino ja mitat voivat muuttua eri kokoonpanoissa. Katso lisätietoja käyttöohjeesta nettisivuiltamme.

Küschall®

Valmistaja:
Invacare International GmbH
Benkenstrasse 260
CH-4108 Witterswil
Switzerland
P: +41 (0) 61487 7070
F: +41 (0) 61487 7079
www.kuschall.com

Pidätämme itsellämme
oikeuden muuttaa tarvittaessa
tässä esitteessä ilmoitettuja
tuotespesifikaatioita.

© 2020
Camp Mobility Finland

VÄRIT JA TEHOSTEET

1 VALITSE RUNKOVÄRI



Pure White



Anthracite Grey



Space Black



Carmine Red



Azure Blue

2 VALITSE TEHOSTETYYLI



3 VALITSE TEHOSTEVÄRI



Red



Black



Light Grey



Gold



Red



Blue



Dark Grey



Black



Yes, you can.®

Action® Ampla™



Invacare Action® Ampla™ 300 kg

Action® Ampla™ on suunniteltu ja kehitetty erityisesti Plus-kokoisille käyttäjille ottaen huomioon kehonmuodot, vaihtelevat aktiivisuustasot ja painorajoitukset. Ampla on tyylikäs ja minimalistinen pyörätuoli nykyaikaisella ulkoäöllä, joka tarjoaa itsenäisyyttä ja tukea mukavaan ja aktiiviseen elämäntyyliin.

XXL-pyörätuolien uusi suunnannäyttävä

Action® Ampla™:n uudenlaiset siirtopyörät helpottavat tuolin kokoontaittoa ja siirtämistä. Uudenlaiset tukikahvat käsitukien sijasta, ja kauniisti sivusuojiin integroidut jarrut, helpottavat siirtymisiä. Uusi ergonominen selkäosa on suunniteltu erityisesti Plus-kokoisille. Sen suojaava, elastinen ja hengittävä selkäosan päälliskangas peittää koko pakara-alueen.

CAMP
MOBILITY



7

SISÄÄNRAKENNETUT SIIRTOPYÖRÄT

Sisäänrakennetut siirtopyörät on suunniteltu fiksusti siirtämään paino pois pyörätuolista, mikä mahdollistaa siirtämisen helposti oviaukoista ja ahtaista paikoista.

1. Taita selkäosa alas
 2. Nosta jalkatuista tuoli ylös
 3. Käännä pyörätuoli siirtopyörien varaan.
- Tässä asennossa tuolia on helppo liikutella

1.



2.



3.



USEITA KELAUS- PYÖRÄN ASENTOJA

5

Erittäin helposti kelattava
Käyttäjät voivat liikkua pidemmälle
vähemmän energiaa käyttäen



reddot design award
winner 2019





2

ERGONOMINEN SELKÄOSA

Helppo ulottua kelausvanteisiin
Esteetön
Enemmän liikkumavapautta
Ylivertainen suorituskyky ja ohjattavuus



3

KORKEUSSÄÄDETTÄVÄT TUKIKAHVAT

Tukee tuoliin ja siitä pois siirryttäessä
Voidaan kääntää sisään- ja ulospäin
Voidaan laskea alemmaksi, jotta päästään
lähemmäksi pöydän ääreen



4

TEHOSTEVÄRIT

Kolme tyylikästä värivaihtoehtoa



DESIGN AWARDS VOITTAJA

Action@ Ampla™ on voittanut jo tuotesuunnittelun Red Dot Design Awardin. Tämä kilpailu on yksi maailman suurimmista tuotekilpailuista, sekä myös yksi arvostetuimmista suunnittelupalkinnoista. Action@ Ampla™ on voittanut myös Italian Platinum A'Design Awardin ja Gold German Design Awardin.


CAMP[®]
MOBILITY

Ominaisuuksia


INNOVATIIVINEN SELKÄOSA

Action® Ampla™:n suunnittelu mahdollistaa täydellisen istuvuuden XXL -kokoisille käyttäjille, joilla yleensä on "omenan" tai "päärynän" muotoinen keskivartalo.


Action® Ampla™:n innovatiivinen selkäosa on suunniteltu mukautumaan molempiin kehon muotoihin, mutta tarjoaa silti tukea ja mukavuutta.

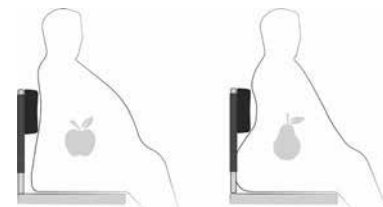

Tekniset tiedot

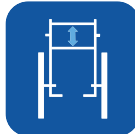						
Istuinleveys ▼	Istuinsyvyys ▼	Istuinkulma ▼	Istuinkorkeus ▼	Selkäosan kulma ▼	Selkäosan korkeus ▼	
Action Ampla	505 / 555 / 605 / 655 / 705 / 755 mm	460 / 510 mm	1°	380 - 455 mm 25 m m välein	0°	450 - 525 mm
						
Eturungon kulma ▼	Jalkatukien pituus ▼	Ajoyksikön leveys ▼	Kokonaispituus sis. jalkatuet ▼	Kokonaispituus ilman jalkatukia ▼	Kokonaishkorkeus ▼	
Action Ampla	90 - 100°	365 - 525 mm 25 mm välein	Istuinleveys +2 05 mm	1065 - 1145 mm	855 - 920 mm	825 - 900 mm
						
Max. kallistus ▼	Kääntö-säde ▼	Max.käyttäjä-paino ▼	Kokonaispaino alk. ▼	Kuljetuspaino alk. ▼		
Action Ampla	7°	1420 - 1660 mm	300 kg	27 kg1	9.5 kg	

Runko- ja tehostevärit

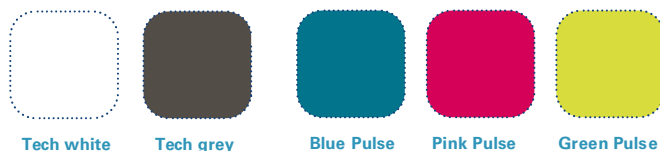

HUOM: värit voivat hieman erota esitteiden väreistä



Valmistaja:
Invacare International Sàrl
Route de Cité-Ouest 2 - 1196
Gland Switzerland
Tel: +41 (0)22 354 60 10
Fax: +41 (0)22 354 60 11
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© Camp Mobility Finland 2020

Action^{®3}_{NG} Rocking Chair



Invacare Action³_{NG} Rocking Chair

Action³_{NG} RC on 6-pyöräinen manuaalipyörätuoli, joka on suunniteltu tunnetun Action³_{NG}:n pohjalta. Laajan Action-sarjan ristiin yhteensopivien lisävarusteiden ja varaosien ansiosta, tuoli on erittäin konfiguroitava ja yksilölliset tarpeet täyttävä, kokoonlaitettava pyörätuoli.

6-pyöräinen manuaalipyörätuoli

Action³_{NG} RC on kehitetty helpottamaan kelausvanteisiin ulottumista. Se tarjoaa paremman liikuteltavuuden ja vaivatonta kelatavuutta. Ainutlaatuinen design tarjoaa uniikin lepoasennon taakse asennettujen lisäpyörien ansiosta. Tuoli on helppo kallistaa jopa 25°.

CAMP[®]
MOBILITY

KULMASÄÄDETTÄVÄ SELKÄOSA

Patentoitu, portaattomasti kulmasäädettävä selkäosa mahdollistaa säätöjen tekemisen käyttäjän istuessa tuolissa.

SIVULLEKÄÄNTYVÄT, IRROTETTAVAT KÄSITUET

Ergonomiset, vaahtomuovi-pehmustetut, sivulle käännettävät käsituet helpottavat sivuttaissiirtymisiä.

TURVAVIPU

Aktivoituu kelattaessa, voidaan poistaa käytöstä tuolin kallistuksen ajaksi

KALLISTUS

25° kallistus mahdollistaa lepoasennon

PAREMPI LIIKUTELTAVUUS

Verrattuna 4-pyöräisiin pyörätuoleihin



KOMPAKTI JA KEVYT

Leveys ja kokonaisleveys kokoonlaitettuna ovat täsmälleen samat kuin Action3NG :ssä, jotka ovat:

ALASTAITETTAVA SELKÄOSA

Kulmasäädettävä ja eteenpäin taitettava selkäosa pienentää säilytys- ja kuljetuskokoa.



Säädettävä akseli

Akseli kiinnikkeet ovat säädettävissä kolmeen eri asentoon käyttäjälle sopivaan painopisteeseen sopivaksi. Tämä säätö määrittelee myös kallistuspisteen ja tukipyörien sijainnin.

Turvavivut

Turvavivujen ansiosta käyttäjä voi kallistaa tuolin lepoasentoon. Turvavivussa on 65 mm:n pieni joustovara, joka sallii pienten esteiden ylittämisen myös turvavivut aktivoituna.

Vaijerijarrut

Ainutlaatuinen vaijereilla toimiva jarrujärjestelmä seuraa keskipyörien asentoa. Siksi jarruja ei tarvitse erikseen aktivoida, kun tuoli on lepoasennossa.

PAREMPI LIIKUTELTAVUUS

Erityissuunnittelun ansiosta käyttäjän paino voidaan jakaa tasaisesti kaikille pyörille, joka lisää käännettävyyttä ja ohjattavuutta. Keskipyörien ansiosta kääntösäde on lyhyempi kuin tavallisessa manuaalipyörätuolissa, joka mahdollistaa vaivattoman käytön sisätiloissa. Parempi liikuteltavuus verrattuna tavallisiin 4-pyöräisiin manuaalipyörätuoleihin.

Action3NG RC on uusi ratkaisu, kun halutaan kokoontaitettava, kevyt ja helposti kuljetettava comfort-pyörätuoli.



LEPOASENTO

Mekaaninen tasaisella liikkeellä toimiva kallistusasento, jonka käyttäjä voi säätää itse tai avustajan suorittamana. Vakiona olevien 6" tai 5,5" tukipyörien ja 22" tai 24" kelauspyörien lisäksi, Action3NG RC on varustettu myös kahdella nivelletyllä 5" takapyörällä, jotka tarjoavat mahdollisuuden kallistaa tuolin 25° kallistuskulmaan.

Kallistaaksesi tuolia itsenäisesti, käyttäjän tarvitsee vain työntää käsillä takaapäin eteen kohti kelausvanteita. Vaihtoehtoisesti myös avustaja pystyy kallistamaan tuolia keskus- ja takapyörille vaivattomasti.

Tämä innovatiivinen ominaisuus tarjoaa lepoasennon milloin tahansa päivän aikana ja mahdollistaa painepisteiden muutoksen ja paineen vapautumisen. Kelattaessa tuolissa olevat turvavivut aktivoituvat automaattisesti, jotka sekä käyttäjä että avustaja voivat poistaa käytöstä vaikeuksitta kallistustoiminnon käyttämiseksi.



Mallit



Action³NG RC

Action³NG RC:iin on saatavana laaja valikoima lisävarusteita ja optioita vastaamaan kunkin käyttäjän erityistarpeita mm. erilaisia selkäosavaihtoehtoja: kiinteä, taitettava, kaasujousella kallistettava tai kulmasäädettävä ja alas käännettävä.

Action³NG RC Matrix

Action³NG RC Matrix-selkäosalla ja istuintyynyillä voit valita mm: **Matrix Elite** selkäosa, jossa 80 mm kaareva syvyys tai **Elite Deep** selkäosa, jossa 160 mm kaareva syvyys. Myös valikoima istuintyynyjä, joista valita: Klassinen **Visco**, **Matrix Vi** tai **Libra** ja monta muuta!

Action³NG RC Comfort Pack

Action³NG RC Comfort Pack todellinen kokoontaitettava, kevyt comfort-tuoli, joka on helppo kuljettaa! Comfort-paketti sisältää kallistettavan selkäosan, Laguna selkäosatynny, sivullekäännettävät, syvyys- ja kulmasäädettävät jalkalevyt (pari) ja Dartex-pää-/niskatuen.

Ominaisuudet



6-pyöräisyyden edut:

- Helpompi ulottua kelausvanteisiin
- Yläraajat pysyvät luonnollisemmassa ja ergonomisemmassa asennossa
- Kelaamiseen tarvitaan vähemmän voimaa, joka parantaa suorituskkyä
- Ehkäisee hartiakipuja

Tekniset tiedot

	Istuinleveys ▼	istuinsyvyys ▼	Istuinkulma ▼	Istuinkorkeus ▼	Selkäosan kulma ▼	Selkäosan korkeus ▼	Jalkaosan kulma ▼
Action³NG RC	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm	400 / 450 mm	3°	460 - 485 mm	7° / 0° - 30° / -1 5° - +15°	350 - 510 mm	80° / 0 - 75°
	Jalkatukien pituus ▼	Käsitukien korkeus ▼	Ajoyksikön leveys ▼	Kokonaisleveys taitettuna ▼	Kokonaispituus sis.jalkatuet ▼	Kokonaispituus ilman jalkatukia ▼	Kokonaiskorkeus ▼
Action³NG RC	200 - 400 / 330 - 460 / 440 - 510 mm	230 / 170 - 295 mm	istuinleveys +1 90 mm	295 mm	1036 - 1124 mm	816 - 890 mm	810 - 1040 mm
	Max. kallistus-kulma ▼	Kääntö-säde ▼	Max.käyttäjä-paino ▼	Kokonais-paino ▼	Painavin osa ▼		
Action³NG RC	4°	800 mm	125 kg	17,6 kg ¹	1,2 kg		

Runko- ja tehostevärit



Valmistaja:
 Invacare International Sàrl
 Route de Cité-Ouest 2 - 1196
 Gland Switzerland
 Tel: +41 (0)22 354 60 10
 Fax: +41 (0)22 354 60 11
 hqeuropa@invacare.com
 www.invacare.eu.com

TriGO^o



Vermeiren Trigo aktiivituoli lapsille ja aikuisille

Vermeiren **Trigo T** on kokoontaitettava aktiivipyörätuoli uusilla huippumoderneilla ja kevyillä kolmioprofiilisilla runkoputkilla ja lähes rajattomilla säätö- ja varustelumahdollisuuksilla. Trigo-tuoleissa on mm. sisäänrakennettu selkäosan, istuinkorkeuden ja camber-kulman säätömahdollisuus.

Trigo T:ssä on vakiona irrotettavat jalkatuet (70°, 80°, 90°) korkeus- ja kulmasäädettävillä jalkalevyillä. Valittavissa mm.

3 eri selkäosaa, 5 eri työntökahvaa, 10 erilaista käsituki- tai vaatesuojavaihtoehtoa. Istuinleveydet 30–50 cm. Max. 70-100 kg koosta riippuen.

Saatavana myös kevyempi **Trigo S** kiinteillä jalkatuilla.

Tutustu optioihin erillisen lisävarusteet esitteen avulla!

CAMP[®]
MOBILITY

Ominaisuudet ja optiot



UUSI DESIGN

Trigo on huippumoderni pyörätuolin jokaiseen makuun. Trigon voi konfiguroida täysin yksilölliseksi tilauksen yhteydessä; rungosta pyöriin, sis.mm. paljon varustevaihtoehtoja ja yli 30 eri väriä. Trigo-tuoleja on lähes yhtä monta erilaista kuin on käyttäjiäkkin!



UUDET KOLMIOPROFIILISET RUNKOPUTKET

muodostavat perustan kaikille Trigo-malleille. Ne luo pyörätuolille modernin ja yksilöllisen ilmeen ja tekevät tuolista kevyemmän optimaalisen lujuuden säilyttäen.



Tukipyörät

Saatavana 7 erilaista tukipyörää, koot 3", 4", 5", 6"



LOPUTTOMASTI SÄÄTÖMAHDOLLISUUKSIA

Sen lisäksi, että kokoonpano valitaan tilauksen yhteydessä (koko, malli, selkäosa, käsitet, runko, optiot...), on Trigo myös edelleen dynaamisesti säätävä tuoli. Useita muutoksia voidaan tehdä tuolin säätöihin jälkikäteen kuten camber-kulmat, istuinkorkeus jne.



SÄÄDETTÄVÄ CAMBER

Nerokkaan järjestelmän ansiosta kelauspyörän camber-kulmaa voidaan muuttaa suoraan tuolissa! Camber voidaan muuttaa haluttaessa 0°, 2°, 4° tai 6° kulmaan (kokoonpanosta riippuen). Tuoli toimitetaan tilauksen yhteydessä valitsemallanne camber-kulmalla.



Kelauspyörät ja kelausvanteet

Saatavana 6 erilaista kelauspyörä+kelausvanne -vaihtoehtoa. Koot Standard 18", Design 20"-26", muut 24". Valikoiman löydät lisävaruste-esitteestä!

Lisää vaihtoehtoja ja lisävarusteita
lisävaruste-esitteessä ja
tilauskaavakkeessa!



SAATAVANA MYÖS LASTEN KOOT!

Trigo pyörätuolit on suunniteltu siten, että ne sopivat sekä aikuisille että lapsille. Tästä syystä, **Trigo** on saatavana alkaen 30 cm istuinleveydestä jopa 50 cm saakka. Myös pieniin kokoihin on saatavana, laaja valikoima lisävarusteita ja tarvikkeita.



RENKAIDEN ASEMOINTI

Trigo mukautuu käyttäjän tarpeisiin ja sen voi säätää "enemmän tai vähemmän aktiiviseksi"; kelauspyörien asentoa voidaan säätää suoraan pyörätuolin rungosta. Pyörät voidaan säätää eteen- tai taaksepäin, 8 eri asentoon. Tuoli toimitetaan tilauksen yhteydessä valitsemallanne renkaiden asennoilla.



Käsituki- ja vaatesuojavaihtoehto

Saatavana irrotettavat, korkeussäädettävät tai putkikäsitetut ja 8 erilaista kiinteää tai irrotettavaa vaatesuojavaihtoehtoa.

SELKÄOSAN KALLISTUS

Saatavana 3 eri vaihtoehtoa: kiinteä selkäosa, kallistettava selkäosa (82° - 102°), ja kallistettava ja alastaitettava selkäosa.

2. ja 3. vaihtoehdon selkäosan kulmaa voidaan säätää helposti tuolin rungosta.



Työntökahvat

Valittavana 5 erilaista työntökahvamallia. Kuvassa kokonaan alas taittuva malli.

Ominaisuudet ja optiot



Monobloc alumiiniputket



Monobloc, taitettava alumiinilauta



Monobloc, taitettava hiilikuitulauta



Monobloc, korkeampi lauta




Monobloc, sisäänvedettävä jalkalauta



Eriiset jalkatuet




70°

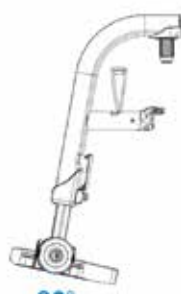

80°



5 cm lyhennetty

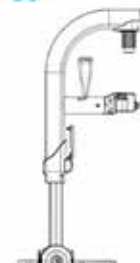

90°



Jalkalautavalikoima (Trigo S)

Valittavana 5 erilaista jalkalautaa tuolimallista riippuen. Kaikki saatavana 70°, 80° ja 90°.

Jalkatukivalikoima (Trigo T)

Valittavana 4 erilaista irrotettavaa jalkatukea: 70°, 80° ja 90° tai 5 cm lyhennetty -malli.


Jarruvaihtoehdot

Valittavana 3 erilaista jarrumallia: Perinteiset vipujarrut, vetojarrut ja Sport-jarrut.

Tekniset tiedot



Kokonaisleveydet

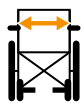


Istuinleveydet



Istuin-korkeudet



Istuin-syvyydet

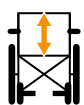

Selkäosan korkeus



Tukipyörät



Kelauspyörät



Paino



Max. käyttäjäpaino

46-66 cm
(camber 0°)

30-50 cm
(2 cm välein)

38-51 cm*

32-50 cm
(2 cm välein)

25-51 cm*

3", 4", 5", 6"

18", 20", 22", 24", 26"

alk. 10 kg*

70-100 kg*

*kokoonpanosta riippuen

Väri vaihtoehdot

Vakiovärit:
Tilauksesta myös paljon erikoisvärejä.



C4M - Bright Red Mat
C4G - Bright Red Gloss



C5M - Black Mat
C5G - Black Gloss



C8M - Yellow Mat
C8G - Yellow Gloss



C29M - Bright Grey mat
C29G - Bright Grey Gloss



C53M - Orange Mat
C53G - Orange Gloss




C55M - Inox Mat
C55G - Inox Gloss



C56M - Blue Grey Mat
C56G - Blue Grey Gloss



C59M - Champagne Mat
C59G - Champagne Gloss

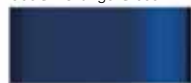


C71G -
Metallic Deep Blue




C72G -
Metallic Cherry Red



C73G -
Metallic Bright Green

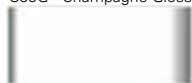

C76M - Metallic White Mat
C76G - Metallic White Gloss

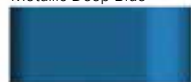

C78G - Soft Blue Gloss



C79M - Metallic Bright
Blue Mat
C79G - Metallic Bright
Blue Gloss



C85M - Grass Green Mat
C85G - Grass Green Gloss



C87M - Melon Orange Mat
C87G - Melon Orange Gloss



NV VERMEIREN BELGIUM
Vermeirenplein 1/15
2920 Kalmthout Belgium
Tel: 00 32 (0)3 620 20 20
Fax: 00 32 (0)3 666 48 94
www.vermeiren.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2020 Camp Mobility Finland



Icon 20 - kokoontaitettava peruspyörätuoli

Icon 20 on kevyt, kokoontaitettava, alumiinirunkoinen pyörätuoli lyhytaikaiseen tai sairaala- ja lainaamokäyttöön, jossa on laaja valikoima säätömahdollisuuksia käyttäjän tai terapeutin yksilöllisten toiveiden ja vaatimusten mukaan.

Icon 20:ssa jalkatukien lukitus on sivulla, mikä muodostaa tasaisen etuosan ilman riskiä, että raajat, vaatteet tai huonekalut tarttuvat tuoliin, jos jalkatuet poistetaan.

Icon 20 :ssa on säädettävät istuinkorkeus ja -syvyys, työntökahvat, käsi- ja jalkatuet ja -laudat. Vakiona myös vipujarrut, vaatesuojat, käsitukipehmusteet, puhkeamattomat renkaat ja kelausvanteet. Istuinleveydet 40–50 cm, istuinsyvyyydet 40 cm tai 45 cm (vakio). **Max. 140 kg.**

Saatavana myös **Icon 20 XL**
Max. 180 kg istuinleveydet
53, 57 ja 61 cm.

Ominaisuudet



Säädettävä istuinsyvyys

Istuinsyvyys säädettävissä +/- 11 cm.



Säädettävä istuinkorkeus

Istuinkorkeus säädettävissä 5 eri korkeusasentoon aktiivisella / passiivisella säädöllä



Säädettävät jalkatuet

Jalkatuet kääntyvät ulos, sisään, ja alle. Irrotettavat, ylöskääntyvät kulma- ja kork.säädettävät jalkalevyt, joissa kantaremmit.



Säädettävät käsituet

Siirtymisiä helpottaa sivulle kääntyvät, irrotettavat, korkeussäädettävät käsituet sis. vaatesuojat ja pitkä käsitukipehmusteet.



Vipujarrut vakiona



Korkeussääd. työntökahvat



Kokoontaitettava ristikkorunko

helpottaa kuljetusta ja varastointia.



Polkaisuputki

pyörätuolin taaksekalistukseen



Puhkeamattomat kelaus-

pyörät alukelausvanteilla ja pikakiinnitysnavoilla



Säädettävät tukipyörät

7 "/ 170 x 40 mm mustat, kiinteät PU-tukipyörät 3 eri korkeuteen säädettävillä alumiinihaarukoilla.

LISÄVARUSTEET:

- Vaakatasoon säädettävät jalkatuet
- Amputaatiojalkatuet
- Kaatumiseste/ polkaisuputki
- Kepinpidike



Tekniset tiedot



Istuinleveys
45 cm (vakio)
muut: 37,5–50 cm*
XL: 53, 57 tai 61 cm



Leveys
kokoontaitettuna
34 cm



Selkäosan
korkeus
42 cm



Istuinkorkeus
48 cm
(sääd.)



Korkeus
kokoontaitettuna
91 cm



Kokonaispituus
101 cm
ilman jalkatukia
76 cm



Istuinsyvyys
40 cm tai
45 cm (vakio)



Kuljetuspaino
7 kg
Kokonaispaino
14,2 kg




Max. käyttäjäpari
140 kg
XL 180 kg

* istuinleveydet: 37.5 - 40 - 42.5 - 45 - 47.5 tai 50 cm

Väri



Champagne



Musta verhoilu ja muoviosat

Takuu: rajoitettu
2 vuoden takuu valmistusvirheille.

Kaikki Rehasense tuotteet ovat testattu ja hyväksytty ISO 11199-2:2005 laatustandardin mukaisesti, ovat CE-merkittyjä ja täyttävät lääkinällisten laitteiden EU direktiivin 93/42/EEC vaatimukset.

Valmistaja:
Rehasense Sp. z o.o.
Sulejowska 45
97-300 Piotrków Trybunalski
Poland
www.rehasense.com



Icon⁴⁰ - kokoontaitettava puoliaktiivipyörätuoli

Icon⁴⁰ on kevyt, kokoontaitettava, alumiinirunkoinen pyörätuoli laajoilla asennusvaihtoehdoilla lyhytaikaiseen tai sairaala- ja lainaamokäyttöön. Se sopii hyvin aktiivisen itsekelaavan käyttäjän tarpeisiin.

Icon⁴⁰ :ssa on säädettävät käsi- ja jalkatuet ja -laudat, työntökahvat, istuinkorkeus ja -syvyys sekä tarrasäädettävä selkäosa. Uutuutena uudet tukipyörien ripustukset.

Vakiona kaatumisesteet, vipukäsijarrut, vaatesuojat, käsitukipehmusteet, puhkeamattomat renkaat ja alukelausvanteet. Istuinleveydet 40–50 cm.

Max. 140 kg

Saatavana myös **Icon⁴⁰ XL 180 kg**
Istuinleveydet 53–61 cm.

Varastoväri shampanja,
musta verhoilu- ja
muoviosat.

Ominaisuudet



Säädettävät jalkatuet

Jalkatuet kääntyvät ulos, sisään, ja alle. Irrotettavat, ylöskääntyvät kulma- ja kork.säädettävät jalkalevyt, joissa kantaremmi.




Säädettävät käsituet

Siirtymisiä helpottaa sivulle kääntyvät, irrotettavat, korkeussäädettävät käsituet sis. vaatesuojat ja pitkät käsitukipehmusteet.



Kaatumiseste-polkaisuputki

Ylöskäännettävä kaatumiseste ja polkaisuputki kynnyksen ylitteksi ja kaatumisen estämiseksi.

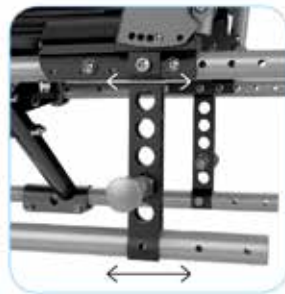

Useita kelauspyörän kiinnityksiä

Useat kelauspyörän kiinnityspisteet mahdollistavat säädettävät eri istuinkorkeudet ja syvyydet.



Tarrasäädettävä selkäosa

Tarrasäädettävä selkäosa lisää yksilöllistä istuinmukavuutta



Korkeussäädettävät työntökahvat



Puhkeamattomat kelausrenkaat pikakiinnitysnavoilla



Uusi etuhaarukan ripustus

7" / 170 x 40 mm mustat, kiinteät PU-tukipyörät alumiinihaarukoilla.

LISÄVARUSTEET:

- Vaakatasoon säädettävät jalkatuet
- Amputaatiojalkatuet
- Korkeussäädettävät työntökahvat
- Kepinpidike



Kokoontaitettava ristikkorunko




Vipukäsijarrut vakiona


Tekniset tiedot



Istuinleveys
40-50 cm
XL: 53-61 cm

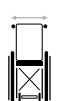

Leveys
kokoontaitettuna
34 cm

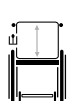

Selkäosan
korkeus
42 cm



Istuinkorkeus
48 cm
(sääd.)



Korkeus
kokoontaitettuna
92,5 cm



Kokonaispituus
101 cm
ilman jalkatukia
76 cm



Istuinsyvyys
40-50 cm



Kuljetuspaino
8,8 kg
Kokonaispaino
16.6 kg



Max. käyttäjäpaino
140 kg
XL 180 kg

Värit



Musta verhoilu



Champagne

Takuu: rajoitettu 2 vuoden
takuu valmistusvirheille.

Kaikki Rehasense tuotteet ovat testattu ja hyväksytty ISO 11199-2:2005 laatustandardin mukaisesti, ovat CE-merkittyjä ja täyttävät lääkinnällisten laitteiden EU direktiivin 93/42/EEC vaatimukset.

Valmistaja:
Rehasense Sp.z o.o.
Sulejowska 45
97-300 Piotrków Trybunalski
Poland
www.rehasense.com



Invacare Aviva RX + Modulite

Uusi **AVIVA RX** takavetoisten sähköpyörätuolien tuoteperhe on suunniteltu tarjoamaan korkealaatuisia ominaisuusvaihtoehtoja yhdistettynä uuteen teknologiaan ja tyylikkääseen suunnitteluun. Tuloksena maksimi mukavuus ja hallinta sekä sisällä että ulkona. Saatavana joukko eri säätöoptioita runkoon ja istuinjärjestelmään.

Invacare Aviva RX + UltraLowMaxx

AVIVA RX sähköpyörätuolit ovat saatavana sekä Modulite- että UltraLowMaxx istuinjärjestelmillä.

ULM -istuinjärjestelmässä on erittäin alhainen istuinkorkeus ja erinomainen asento käyttäjälle.

Modulite-istuinjärjestelmässä tarjoaa erilaisia asentoratkaisuja ja mukautuu käyttäjien henkilökohtaisiin mieltymyksiin ja tarpeisiin.

CAMP[®]
MOBILITY



Ohjaimet



REM216 helppokäyttöohjain

Vakiona LiNX-ohjainvalikoiman yksinkertainen vaihtoehto, jossa joystick-ajotoiminto, nopeudensäätö, äänitorvi, vilkkujen, ajo- ja varoitusvalojen säätö sekä istuimen säätö.

DESIGN

Puhtaat linjat, tyylikkääts kulmat ja laadukas viimeistely erottavat todella AVIVA RX:n kilpailijoista. Istuinjärjestelmän, rungon ja hallintalaitteiden vertaansa vailla olevat yksilölliset säätömahdollisuudet ja kompakti (leveys vain 560 tai 630 mm). Erittäin suorituskykyinen, erinomainen ohjattavuus yhdistettynä pitkään ajomatkaan. Istuinkorkeus niinkin alhaalta kuin 435 mm (ULM jopa 420 mm). Täydellinen ahtaissa tiloissa, joissa pieni kääntösäde. Matalan istuinkorkeuden ansiosta pääsy helposti pöydän ääreen.

TEKNOLOGIA

Optiona saatava uusi, erittäin tehokas, tiekäyttöön hyväksytty, **AXENDO**-valaistusjärjestelmä ja **REM400** kosketusnäyttöohjain, jonka käyttöön tarvitaan minimaalisen vähän voimaa (vakiona **REM 216**). **LINX**-käyttöliittymä helpottaa yksittäisten asetusten määrittämistä tietokoneen, kannettavan tai iOS-älylaitteen avulla. Sisäänrakennettu älykäs kuorman kompensointi tasapainottaa moottoreiden puolieroja ja mahdollistaa tarkemman ja ennakoitavamman ohjauksen. Älykäs moottorien ohjaus tulkitsee ja oppii ajan myötä käyttäjän ajotavat, mukauttaa moottorit muutoksiin ja varmistaa, että pyörätuoli on optimoitu ja tasapainossa käyttäjän vaatimusten mukaisesti. **G-Trac**:n avulla tuoli kulkee haluttuun suuntaan myös kaltevilla ja epätasaisilla pinnoilla.

SUORITUSKYKY

Patentoitu **CTC**-jousitus eristää istuimen tärinältä ja iskuilta ja pitää kaikki neljä pyörää jatkuvasti kosketuksissa maahan, mikä tarjoaa optimaalisen painon ja sujuvan ja hiljaisen ajokokemuksen käyttäjälle. Parannetut huoltomahdollisuudet moottorien, vaihdelaatikon, suojusten, renkaiden, pyörien ja napoihin helpon pääsyn ansiosta. Elektroniikka sijoittuu laitteen etuosaan siten, että kaikki johdot / liitännät ovat selvästi näkyvissä ja akut voi helposti liu'uttaa ulos takaa.

LINX-ELEKTRONIIKKA

Invacare LiNX on oivalluksen inspiroima uusi ohjausjärjestelmä, jonka edistyneellinen teknologia, tarjoaa erinomaisen ajokokemuksen käyttäjille ja jonka avulla ammattilaiset voivat ohjelmoida sähköpyörätuolit intuitiivisesti reaaliajassa.

Built-in Bluetooth®

Sisäänrakennettu Bluetooth mahdollistaa käyttäjän olla koko-ajan yhteydessä älylaitteisiinsa. LiNX voi olla yhteydessä 3:een eri laitteeseen samanaikaisesti ja siinä on mouse mover -toiminto.



REM400 kosketusnäyttöohjain

Uudessa **REM400** ohjaimessa on vaikuttava 3.5" värillinen, erittäin kirkas ja selkeä kosketusnäyttö, jonka käyttäminen vaatii vain vähän voimaa. Suuressa näytössä on myös nopeus- ja matkamittari.



REM500 display only

REM500 on vain kosketusnäytöllinen versio, jossa on 3.5" interaktiivinen kosketusnäyttö, pohjassa ON/OFF ja monitoiminäppäimet, lataus-portti ja 2 -tuloliitintä. Suunniteltu erityisesti käyttäjille, jotka eivät pysty käyttämään vakio-ohjainta.

I.MODULITE™ -ISTUINJÄRJESTELMÄ

- Erilaisia istuinyynyjä ja selkäosa-vaihtoehtoja, esim. Matrx®, Rea® ja Flex3 käyttäjän tarpeen mukaan
- Portaaton istuimen syvyys, leveys, kulma ja painopisteen säätö mahdollistavat käyttäjälle täydellisen istuvuuden säätämisen
- Valittavissa säädettävät ja irrotettavat jalkatuet ja käsitet käyttäjän tarpeen mukaan
- Moottoroitu nouseva jalkatuki tukee jalkoja ja pohkeita koko liikealueella
- Kiskojärjestelmä joustavaan lisävarusteiden kiinnitykseen
- 20° tai 30° tility ja 30° kallistus helpottaa painetta
- Korkea nivelkohdat vähentävät hankaumia
- Pikavapautusmekanismi helppoa kokoon-taittoa ja kuljetusta varten



2. Personoi väreillä

Valikoima moderneja väri vaihtoehtoja katteiden ja vanteiden efektiiväreiksi, jotta käyttäjä voi suunnitella tuolin oman makunsa mukaan

9. Patentoitu CTC -jousitus

Helppo siirtyä pehmeästä kovaan jousitukseen. Jousitusasentoa voidaan muuttaa henkilökohtaisen mieltymyksen tai käyttäjän painon mukaan. Lisäämällä jousipari helppo muuntaa HD versioksi (160 kg)

7. Painopisteensäätö

Painopisteen (pituus-) säätö läpi istuimen, rungon ja takarenkaissa takaa optimaalisen painon jaon pyörien päälle, parantaa pitoa ja parantaa ajokokemusta

5. Uudet etuhaarukat

Esteettisesti miellyttävä yksipuolinen haarukka minimoi alustan etuleveyden ilman ulkonevia ruuveja tai haarukkaosia. Saatavana myös kaksipuoleiset etuhaarukat

4. Uudet tukipyörät

8" sisäkäyttöön ja ahtaisiin tiloihin 9" miellyttävään ajamiseen ulkona, esteitä ylittäessä ja maastossa

ULM™ -ISTUINJÄRJESTELMÄ

- Erittäin alhainen istuinkorkeus (jopa 420 mm) ja erinomainen -asento
- Luonnolliset nivelpisteet replikoivat kehonmuotoja
- Varmistaa, että pää, hartiat, lonkat ja jalat eivät koskaan menetä kosketusta tuoliin
- Vähentää merkittävästi hankaumia ja paine-haavariskiä
- jopa 50° tility ja 170° kallistus yhdistettävissä räätälöityyn yksilölliseen asentoon
- Yksilöitävä istuinjärjestelmä, joka mukautuu vartalonmuotoihin
- Vaihtelevat leveys ja syvyys
- Valittavissa eri selkä-, niska-/pää- ja käsitukivaihtoehtoja
- Sisäänrakennettu kisko asentolisävarusteiden asennusta varten

3. Säädettävä istuinkorkeus

420 mm (vain ULM),
435 mm, 460 mm, 485 mm
Riippuu käyttäjän pituudesta ja painopisteen säädöstä

10. Kapea rungon leveys

Vakio: 560 mm – Kompakti, kapea ja erinomainen ohjattavuus
Leveä: 635 mm
– parempi stabiilitteetti

8. Säädettävä rungon pituus

Vakio = 460/490 tai 520 mm
Leveä = 490/520 tai 550 mm
60 mm pituussäätöalue

6. Akkuvaihtoehdot

60 Ah tai 73.5 Ah valitse sisä- tai ulkokäytön määrän mukaan

Mallit



Aviva RX 40 + MODULITE

Premium-versio, jossa enemmän ominaisuuksia ja optioita. Ihanteellinen ratkaisu niille, jotka käyttävät tuolia yhtä paljon ulkona kuin sisätiloissa ja / tai tarvitsevat enemmän kliinistä tukea.

- 136 kg
- 12.5 km/h
- 60 Ah

Aviva RX 40 + MODULITE HD

Aviva tuotepereheen Plus-Size -versio
Suurempi maksimi käyttäjäpaino ja leveät istuin vaihtoehdot tekevät HD:sta sopivan suuremmalle asiakaskunnalle.


- 160 kg
- 10 km/h
- 73.5 Ah

Aviva RX 40 + UltraLowMaxx

Huippuluokan moottoroitua asentohoitoa matalalla istuinkorkeudella. Täydellinen ratkaisu positiivisten kliinisten tulosten tuottamiseksi ja liikkuvuuden parantamiseksi.

- 136 kg
- 12.5 km/h
- 73.5 Ah

Tekniset tiedot

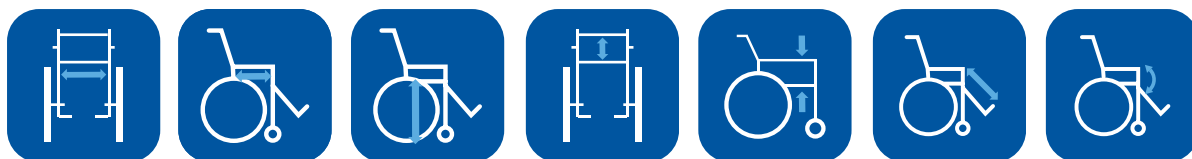

Istuinleveys ▼

Istuinsyvyys ▼

Istuinkorkeus ▼

Selkäosan korkeus ▼

Käsitukien korkeus ▼

Jalkatukien pituus ▼

Istuinkulma ▼

Modulite AVIVA RX 1-osainen istuin:	330 – 480 mm ¹	410 – 510 mm	435, 460, 485 mm ³	Sling selkäosa: 480 / 540 mm	230 – 360 mm	280 – 460 mm	0 - +30° ^{4, 5}
Modulite AVIVA RX Teleskooppi-istuin	330 – 580 mm ²			Flex 3: 506 - 610 mm Matrx: 400 / 500 mm			
ULM AVIVA RX	405 – 555 mm	405 – 580 mm	420, 435, 460, 485 mm	355 – 505 mm ²	230 – 405 mm ³	310 – 465 mm ⁴	0 - 50° ⁵



Selkäosan kulma ▼

Kokonaiskorkeus ▼

Kokonaispituus sis. jalkatuet ▼

Kokonaispituus ei jalkatukia ▼

Ajoyksikön leveys ▼

Max. käyttäjäpaino ▼

Akku-kapasiteetti ▼

Modulite AVIVA RX Standard	90 - 120°	1000 – 1335 mm ¹⁰	1026 – 1300 mm ⁸	830 mm	560 mm 635 mm ⁹	136 kg ⁴	52/60/73.5 Ah
Modulite AVIVA RX HD						160 kg	
ULM AVIVA RX	60 - 170° ⁶	1060 – 1540 mm	1202 – 1476 mm	1006 mm	560 mm 635 mm	136 kg	60/73.5 Ah



Kääntösäde halkaisija ▼

Max. esteen-ylityskyky ▼

Max. kallistus ▼

Moottori-kapasiteetti ▼

Nopeus ▼

Ajomatka ▼

Kokonaispaino ▼

Modulite AVIVA RX	1506 – 2086 mm	60 mm (100 mm esteen-ylittäjällä)	6, 10°	2 x 340 W	3, 6, 10, 12.5 km/h	47 km ¹¹	105 – 185.2 kg ¹⁰
ULM AVIVA RX	1975 – 2105 mm	60 mm (100 mm esteen-ylittäjällä)	6°	2 x 340 W	6/10/12.5 km/h	34 km	148.6 – 190.1 kg

- Istuintyyny 380 mm
- + 100 mm käsitukien säädöllä
- Maasta istuinleveyden ilman tyynyä
- hissillä tai moottoroidulla tilitillä
- Hissillä
- 0°- 45° versio hissillä
- 5° -10° anterior asennusoptiolla
- +5° pre-tilt asennusoptiolla

- Mitattu istuinleveydestä
- Mitattu jalkalevystä istuimeen
- Riippuu istuin-asennosta
- Alustan leveys
- Riippuu konfiguraatiosta
- ISO 7176-4:2008 73.5 Ah akuilla @ 6 km/h
- Invacare **Modulite™** istuin-komponentit ovat yhteensopivia Invacare sähköpyörätuolien ja osittain Invacare **Rea®** tuoteperheen kanssa.



Tehostevärit



Black



Mercury Blue



Bengal Red



Silver



Midnight Purple

Valmistaja:
Invacare International Sàrl
Route de Cité-Ouest 2 - 1196
Gland Switzerland
Tel: +41 (0)22 354 60 10
Fax: +41 (0)22 354 60 11
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com



Scorpius A - automaattisesti kokoontaittuva ja mukana kuljetettava sähkömopo

Invacare **Scorpius A** mopo on suunniteltu erityisesti henkilöille, jotka haluavat ylläpitää aktiivista, itsenäistä elämää tinkimättä pääsystä pieniinkin tiloihin.

Scorpius on ihanteellinen päivittäiseen käyttöön. Automaattisesti kokoontaittuva ja helposti mukana kuljetettava skootteri mahtuu auton takakonttiin ja on täydellinen matkakumppani niille, jotka haluavat ottaa mopon mukaan vaikka matkalle.

Scorpius A taittaa itse itsensä automaattisesti kokoon alle 10 sekunnissa yhdellä napin painalluksella. Lisävarusteena saatavana kuljetuslaukut ja isompi 17,6 Ah akku, joilla ajomatka jopa 23 km/lataus.

Paino ilman akkua alle 30 kg
Max. kuormitus 115 kg
Ajomatka 15 km / 23 km
Max. nopeus 8 km/h

Ominaisuudet

Kompakti ja kokoontaittuva
matkoja ja varastointia varten
77,5 x 51,2 x 54 cm

LED ajovalot

LED-ajovalot edessä ja takana
varustettu reaktiivisilla jarruvaloilla

Lentokone- hyväksytty akku

IATA ja MSDS hyväksytty
11.6 Ah standardi litium-ioni-
akku voidaan ottaa lento-
koneeseen.

LED ohjauspaneeli

- intuitiivinen kosketusnäyttö
- kokoontaitto alle 8 sek.
- varustettu varkauden-
estolaitteella

Kestävä

8-tuumaisilla PU-pyörillä
Scorpius liikkuu hyvin
eri tyyppisissä
maastoissa

Taittaa itse itsensä kasaan

yhdellä napin painalluksella
alle 10 sekunnissa

Helppo kuljettaa

Kuljetuslaukut lisävarusteena.

Tekniset tiedot



Selkätuen
leveys ▼



Istuinleveys ▼



Istuin-lattia
korkeus ▼



Mitat kokoontaitettuna
(pit x lev x kork) ▼



Ajoyksikön
leveys ▼



Kokonaispituus ▼

Scorpius A

419 mm

340mm

560mm

775 x 512 x 540 mm

512mm

953 mm



Kokonais-
korkeus ▼



Kokonaispaino* ▼



Max.käyttäjä-
paino ▼



Akku-
kapasiteetti ▼



Kääntö-
säde ▼



Max. esteen-
ylitys
korkeus** ▼

Scorpius A

953 mm

28 kg

115kg / 255 lbs

1 x 24V/11.6Ah

1140mm

50mm / 2
inch**



Maavara



Max. kallistus ▼



Max. ajo-



Max. nopeus



Moottori- ▼

Scorpius A

43mm / 1.7in

6°

15km

8 km/h

250W, 4600 r.p.m


*Paino ilman akkua

** Mitattu ylitysnopeudella

Värit ja materiaalit



White

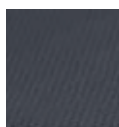

Black Mesh
verhoilu



Invacare International Sàrl
Route de Cité-Ouest 2 - 1196
Gland Switzerland
Tel: +41 (0)22 354 60 10
www.invacare.eu.com



Yes, you can.®

Dolomite® Gloss®



Invacare® Dolomite® GLOSS®

Dolomite on laajentanut rollaattorivalikoimaansa uudella kevyellä **Gloss**-rollaattorien tuoteperheellä. Kävelyn tukemiseen sisällä ja ulkona suunniteltu Dolomite Gloss on ideaali rollaattori lisäämään itsenäisyyttä. Tukeva ja vakaa rollaattori sisältää kaikki arvostetut Dolomite valikoiman ydinominaisuudet, mutta siinä on samalla moderni ja tyylikäs ulkonäkö. **Max. 160 kg** käyttäjäpainon lisäksi, Gloss on erittäin kevyt ja ketterä:

Paino **alk.5,9 kg**, joka tekee kuljetuksesta ja säilytyksestä vaivatonta. Hyvännäköinen, kokoonlaitettuna vain 19 cm leveä, ristikkorunko tarjoaa suuren kävelytilan ja tukeva istuin tarjoaa mukavuutta lisätukea tarvitseville.

4 eri istuinkorkeutta 450 mm – 680 mm väliltä ja laaja valikoima lisävarusteita, joiden avulla Gloss voidaan mukauttaa nopeasti erilaisiin käyttötarpeisiin sopivaksi.

CAMP®
MOBILITY

ERGONOMISET ETEEPÄINSUUNNATUT TYÖNTÖKAHVAT

1 SUURI KÄVELYILA

Mukavan tilava kävelytila käsitukien ja istuimen välissä edistää hyvää asentoa ja askelvapautta liikkeen aikana.

2

Eteenpäin suunnatut, ergonomisesti muotoillut työntökahvat voidaan korkeus- ja kulmasäätää sopimaan monenlaisille asiakkaille.

3 KOKOONTAITETTAVA RISTIKKORUNKO

Helppo säilyttää pienessä tilassa ja pysyy pystyssä myös kokoontaitettuna. Paino alk. 5,9 kg* ja leveys vain 19 cm kokoontaitettuna:

* Matala 450 5.9 kg, Vakiomalli 600 6,5 kg

4 4 ERI ISTUINKORKEUTTA

Saatavana 4 eri istuinkorkeutta ja laaja valikoima lisävarusteita, joilla varmistetaan, että rollaattori voidaan adaptoida sopimaan mahdollisimman monenlaisiin tarpeisiin ja monenlaisille asiakkaille.

KORKEUSSÄADETTÄVÄT, ERGONOMISET TYÖNTÖKAHVAT

Dolomite Gloss:n eteenpäin suunnattujen, ergonomisesti oikein sijoitettujen käsikahvojen korkeutta voidaan nopeasti ja helposti säätää sopivalle korkeudelle vain löysäämällä rungon ulkosivulla olevaa siipimutteria. Eteenpäin suunnatut kahvat voidaan myös kääntää tarvittaessa 20° sisäänpäin, vastaamaan paremmin käyttäjän kävelyasentoa.

LAAJA KÄVELUALUE

Dolomite rollaattoreille tunnusomaisesti, myös **Gloss**:ssa on laaja kävelytila renkaiden ja istuimen välissä. Mukava alue on suunniteltu edistämään vahvaa, hyvää ryhtiä ja kävelyasentoa ja antaa käyttäjille tukea ja vapautta kävellessä.



KEVYT, RISTIKKORUNKOINEN JA KOKOONTAITETTAVA

Gloss on erittäin kevyt, siinä on vaikuttava maksimikäyttäjäpaino 160 kg.

Pienen ristikkorungon designin ansiosta runko on erittäin kapea kokoontaitettuna, jonka ansiosta rollaattori on helppo säilyttää erittäin pienessä tilassa.

Kevyen ja pienen designin ansiosta Gloss on myös sekä käyttäjän itse että avustajan helppo nostaa auton tavaratilaan kuljetusta varten.



MONIPUOLINEN VALIKOIMA YKSILÖLLISIIN TARPEISIIN

Gloss on saatavana 4 eri istuinkorkeudella: 450mm, 520mm, 600mm ja 680mm.

Eri istuinkorkeudet mahdollistaa parhaan sopivuuden eri kokoisille käyttäjille.

Gloss kävelytelineen monipuolisuutta lisää entisestään laaja lisävarustevalikoima, joiden avulla rollaattori voidaan mukauttaa nopeasti olosuhteisiin ja asiakkaan erityistarpeisiin sopivaksi.



MUITA LISÄOMINAISUUKSIA

- **Jarruvaijerit** ovat asennettu siten, että niitä on helppo kiristää ja huoltaa.
- **Dynaamiset jarrut ja käsijarrut** tekee pysähtymisestä ja lepäämisestä vaivatonta.
- **Turvalukitushihna** turvallista varastointia varten.
- **Kokoontaittuva etukori**, tavaroiden kuljettamiseen, ja helposti ulottuvissa.
- **Lukuisten lisävarusteiden** ansiosta parempaa turvallisuutta ja itsenäisyyttä
- **Komponenttien ristiin yhteensopivuus** Gloss-perheen tulevien mallien kanssa

Mallit



Gloss⁴⁵⁰

Gloss⁵²⁰

Gloss⁶⁰⁰

Gloss⁶⁸⁰

Korkeus:	635 - 770 mm	725 - 860 mm	795 - 920 mm	915 - 1050 mm
Istuinkorkeus:	450 mm	520 mm	600 mm	680 mm
Paino:	5,9 kg	6,3 kg	6,5 kg	6,8 kg
Max.	160 kg	160 kg	160 kg	160 kg

Lisävarusteet

Lisävarusteet ja optiot

- **Selkätuki:** Pehmeä selkätukivyyä lisää turvallisuutta istumiseen.
- **Keppiteline:** Helpottaa kävelykepin tai kainalosauvojen mukana kuljettamista.
- **Kokoontaitettava etukori:** Voidaan irrottaa tai pitää rollaattorissa myös kokoontaitettuna.
- **Kova etukori:** Kestävä kova etukori malleihin 520, 600 & 680.
- **Tarjotin:** Irrotettava tarjotin ruoan ja juomien kuljettamiseen
- **Esteenylittäjä:** Lisäapu kynnysten tai epätaisten pintojen ylitykseen.

- **Hemiplegia-työntökahvat:** Optiona yksikäätiseen käyttöön / halvauspotilaille.
- **Laahausjarru:** Tarjoaa extra turvaa kun jarruttaminen on vaikeaa.
- **Jarrutehostin:** Lisäjarrutus-tehoa heikkovoimaisille.
- **Yhden käden jarru:** Mahdollistaa molemmista jarruista samaan aikaan jarruttamisen yhdellä kädellä
- **Istuinpehmuste:** Lisäistuinpehmuste lisää mukavuutta.
- **Yhtenäinen työntötanko:** Mahdollistaa rollaattorin liikuttelun yhdellä kädellä.



- **Happipullonpidike:** Turvallinen kiinnitys happipulloille.
- **Tippateline:** Turvallinen kiinnitys tippapussille.

Tekniset tiedot

					
	Kokonaisleveys renkaista mitattuna ▼	Syvyys ▼	Leveys renkaiden välissä ▼	Kokonaiskorkeus ▼	Istuinkorkeus ▼
Dolomite Gloss 450	518 mm	615 mm	423 mm	635 - 770 mm	450 mm
Dolomite Gloss 520	595 mm	675 mm	501 mm	725 - 860 mm	520 mm
Dolomite Gloss 600	602 mm	720 mm	509 mm	795 - 920 mm	600 mm
Dolomite Gloss 680	609 mm	790 mm	501 mm	915 - 1050 mm	80 mm

				
	Istuinleveys ▼	Renkaiden halkaisija ▼	Max.käyttäjäpaino ▼	Tuotteen paino* ▼
Dolomite Gloss 450	370 mm	200 mm	160 kg	5.9 kg
Dolomite Gloss 520	445 mm	200 mm	160 kg	6.3 kg
Dolomite Gloss 600	445 mm	200 mm	160 kg	6.5 kg
Dolomite Gloss 680	445 mm	200 mm	160 kg	6.8 kg

*Ei sis. lisävarusteita

Runkoväri



Harmaa

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
© Camp Mobility Finland 2020



Yes, you can.®

Invacare International Sàrl
Route de Cité-Ouest 2 - 1196
Gland Switzerland
Tel: +41 (0)22 354 60 10
Fax: +41 (0)22 354 60 11
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com



Rehasense® Space^{LX}

Space^{LX} on kevyt kokoontaitettava kävelyteline sisä- ja ulkokäyttöön. Se sopii hyvin henkilöille, jotka haluavat viettää itsenäistä elämää, mutta tarvitsevat apua, tukea ja turvallisuutta liikkumiseen. Tyylikkään modernin muotoilun lisäksi rollaattori on erittäin kevyt, vain noin 6,1 kg. Käsijarruvaijerit on ohjattu osittain runkoputken sisään ja kokoontaitomekanismin kiinnitysminen varmistettu kätevällä painonapilla.

Saatavana puhkeamattomilla, kovilla TPE-renkailla tai pehmeillä PU-renkailla. Mukana tulee myös irrotettava, etukori/kangaslaukku. Värät: punainen, harmaa tai shampanja. **Max. 150 kg.** Tutustu myös kattavaan lisävarustevalikoimaan.

Ominaisuudet



Moderni muotoilu

Moderni, huippukevyt ja korkealaatuinen alumiinirunko.



Kokoontaitettava

Kokoontaitettuna pysyy tiukasti kiinni painonapilla. Kuljetuskoko 66 x 86 x 22 cm



Irrotettava ostoskassi

Käytännöllinen ostoskassi, jossa vetoketjutasku ja 2 muuta lokeroa. Kuormitus max. 5 kg



Kyynärvarsituellinen, korkea Space LX

Saatavana myös tukeva, korkea Space LX kävelyteline



Korkeussäädettävät kahvat

Sujuvasti säädettävä työntökahvojen korkeus. 10 eri säätökorkeutta.



Optiona pehmeät PU-renkaat

saatavana kovilla TPE-renkailla tai pehmeillä PU-renkailla. Jarruvaijeri ohjataan osittain rungon läpi.



Ainutlaatuinen kolmioprofiili

Ainutlaatuinen muoto ja hitsattu kolmioprofiili takaa kestävyuden koko teknisen käyttöiän, käyttäjäpaino jopa 150 kg.

Tekniset tiedot

- * kokoontaitettuna
- * paino ilman etukassia



Kokonaisleveys ▼
62 cm / 22 cm*



Pituus ▼
66 cm



Kokonaiskorkeus ▼
78 - 102 cm



Istuinkorkeus ▼
62 cm



Istuinleveys ▼
46 cm



Renkaiden halkaisija ▼
200 x 35 mm



Max.käyttäjäpaino ▼
150 kg



Tuotteen paino* ▼
6,1 kg +etukassi 330 g

Väri vaihtoehdot



Sober Grey



Red



Champagne

Kaikki Rehasense kävelytelineet ovat testattu ja hyväksytty ISO 11199-2:2005 laatustandardin mukaisesti, ovat CE-merkittyjä ja täyttävät lääkinnällisten laitteiden EU Direktiivin 93/42/EEC vaatimukset.

Valmistaja:
Rehasense Sp.z o.o.
Sulejowska 45
97-300 Piotrków Trybunalski
Poland
www.rehasense.com

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
Camp Mobility
© 2020

Takuu: rajoitettu 2 vuoden takuu valmistusvirheille.



Doorstep kynnysluiskat

Rehasense Doorstep kynnysluiskat ovat oviaukkojen kynnysten ylittämiseen tarkoitettuja luiskia, jotka sopivat rollaattorilla, pyörätuolilla, sähköpyörätuolilla yms. siirtymiseen huoneesta toiseen.

Kätevän kokoontaitettavan koon, kantokahvojen ja keveyden (n. 3 kg) ansiosta, luiskien mukaan ottaminen ja siirtely on helpompaa.

Saatavana 3 mallia:

Oviluiska 76 cm kokoontaitettava

Oviluiskapari 25 cm kokoontaitettava

Kiilaluiska 76 cm korkeussäädettävä

Max. kuormitus 350 kg

Ominaisuudet



DOORSTEP 1



Materiaali komposiittialumiinia, paksuus 3 mm

DOORSTEP 1 - Kynnysluiska 2-osainen, lev. 76 cm

Tuotenro	Malli	Pituus avattuna	Leveys	Kynnyksen korkeus	Paino	Max. kuorm.
805010010	Pondus PFD04076	40 cm	76 cm	3-7 cm	3,3 kg	350 kg



DOORSTEP 2

DOORSTEP 2 - kynnysluiska, pari, 2-osainen, lev. 25 cm

Tuotenro	Malli	Pituus avattuna	Leveys	Kynnyksen korkeus	Paino	Max. kuorm.
805010011	Pondus PFD04225	40 cm	25 cm	3-7 cm	2,2 kg/pr	350 kg/pr



DOORSTEP 3

DOORSTEP 3 - Kiilaluiska 1-osainen + kork.säätöjalat 3-7 cm, lev. 76 cm

Tuotenro	Malli	Pituus	Leveys	Kynnyksen korkeus	Paino	Max. kuorm.
805010012	Pondus PAW04276	21 cm	76 cm	3-7 cm	3,2 kg	350 kg

Materiaali



Alumiini-komposiitti



Testattu ja hyväksytty ISO 11199-2:2005 laatustandardin mukaisesti, ovat CE-merkittyjä ja täyttävät lää-kinnällisten laitteiden EU Direktiivin 93/42/EEC vaatimukset.

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
Camp Mobility © 2020



Valmistaja:
Rehasense Sp.z o.o.
Sulejowska 45
97-300 Piotrków Trybunalski Poland
www.rehasense.com



1-osainen 117 cm, pr



3-osainen / 2,9 m

3-osainen / 2 m

2-osainen / 2 m

1-osainen lyhyt luiska 55 cm

Pondus rampit ja luiskat

Pondus rampit ja luiskat ovat 1-, 2- tai 3-osaisia, kiinteitä tai kokoonlaitettavia esim. pyörätuolin siirtämiseen autoon, portaiden yli, tasolta toiselle tms. tarkoitettuja luiskia ja rampeja.

Helposti kuljetettavat rampit ja luiskat on valmistettu erittäin lujasta, ilmaislukuun alumiinista ja suunniteltu raskaaseen käyttöön. Rampit ja luiskat on varustettu nylon/muovi-liukulaakereilla sujuvan toiminnan varmistamiseksi. Nostokahvat on suunniteltu ergonomisesti ja niissä on lukko kuljetusta varten.

Rampeja ja luiskia käytetään aina pareittain. Saatavana kiinteitä, teleskooppi- tai kokoonlaitettavia malleja:

- 1-osainen, kiinteä
 - 2-osainen, kokoonlaitettava
 - 3-osainen, kokoonlaitettava
 - 2-osainen, teleskooppi
 - 3-osainen, teleskooppi
 - 3-osainen, kokoonlait. + teleskooppi
- Max. 250-300 kg / pari**

Ominaisuudet



Käytetään pareittain

Valittavissa kiinteät luiskat tai teleskooppi- tai taittorampit.



Valitse oikean kokoinen luiska tai ramppi oikeaan tarpeeseen:

Luiskan ja rampin oikean pituuden valinta riippuu käytettävästä apuvälineestä, käyttäjän ja avustajan toimintaa edellytyksistä, käytettävässä olevasta tilasta, kuormituksesta ja korkeuserosta. Kun korkeusero alle 30 cm, valitse luiska, kun korkeusero 30-80 cm, valitse ramppi.

Tekniset tiedot

Pondus 2- ja 3-osaiset teleskooppirampit:

Tuotenro	Malli	Pituus avattuna	Pituus kasattuna	Sisä-leveys	Suurin nousu-korkeus	Paino / pr	Max. kuormitus / pr
805010021	2-os. teleskooppi	200 cm	117 cm	19,5 cm	40 cm	5,7 kg / 11,4 kg	300 kg
805010022	3-os. teleskooppi	200 cm	87 cm	19,5 cm	40 cm	6,1 kg / 12,2 kg	300 kg
805010023	3-os. teleskooppi	290 cm	117 cm	18 cm	58 cm	8,25 kg / 16,5 kg	250 kg

Pondus 2- ja 3-osaiset kokoontaitettavat taittorampit:

Tuotenro	Malli	Pituus avattuna	Pituus kasattuna	Sisä-leveys	Suurin nousu-korkeus	Paino / pr	Max. kuormitus / pr
805010025	2-os. taittoluiska	200 cm	87 cm	19,5 cm	40 cm	6,1 kg / 12,2 kg	300 kg
805010026	3-os. taittoluiska +teleskooppi	290 cm	117 cm	18 cm	58 cm	8,25 kg / 16,5 kg	250 kg

Pondus 1-osaiset luiskat:

Tuotenro	Malli	Pituus	Sisä-leveys	Suurin nousu-korkeus	Paino / pr	Max. kuormitus / pr
805010031	1-osainen	55 cm	19,5 cm	10 cm	1,5 kg / 3 kg	300 kg
805010032	1-osainen	117 cm	19,5 cm	20 cm	3,1 kg / 6,2 kg	300 kg

Värit ja materiaalit



Alumiini



Siniset muoviosat

Testattu ja hyväksytty ISO 11199-2:2005 laatustandardin mukaisesti, ovat CE-merkittyjä ja täyttävät lääkinnällisten laitteiden EU Direktiivin 93/42/EEC vaatimukset.

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita. Camp Mobility © 2020



Valmistaja:
Rehasense Sp.z o.o.
Sulejowska 45
97-300 Piotrków Trybunalski Poland
www.rehasense.com



Beam 45 cm
Max. 9 cm



Spectrum
76 x 150 cm
Max. 14-30 cm



Ray
150-210 cm, pr
Max. 30-42 cm



Defrag
180-300 cm, pr
Max. 36-60 cm

Broadband rampit ja luiskat

Broadband luiskat ja rampit ovat yhtenäisiä, kokoonlaitettavia rampeja, jotka on sopivat pyörätuolien lisäksi esim. sähköpyörätuolien tai mopojen siirtämiseen autoon tai tasolta toiselle. Luiskat ja rampit valmistetaan alumiinihunajakennon-paneeleista, joiden päällä on liukumaton anti-slip-teippi maksimaalisen turvallisuuden takaamiseksi. Hunajakennonrakenne takaa kevyen, mutta korkean lujuuden ja kestävyuden. Kätevä kokoonlaitettava muotoilu tekee varastoinnista ja kuljetuksesta helpompaa.

Saatavana useita kokoja ja malleja:

Beam 45 cm Max. 9 cm 300 kg

Spectrum 70/90/120/150 cm
Max 14-30 cm 300 kg

Ray 150/180/210 cm, pari
Max. 30 / 36 / 42 cm 2x200 kg

Defrag 180/210/240 cm, pari
Max. 36 / 48 / 60 cm 2x150 kg

Luiskat

BROADBAND Beam

BEAM 450 Kokoontaitettava salkkumallinen alumiiniluiska 45 cm

Mitat 45 x 71 cm
Max. 300 kg
Antislip-pinta, taittosarana,
kantokahva ja lukitus
Suurin nousukorkeus: 9 cm



Kokoontaitettava
kantokahva

Kuljetuslukitus

BROADBAND Spectrum

SPECTRUM Kokoontaitettava salkkumallinen alumiiniluiska 70-150 cm

Mitat 70 -150 x 76 cm
Max. 300 kg
Antislip-pinta, taittosarana,
kantokahva ja lukitus
**Suurin nousukorkeus:
14 - 30 cm**



Kokoontaitettava
kantokahva

Kuljetuslukitus

Korkeat ja turvalliset
sivureunat

Rampit

BROADBAND Ray

RAY kokoontaitettavat alumiinirampit, pari 150-210 cm

Mitat: 150/180/210 x 25 cm

Max. 2 x 200 kg

Antislip-pinta, taittosaranat,
kantokahva ja lukitus

Suurin nousukorkeus:
30, 36 tai 42 cm



Kokoontaittuu kahden
saranan avulla



Kokoontaitettava
kantokahva



Kuljetuslukitus



Korkeat ja turvalliset
sivureunat

BROADBAND Defrag

DEFRAG kokoontaitettavat alumiinirampit, pari 180-240 cm

Mitat: 180/210/240 x 76 cm

Max. 2 x 150 kg


Antislip-pinta, taittosaranat, kantokahva ja lukitus.

Turvalukot pitävät rampit kiinni toisissaan
käytön aikana. Välitapit toimivat jalkoina,
kun ramppi on kokoontaitettuna ja
pitävät rampit paikoillaan käytön
aikana.

Suurin nousukorkeus:
36, 48 tai 60 cm



Turvalukko pitää rampit
kiinni toisissaan

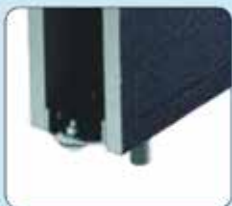

Välitapit toimivat jalkoina
kun ramppi on kokoon-
taitettuna



Kokoontaitettava
kantokahva



Kuljetuslukitus



Korkeat ja turvalliset
sivureunat

**BROADBAND Beam - kokoontaitettava alumiiniluiska**

Tuotenro	Malli	Pituus	Leveys	Nousukorkeus	Paino	Max. kuorm.
805010035	BROADBAND Beam 450	45 cm	71 cm	9 cm	4,1 kg	300 kg

**BROADBAND Spectrum- kokoontaitettava alumiiniluiska**

Tuotenro	Malli	Pituus	Leveys	Nousukorkeus	Paino	Max. kuorm.
805010041	BROADBAND Spectrum 700	70 cm	76 cm	14 cm	6,3 kg	300 kg
805010042	BROADBAND Spectrum 900	90 cm	76 cm	18 cm	7,6 kg	300 kg
805010043	BROADBAND Spectrum 1200	120 cm	76 cm	24 cm	9,5 kg	300 kg
805010044	BROADBAND Spectrum 1500	150 cm	76 cm	30 cm	11,5 kg	300 kg

**BROADBAND Ray - 2 x kokoontaitettava alumiiniramppi / pr**

Tuotenro	Malli	Pituus	Leveys	Nousukorkeus	Paino	Max. kuorm.
805010051	BROADBAND Ray 1500	150 cm	2 x 25 cm	30 cm	2x5 kg	2 x 200 kg
805010052	BROADBAND Ray 1800	180 cm	2 x 25 cm	36 cm	2x5,7 kg	2 x 200 kg
805010053	BROADBAND Ray 2100	210 cm	2 x 25 cm	42 cm	2x6,8 kg	2 x 200 kg

**BROADBAND Defrag - 2 x kokoontaitettava alumiiniramppi / pr**

Tuotenro	Malli	Pituus	Leveys	Nousukorkeus	Paino	Max. kuorm.
805010061	BROADBAND Defrag 1800	180 cm	76 cm	36 cm	2x7,1 kg	2 x 150 kg
805010062	BROADBAND Defrag 2400	240 cm	76 cm	48 cm	2x10,6 kg	2 x 150 kg
805010063	BROADBAND Defrag 3000	210 cm	76 cm	60 cm	2x12,4 kg	2 x 150 kg

Värit ja materiaalit

Alumiini



Musta anti-slip



Testattu ja hyväksytty ISO 11199-2:2005
laatustandardin mukaisesti,
ovat CE-merkittyjä ja täyttävät lää-
kinnällisten laitteiden EU Direktiivin
93/42/EEC vaatimukset.

Pidätämme itsellämme oikeuden
muuttaa tarvittaessa tässä esit-
teessä ilmoitettuja tuotespesifi-
kaatioita. Camp Mobility
© 2020

Valmistaja:
Rehasense Sp.z o.o.
Sulejowska 45
97-300 Piotrków Trybunalski Poland
www.rehasense.com

Yhteystiedot

Camp Mobility
Patamäenkatu 5
33900 Tampere



Tapani Vuorinen
General Manager
+358 44 981 8090
tapani.vuorinen@campmobility.fi



Kai Mustalahti
avainasiakaspäällikkö
Uusimaa, Varsinais-Suomi, Kymenlaakso,
Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa
+358 400 478 220
kai.mustalahti@campmobility.fi



Matti Mikkonen
myyntiedustaja, fysioterapeutti
Pirkanmaa, Kanta-Häme,
Päijät-Häme, Satakunta
+358 400 183 253
matti.mikkonen@campmobility.fi



Ville Valkeejärvi
myyntiedustaja
Uusimaa
+358 45 728 3040
ville.valkeejarvi@campmobility.fi



Jasmin Andersson
myyntiedustaja, fysioterapeutti
Uusimaa
+358 40 9669 289
jasmin.andersson@campmobility.fi



Jari Vitikka
tekninen asentaja
+358 40 579 2239
jari.vitikka@campmobility.fi



Pauliina Pohjonen
tuotepäällikkö
+358 40 143 7299
pauliina.pohjonen@campmobility.fi



Annamari Korpi
Graafinen suunnittelija
+358 44 9745 137
annamari.korpi@campmobility.fi



Matti Antila
varasto, logistiikka
+358 40 159 2591
matti.antila@campmobility.fi

Asiakaspalvelu: 09 350 76 310
Sähköposti: info@campmobility.fi
Varaosamyynti: 09 350 76 312
Sähköposti: varaosat@campmobility.fi



Petteri Tontti
varaosamyynti
+358 400 723 527
petteri.tontti@campmobility.fi



Kaisu Hyttinen
avainasiakaspäällikkö
Pohjois-Savo, Itä-Savo, Etelä-Savo,
Pohjois-Karjala
+358 400 410 865
kaisu.hyttinen@campmobility.fi



Markku Hyttinen
myyntiedustaja
Etelä-Karjala, Keski-Suomi, Kainuu
+358 40 125 4046
markku.hyttinen@campmobility.fi



Taina Kosunen
myyntiedustaja, toimintaterapeutti
Lappi, Pohjois-Pohjanmaa,
Keski-Pohjanmaa
+358 400 185 078
taina.kosunen@campmobility.fi



Teemu Jokihäärä
huoltopäällikkö
+358 400 408 083
teemu.jokihäärä@campmobility.fi



Jussi Vitikka
tekninen asentaja
+358 45 7200 108
jussi.vitikka@campmobility.fi



Piia Parikka
liiketoiminnan kehityspäällikkö
+358 400 138 756
piia.parikka@campmobility.fi



Jarkko Tauria
hankintakoordinaattori
+358 40 510 0147
jarkko.tauria@campmobility.fi



Joona Moisio
varasto, logistiikka
+358 40 147 8705
joona.moisio@campmobility.fi

Support for better life!

www.campmobility.fi