



matrx[®]MAC



MONISÄÄDETTÄVÄ KAAREVA SELKÄOSA

Vaivatonta yksilöllisyyttä





matrx®MAC

Kliinisesti suunniteltu Design

Esittelyssä uuden ajattelutavan selkätuki Matrx® MAC: Uusi säädettävä, muotoiltu selkätuki, johon valittavissa selkäosa halutulla materiaalilla sekä eri syvyiset vartalotuet.

Y K S I L Ö L L I S E S T I S Ä Ä D E T T Ä V Ä

Selkätuki soveltuu usealle erimuotoiselle selälle, eri asteisiin toimintakykyihin. Eri syvyisten vartalotukien korkeutta voidaan säätää yksilöllisesti.

Matrx MAC voidaan konfiguroida yksilöllisesti, mikä lisää sen sopivuutta, parantaa istuma-asentoa sekä käyttömukavuutta.



TARKKA SOPIVUUS

Jokainen tuoteominaisuus on kehitetty kliinisen tiimimme johdolla, tavoitteena tehokkuus, korkea laatu ja tarkka sopivuus. Yhdistele sivutukivalikoimamme kanssa yksilöllisen istuvuuden saavuttamiseksi.



MUKAVA KÄYTTÄÄ

Kaareva muoto ja valittavissa oleva HUG-materiaali mahdollistavat selän uppoamisen tyynyyn, mikä lisää käyttömukavuutta.



TUKEVA

Anatomisesti muotoiltuun Matrx E2 -selkäosaan perustuva Matrx MAC edistää hyvää asentoa ja parantaa luonnollista selkärangan linjausta.

m Yksilöllinen ratkaisu

Matrx® MAC sopii parhaiten pyörätuoleihin, joissa on istuimen ja/tai selkäosan kallistus. Selkäosaan on valittavissa kolmesta eri vaihtoehdosta halutun syvyiset vartaloguet eri puolille.

Halutessaan vartaloguen voi jättää myös toiselta puolelta pois.

KUSTOMOITAVA

3 eri sivutukien syvyyttä ja epäsymmetrinen malli



m Auttaa suoristamaan lievää skolioosia

Posturaalinen epäsymmetria voi haitata sisäelinten toimintaa. Matrx Mac ohjaa luonnolliseen selkärangan asentoon.



SÄÄDETTÄVÄ LEVEYS JA KORKEUS





Valitse Matrix HUG edistyneempään tuentaan

Valittavissa HUG-materiaalia oleva selkäosa, jossa pehmeä ja kehon muotoihin mukautuva Stamina Fibre® -kuitumateriaali, joka lisää upotusta ja peittävyttä.


- Parempi mikroilmastointi ja hengittävyys
- Hypoallergeeninen
- Konepestävä ja helposti kuivattava
- Säilyttää muotonsa

Suositellaan lieviin asentoepäsymmetrioihin

Everyone loves a HUG!

matrix® HUG

SELKÄOSAN PEHMUSTEVAIHTOEHDOT

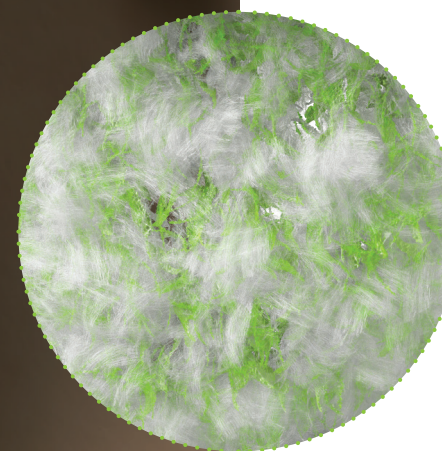

Stamina Fibre®



VAAHTOMUOVI

KAKSIKERROKINEN VAAHTOMUOVI

Super pehmeä/kova HR-vaahtomuovikerrokset tarjoavat mukavuutta ja tukea



HUG

HUG

Pehmeä, mukautuva Stamina Fibre® maksimaaliseen upotukseen ja peittävyteen



Katso tarkemmin

Matrx® MAC:ssa on ergonomisesti muotoiltu kaareva selkälevy, joka perustuu Matrx® E2 malleihin. Lisäksi siinä on lisätty lapatuki, joka on suunniteltu kallistettavien tuotteiden kanssa käytettäväksi.

PÄÄTUEN KIINNIKE

sis. myös HD -kiinnike

KESKIPANEELI

Tuplakerrosvahtomuovi tai HUG
+ Stamina Fibre® (ei kuvassa)

ASENNUSTYÖKALU

Helpottaa asennuskiinnikkeiden ja sivutukien kohdistamista ja linjaamista asennuksen aikana.



MIX & MATCH

Sivutuet ovat vaihdettavissa, joten eri syvyyksisiä profiileja voidaan sekoittaa ja sovittaa erityistarpeiden mukaan.

LEVEYSSÄÄTÖ

Monipuoliset, vaihdettavat sivut ovat itsenäisesti säädettävissä, joka mahdollistaa leveyden säätämisen 3 cm.

SYVYYSSÄÄTÖ

3 eri profiilia =
3 syvyyttä

KORKEUSSÄÄTÖ

Sivutukien korkeutta voidaan säätää itsenäisesti käyttäjän istuessa tuolissa



Asennusosat & Optiot



EASYSET & MINISSET

Vakiona kiinnitysosat joko Miniset (41 cm korkea selkäosa) tai Easyset (46 – 56 cm korkeat selkäosat).
Pikalukitus helpottaa selkänojan irrottamista.



HEAVY-DUTY EASY SET

Suositellaan jos korkea tonus tai raskaaseen käyttöön.



SPLIT

Mahdollistaa tuolin rungon esteiden kiertämisen, pikalukitus 46-56cm korkeisiin selkätukiin.
Pikalukitus helpottaa selkänojan irrottamista.



FIXED

Pysyvä kiinnitys: vaatii työkaluja irrotukseen. Suositellaan kallistettaviin pyörätuoleihin. Sopii 46-56 cm korkeisiin selkätukiin.

Koot

	LEVEYDET				
	41cm	43cm	46cm	48cm	51cm
	Fits W/C 39-46cm	41-48cm	43-51cm	46-53cm	48-56cm
KORKEUDET	41cm				
	46cm				
	51cm				
	56cm				

Tekniset tiedot

- Kulmansäätö40°
- Syvyys säätö10cm
- Sivukien syvyydet 9, 15, 23cm
- Sivukien leveyden säätö 2.6cm
- Sivukien korkeuden säätö20cm
- Päällisen pesu 60°C
- Max. käyttäjäpaino136kg
- Rajoitettu takuu2 vuotta



Matrix MAC varustettu Matrix Loox päätuella Invacare Rea Azalea -pyörätuolissa



Asiakkaan kuljettamiseen käytettävät Matrx® MAC -selkätuet pitää varustaa niska-/päätuella, ja niitä saa käyttää vain tuotteiden kanssa, jotka täyttävät RESNA WCI9:n tai ISO 7176-19:n vaatimukset.



[invacare.eu.com](https://www.invacare.eu.com)

© 2024 Invacare International GmbH. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikkien ilmoitettujen tietojen uskotaan olevan oikeita painohetkellä. Invacare varaa oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä tietoja ilman ennakoilmoitusta. EU – 06/24