

matrx[®]
SEATING SERIES

E2 Back Series



Invacare[®] **Matrx[®] E2[™] Back Series**

INNOVATION | COMFORT | FREEDOM



Asentotukea itsenäiseen liikkumiseen

Uudet **Elite E2 selkäosat**, istuinjärjestelmien viimeisimmät innovaatiot, tarjoavat maksimaalista asentotukea heille, joilla liikkumiskyky on alentunut. Vaivaton asennus pyörätuolin selkäputkiin asennustappien avulla.

Elite E2 selkäosa on nyt saatavana myös laajempi kokovalikoima leveyksiä ja korkeuksia, jolla mahdollistetaan parempi istuvuus. Uusi Ripple Foam teknologia pehmusteissa tarjoaa paremman lämmönsäätelyn/hengittävyuden ja paremman upotuksen selkätukeen joka lisää istuimukavuutta ja tukea kelaukseen.

Ergonominen Design

Uusi ergonominen muotoilu lisää tukea ja paineen jakautumista ja varmistaa tarkemman ja mukavamman istuvuuden. Uusi design ja kaareva muoto tukee lantiota, lisää vakautta ja tasapainoa ja toisaalta antaa lisää tilaa lantion alueelle.



Selkälevy

- Suuremmat aukot ilmavirtaukselle
- Pystysuorat lovet kiinnikkeiden liittämistä varten
- Lovi häntäluun kohdalla
- Valmiit porausrei'ät PostureFlex-vatsatukivyyön kiinnittämistä varten



Ripple Foam teknologia

Ripple foam selkäosapehmusteen aaltoileva vaahtopinta parantaa ilmavirtausta, hengittävyttä, lämpötilan hallintaa ja vähentää kosteutta. Erittäin joustava vaahto tarjoaa helpotusta selkärangan painealueille, tarjoaa paremman upotuksen ja istuvuuden ja vähentää hankausta.



Päällinen

- Kosteuttapitävä ja hengittävä Meshtex™ ulkopäällinen.
- Pehmuste ja päällinen jatkuvat selkälevyn yli ja antavat paremman suojan ja istuimukavuuden.



Mounting Pin kiinnitysosat

Selkätuet asennetaan pyörätuoliin ja kiinnitetään helposti säädettävien asennustappien avulla. Joustavat kiinnitysosat on suunniteltu sopimaan eri vartalo-tyypeille eri kokoisille käyttäjille ja erilaisiin pyörätuoliin. Säädöt voi tehdä jopa käyttäjän istuessa pyörätuolissa. Kiinnitysosat voidaan asemoida niin, etteivät ne häiritse rungon eri osia kuten käsitukia, selkäosantukitankoa tms.



Asennustapit

- Korkeus- ja leveys säädettävät
- Sama leveys kun pyörätuolin istuinleveys tai 2.5 cm leveämpi tai kapeampi
- Korkeutta voidaan säätää myös käyttäjän istuessa pyörätuolissa.
- Kiinnitysosat voidaan asentaa niin ettei osu käsitukiin selkäosan tukitankoihin tms.
- MiniSet vakiona korkeuksiin 41cm asti, EasySet vakiona korkeuksiin 46/51cm

The Matrix E2 Selkäosat

saatavana kaksi syvyyttä



Tuote- Spesifikaatit:

- Leveydet: 36/38/41/
43/46/48/51cm
- Korkeudet: **UUSI**
15/20 /26/31/36/41/
46/51cm
- Max. paino-
kapasiteetti: 136 kg

▲ E2 Back

E2 Standard - 8cm syvyys

▲ E2 Deep Back

E2 Deep - 15cm syvyys



Easy Fix Sivutuet


- Kiinteät sivutuet voidaan asentaa selkälävyn sisään tai ulkopuolelle
- Säädettyvä korkeus, liikuteltavissa pystysuorassa urassa
- Sopii E2 Standard: 26 cm ja korkeammat



Swing Away Sivutuet

- Standard: 26 cm ja korkeammat
Offset: 31cm ja korkeammat
- Saatavana 4 kokoa:
XS / S / M / L

Asennus sisään Asennus ulkopuolelle

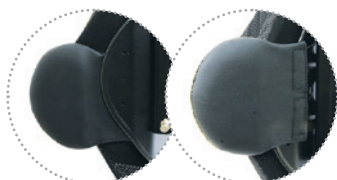

Valikoima lisävarusteita:



▲ BackBone

Ristiselkä-lantiotuki tukee lantiota ja parantaa pystympää istuma-asentoa

- Muotoiltu anatominen PSIS/Sacro-lumbar alueen tuki.
- Voidaan muotoilla halutun kokoiseksi.
- Muotoonvalettu silmukka-kiinnitys selkävyyden kiinnittämistä ja helppoa säätöä varten.



▲ Matrx Protect Slip -päällinen

Suojaa selkäosaa. Voidaan pyyhkiä puhtaaksi desinfiointiliinoilla paremman hygienian saavuttamiseksi. Helppo pukea ja riisua pesun ajaksi.



▲ PostureFlex -vatsatukivyy

Suunniteltu lisäämään vatsan tukea. Paine parantaa hengitys- ja äänikontrollia. Tarjoaa hyvän pystymän asentotuen, joustava stretch-materiaali helpottaa toiminnallisia aktiviteetteja.

Helppokäyttöinen avainreikäkiinnitys

- 3 asennuskorkeutta: esiporatut reiät selkävyyssä
Saatavana 2 kokoa:
M / L
- Optiona "quad release tab" PostureFlexin kiinnittämiseksi ja irrottamiseksi helposti ja itsenäisesti



▲ Päätuen kiinnityslevy

Kevyt ja matalaprofiilinen päätuen kiinnityslevy voidaan asentaa ilman päällisen irrotusta. Sisältyy kaikkiin 36 cm ja sitä korkeampiin selkäosiin.

Optiona extra vahva teräs päätuen kiinnityslevy erittäin tonuksisille ja HD käyttäjille.



▲ Hartiaturvavöiden kiinnityslevy

Hartiovöiden tarkkaan aseointiin.

Mallit:

E2CHI-S: 36/38cm W selkäosat

E2CHI-M: 41-51cm W selkäosat



▲ Matrx Privacy Flap -suojapeite

Voidaan kiinnittää selkäosaan valmiiksi ommellulla tarranauhalla, joka sijaitsee päällisen takaosassa.

Saatavana 4 kokoa:

XS / S / M / L

Valikoima eri kiinnityssarjoja ▾

erilaisiin ratkaisuihin ja parempi yhteensopivuus eri pyörätuolien kanssa:

Vakiokiinnityssarjat:



MiniSet:

- Vakiona kaikissa E2/E2D selkäosissa korkeuteen 41 cm asti



EasySet:

- Vakiona kaikissa E2/E2D selkäosissa korkeudet 46 cm & 51 cm

Vaihtoehtoiset kiinnityssarjat:



Kiinteä MiniSet:

- Pysyvä kiinnitys. Vaatii työkaluja irrottamiseen. Suositellaan tuoleihin jossa tility/selkäosankallistus -toiminnot.
- Optiona E2/E2D korkeuteen 41cm asti



Kiinteä EasySet:

- Pysyvä kiinnitys. Vaatii työkaluja irrottamiseen. Suositellaan tuoleihin jossa tility/selkäosankallistus -toiminnot.
- Optiona E2/E2 Deep selkäosiin, joissa Easy Set kiinnikkeet. Kiinnitys vain asennustapilla (korkeudet 46 & 51cm)



Split:

- Lisää tilaa rungon osille, QR-pikalukitus
- Optiona E2/E2D selkäosiin jossa Easy Set. Kiinnitys vain asennustapilla. Ei sovi MiniSet -kiinnitykseen.



Heavy-Duty MiniSet:

- Suositellaan erittäin spastisille (korkea tonus) ja HD-käyttäjille.
- QR-pikalukitus



Heavy-Duty EasySet:

- Suositellaan erittäin spastisille (korkea tonus) ja HD-käyttäjille.

Säädöt: Kulma (40°) ja syvyys (5 cm eteen tai taakse), voidaan säätää rotaation lisäämiseksi.

Kiinnikkeet: 2.5 cm runkoputkille. Kiinnikkeet 1.9 cm ja 2.2 cm runkoputkille kuuluu toimitukseen.

Istuinratkaisujen tuoteperhe

Invacare tarjoaa myös täydellisen valikoiman muita istuintuotteita täydentämään E2-selkätukea.



Bodypoint turvavyöt



Invacare Matrix® Libra istuintuotteen



Invacare Matrix® Elan Päätuoli



Tel: +41 61 487 70 70
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com

Invacare International GmbH
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil
Switzerland



Yes, you can.®

© 2020 Invacare International GmbH. All rights reserved. All information quoted is believed to be correct at time of print.

Invacare reserves the right to alter product specifications without prior consultation. Matrix E2 Back - EU - 05/2020