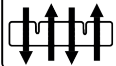


VICAIR®

Vicair®

Selkäosat**PRESSURE
ULCER
TREATMENT****100%
BREATHABLE****BOXING
EFFECT****READY FOR USE**

Vicair®-selkäosat – optimaaliset ratkaisut asentohoitoon ja painehaavojen ennaltaehkäisyyn

Vicair®-selkäosat tarjoavat ainutlaatuisen yhdistelmän paineentasausta, istuimukavuutta ja optimaalista asentohoitoa, jopa korkean painehaavariskin potilaille. Tyynyt on jaettu itsenäisiin osioihin, joiden solujen tiheyttä voi käyttäjän muotoihin yksilöllisesti

sopivaksi ja näin mahdollistaa korkealaatuinen istuma-asento.

SmartCells™-soturakenne takaa dynaamisen istuinasennon, jota voidaan säätää yksilöllisesti asentoepäsymmetrioiden mukaan.

CAMP®
MOBILITY

Ominaisuudet



SmartCells™

Ainutlaatuinen SmartCells™ -solurakenne

Vicair-selkäosien pehmusteet tarjoavat innovatiivisen lähestymistavan istuin-asennon ja vartalon tuentaan: Jokainen selkäosatyyppi koostuu samoista **SmartCells™**-soluista, jotka ovat pieniä ilmatäytteisiä, pyramidin muotoisia soluja, jotka on jaettu istumisen kannalta strategisesti merkittäviin "osastoihin" tyynyn sisällä. Joustavat, kangaspäällysteiset solut aiheuttavat vain vähän hankausta kosketuksissa toisiinsa ja adaptoituvat jatkuvasti vartalon muotojen mukaisesti.

Optimaalinen, painetta tasaava istuma-asento jopa korkean painehaavariskin potilaille

Korkealuokkaisen paineen vähennyksen lisäksi, tyyntä tarjoavat miellyttävän selkätuennan ja erittäin hyvän istuma-asennon. Tämän ansiosta Vicair-tuotteet soveltuvatkin myös erittäin korkean painehaavariskin omaaville potilaille.

Kevyt ja helppohoitoinen

Innovatiivisen designin ansiosta Vicair-selkäosat ovat turvallisia, kevyitä ja helppoja huoltaa. **SmartCells™** solut ei hajoa eikä pehmusteen puhkeamista tarvitse pelätä. Yksittäinen osio voidaan vaihtaa helposti ilman, että koko selkäosaa tarvitsee uusia. Kun selkäosa on kerran säädetty käyttäjän tarpeiden mukaiseksi, ei terapeuttien tarvitse jatkossa juurikaan puuttua säätöihin eikä päivittäisiä tarkistuksia tarvita. Ultrakevyet selkäosat ja istuintyyntä on helppo vaihtaa tuolista toiseen, mikä tekee niistä erityisen soveltuvia aktiivisille käyttäjille.

Liberty



- Helppo asentaa useimpiin (myös kokoontaitettaviin) pyörätuoliin.
- Adaptoituu automaattisesti muutoksiin ja kokoontaittuvaan selkäosaan.
- Erinomainen käyttäjille, joilla selkäkipuja.

Vicair Liberty selkäosan avulla muutat standardipyörätuolin selkäosan mukavuus-selkäosaksi. Yhdessä helposti asennettavan Vicair Strap backin kanssa, tyyntä tarjoaa täydellistä kivunlievitystä ja hienovaraisesti seuraa ja tukee anatomisia ja posturaalisia epäsymmetrioita. Erittäin kevyt selkäosa on helppo

kuljettaa, koska sen voi pitää kiinni tuolissa vaikka pyörätuoli olisi kokoontaitettu. Helppo ratkaisu mukavuuden ja tuen lisäämiseksi.

INDIKAATIOT: Skolioosi, Kyfoosi, Lordoosi, Gibbus, kivun lievitys

KOOT: 3 kokoa:
36-40, 40-44 ja 44-48 cm
PAINO: 450 g

Anatomic Back



- Optimaalista asentohoitoa SmartCell-solujen ja Strap backin avulla.
- Keventää selkärankaan kohdistuvaa painetta.
- Muovautuu dynaamisesti käyttäjän selän muotojen mukaiseksi.

Vicair Anatomic back on mukavuutta lisäävä universaali selkäosa, joka mahdollistaa optimaalisen asennon ja korkean riskin painehaavojen ennaltaehkäisyn ja paineen tasauksen. Heti käyttövalmis,

muotoutuu dynaamisesti käyttäjän selän muotojen mukaan, mutta mahdollistaa myös suuren valikoiman yksittäisiä säätöjä. Säädöt voidaan tehdä käyttäjän istuessa pyörätuolissa. Kevyt selkäosaa käytetään yhdessä helposti asennettavan Vicair Strap backin kanssa, ja sitä voidaan käyttää myös pyörätuoleissa, joissa ei ole yhtenäistä selkälevyä. Sopii käytettäväksi (jopa vaikean)

skolioosin omaavilla potilailla. Anatomic back seuraa epäsymmetrisiä selänmuotoja ja pitää asennon vakaana ja turvallisena.

INDIKAATIOT

Skolioosi, Kyfoosi, Lordoosi, Neuromuskulaariset sairaudet, Selkäydinvamma, painahaavaukset selkä / selkäranka / olkapää / hartiat, kivun lievitys

KOOT: Leveydet 32-56 cm

PAINO: 900 g

Multifuntional O2



- Optimaalinen upotus, jos pyörätuolin selkäosassa on kova selkälevy.
- Helppo säätää käyttäjän istuessa pyörätuolissa
- Optimaaliset paineentasausominaisuudet.

Multifuntional O2:n erinomaiset paineentasaus- ja istuinmukavuusominaisuudet tekevät siitä erinomaisen ratkaisun moniin eri käyttötarpeisiin. Selkäosaa voi-

daan käyttää monenlaisten istuinjärjestelmien kanssa ja kokoontaitettavissa pyörätuoleissa, joissa on säädettävä istuinsyvyys. Tyyny voidaan helposti kiinnittää kiinteisiin selkälevyihin Velcro-tarranauhan avulla. Tyyny mukautuu automaattisesti kehon muotojen mukaisesti, mutta sitä voidaan myös säätää optimaalisen asennon saavuttamiseksi käyttäjän istuessa

pyörätuolissa. Lisävarusteena saatavana myös päätukityyny mukavuuden ja paineentasauksen lisäämiseksi.

INDIKAATIOT: Neuromuskulaariset sairaudet, Skolioosi, Kyfoosi, Lordoosi, Gibbus, Quadriplegia, kivun lievitys, soveltuu geriatriseen käyttöön

KOOT: Leveydet 36-60 cm

PAINO: 975 g

Koko tyyny (sisäosa ja päällinen) voidaan pestä pesukoneessa+60°C

Flex Back



- Optimaalinen upotus, jos pyörätuolin selkäosassa on kova selkälevy.
- Sivutuet (optio) antaa lisätukea
- Optimaaliset paineentasausominaisuudet

Vicair Flex Back on alunperin Invacaren Flex-selkäosan kanssa (Clematis Azalea yms) käytettäväksi kehitetty selkäosatyyppi, jossa on sisäänrakennetut late-

raaliset tuet ja johon on mahdollista lisätä optiona saatavat lisätukea antavat sivutuet.

Flex Backin avulla voidaan saavuttaa miellyttävä istuma-asento, esim. posturaalisista epäsymmetrioista kärsiville asiakkaille, silloin kun muut selkäosat eivät käy.

Flex Back selkäosassa on 13 eri **Smart Cells™** -soluilla täytettävää osiota, joilla voi

esim. keventää painetta selkärangan ympäriltä vähentämällä soluja tyynyn keskiosasta.

INDIKAATIOT: Skolioosi, kyfoosi, neuromuskulaariset sairaudet, selkävainat, selkään/selkärankaan/olkapään kohdistuva paine, kivunlievitys, korkean riskin painehaavojen ennaltaehkäisy.

KOOT: 3 kokoa:
41, 45 tai 50 cm x 55 cm
PAINO: 900 g

Tekniset tiedot



Liberty: 36-40,
40-44, 44-48 cm
Anatomic: 32-56 cm
Multifunctional O2:
36-60 cm
Flex 41, 45, 50 cm



Liberty: 450 g
Anatomic: 900 g
Multifunctional: 975 g
Flex: 900 g



150 kg



Päällinen 60°
Pehmuste ja
SmartCells
käsinpesu
O2 konepesu

Päälliset



Comfair-päällinen

Joustava, hengittävä ulkopäällinen antaa ilman kierrätystä, lisää istuimukavuutta ja vähentää kosteutta ja kuumentumista.

Inkontinenssipäällinen

Joustava, kosteuttaläpäisemätön, höyryn läpäisevä päällinen pyyhittävällä pinnalla.

3D Mesh Spacer-päällinen

Joustava, hengittävä ulkopäällinen antaa ilman kierrätystä, lisää istuimukavuutta ja vähentää kosteutta ja kuumentumista.



Valmistaja:
Vicair B.V.
Bruynvisweg 5
1531 AX Wormer
The Netherlands
+31 (0)75 - 642 9999

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2020 Camp Mobility Finland