


"Ammattiympäristössä  
käytettävien hoitosänkyjen  
tulee todistaa toiminnalli-  
suutensa joka päivä."

Practico 25|80

.bock<sup>®</sup> ///



Kuvassa vakioväri Sonoma Oak  
Muut värit saatavana optiona tilauksesta

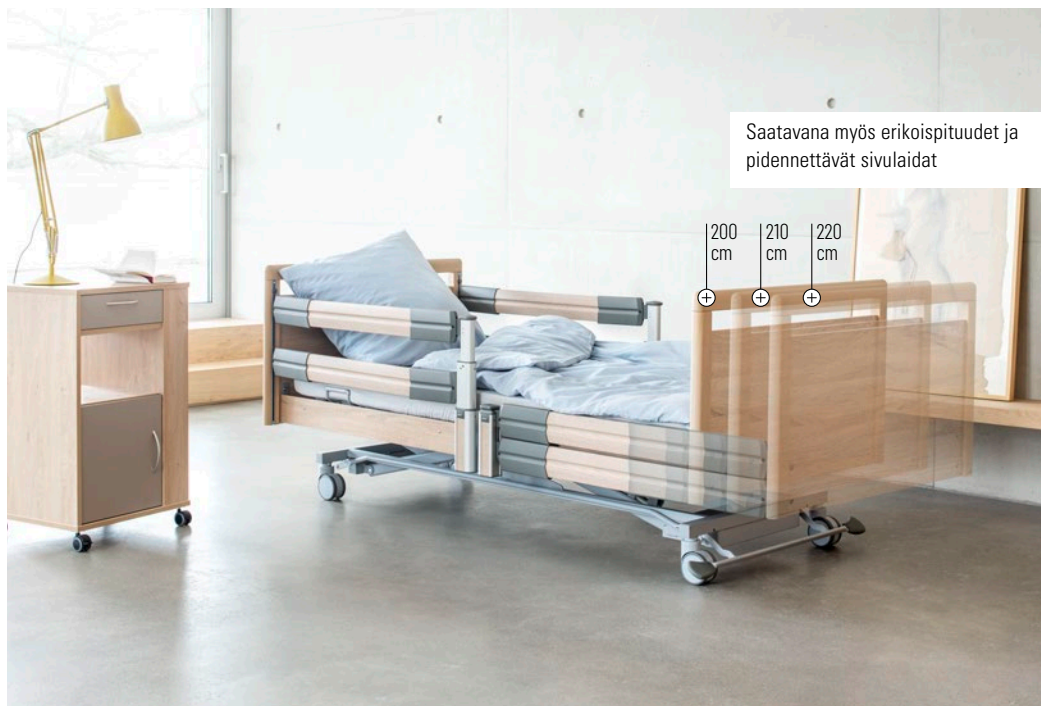

Saatavana myös erikoispituudet ja pidennettävät sivulaidat

200 cm  
210 cm  
220 cm



Mukavuus ja turvallisuus edellä: Suuret kaksoispyörät keskus- ja suuntalukituksella. Valinnaisesti saatavana myös kodikkaat alumiinipäällysteiset pyörät

## Hoitosänky, joka asettaa uudet standardit joustavuudelle ja käytännöllisyydelle Practico 25 | 80

Joustavien ratkaisujen asiantuntijana bock asettaa mittapuun kotihoitosänkyjen standardivaatimuksille. Uusiutunut Practico 25 | 80 tarjoaa 4-osaisen makuupinnan, patjan kompensoinnin ja ergonomisen selkänöjan ansiosta käyttäjilleen mukavan ja fysiologisen istuma- ja makuuasennon. Parhaan hoidon ja turvallisen nukkumisen takaamiseksi sängyssä on laaja korkeussäätö 25-80 cm välillä ja sitä voidaan helposti säätää monin tavoin selkeän käsiohjaimen avulla.

### Practico 25 / 80 Plus - vakiona pidennettävä makuualusta ja sivulaidat

Toinen joustavuuden lisätekiä on Plus mallissa vakiona oleva integroitu pidennettävä makuualusta ja sivulaitojen jatke (SR3:lla). Se mahdollistaa yksittäisten säätöjen tekemisen hetkessä. Plus mallissa pidennetty makuualusta ja pidennettävät sivulaidat 210 tai 220 cm voidaan säätää hetkessä ilman mitään lisäosia. Perusmallissa pidennysosat pitää tilata erikseen.

Saatavilla myös laaja valikoima lisävarusteita ja varustevaihtoehtoja, kuten käytännöllinen vuodevaateteline tai sänkyvalaisimet.




Lisää mukavuutta ja hoitajalle esteettömyyttä matalalla jalkopäädyllyä


# Ergonomisesti optimoitu makuualusta

Paranneltu practico 25|80 makuualusta täyttää selkeästi määritellyn laitoshoidon laatuvaatimuksen: mukava ja ergonomisesti optimoitu käyttömukavuus sopivalla selkäosan pituudella.

- ⊕ 4-osainen makuualusta tarjoaa ergonomisen selkänojan ja patjan pituuskompensointia, jotka molemmat varmistavat mukavan ja fysiologisesti järkevän istuma-asennon ja vähentävät painehuippuja. Selkänojan pituuskompensointi on 11 cm.
- ⊕ Erilaiset istuma- ja makuuasennot sekä erilaiset makuualustajärjestelmät tarjoavat yksilöllisempää makuumukavuutta.
- ⊕ Integroidut, työkaluvapaasti koottavat sänky ja sivulaidat (SR3) mahdollistavat helpon ja nopean säätämisen asukkaan kehon koon mukaan.
- ⊕ Erittäin vakaa selkäosa sopii myös intensiiviseen käyttöön
- ⊕ Erilaisia säätömahdollisuuksia, kuten Trendelenburg, Anti-Trendelenburg ja mukava istuma-asento, voidaan valita yhdellä painikkeella käsiohjaimesta.

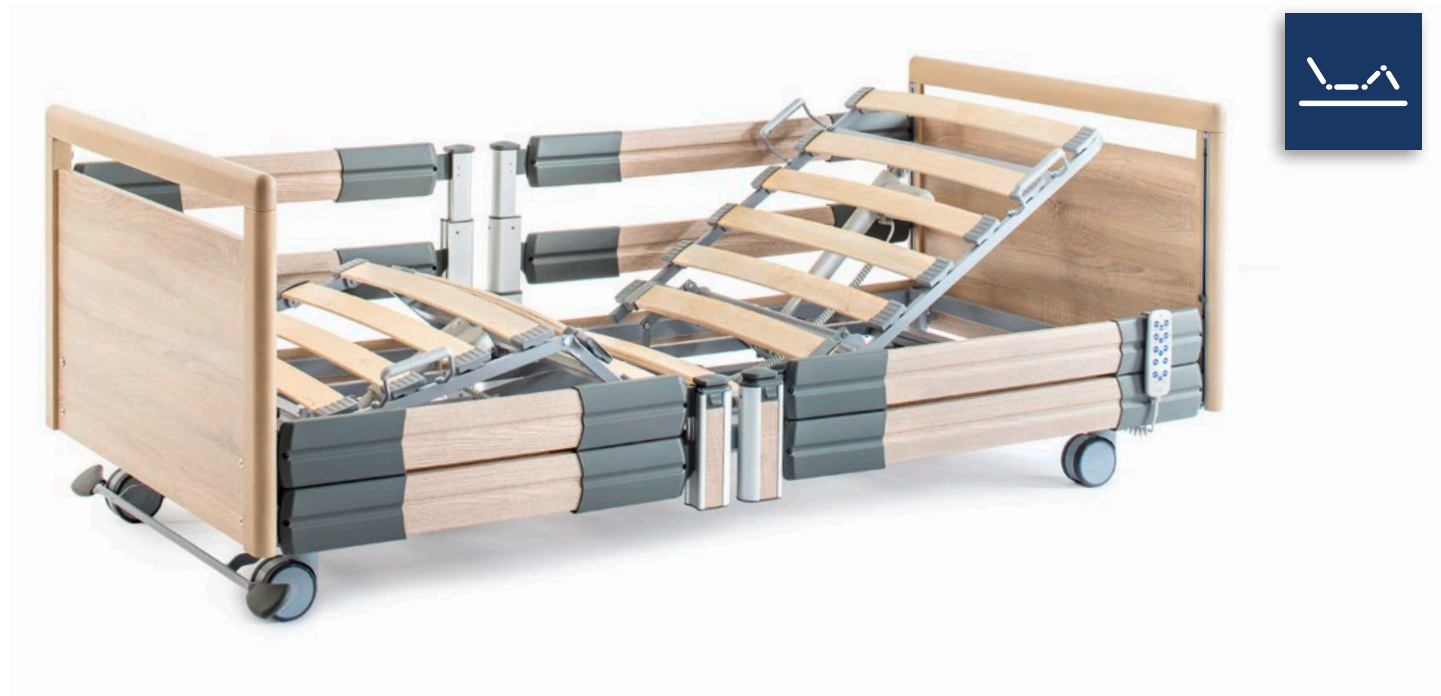

## Makuualusta

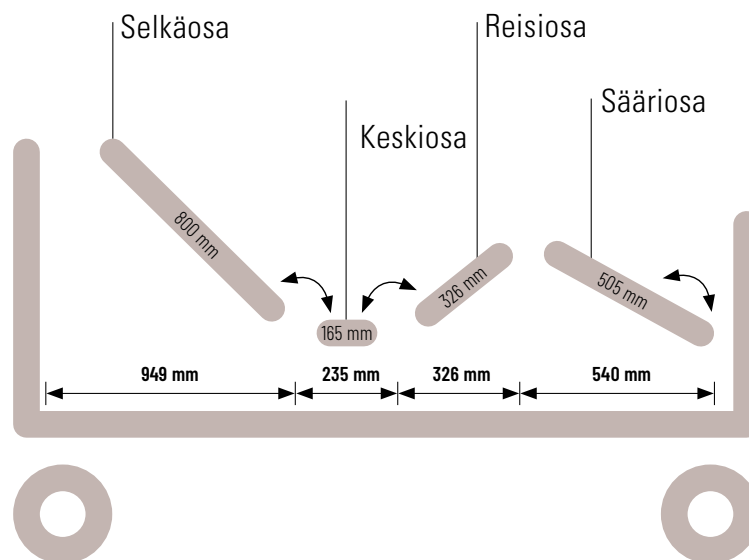

# Practico 25|80


## Edut ja hyödyt käyttäjälle:

- ⊕ Ergonominen selkänöja ja patjan pituuskompensointi mukavaan ja fysiologiseen istuma-asentoon
- ⊕ Turvallinen makuu matalalla, vain 25 cm korkeudella
- ⊕ Kolme erilaista makuualustajärjestelmää yksilölliseen makuumukavuuteen (s.8)

Kaikenlaiset yksilölliset makuu- ja istumasäädöt ovat mahdollisia, esimerkiksi mukava istuma-asento.

## Edut ja hyödyt hoitajalle:

- ⊕ Optimaalinen työskentelykorkeus 80 cm
- ⊕ Kaksiosaiset ergonomiset SR3 sivulaidat helpottaa siirtymisiä
- ⊕ Suuret kaksoispyörät, joissa keskuslukitus ja suuntalukitus helpottaa liikuttamista ja lukitsemista

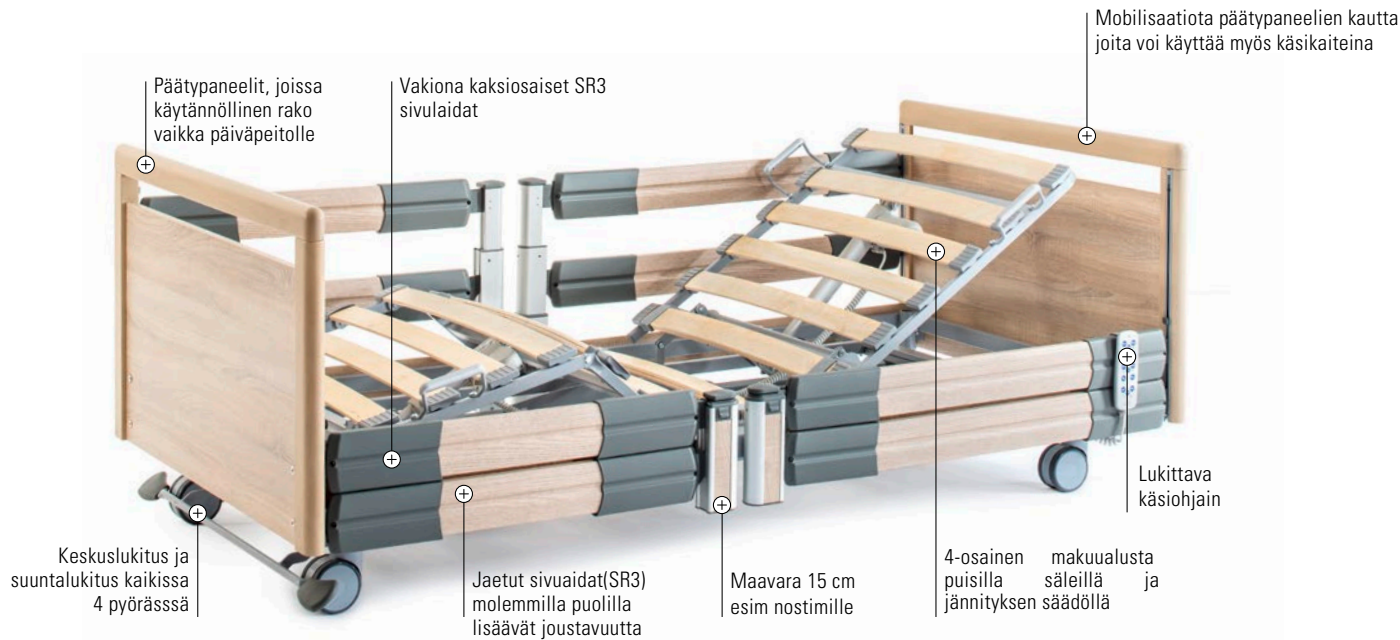

More information  
[www.bock.net](http://www.bock.net)

practico 25   80	
Dimensions	
Ulkomitat	105 × 210 cm
Makuualusta	90 × 200 cm
Erikoismitat	Leveydet 100, 105, 110 cm
Erikoispituudet	210 ja 220 cm
Korkeudensäätö	25 – 80 cm
Maavara	15 cm
Painotiedot	
Sängyn paino	n. 140 kg
SWL	220 kg
Max. käyttäjäpaino	185 kg
Sivulaitavaihtoehdot	
Järjestelmät	SR1, SR2 tai SR3 (s.9)
Versiot	Yhtenäiset 2-osaiset Vain pääosa ilman laitoja
Korkeus*:	
- puusivulaidat	39.5 cm
- ripolux® neo	35 cm
Muita varusteluvaihtoehtoja	
Päätyvaihtoehdot	I+, V+, VII+, VIII+
Moottori	
Roisketiivis IPX4:n kosteusluokan mukainen, korkealaatuinen kierrekaapeli vedonpoisto- ja roiskesuojalla, SMPS-pistokemuuntaja erittäin alhaisella turvajännitteellä, joka tarjoaa suojan pistorasiasta tulevalta iskulta OPTIONA: CPR hätälaskutoiminto	
* Makuualustan yläreunan ja korotetun sivulaidan yläreunan välinen etäisyys (SR3)	
<b>i</b>	
Tuotetiedot, päätypaneelit ja lisävarusteet löytyvät sivulta 10 eteenpäin.	

# Optiona Plus-malli: pidentettävät makuualusta ja sivulaidat vakiona

Practico 25|80 Plus on varustettu pidennettävällä makuualustalla ja sivulaidoilla. Makuutasoa ja sivukaiteita voidaan pidentää 10 tai 20 cm. Erityisesti pitkät käyttäjät nauttivat tästä ergonomisesta mukavuudesta ja hoitoalan ammattilaiset työskentelevät mahdollisimman joustavasti ilman, että sängyä tarvitsee muuttaa aikaa vievällä ja kalliilla tavalla. Pidennä vain - siinä se - that's it.

- ⊕ Erityinen mukavuutta lisäävä ominaisuus sängyn käyttäjille on makuualustan pidennys: jatkopala liikkuu automaattisesti mukana kun makuutasoa alaosaa säädellään, joten jalat ja jalkaterät lepäävät mukavasti koko ajan.
- ⊕ Hoitajat voivat nopeasti ja helposti säätää sängyn pituuden asukkaiden erilaisiin tarpeisiin ja hoitotilanteisiin. Tämä eliminoi aikaa vievät sängyn ja/tai sivulaitojen vaihdot.

**Pidennyssarja voidaan tilata optiona jokaiseen sänkyyn. Setti koostuu:**

- ⊕ *Pidennyssetti makuualustan pidentämiseksi*
- ⊕ *Kaksi pidennysspalaa sivulaitojen pidentämiseksi*

\* SR3 sivulaidat

Ruuvi työkaluvapaan pidennysosan asentamiseksi

**1** Löysää ruuvit ja vedä esiin pidennysosa - helppoa ja vaivatonta.

**2** Kiinnitä kaksi sivulaitojen jatketta ja työnnä jalkapäätypaneeli takaisin niin, että se sulkeutuu sivulaitojen avulla.

**3** Aseta makuualustan jatke paikalleen. - nopeaa ja helppoa,

**4** Kun jalkaosaa säädetään makuualustan jatke liikkuu mukana automaattisesti.


**5** Sopivalla patjan jatkopalalla koko järjestelmä on optimaalisesti pehmustettu.

**6** Vaihtoehtoisesti patjan jatke voidaan yksinkertaisesti jättää pois kantapäihin kohdistuvan paineen vähentämiseksi.

# Yksilöllisesti konfiguroitava: 3 eri makuualustavaihtoehtoa



## Puusälepohja jännitteen säädöllä

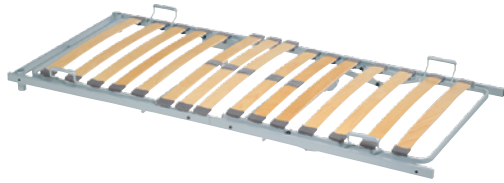

### Vakio makuualusta

Bockin puusäleissä on vakiovarusteena kireyssäätö. Makuupinnan keskellä oleva jännityksen säätö takaa korkean mukavuuden erityisesti istuma-asennossa. Puset säleet on asennettu joustaviin ja kestäviin luonnonkumipidikkeisiin. Tämä mahdollistaa helpon vaihdon tarvittaessa.

### Edut käyttäjälle:

- ⊕ Mukava ja ergonominen

### Edut ja hyödyt hoitajalle:

- ⊕ kestävä ja helppo puhdistaa

## Alumiinisälepohja



### Clip-on alumiinisäleillä

Moderni makuualusta mahdollistaa nopean ja yksilöllisen paineenpoiston yksilöllisesti irrotettavien alumiinitankojen ansiosta. Tukevat tangot voidaan helposti irrottaa, puhdistaa ja asentaa uudelleen. Tämä makuualusta voidaan muuttaa ripolux® neo -järjestelmäksi milloin tahansa irrottamalla alumiinisäleitä ja asettamalla yksittäisiä ripolux® neo -jousia.

### Edut käyttäjälle:

- ⊕ Irrotettavien säleiden ansiosta makuupinta voidaan säätää yksilölliseen paineenkevennykseen

### Edut hoitajalle:

- ⊕ Erittäin kevyt materiaali
- ⊕ Vakaat alumiinitangot, pestävät ja kestävät, koska huuhteluaine ei imeydy materiaaliin

## ripolux® neo



Vakiokokoonpanossa kaksi eri kovuusastetta: tummanharmaa kova ja vaaleanharmaa medium. Pyynnöstä: pehmeä versio sininen

### Yksi makuualustajärjestelmä, joka sopii jokaiselle

Joustava ripolux® neo makuualustajärjestelmä mukautuu tarkasti kehon paineen jakautumiseen, mikä takaa mukavan ja ergonomisen asennon kaikissa istuma- ja makuuasennossa.

### Edut käyttäjälle:

- ⊕ Vakiona jouset kahdella eri kovuusasteella yksilölliseen makuumukavuuteen. Pyynnöstä saatavana myös pehmeä jousi (sininen)
- ⊕ Paineen kompensointi itsenäisten ja tarkasti taipuvien jousien ansiosta

### Edut hoitajalle:

- ⊕ Työkaluton ja yksilöllinen makuupintarakenne
- ⊕ Ei kosteuden imeytymistä ja ihanteellinen ilmanvaihto



Laatu: Helposti puhdistettavien pintojen ulkonäkö ja moderni muotoilu luovat kodikkaan tunnelman - samalla kun kestävät materiaalit tarjoavat äärimmäistä vakautta.



# Yksilöllisesti konfiguroitava: 3 sivulaitavaihtoehtoa

## SR1



- ⊕ Sileä ja helppo käsitellä, pehmeä lukitus
- ⊕ Erittäin joustava 3 eri pituuden ansiosta.
- ⊕ Taaksepäin yhteensopiva valittujen sänkymallien kanssa
- ⊕ Kompakti kokonaiskorkeus
- ⊕ Optimaalinen haptisuus
- ⊕ Hienovarainen ja suora muotoilu
- ⊕ Täyttää täysin standardin DIN EN 60601-2-52 vaatimukset



## SR2



- ⊕ Taittuu kokonaan alas
- ⊕ Yksinkertainen muotoilu
- ⊕ Helppo käsitellä kevyen painon ansiosta
- ⊕ Nopea asennus sänkyyn
- ⊕ Nopea, helppo ja intuitiivinen käyttö
- ⊕ Täyttää täysin standardin DIN EN 60601-2-52 vaatimukset



## SR3



- ⊕ Suuri valikoima vaihtoehtoja ja eri värejä
- ⊕ Saatavana myös pidennettävät sivulaidat
- ⊕ Vuosien käyttäjäkokemukset
- ⊕ Puikeat väriset sivulaidat luovat kodikkaan tunnelman
- ⊕ Lisävarusteena lukittavissa alimpaan asentoon
- ⊕ Täyttää täysin standardin DIN EN 60601-2-52 vaatimukset



# Lisävarusteet

Yksilölliseen ja tilanteeseen sopivaan sänkyvarusteluun:

## Nousutuet



### Kohottautumisteline

Art. no. 92228 A001



### Nousutuki

Art. no. on request

## Valaisimet



### LED vuodevalaisin malli G

KytKentä ohjausrasiaan,  
ohjataan käsihjauksella Art. no.  
100.04164



### LED vuodevalaisin malli E

ulkoisella virtalähteellä ja  
kytkimellä  
Art. no. 207.00196



### Valaisin sängyn alle

KytKentä ohjausyksikköön,  
käyttö käsihjaimella.

## Universal pidikkeet



### Drainage bag holder

Art. no. 890.02299



### Urine bottle holder

Art. no. 890.02298

## Tippatelineet



### Tippateline kulmalla (ei sääd.)

Art. no. 890.02301



### Tippateline (korkeussäädettävä)

Art. no. 890.02302



### Tippateline kohottautumistelineeseen

Art. no. 890.02300

# Lisävarusteet

Yksilölliseen ja tilanteeseen sopivaan sänkyvarusteluun:

## Törmäyssuojat



**Törmäyssuojat  
pyörillä**

Pituus: 500 mm



**Törmäyssuojat  
tulilla**

Pituus: 500 mm

## Makuualustan pidennysosat



**Settiin kuuluu:**

- Kiinnike makuualustan jatkamiseksi
- Kaksi jatkoelementtiä rungon sivupaneelin jatkamiseksi



**Patjan pidennyspala**

Pituus: 20 cm

## Muita lisävarusteita



**Kuljetusteline**

Art. no. 100.04161



**Alumiinipäällysteiset pyörät**



**Itsevalaiseva käsiohjain**



**Sekundaarinen käsiohjain**

vuodevalaisimien ohjaamiseen



**Hoitajan ohjauspaneeli**



**Akkujärjestelmä**

Ladattava vara-akku toiminnan varmistamiseksi, esim. sähkökatkon sattuessa

**Mekaaninen  
pääosan  
CPR-hätälasku**

# Päädyt



## Typ I plus

- Reunoja kiertävät massiivipuulistat koristetytteellä
- Aukko päädyssä toimii myös käsijohteena



## Typ I plus low

- Reunoja kiertävät massiivipuulistat koristetytteellä
- Kotoisa Design
- Matala malli esim jalkopäässä helpottaa hoitotoimenpiteitä



## Typ V plus

- Kaareva sisustuspaneeli: massiivipuuta
- Sivulle asennetut suorakaiteen muotoiset reunat: massiivipuuta
- Kaareva käsikaide: pulverimaalattua terästä



## Typ VII plus

- Reunoja kiertävät massiivipuulistat koristetytteellä
- Kaarrettu aukko päädyssä toimii myös käsijohteena



## Typ VIII plus

- Suorakoriste-paneeli: Puuta
- Sivulle asennetut suorakaiteen muotoiset reunat: massiivipuuta



## Vuodevaatteiden pidike

- päätyihin I ja V (leveys 90 cm)
- Valmistetaan tilauksesta pyydettäessä

# Värit

Valikoimamme ja tyylimme monimuotoisuus tekee Bock hoitosängyistä vertaansa vailla joustavia. Kokeneena valmistajana tarjoamme korkealaatuisia tuotteita, joissa yhdistyvät toiminnallisuus ja mukavuus. Kaikki elementit voidaan jälkiasentaa ja muuttaa.

Tietysti bock-hoitosängyt voidaan varustaa myös lisätoiminnoilla ja lisävarusteilla, joten ne ovat joustavia ja avoimia kaikille myös tuleville muutoksille.

## Vakiovärit



Beech steamed




Sonoma Oak

## Muut värit




Cherry Havanna

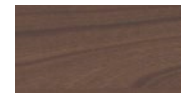

Madison Walnut



Maple After Eight

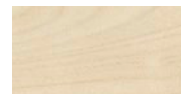

Royal Maple




Bloomed beech

## Erikoisväri



White

Löydä koko  
bock tuotevalikoima  
[www.bock.net](http://www.bock.net)

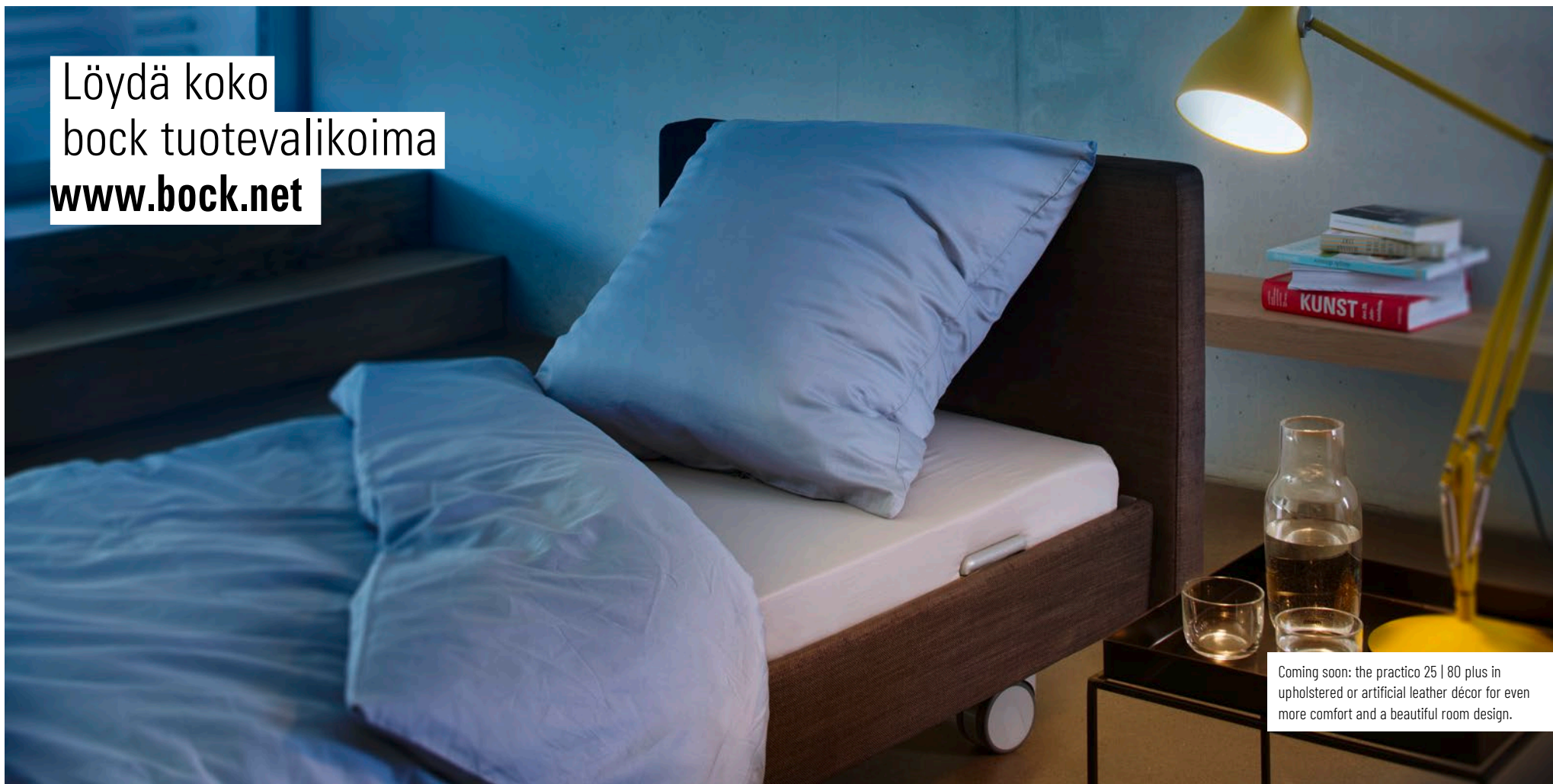

Coming soon: the practico 25 | 80 plus in upholstered or artificial leather décor for even more comfort and a beautiful room design.

.bock<sup>®</sup>////

© registered trademark  
Order no.: 890.02482  
Status: 12 | 2021  
Subject to technical changes.  
Photo credits: Nicola Rehage, Gütersloh

Hermann Bock GmbH  
Nickelstraße 12  
33415 Verl  
Germany

Phone: + 49 (0) 5246 9205 0  
Internet: [www.bock.net](http://www.bock.net)  
E-Mail: [info@bock.net](mailto:info@bock.net)

Myynti Suomessa:  
Camp Scandinavia Oy /  
Camp Mobility  
p. 09 350 76 310  
[info@campmobility.fi](mailto:info@campmobility.fi)  
[www.campmobility.fi](http://www.campmobility.fi)