

domiflex® 3 plus

Hoitosänky, joka on suunniteltu tulevaisuutta ajatellen

Modulaarinen, kestävä, näyttöön perustuva

.bock®

domiflex® 3 plus

domiflex® 3 plus



domiflex® 3 plus

bock domiflex® 3 plus -hoitosänky edustaa merkittävää askelta kohti parempaa kotihoitoa. Tämä on saavutettu ottamalla johdonmukaisesti huomioon uusimmat hoitotieteen tutkimustulokset sekä ekologiset ja taloudelliset tarpeet. Myös pitkäaikainen kokemus edeltävistä malleistamme, domiflex® ja domiflex® 2, osoittautui erittäin arvokkaaksi.

domiflex® 3 plus -mallin ominaisuuksien kokonaisuus merkitsee pientä vallankumousta: Se tarjoaa laajennetun korkeudensäädön 35–80 cm sekä kasvatetun turvallisen työkuorman, jopa 190 kg, ja sen kokonaiskuormitus voi olla ongelmitta jopa 220 kg.

Olemme panostaneet erityisesti hyötyjen maksimoimiseen kaikille:

- Keveämmät komponentit parantavat käsiteltävyyttä
- Työkaluton kokoaminen säästää aikaa
- Modulaariset laajennusvaihtoehdot, kuten jatkopala 220 cm pituuteen ja turvallinen työkuorma jopa 220 kg saakka, sekä laaja lisävarustevalikoima takaavat erinomaisen joustavuuden käytössä

Ympäristö ja oma hiilijalanjälki hyötävät kestävästä materiaaleista ja tuotannosta. Lisää mukavuutta ja turvallisuutta tuo se, että toiminnallisuuksissa on johdonmukaisesti huomioitu toimintakyvyn osa-alueet ja päivittäiset perustoiminnot (ADL). Tämä viimeistelee domiflex® 3 plus -hoitosängyn etupaketin.

domiflex® 3 plus



Yksi järjestelmä monta versiota

bock domiflex® 3 plus edustaa entistä suurempaa askelta kohti parempaa kotihoitoa - sekä hoitotyöntekijöille että hoitoa tarvitseville, samoin kuin terveydenhuollon palveluntarjoajille. Plus-versio varmistaa erinomaisen hoidon laadun, esimerkiksi laajennetulla korkeudensäädöllä (35–80 cm), kasvaneella potilaspainon kapasiteetilla (jopa 155 kg) ja suuremmalla turvallisella työkuormalla (jopa 190 kg). Matalammat päätylevyt parantavat potilaan kykyä hahmottaa ympäristöään ja lisäävät turvallisuuden tunnetta. domiflex® 3 plus -versio vakuuttaa myös innovatiivisilla lisämukavuuksilla, kuten pidemmällä selkäosan säädöllä integroidulla patjakompensaatiolla sekä luotettavalla yksimootorisella käyttöjärjestelmällä.

Muut versiot tarjoavat lisäksi lisäominaisuuksia:

185 kg versio



Vain muutamalla yksinkertaisella toimenpiteellä domiflex® 3 plus -perusversio voidaan muuntaa **185 kg -versioksi**, jossa **potilaspainon kapasiteetti on 185 kg** (turvallinen työkuorma 220 kg).



Matala versio




Kaksi matalasänkymallia, joiden korkeudensäätöalueet ovat **24–69 cm ja 24–80 cm**, varmistavat ergonomisen sisään- ja uloskäynnin sekä optimaalisen hoitokorkeuden. Automaattinen välipysäytin 34 cm kohdalla lisää turvallisuutta siirtymisten aikana (esim. pyörätuoliin) ja mahdollistaa hallitun ja turvallisen laskemisen matalimpaan asentoon.

Pestävä versio



domiflex 3 plus on saatavilla myös **pestävänä versiona**, jossa yksittäiset moottorit on suojattu **vedenkestäviksi** IPX6-standardin mukaisesti. Komponentit, kuten ohjausyksikkö, virtalähde ja käsiohjain, **voidaan pestä**. Sivulaidoille suositellaan käsin puhdistusta.

Pestävä versio saatavilla vain väreissä
Steamed Beech
Sonoma Oak Light

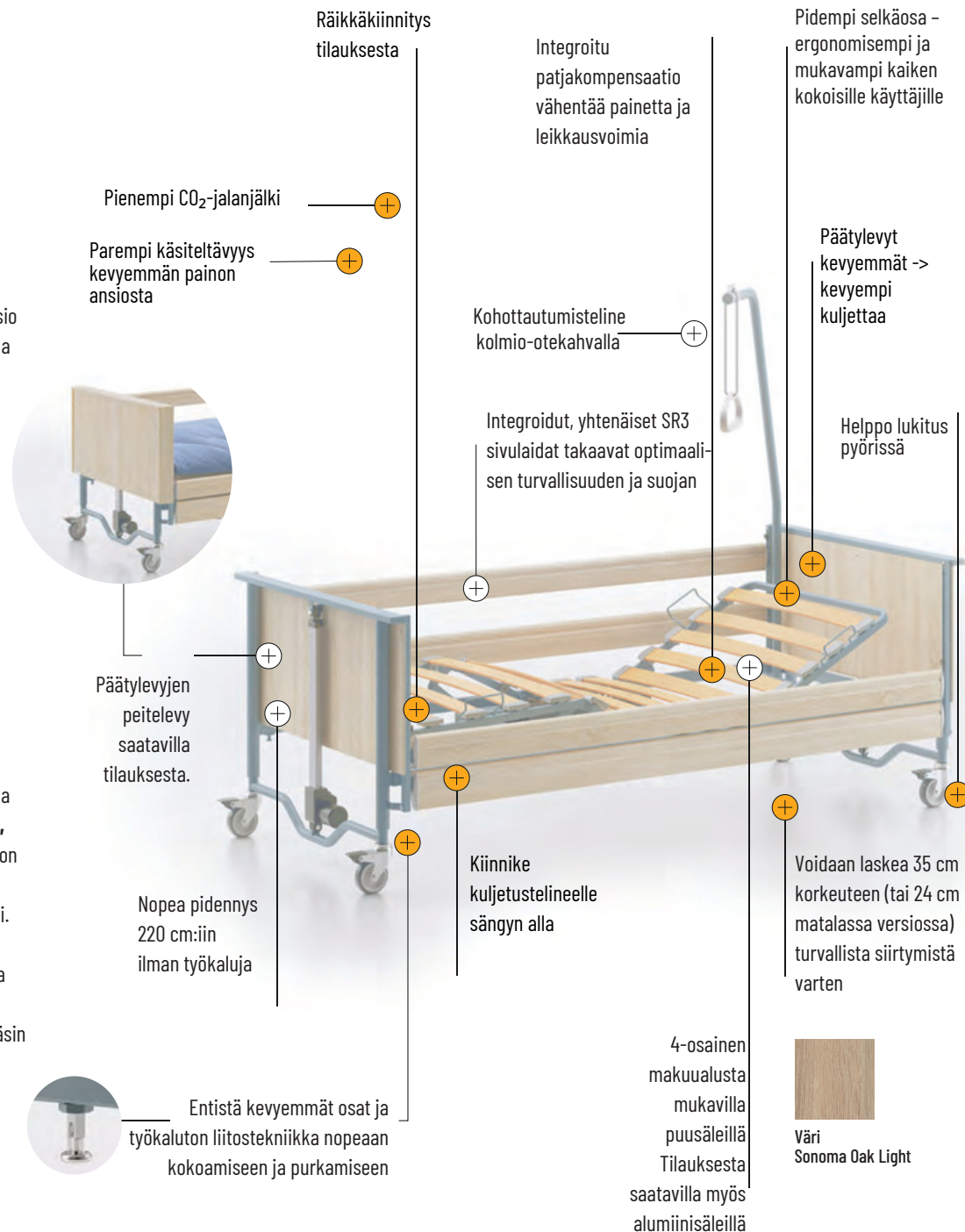

domiflex® 3 plus



domiflex® 3 plus

Lisävarusteet

Käytännöllisten lisävarusteidemme avulla domiflex® 3 plus muuttuu henkilökohtaiseksi hoitosängyksi – päivittäisiä perustoimintoja (ADL) tukevaksi kokonaisuudeksi.



Lepo ja uni



Turvallisuus



Liike



Hengitys



Ruoka ja juoma

Hoitovuoteet ja niiden varustelu ovat keskiössä sekä hoitotyössä että hoitoa tarvitsevien ihmisten päivittäisissä perustoiminnoissa.

Hoitotiede on analysoinut ja jäsentänyt nämä toiminnot. Näyttöön perustuvan tuotekehityksemme tieteellinen lähestymistapa ottaa nämä tutkimustulokset huomioon. Seuraavat lisävarusteet on optimoitu toimimaan mahdollisimman tehokkaasti viiden keskeisen päivittäisen perustoiminnon (ADL) yhteydessä.



Hyödylliset lisävarusteet

viiden keskeisen päivittäisen perustoiminnon (ADL) mukaan huomioituina

Sivulaitajärjestelmä SR2



Pituudensäätö
220 cm:iin



Sivulaitojen
korotus



Sivulaitapehmusteet



Nousutuki



Korkeus-
säädetty
infusio-
teline



Infuusioline
kohottautumis-
telineeseen



Virtsapulloteline



Dreenipulloteline



Lukulamppu G2



Käsiohjain
lisätoiminnoilla

⊕ Trendelenburg-
toiminto (pää-
tai jalkopää
alaspäin) napin
painalluksella



Käsiohjain
domiflex® 3 plus
pestävään versioon

domiflex® 3 plus





domiflex® 3 plus yhdellä silmäyksellä

Mitat (arvot 100 cm leveydelle sulkeissa)

Ulkomitat	101 (111) × 211 cm
Makuualusta	90 (100) × 200 cm
Erikoispituus	Pidennys 220 cm:iin
Korkeussäätöalue	35–80 cm
Korkeussäätöalue	"Low" malli 24–69 tai 24–80 cm
Nostinvara	>15 cm

Painot (vahviketangolla varustettujen versioiden painot sulkeissa)

Max. käyttäjäpaino	155 (185) kg
SWL (turvallinen työkuorma)	190 (220) kg
Sängyn paino	76.8 kg
Painavin osa	20.4 kg

Moottorit

Roiskevesisuojaus IPX4-standardin mukaisesti, korkealaatuinen kierrekaapeli vedonpoistolla ja taivutussuojalla, SMPS-muuntaja turvallisella pienoisjännitteellä ja siten pistorasiaturvallisuudella. domiflex® 3 plus -pesuversio: roiskevesisuojaus IPX6-standardin mukaisesti.

domiflex® 3 plus



domiflex® 3 plus

korkeussäätöjen vertailu

domiflex® 3 plus standard



Korkeudensäätöalue: 35–80 cm

domiflex® 3 plus low -mallit



Korkeudensäätöalue: 24–69 cm



Korkeudensäätöalue: 24–80 cm





.bock® ///

® registered trademark
 Order no.: 880.02182
 Status: 12 | 2025
 Subject to technical changes.
 Picture credits: creanimation,
 Münster Nicola Rehage, Gütersloh



Hermann Bock GmbH
 Nickelstraße 12
 33415 Verl
 Germany

Phone: +49 (0) 5246 9205 0
 Fax: +49 (0) 5246 9205 25
 Internet: www.bock.net
 Email: info@bock.net

domiflex® 3 plus

