

[illegible]

Lapset

4

2202 Safari

4

2215 Sporty

6

Nuoret

8

2217 Freedom

8

Aikuiset

10

2219 Lagoon

10

E-versiot


12

Optiot ja lisävarusteet

14

Miten valitset oikean kokoisen kolmipyörän?

Valitse kolmipyörä käyttäjän jalan sisämitan, ns. haaramitan (A) mukaan
(kokonaisuus, suoritettu jalka, nivusista kantapäähän)

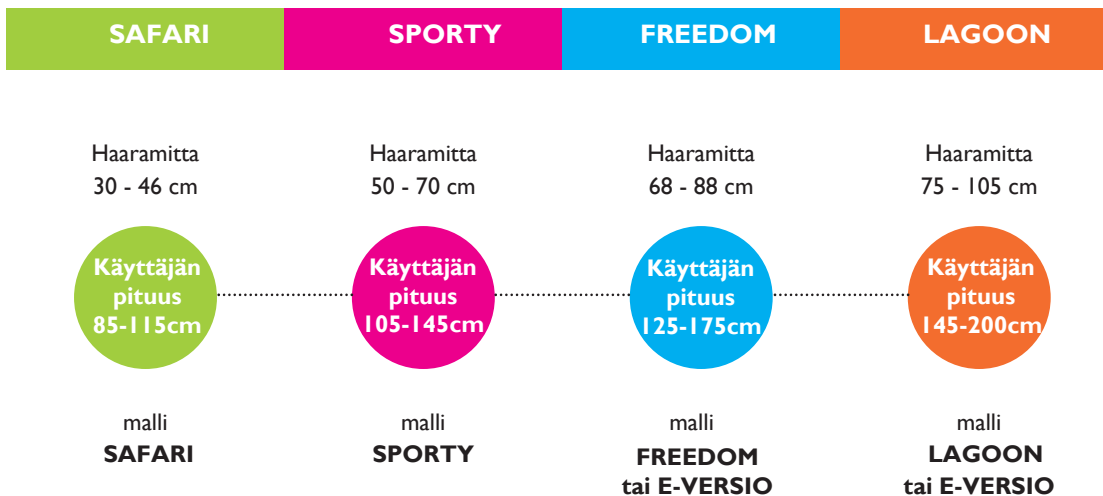



002

SAFARI

SAFARI

Haaramitta
30 - 46 cm

Käyttäjän
pituus
85-115cm

SAFARI - unisex malli

Koristeelliset safarihahmot ja kirkkaat värit tekevät tästä kolmipyörästä katseenvangitsijan pienille lapsille. Kello on kirahvin muotoinen ja takalokero on ihanteellinen lelujen kuljettamiseen. Ohjaustangon korkeus ja kulma on säädettävissä (saatavana erilaisia ohjaustankoja) Tämä kolmipyörä sopii täydellisesti lapsesi tarpeisiin.

- Käsijarru paikoitusjarrulla
- Korkeussäädettävä satula ja ohjaustanko
- Madallettu runko helpottaa pyörän päälle ja pyörästä pois nousemista.
- Kiinteä napa vakiona jatkuvaan liikkeeseen (eteen- tai taaksepäin).
- Saatavana useita eri optioita ja lisävarusteita.



Katso lisävarusteet ja optiot s. 14.

kokonais- pituus	kokonais- leveys	satulan korkeus	korkeus satu- lasta polkimiin	nousu- korkeus	ohjaustangon korkeus	renkas- koko	kokonais- paino	käyttäjän paino
1110	648	500-640	390-520	118	726-838	12" x 2.00	14	40

Mitat mm, paino kg. Koko- ja painopoikkeamat (15 mm, 1,5 kg ja 1,5°) ovat mahdollisia.



SPORTY

Syvä tumma musta, tulipunailla efektiväreillä ja takalokero, joka on ihanteellinen tavaroiden kuljettamiseen. Ohjaustangon (saatavana eri ohjaustankoja) korkeus ja kulma säädettävissä. Kolmipyörä joka sopii täydellisesti lapsesi tarpeisiin.

Haaramitta
50 - 70 cm

Käyttäjän
pituus
105-145cm

- Käsijarru paikoitusjarruilla
- Korkeussäädettävä satula ja ohjaustanko
- Madallettu runko helpottaa pyörän päälle ja pyörästä pois nousemista.
- Kiinteä napa vakiona jatkuvaan liikkeeseen (eteen- ja taaksepäin)
- Saatavana useita eri optioita ja lisävarusteita.



Katso lisävarusteet ja optiot s. 14.



kokonais-
pituus
1294



kokonais-
leveys
648



satulan
korkeus
610-760



korkeus satu-
lasta polkimiin
48-650



nousu-
korkeus
133



ohjaustangon
korkeus
827-940



rengas-
koko
16" x 1,75



kokonais-
paino
16,5



käyttäjän
paino
60

FREEDOM

WHITE

Freedom on vakaa ja kestävä kolmipyörä vaativille nuorille ja pienikokoisille aikuisille. Saatavana mustana ja valkoisena. Täydellinen kolmipyörä ajeluun maalla ja kaupungissa.

Katso lisävarusteet ja optiot s. 14.



kokonais-
pituus

1599



kokonais-
leveys

670



satulan
korkeus

720-860



korkeus satu-
lasta polkimiin

590-780



nousu-
korkeus

174



ohjaustangon
korkeus

986-1174



rengas-
koko

20" x 1,75



kokonais-
paino

25,5



käyttäjän
paino

110

FREEDOM BLACK

Freedom on vakaa ja kestävä kolmipyörä vaativille nuorille ja pienikokoisille aikuisille.
Täydellinen kolmipyörä ajeluun maalla ja kaupungissa.

- Ohjaavan etupyörän korkeus ja kulma on säädettävissä.
- Optioina vaihteeton, 3-vaihteinen tai 7-vaihteinen
- Korkeussäädettävä satula (saatavana erilaisia)
- Alennettu runko helpottaa pyörän päälle nousua ja pyörästä laskeutumista (nousukorkeus n. 17 cm)
- Sis. jalkajarru, käsijarru ja seisontajarru.
Lisävarusteena levyjarru takapyörille
- Iso, metallinen kuljetus-taraka takana.
- Vakioväri: Musta
toimitusmyyntinä myös valkoinen



FREEDOM

Haaramitta
68 - 88 cm

Käyttäjän
pituus
125-175cm



V-jarrut



Manuaalivaihteisto



Akkukotelo

LAGOON - Kolmipyörä aikuisille

Edullinen ja tyylikäs, klassinen aikuisten kolmipyörä on saatavana tyylikkäällä bordeaux-punaisella tai neutraalimmalla harmaalla runkoväriillä. Lagoon soveltuu myös vähän pidemmille matkoille, tarjoten vakautta ja mukavuutta pyörällä ajoon.

Saatavana kattava valikoima lisävarusteita ja optioita

Saatavana myös **E-versio**, sähköapumootorilla.



LAGOON

LAGOON

Haaramitta 75-108 cm
(poljin-satula 64-88 cm)

Käyttäjän
pituus
145-200cm

- Ohjaavan etupyörän korkeus ja kulma on säädettävissä.(saatavana eri ohjaustankoja)
- Optiona vaihteeton, 3-vaihteinen tai 7-vaihteinen versio
Värit: Hopeanharmaa ja viinipunainen
- Sis. jalkajarru, käsijarru ja seisontajarru
Lisävarusteena levyjarru takapyörille.
- Alennettu runko helpottaa pyörän päälle nousua ja pyörästä laskeutumista (nousukorkeus n.19 cm)
- Korkeussäädettävä satula.
(saatavana erilaisia satuloita)
- Iso metallinen kuljetus-
tarakka takana.
- Optiona etu- ja takavalot ja
kori edessä ks. muut optiot
lisävarusteet sivulta.



V-käsijarrut



kokonais-
pituus
1808



kokonais-
leveys
768



satulan
korkeus
810-900



korkeus satu-
lasta polkimiin
640-880



nousu-
korkeus
194



ohjaustangon
korkeus
1121-1309



renkas-
koko
24" x 1.3/8



kokonais-
paino
27,8



käyttäjän
paino
125

Mitat mm, paino kg. Koko- ja painopoikkeamat (15 mm, 1,5 kg ja 1,5") ovat mahdollisia.

E-versio

L A G O O N

E-Versio

Haaramitta
75 - 108 cm

Käyttäjän
pituus
145-200cm

Sähköavusteinen malli keventää polkuvastusta

E-versio on saatavilla FREEDOM, LAGOON- ja VINTAGE-malleihin.
Sähkökäyttöisellä kolmipyörällä pääset pidemmälle, helpommin ja nopeammin.

Käyttöjärjestelmä on erittäin helppokäyttöinen. Yksinkertainen ON/OFF-kytkin akussa ja ohjaustangossa. Varustettu myös BOOSTER-painikkeella, joka antaa kolmipyörälle nopean kiihtyvyyden (esimerkiksi kun sinun on lähdettävä ylämäkeen).

Kolmipyörän takana oleva akkupaketti on kevyt ja irrotettava, joten voit ladata sen helposti kotona.

Sähköavustin lisää voimaa etupyörään.



17 km/h



36 V / 9 Ah



250 W

Ajomatka: riippuu käytöstä, tien kunnosta, korin ominaisuuksista ja valitusta käyttövoimasta.

K O N F I G U R A A T I O T

Ohjaustangot



S1 - Classic ohjaustanko



S2 - Suora ohjaustanko



S3 - City ohjaustanko



S4 - Suorakulmainen ohjaustanko



S5 - Ohjaustangon säätöadapteri (-10° +50°)



D1 - Ohjauskulman rajoitin

Ratas- ja jarruvaihtoehdot



O6 - Kiinteä napa



O1 + B1 - Vapaa napa



B1 - Levyjarrut takapyöriin



O2 - Jalkajarru



O3 - 3 vaihteinen
O7 - 7 vaihteinen



E13 - Kotitraineri

Vartalotuet



P1 - Lantiotuki



P2 - Selkätuki



P3 - Lantio- ja selkätuki



E9 - Käsihihnat



E10 - Käsituki hihnalla



E11 - Käsituki "hanskamalli"

J A O P T I O T

Muut



BAT 9 - BAT 13 - Extra akut E-bike (9A tai 13A)



P4 - Säädetty satula (140 mm)



P5 - Satulaputki iskunvaimentimella



E12 - Comfort satula PU + muovi



E1 - Työntökahva (335 mm tai 605 mm)



E14 - Etukori

Polkimet



F1 - Polkimet remmillä



F2 - Polkimet, joissa varvaspidike ja hihna



F3 - Jalkatuki tarranauhalla



F4 - Jalkatuki tarranauhalla tarranauhalla & nilkkatuki



F5 - Polkimet säädettävällä pituudella (22 mm)



E2 - Valot (sis. patterit)

Muut lisävarusteet



E3 - Matkamittari (sis. patterit)



E4 - Vintage kori



E5 - Lukittava takaboksi tilavuus: 30 litraa



E6 - Keppiteline



E7 - Juomapulloteline (ei sis. pulloa)



E8 - Sivupeili

YHTEENSOPIVUUSTAULUKKO

		Safari	Sporty	Freedom	Lagoon
S1	Classic ohjaustanko	•	•	•	•
S2	Suora ohjaustanko	•	•	•	•
S3	City ohjaustanko	-	-	•	•
S4	Suorakulmainen ohjaustanko	•	•	•	-
S5	Ohjaustangon säätöadapteri	-	-	•	•
D1	Ohjauskulman rajoitin	•	•	•	•
06	Kiinteä napa	•	•	•	•
01 + B1	Vapaa napa	-	-	•	•
B1	Levyjarru takapyörään	-	-	•	•
02	Jalkajarru	•	•	•	•
03	3 - vaihteinen	-	•	•	•
07	7- vaihteinen	-	-	•	•
23	Tasauspyörästö (jakaa voimaa takapyörien välillä)	-	-	-	•
F1	Polkimet jalkapöytäremmillä	•	•	•	•
F2	Polkimet, joissa varvaspidike ja hihna	•	•	•	•
F3	Jalkatuki tarranauhalla	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)
F4	Jalkatuki tarranauhalla & nilkkatuki	•	•	•	•
F5	Polkimet säädettävällä pituudella	-	•	•	•
E1	Työntökahva	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)

		Safari	Sporty	Freedom	Lagoon
E2	Valot	-	•	•	•
E3	Matkamittari	-	•	•	•
E4	Vintage kori	-	-	-	-
E5	Lukittava takaboksi	-	-	•	•
E6	Keppiteline	-	-	•	•
E7	Juomapulloteline	•	•	•	•
E8	Peili	•	•	•	•
E9	Käsihihnat	•	•	•	•
E10	Käsituki hihnalla	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)
E11	Käsituki "hanskamalli"	•	•	•	•
E12	Comfort satula	-	-	•	•
E13-D	Kotitrainer	-	•	•	•
E14	Etukori	-	-	•	•
BAT 9 - 13	Akkukotelo E-versio	-	-	-	•
P1	Lantiotuki	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)
P2	Selkätuki	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)
P3	Lantio- + selkätuki (P1+P2)	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)
P4	Säädettävä satula	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)
P5	Satulaputki iskunvaimentimella	-	-	-	-
E-Tricycle	Sähköavustus	-	-	•	•

(S) : SMALL - (M) : MEDIUM

VERMEIREN N.V.

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout

Tel: +32 (0)3 620 20 20

Fax: +32 (0)3 666 48 94

website:

www.vermeiren.com

e-mail: info@vermeiren.com



Myynti Suomessa:
Camp Scandinavia Oy /
Camp Mobility
Patamäenkatu 5
33900 Tampere
info@campmobility.fi
www.campmobility.fi

VERMEIREN
Opening up new horizons in mobility