



**Adjustable**

**ORMESA®**  
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

**Trolli**

**Parempi  
kokoontaitto-  
mekanismi!**



**Käytän-  
nöllinen  
käsitellä**

**Adjustable**  
**Trolli**

## Edistyksellinen Design rajattomaan liikkumiseen

**Adjustable Trolli** by Ormesa on kompakti ja kevyt istuinjärjestelmä lapsille ja nuorille, kaikkiin eri käyttöympäristöihin.

Helppo käsitellä kansainvälisesti patentoidun kokoontaittomekanismin ansiosta, joka mahdollistaa kokoontaiton yhdellä toimenpiteellä. Kokoontaitettuna sen pituus ei kasva, joten se vie vain vähän tilaa.

Adjustable Trollissa on stabiili ja kestävä rakenne, joka on vahvistettu tuplaristikkorungolla ja sijoitettu selkäosan taakse ja istuimen alle antamaan parempaa stabiiliteettia ja käyttömukavuutta.

Verhoilu on valmistettu edistyneistä teknologisista materiaaleista: se on erittäin hengittävää, kestävä, helposti pestävää ja paloturvallista materiaalia.

Laajan lisävarustevalikoiman ansiosta se täyttää helposti eri käyttäjien tarpeet.



**TÖRMÄYSTESTATTU ISO 7176/19 ja ANSI RESNA WC/19 standardien mukaan.**

PRODUCT  
MARKED



ADJUSTABLE TROLLI on LÄÄKINNÄLLINEN LAITE joka täyttää EU ASETUKSEN (EU) 2017/745 TURVALLISUUSVAATIMUKSET.



# Käytännöllinen ja kevyt

## Maalla, merellä ja ilmassa: no problem!



**Adjustable Trolli** :ssa on alumiininen **kokoontaittuva ristikkorunko**, joka on maalattu myrkyttömällä epoksimaalilla.

Kokoontaitettuna pysyy kompaktissa koossa: Adjustable Trollia voi vetää perässä takarenkaiden varassa **kuten matkalaukkua**.

Sen keveys ja helppo kokoontaitto tekevät nostamisesta ja siirtämisestä helppoa: se on täydellinen, jos sitä tarvitsee säilyttää autossa tai kun tarvitsee käyttää julkisia kulkuvälineitä.

Pyörät mukautuvat mihin tahansa maastoon ja tarjoavat maksimaalista mukavuutta sekä vanhemmalle että lapselle. Se on niin kätevä, että sitä **voidaan työntää yhdellä kädellä**.

Ihanteellinen ratkaisu liikkuville perheille, jotka matkustavat usein ja jotka etsivät turvallisuutta, käytännöllisyyttä ja mukavuutta, - kaikki yhdessä paketissa!



# Tekniset tiedot ja säädöt

## Verhoilu

**Trollien** verhoilussa on **hunajakennomainen rakenne**, joten se on erittäin hengittävä joutuessaan kosketuksiin ihon kanssa. Kankaan rakenne luo "**ilmakammion**", joka mahdollistaa sekä ilmankierron, maksimaalisen hengittävyden että tehokkaan luonnollisen lämmöneristyksen.

### **Kaksinkertainen kerros takaa:**

- > **Hygienia:** erinomaisen hengittävyden ansiosta se vähentää hikoilua ja bakteerien muodostumista.
- > **Pesu ja desinfiointi:** vaikka verhoilua ei voi irrottaa, kankaan koostumus mahdollistaa helpon desinfiointin ja pesun.
- > **Nopeasti kuivuva.**
- > **Kestävyys:** Korkea kulutuskestävyys. Suuri vastustuskykyinen rakenne säilyttää suorituskykynsä jopa suurilla kuormituksilla (**ISO 12947**).
- > **Palosuojattu: EN 1021-1: 2014 ja EN 1021-2: 2014** standardin mukaisesti.





## Säädettävä päätuki

Säädettävä korkeus, kallistus ja syvyys säätövivuilla ja ruuvilla säädettävä korkeussäätö. Turvallinen säätö ilman ruuvien kadottamisen vaaraa. Kokoonlaituu rattaiden mukana, sitä ei tarvitse poistaa.



## Selkäosa

Kallistus kolmeen eri asentoon. Yksinkertainen korkeuden säätö liu'uttamalla ilman työkaluja. Takana pussi ohjekirjan ja mukana toimitetun jakoavaimen säilyttämistä varten. Vakaa, mukava ja kestävä.



## Istuin

Ergonominen ja hieman kallistettu istuin estää lantion luisumisen ja lisää mukavuutta. Säädettävä istuinsyvyys liu'uttamalla ja istuinleveys lisävarusteena saatavilla **958 pehmustetuilla lantion sivutukien avulla.** Yksinkertainen säätö ilman työkaluja. Istuimen alla oleva ristikko varmistaa vakauden, mukavuuden ja kestävyden.



## Työntökahvat

Työntökahvat käsi- ja seisontajarruilla. Erittäin hyödylliset kahvat rattaiden hallintaan eri ympäristöissä.

**Korkeuden säätö lisävarusteoptiolla 951.**



## Jalkatuet

korkeussäädettävät

## Jalkalevyt

Kallistuvat ja kääntyvät jalkatuet kääntyy rungonsuuntaisesti ilman rasitusta. **Kallistuksen säätö lisävarusteoptiolla 956.** Mukana myös pohjetukiremmi mukavuuden lisäämiseksi.



## Renkaat

"Ormesa Design" originaaliprofiililla. Kiinteät, kevyet ja maastopyörät. Kiinteät etupyörät: halkaisija 7" (17 cm). Kiinteät takapyörät: halkaisija 10" (25 cm), erillisillä rumpujarruilla. Polkaisuputki molemmissa takapyörissä.

# Lisävarusteet



**838 Vartalon sivutuet**  
korkeus-, leveys- ja rotaatio- eli  
kulmasäadeettävät, 2 kokoa



**947 Lantiovyö kulmasäädöillä**  
2 kokoa




**920 4-pistelantiovyö**  
2 kokoa



**853 Vartalotuki liivi vetoketjulla**  
2 kokoa



**853 4-pistetuki liivi Slim**

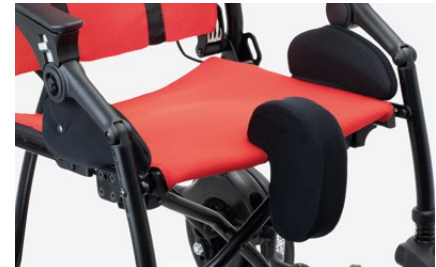

**834 Pehmustettu abduktiokiila**  
irrotettava



# Lisävarusteet



## 839 Etutanko

Kulmasäädettävä. Helppo irrottaa kokoontaitettaessa.



## 960 Kantaremmit



## 956 Kulmasäädettävät jalkalevyt



## 858 Alakori / Shopping Basket



## 812 Suuntalukitus etupyöriin



## 844 Pehmusetut sivusuojat

# Lisävarusteet



## 891 Taksikoukut ajoneuvokuljetukseen

Kasvot menosuuntaan kuljettamiseen moottoriajoneuvossa (yksityisautot, linja-autot...)  
Katso tuotteen mukana toimitettu käyttö- ja huolto-ohje



## 951 Korkeussäädettävät työntökahvat


Lisää korkeutta max. 7 cm (94-101 cm)



# Adjustable Trolli koot ja painot


mittayksiköt cm / kg

(ln) (lb)

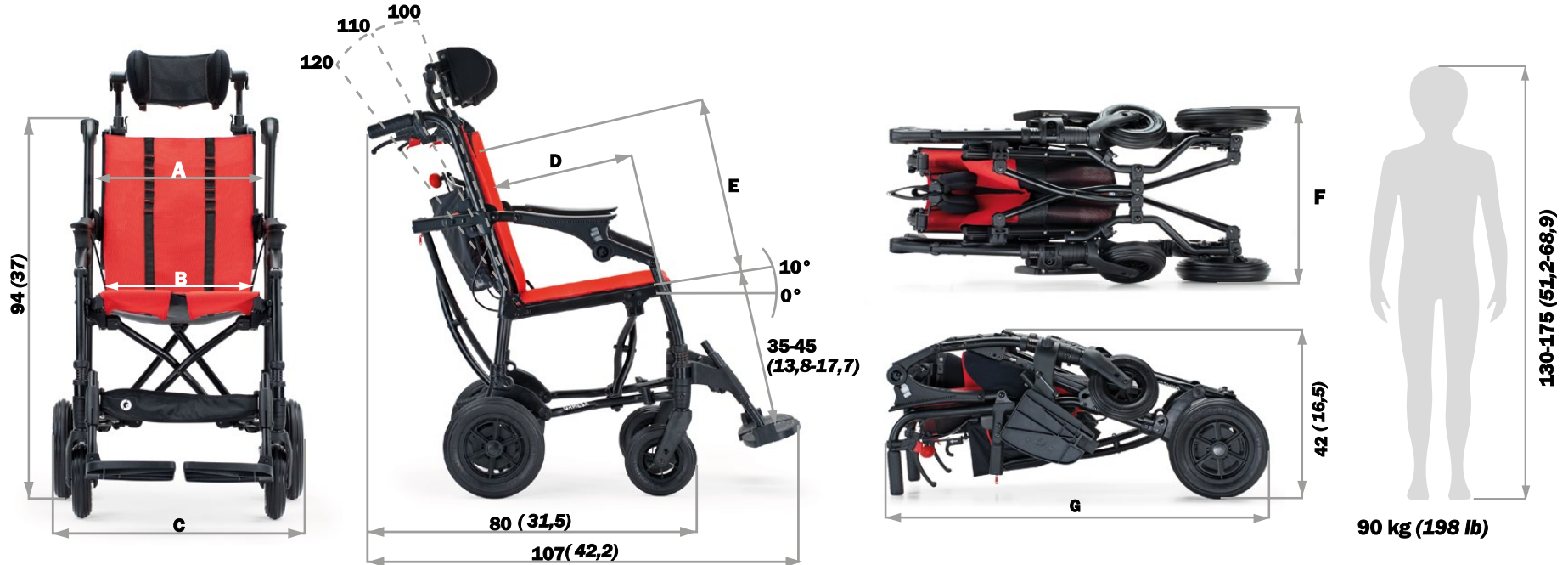

	A	B	C	D	E	F	G	Painot
<b>koko 36</b>	39 (15,4)	36 - 32 - 28 * (14,2 - 12,6 - 11 *)	59 (23,2)	36-46 (14,2-18,1)	46-56 (18,1-22)	42 (16,5)	94 (37)	15,1 (33,2)
<b>koko 40</b>	43 (16,9)	40 - 36 - 32 * (15,7 - 14,2 - 12,6 *)	63 (24,8)	36-46 (14,2-18,1)	46-56 (18,1-22)	46 (18,1)	94 (37)	16,1 (35,4)
<b>koko 43</b>	46 (18,1)	43 - 39 - 35 * (16,9 - 15,4 - 13,8 *)	66 (26)	36-46 (14,2-18,1)	46-56 (18,1-22)	42 (16,5)	97 (38,1)	17,1 (37,6)

\* Lisävaruste 958 pehmustetulla lantion sivutuilla istuinlevyyttä voidaan pienentää 4 cm (1,6 ln) tai 8 cm (3,2 ln) irrottamalla sisäpehmusteet. 36-40-43 cm (14,2-15,7-16,9 ln) istuinlevyydet ilman sivupehmusteita.

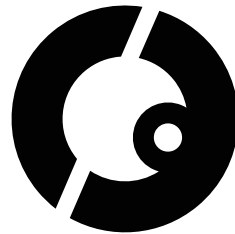

**CE** according to MDR (EU) 2017/745

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= **ISO 13485** =

---

**Ormesa srl** - Via A. Da Sangallo, 1 | 06034 Foligno (PG) - ITALY  
Tel. +39 0742 22927 | FAX +39 0742 22637 | [info@ormesa.com](mailto:info@ormesa.com)

**[www.ormesa.com](http://www.ormesa.com)**