

CLIP[•]4



CLIP[•]1-2-3



Ormesa CLIP
- kokoontaitettavat sateenvarjorattaat

Kevyet, kokoontaittavat Clip-rattaat on helppoja työntää kaikilla alustoilla. Niissä on puhkeamattomat pyörät ja jarrut avustajalle, helppokäyttöiset lukkomekanismit ja iskunvaimentimet. Hengittävä sini-harmaa kangasverhoilu. 4 kokoa 1-3 ja 4. Paino 10,8-12,5 kg. Max. käyttäjäpaino 30-76 kg.

Lisävarusteena saatavana mm. päätuki, vartalotuet, abduktioisiremmit, jalkaterää suuntaavat jalkaremmit, kuomu, sadesuoja ja lämpöpussi sekä erilaisia turvavyövaihtoehtoja.

Ominaisuudet



CLIP 1-2-3

CLIP 4

Kevyt kokoontaittava alumiinirunko



Istuin on helppo laskea alas sivussa olevan käsivivun avulla.

Jalalla toimiva painike helpottaa istuimen ylösnostoa.

3 selkäosan asentoa
säädetään kätevien vetoketjujen avulla

Istuimen ja selkäosan kaarevaksi muotoillut alumiinitangot lisäävät tukevuutta.



CLIP 1-3

CLIP 4





Istuin

Kallistettava, hengittävä, puolijäykkä istuin sisäpuolel-
la alumiinituet: tangot an-
tavat oikean jäykkyyden ja
lisäävät istuimen tukevuutta
murtumatta sen käytöstä.
Tangot eivät estä verhoilun
hengittävyyttä.



Jalkatuet

Korkeussäädettävät.
Erilliset, irrotettavat jalka-
levyt saatavina kokoihin
1-2-3, kulmasäädettävä
yhtenäinen jalkalauta
myös kokoon 4.



Puhkeamattomat renkaat

Clip 1-2-3: edessä 15 cm, kääntyvät
takana 20 cm, liukuvat, itsenäiset jarrut,
varustettu kuulalaakereilla.

Clip 4: edessä 17,5 cm, kääntyvät
takana 25 cm, varustettu kuulalaake-
reilla ja itsenäisillä rumpujarruilla.

Lisävarusteet



835 Päätuki




816 Sivutuet



853 Turvavyöliivi




906 5-pisteturvavyö

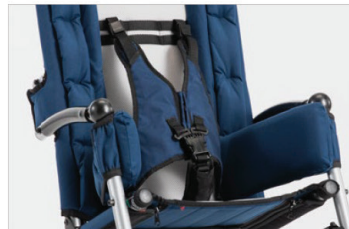

903 5-pisteturvavyöliivi




817 Abduktiojalkaremmit

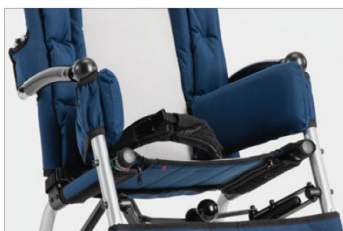

894 45° lantiovvyö



827 jalkaremmit

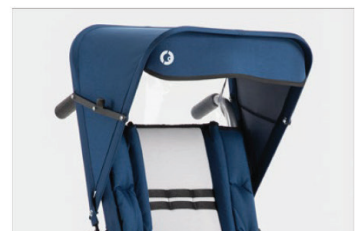

819 Kuomu



818 Lämpöpussi




825 sadesuoja



812 Suuntalukitus etupyöriin

Tekniset tiedot

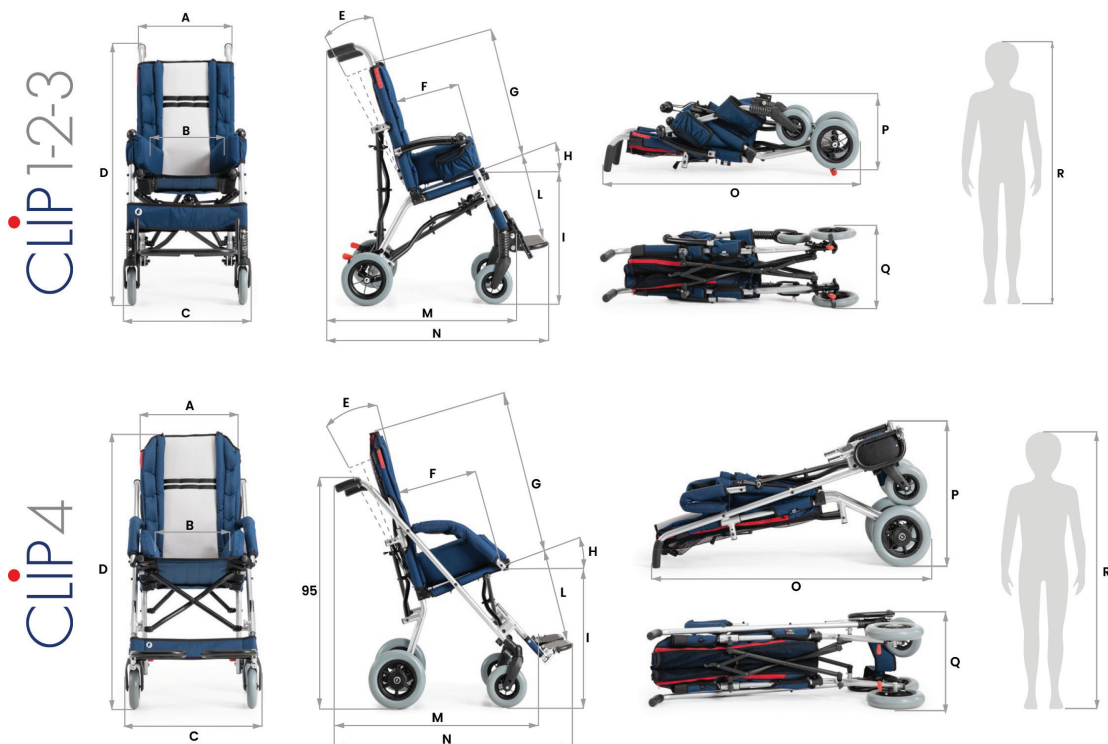

MITTATIEDOT	CLIP 1	CLIP 2	CLIP 3	CLIP 4
A: Selkäosan leveys	40 cm	40 cm	40 cm	45 cm
B: Istuinleveys	33 cm	33 cm	36 cm	33 - 45 cm*
C: Kokonaisleveys	51 cm	51 cm	51 cm	57 cm
D: Kokonaiskorkeus	99 cm	99 cm	104 cm	113 cm
E: Selkäos.kallistus	0° - 12°	0° - 12°	0° - 12°	0° -10°
F: Istuinsyvyys	25 cm	30 cm	35 cm	38 cm
G: Selkäosan korkeus	55 cm	59 cm	64 cm	71 cm
H: Istuinkallistus	18°	18°	18°	20°
I: Istuinkorkeus	46 cm	48 cm	49 cm	59 cm
L: Säärimitta	12 - 20 cm	21 -31 cm	27 - 37 cm	37 - 47 cm
M: Pituus ilman jalkalautaa	73 cm	73 cm	79 cm	82 cm
N: Kokonaispituus	80 cm	88 cm	96 cm	105 cm
O: Pituus kokoonaitettuna	110 cm	110 cm	115 cm	115 cm
P: Korkeus kokoonaitettuna	30 cm	30 cm	32 cm	56 cm
Q: Leveys kokoonaitettuna	34 cm	34 cm	35 cm	34 cm
R: Käyttäjän pituus	110-125 cm	120-140 cm	135 -155 cm	150 -175 cm
Kokonaispaino	10,8 kg	11 kg	11,2 kg	13,5 kg
Max käyttäjäpaino	30 kg	35 kg	40 kg	76 kg

*istuinleveys 45 cm
sivupehmusteet
poistamalla

Turvallisuus



Clip 1-2-3 passed the **CRASH TEST** according to the **ISO 7176/19**

PRODUCT CERTIFIED BY
CERAH
FRANCE

PRODUCT REGISTERED **FDA** USA

PRODUCT MARKED **CE**



Valmistaja:

ORMESA®
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

Via A. Da Sangallo,1
06034 FOLIGNO (PG) ITALY
TEL. +39 0742 22927
FAX +39 0742 22637
info@ormesa.com
www.ormesa.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa
tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja
tuotespesifikaatioita.

© 2021 Camp Mobility Finland

CAMP
MOBILITY

www.campmobility.fi

Asiakaspalvelu
+358(0)9 350 76 310
info@campmobility.fi
Varaosapalvelu
+358(0)9 350 76 312
varaosat@campmobility.fi