

Kangoo Classic, Vario & Largoo rattaat



Kangoo Classic, Vario & Largoo

Kangoo monitoimirattaat ja Largoo pyörätuolirattaat – liikkumisen riemua perheiden yhdessäoloon! Kangoo Classic ja Kangoo Vario toimivat yhtälailla polkupyörän peräkärrynä, rattaina kuin autossa turvaistuimena. Largossa yhdistyvät rattaat ja pyörätuoli. Lisävarusteiden avulla rattaat muokataan yksilöllisiin

tarpeisiin sopivaksi: jalkatuet, pehmusteet, vyöt, aurinko-, sade- ja hyttysuojat sekä lämpöasut. Kevyesti rullaavat rattaat toimivat haasteellisemmassakin maastossa mahdollistaen luonto- ja retkeilyelämykset niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin.

CAMP[®]
MOBILITY



Kangoo monitoimirattaat

Kangoo on aidosti 3in1-apuväline! Classic- ja Vario-malleja voi käyttää polkupyörän peräkärrenä, rattaina sekä autossa turvaistuimena.

Hyvien säätöominaisuuksiensa ansiosta Kangoo kasvaa lapsen mukana.

Alumiininen, pulverimaalattu runko kestää kulutusta! Rumpujarrut lukituksella lisäävät käyttöturvallisuutta.

Kangoo Classic

Classic soveltuu taaperosta teiniin. Saatavana 3 kokoa, joista koot 1 ja 2 ovat myös tyyppihyväksyttyjä turvaistuinkäytössä. Illoiset värit ja kulutusta kestävät verhoilumateriaalit soveltuvat erinomaisesti lasten ja nuorten käyttöön.

Kangoo Vario


Variossa on käyttömukavuutta lisäävä jousitus ja monipuoliset säätömahdollisuudet. Koko 2 on suunniteltu yli 5-vuotiaille ja koko 3 toimii teini-ikään asti. Teleskooppisten jalkatukien kulmaa voi säätää portaattomasti. Polvien kulma on säädettävissä 85° - 123°. Tilauksesta Varioon saa rakenteellisia muutoksia, jotka mm. lisäävät istuimen syvyyttä ja selkänojan pituutta. Koko 2 on tyyppihyväksytty auton turvaistuimeksi.



Largoo pyörätuolirattaat

Largoo on suunniteltu nuorille ja aikuisille. Largoo yhdistää pyörätuolin ja rattaiden hyödyt. Säätömahdollisuuksiensa ansiosta rattaille on matala pääsy. Istuimen kallistusta voi säätää ja päättää, onko käyttäjä istuvassa vai makuuasennossa. Vakiotoimitukseen sisältyy mekaaninen säätölaite (kallistamiseen, nostamiseen ja laskemiseen), kääntyvät ja teleskooppiset sääri- ja jalkatuet sekä lukittavat rumpujarrut.

Largoon laadukas jousitus helpottaa rattaiden käsittelyä maastossa ja lisää käyttömukavuutta.

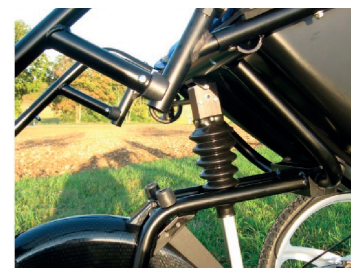

Tekniset tiedot

Kangoo Classic

	Koko 1	Koko 2	Koko 3
Leveys (rattaat)	64 cm	64 cm	68 cm
Leveys (pyörän peräkärry)	74 cm	74 cm	78 cm
Pakkauksen koko (p x l x k)	78 x 53 x 42 cm	88 x 53 x 42 cm	88 x 58 x 42 cm
Tuotteen koko kasattuna (p x l x k)	125 x 64 x 111 cm	125 x 64 x 111 cm	140 x 71 x 120 cm
Työntöaisan leveys	90 - 111 cm	90 - 111 cm	100 - 120 cm
Rengaskoko	20"	20"	20"
Maksimikuorma	~ 40 kg	~ 40 kg	~ 60 kg
Tuotteen paino (ilman lisävarusteita)	14,5 kg	14,5 kg	16,5 kg
Istuimen syvyys (pehmustettu)	27 cm	33 cm	43 cm
Istuimen leveys (pehmustettu)	27 cm	35 cm	39 cm
Selkänöjan korkeus	58 cm	65 cm	80 cm

Kangoo Vario

	Koko 2	Koko 3
Leveys (rattaat)	64 cm	68 cm
Leveys (pyörän peräkärry)	74 cm	78 cm
Pakkauksen koko (p x l x k)	88 x 53 x 42 cm	88 x 58 x 42 cm
Tuotteen koko kasattuna (p x l x k)	125 x 64 x 111 cm	140 x 71 x 120 cm
Työntöaisan leveys	90 - 111 cm	100 - 120 cm
Jalkatuen säätövara	80°-120°	80°-120°
Rengaskoko	20"	20"
Maksimikuorma	~ 40 kg	~ 60 kg
Tuotteen paino (ilman lisävarusteita)	14,5 kg	16,5 kg
Istuimen syvyys (pehmustettu)	33 cm	43 cm
Istuimen leveys (pehmustettu)	35 cm	39 cm
Selkänöjan korkeus	65 cm	80 cm

Kangoo Largoo

	Koko L	Koko XL
Leveys (rattaat)	74 cm	74 cm
Nousukorkeus (lattiasta istuimen alareunaan)	52 cm	52 cm
Tuotteen koko kasattuna (p x l x k)	135 x 74 x 110-130 cm	135 x 74 x 110-130 cm
Työntöaisan säätövara	+/- 15 cm	+/- 15 cm
Rengaskoko	20"	20"
Maksimikuorma	~ 100 kg	~ 100 kg
Tuotteen paino (ilman lisävarusteita)	28 kg	32 kg
Istuimen syvyys (pehmustettu)	43 cm	45 cm
Istuimen leveys (pehmustettu)	39 cm	49 cm
Selkänöjan korkeus	80 cm	80 cm

Lisävarusteet

Lisävarusteet

Kangoo Classicin, Varion ja Largoon lisävarustevalikoima on kattava. Rattaat saa helposti muokattua käyttäjän tarpeisiin sopivaksi. Erilaiset tuet ja tyynyt auttavat mukavan asennon löytämisessä. Ja lämpöasut tekevät liikkumisesta ja retkeilystä miellyttävää myös viileämmillä keleillä.

Seuraavassa esimerkkejä lisävarusteista:

- kääntyvä etupyörä
- aurikovarjo hytysuojalla, sadesuoja
- polkupyörään kytkentäsetti (Classic, Vario)
- tavaralaitikko
- jalakset
- jalkatukien pidennin tai lyhennin (Classic, Vario)
- erilaisia turva- ja tukivöitä: liikennekäyttöön hyväksytyt 5-pistevyöt, nivushihnat, rinta-olkahihnat, lantiovyöt, jalkatuet tarranauhoin
- tyynyjä ja tukia: istuintyyny haaratapilla, selkätyyny, rintakehän tukityyny, skolioosituet, niskatuki (sivutuella tai ilman), käsituet lannetyynyillä
- lämpöasut (koot 116–176): helposti päällepuettavat lämpöhihat, housut ja hupullinen lämpötakki sivuvetoketuilla




Väriä elämään!

Kangoo monitoimirattaissa on käytetty iloista väripalettia. Verhoilun pintamateriaali on pehmustettua Cordura-kangasta, joka kestää moninkertaisesti enemmän kulutusta kuin tavallinen nylonkangas.

Rungon värit:



Verhoilun värit ja kangaskuosit:

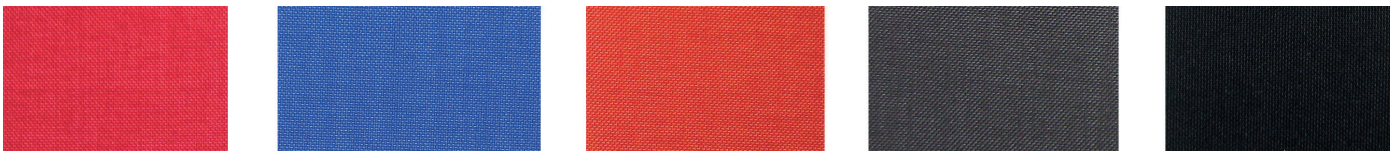

Pyydä meiltä kustannusarvio!

Helpoin tapa on ottaa yhteyttä suoraan myyntineuvottelijoihimme, jotka tekevät kartoituksen ja tarjouksen, johon kuuluu kustannusarvio toimituskuluineen.



BoGeTec GmbH
Reha-Technik
Haldenstrasse 10
88515 Langenenslingen-Ittenhausen

Tel: +49 (0)7376 / 962269
Fax: +49 (0)7376 / 962270

<http://www.bogetec.de>

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
© 2021 Camp Mobility Finland



www.campmobility.fi

Asiakaspalvelu
+358(0)9 350 76 310
info@campmobility.fi
Varaosapalvelu
+358(0)9 350 76 312
varaosat@campmobility.fi