



ORMESA®
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

Trollino

Sopii kaikkiin käyttö- ympäristöihin





Vakaus, käytännöllisyys ja mukavuus: kaikki samassa.

Trollino by Ormesa on kompakti ja kevyt **istuinjärjestelmä lapsille ja nuorille**, kaikkiin eri käyttöympäristöihin.

Helppo käsitellä **kansainvälisesti patentoidun kokoontaittomekanismin** ansiosta, joka mahdollistaa **kokoontaiton yhdellä kertaa**. Kokoontaitettuna sen pituus ei kasva, joten se **vie vain vähän tilaa**.

Trollinossa on **stabiili ja kestävä rakenne**, joka on vahvistettu **tuplaristikkorungolla** ja sijoitettu selkäosan taakse ja istuimen alle antamaan parempaa stabiliteettia ja käyttömukavuutta.

Verhoilu on valmistettu edistyneistä teknologisista materiaaleista: se on erittäin hengittävää, kestävää, helposti pestävää ja paloturvallista materiaalia.

Saatavana **4 väriä**: punainen, sininen, pinkki ja musta.

Laajan **lisävarustevalikoiman** ansiosta se täyttää helposti eri käyttäjien tarpeet.



Trollino on TÖRMÄYSTESTATTU ISO 7176/19 ja ANSI RESNA WC/19 standardien mukaan.

PRODUCT
MARKED



TROLLINO on LÄÄKINNÄLLINEN LAITE joka täyttää EU ASETUKSEN (EU) 2017/745 TURVALLISUUSVAATIMUKSET.



Käytännöllinen & kevyt

Sopii liikkuvaan elämäntyyliin

Trollino:ssa on alumiininen **kokoontaittuva ristikkorunko**, joka on maalattu myrkyttömällä epoksimaalilla.

Kokoontaitettuna pysyy kompaktissa koossa: Trollinoa voi vetää perässä takarenkaiden varassa kuten **matkalaukkua**.

Sen keveys ja helppo kokoontaitto tekevät nostamisesta ja siirtämisestä helppoa: se on täydellinen, jos sitä tarvitsee säilyttää autossa tai kun tarvitsee käyttää julkisia kulkuvälineitä.

Pyörät mukautuvat mihin tahansa maastoon ja tarjoavat maksimaalista mukavuutta sekä vanhemmalle että lapselle. Se on niin kätevä, että sitä **voidaan työntää yhdellä kädellä**.

Trollino on ihanteellinen ratkaisu liikkuville perheille, jotka matkustavat usein ja jotka etsivät turvallisuutta, käytännöllisyyttä ja mukavuutta, - kaikki yhdessä paketissa!



Fiksu verhoilu

Vallankumouksellinen päällismateriaali

Trollinon verhoilussa on **hunajakennomainen rakenne**, joten se on erittäin hengittävä joutuessaan kosketuksiin ihon kanssa. Kankaan rakenne luo **"ilmakammion"**, joka mahdollistaa sekä ilmankierron, maksimaalisen hengittävyuden että tehokkaan luonnollisen lämmöneristyksen. **Kaksinkertainen kerros takaa:**

- > **Hygienia:** erinomaisen hengittävyuden ansiosta se vähentää hikoilua ja bakteerien muodostumista.
- > **Pesu ja desinfiointi:** vaikka verhoilua ei voi irrottaa, kankaan koostumus mahdollistaa helpon desinfioinnin ja pesun.
- > **Nopeasti kuivuva.**
- > **Kestävyys:** Korkea kulutuskestävyys. Suuri vastustuskykyinen rakenne säilyttää suorituskykynsä jopa suurilla kuormituksilla (**ISO 12947**).
- > **Palosuojattu: EN 1021-1: 2014 ja EN 1021-2: 2014** standardin mukaisesti.



Valitse väri:



4 väriä persoonallisen tyylini mukaan



Tekniset ominaisuudet ja säädettävyys



Selkäosa

Säätyy kolmeen eri asentoon. Yksinkertainen korkeuden säätö liu'uttamalla ilman työkaluja. Takana pussi ohjekirjan ja mukana toimitetun jakoavaimen säilyttämistä varten. Vakaa, mukava ja kestävä.



Istuin

Ergonominen ja hieman kallistettu istuin estää lantion luisumisen ja lisää mukavuutta. Säädettävä istuinsyvyys liu'uttamalla ja istuinleveys lisävarusteena saatavilla **958 pehmustetuilla lantion sivutukien avulla.** Yksinkertainen säätö ilman työkaluja. Istuimen alla oleva ristikko varmistaa vakauden, mukavuuden ja kestävyden.



Työntökahvat

Työntökahvat käsi- ja seisontajarruilla.
Erittäin hyödylliset kahvat rattaiden
hallintaan eri ympäristöissä.
Korkeuden säätö lisävarusteoptiolla 951.



Jalkatuet

korkeussäädettävät

Jalkalevyt

Kallistuvat ja kääntyvät jalkatuet
kääntyy rungonsuuntaisesti ilman rasitusta.
Kallistuksen säätö lisävarusteoptiolla 956.
Mukana myös pohjetukiremmi mukavuuden
lisäämiseksi.



Renkaat

"Ormesa Design" originaaliprofiililla.
Kiinteät, kevyet ja maastopyörät. Kiinteät
etupyörät: halkaisija 7" (17 cm). Kiinteät
takapyörät: halkaisija 10" (25 cm), erillisillä
rumpujarruilla. Polkaisuputki molemmissa
takapyörissä.



Lisävarusteet

Ergonomisen istuimen merkitys

Mille mukavuus ja ergonomia ovat tärkeitä arvoja:

Trollino saa käyttäjät tuntemaan olonsa turvalliseksi ja erittäin mukavaksi, mutta se auttaa myös tarjoamaan optimaalisen ja vakaan asennon mitä erilaisimmissa olosuhteissa.

Selkänojasta istuimeen, niskatukien ja tavaratilaan ja sivutukiin -jokainen Trollinon elementti on säädettävissä yksinkertaisesti ja intuitiivisesti. Lisäksi se tarjoaa lisävarusteiden kanssa rajattomasti modifiointi- ja säätömahdollisuuksia

Helppo kiinnittää ja irrottaa, kätevä ja kestävä.

Trollinon lisäosat on suunniteltu pienintä yksityiskohtaa myöten.

Kansainvälisesti patentoitu järjestelmä mahdollistaa kokoontaittamisen yhdellä kertaa, jopa asennettujen lisävarusteiden kanssa, joka varmistaa hyvän käyttökokemuksen.

Lisävarusteet



835 Muotoiltu ja peittävä pää-/niskatuki
korkeussäädettävä



865 Pehmustettu pää-/niskatuki
korkeussäädettävä




838 Vartalon sivutuet
korkeus-, leveys- ja rotaatio- eli kulmasäädettävät, 2 kokoa



947 Lantiovyö kulmasäädöillä
2 kokoa




920 4-pistelantiovyö
2 kokoa

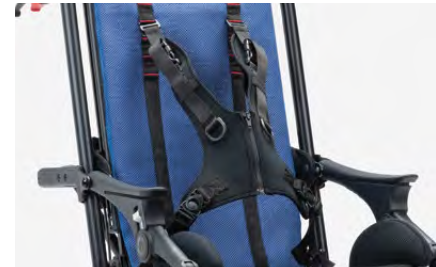

853 Vartalotukiliivi vetoketjulla
2 kokoa

Lisävarusteet

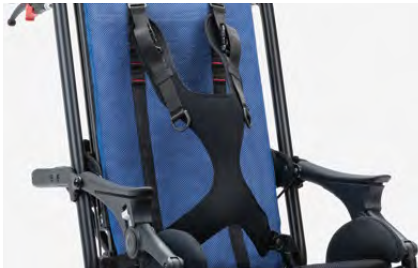

853 4-pistetukiliivi Slim



834 Pehmustettu abduktiokiila
irrotettava



839 Etutanko

Säädettävä kallistus. Helppo irrottaa rattaiden kokoontaitossa



819 Kuomu

Nostettava, sis. pussi ja pieni takaikkuna.
Kuomua ei tarvitse irrottaa, se voidaan
kokoontaittaa rattaiden mukana!



825 Sadesuoja

käytetään kuomun 819 kanssa
Selkäosan sadesuoja (825B) antaa
parempaa suojaa ulkoisia tekijöitä vastaan



818 Lämpöpussi

Lisävarusteet



960 Kantaremmit



956 Kulmasäädettävät jalkalevyt



858 Alakori / Shopping Basket



812 Suuntalukitus etupyöriin



844 Pehmustetut sivusuojat



951 Korkeussäädettävät työntökahvat
Lisää korkeutta max. 7 cm/2,7 in
(98-105 cm/38,5-41,3 in).




891 Taksikoukut ajoneuvokuljetukseen

Kasvot menosuuntaan kuljettamiseen moottoriajoneuvossa (yksityisautot, linja-autot...)
Katso tuotteen mukana toimitettu käyttö- ja huolto-ohje




Trollino koot ja painot

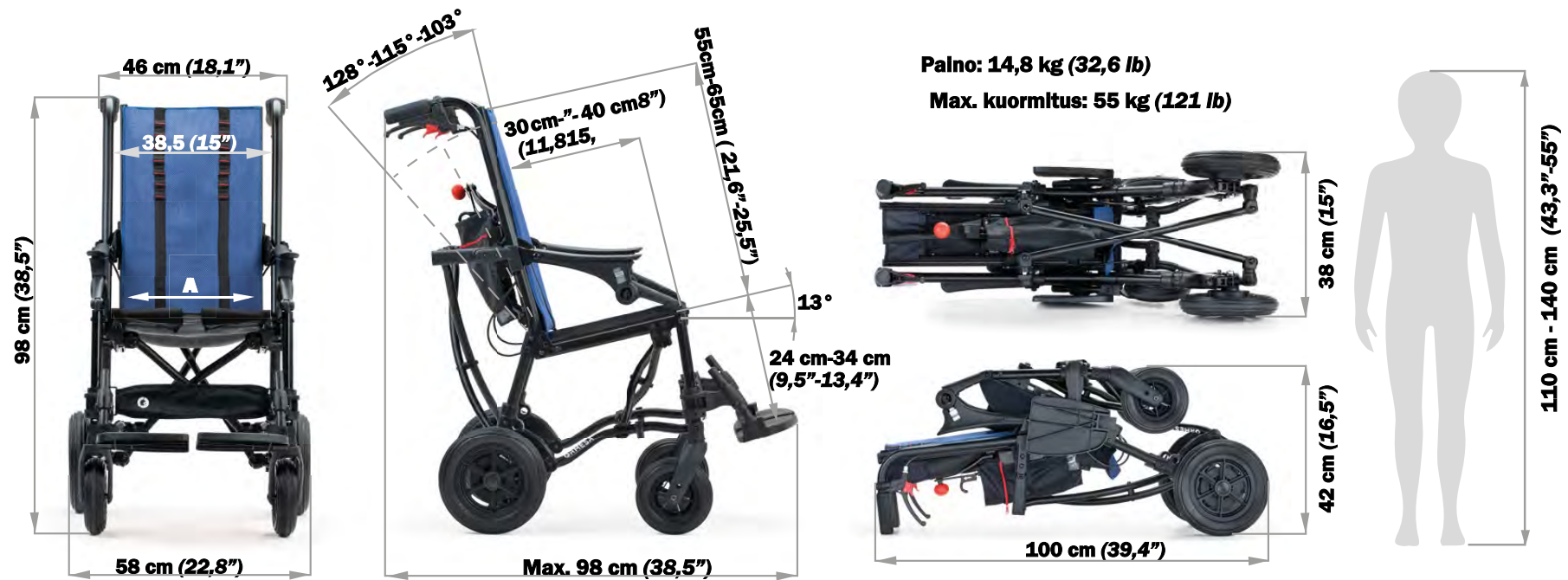

A: 36 cm (14"). Istuinlevyydet (32 ja 28 cm - 12,6" ja 11") pehmustetun lantiotuen 958 kanssa.

Tutustu Galan tarinaan
Ormesan virallisella
verkkosivustolla www.ormesa.com
yhdessä muiden maailmanlaajuisen
fantastisen päähenkilöiden kanssa.



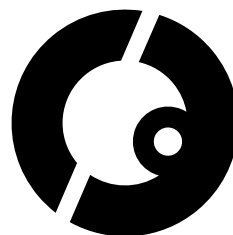

A special thanks to the families who participated with enthusiasm in our project. It is thanks to our customers and their stories that we find the energy and stimuli to evolve day by day.



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= **ISO 13485** =

Ormesa srl - Via A. Da Sangallo, 1 | 06034 Foligno (PG) - ITALY
Tel. +39 0742 22927 | FAX +39 0742 22637 | info@ormesa.com

www.ormesa.com