



Standard 6-9 cm



Standard 7-10 cm



Haarakiila 6-9 cm



Ergonomic 9-12 cm

Alova[®] viskoelastiset istuintyyntyt

Asklé Santé / WinnCare viskoelastiset Alova[®] -istuintyyntyt ehkäisevät paine-
haavaumia ja sopivat keskikorkeasta korkean riskiluokan omaaville käyttäjille.
Muotoonvaletut tyyntyt ovat viskoelastista Alova[™]-muistivaahdotermateriaalia
(tiheys $\geq 75 \text{ kg/m}^3$) ja niissä on kevennys ischias- ja sacral-alueella sekä
istuimesta valumista estävä, hieman kallistettu istuma-asento.

3 mallia: **Alova Standard**, **Alova Haarakiilalla**, malli, joka estää valumisen pyörä-
tuolissa, henkilöille, jotka tarvitsevat voimakasta lantionalueentukea ja
Alova Ergonominen, lievempää tukea tarvitseville.

Kaikissa Alova[™]-istuintyyntyissä on hengittävä, kahteen suuntaan joustava ja neste-
itä läpäisemätön Promust PU HD-päällinen, joka on helppo poistaa puhdistamista
varten. Päällisen voi pestä koneessa +90°, nurinpäin käännettynä vetoketjut kiinni ja
pyyhkiä 1000 ppm kloramiinilla.

Koot (Standard): leveydet 36 – 60 cm, syvyydet 36 – 50 cm
Korkeudet: 6–9, 7–10 ja 9–12 cm mallista riippuen.
Käyttäjäpainot 20 – 200 kg mallista riippuen.

Täyttää direktiivin 93/42/EEC luokka 1. ja palo-
turvallisuusstandardin EN 597-1 ja 2. vaatimukset.



Täyttää
EN597-1 ja -2
laatustandardien
vaatimukset.

Alova™ Standard**36 x 36 – 60 x 50 cm****+ konepestävä Promust PU -päällinen +90°C**

- Muotoon valettu viskoelastinen Alova™ (100%) muistivaahto-pehmuste ($\geq 75 \text{ kg/m}^3$) parantaa ergonomista istuma-asentoa ja tasaa painetta, joka estää painehaavaumien syntymistä.
- Henkilöille, joilla on keskisuuri tai korkea painehaavariski.
- Iskias- ja sakraalialueen kevennysaukon ansiosta painehaavariskin tehostettu ennaltaehkäisy.
- Muotoiltu istuinosa varmistaa alaraajojen oikean kohdistamisen suoraan istuinlinjaan.
- Kallistettu istuinasento vähentää tuolista liukumisen riskiä.
- Irrotettavassa, joustavassa ja hengittävässä, +90°C konepestävässä päällisessä hyvä lämmönsäätelykyky Promust PU HD -materiaalin ominaisuuksien ansiosta.
- Liukumaton PU / PVC-pohja – tynny pysyy hyvin paikallaan.
- Eri kokoja erikokoisille käyttäjille.
- Täyttää lääkinnällisistä laitteista säädetyn direktiivin 93/42 / ECC luokan 1 ja palostandardit EN 597-1 ja 2 vaatimukset.

Tuotenro	Koko	Korkeus	Käyttäjätaino
804840045	36x36 cm	6 < 9 cm	20–80 kg
804840030	43x43 cm	6 < 9 cm	30–100 kg
804840031	43x40 cm	6 < 9 cm	30–90 kg
804840032	45x40 cm	6 < 9 cm	30–120 kg
804840033	38x41 cm	6 < 9 cm	30–90 kg
804840034	45x41 cm	6 < 9 cm	30–90 kg
804840035	43x41 cm	6 < 9 cm	30–100 kg
804840036	45x43 cm	6 < 9 cm	30–100 kg
804840037	45x44 cm	6 < 9 cm	30–120 kg
804840038	43x44 cm	6 < 9 cm	30–120 kg
804840040	50x44 cm	6 < 9 cm	30–135 kg
804840041	52x50 cm	7 < 10 cm	120–160 kg
804840042	54x50 cm	7 < 10 cm	120–160 kg
804840043	56x50 cm	7 < 10 cm	160–200 kg
804840044	60x50 cm	7 < 10 cm	160–200 kg
804840046	43x43 cm	9 < 12 cm	30–100 kg
804840047	50x44 cm	9 < 12 cm	30–135 kg

Alova haarakiilalla



Alova™ Haarakiilalla

7 kokoa

+ konepestävä päällinen +90°C

- Muuten kuten Alova Standard, mutta ulkoisella 8 cm korkealla haarakiilalla varustettu malli voimakasta lantion asentotukea tarvitseville henkilöille.
- Muotoon valettu viskoelastinen Alova™ (100%) muistivaahtopehmuste ($\geq 75 \text{ kg/m}^3$) parantaa ergonomista istuma-asentoa ja tasaa painetta, joka estää painehaavaumien syntymistä.
- Henkilöille, joilla on keskisuuri tai korkea painehaavariski.
- Muotoiltu istuinosa varmistaa alaraajojen oikean kohdistamisen suoraan istuinlinjaan.
- Kallistettu istuinasento vähentää tuolista liukumisen riskiä.
- Irrotettavassa, joustavassa ja hengittävässä, +90°C konepestävässä päällisessä hyvä lämmönsäätelykyky Promust PU HD -materiaalin ominaisuuksien ansiosta.
- Liukumaton PU / PVC-pohja – tyyny pysyy hyvin paikallaan.
- Eri kokoja erikokoisille käyttäjille.
- Täyttää lääkinnällisistä laitteista säädetyn direktiivin 93/42 / ECC luokan 1 ja palostandardit EN 597-1 ja 2 vaatimukset.

Tuotenro	Koko	Korkeus	Käyttäjätaino
804840127	38x41 cm	6 < 9 cm	30-90 kg
804840128	40x41 cm	6 < 9 cm	30-90 kg
804840129	43x41 cm	6 < 9 cm	30-100 kg
804840130	43x43 cm	6 < 9 cm	30-100 kg
804840131	45x44 cm	6 < 9 cm	30-120 kg
804840132	50x44 cm	6 < 9 cm	30-135 kg
804840133	43x47 cm	6 < 9 cm	30-120 kg

Alova Ergonominen




Alova™ Ergonominen

43 x 43 cm + konepestävä päällinen +90°C

- Valettu Alova™ muistivaahtopehmuste (100%) parantaa kehon osien upotusta alustaan ja alentaa paineen maksimi-arvoja joka estää haavaumien syntymistä henkilöille, joilla on keskisuuri tai korkea painehaavariski.
- Pehmuste myötäilee vartalon liikkeitä ja varmistaa hyvän ilman kierron.
- Hyvä lämmönsäätelykyky Promust PU HD -päällisen ominaisuuksien kuten vesihöyryn läpäisevyyden ja ilman läpivirtauksen ansiosta.
- Sisältää 2 integroitua Promust PU päällistä (polyuretaanilla päällystetty, nesteitä läpäisemätön ja hengittävä Jersey-kangas) joissa liukumaton PU /PVC-pohja.
- 1 koko
- Täyttää lääkinnällisistä laitteista säädetyn direktiivin 93/42 / ECC luokan 1 ja palostandardit EN 597-1 ja 2 vaatimukset.

Tuotenro	Koko	Korkeus	Käyttäjätaino
804840039	43x43 cm	9 < 12 cm	30-110 kg

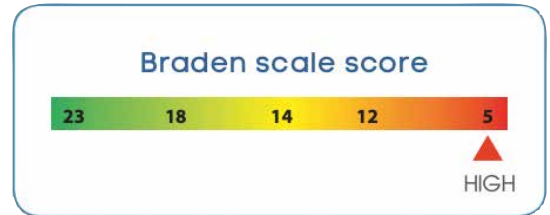

Viskoelastinen painetta tasaava Alova™-materiaali

Sopivat keskiparkeista korkean riskiluokan painehaavariskin omaaville käyttäjille. Sopii myös jo olemassa olevien 1 ja 2 luokan painehaavojen hoitoon.

Promust HD -päällinen

Kahteen suuntaan joustava, kosteutta läpäisemätön, irrotettava päällinen voidaan pestä 90°C:ssa pesukoneessa ja pyyhkiä 1000 ppm kloramiinilla.



Koot*

Std:
17 kokoa
Haarakiilalla:
7 kokoa
Ergonomic:
1 koko



Korkeudet

Std: 6 > 9 cm
7 > 10 cm
9 > 12 cm
Haarakiilalla 9 > 12 cm
Ergonomic 9 > 12 cm



Käyttäjätarve

20-200 kg**



Konepesu

Päällinen

* katso kokotaulukko
**Maksimikuormitus on määritelty olettaen, että tyynyn leveys aiotulle käyttäjälle on valittu asianmukaisesti.



Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2020 Camp Mobility Finland

Valmistaja:
WinnCare / Askle Santé
104, Avenue Albert 1er
Immeuble les passerelles
92 500 Rueil-Malmaison,
France
p +33 (0)4 66 02 15 15
winnCare.com