


Invacare® Flo-Shape istuintyynty



Invacare **Flo-Shape istuintyynty** on 103 mm korkea istuintyynty, joka soveltuu henkilöille joilla on riski saada painehaavaumia.

Alunperin Invacare comfort- ja sähköpyörätuolien kanssa käytettäväksi kehitetty tyynty, mahdollistaa paineen jakautumisen laajemmalle alueelle ja vähentää huippupainetta haavoittuvimmille alueille.

Flo-Shape istuintyyntyn pinta on muotoiltu ja jaettu osioihin muotoonvaletun rakenteen ansiosta, jolloin saadaan kolmiulotteinen muoto, jota ei voi saada aikaan leikatuilla vaahtomuovityynyihin. Tämä mahdollistaa paremman tuennan ja painon hajauttamisen pois kriittisimmistä painepisteistä.

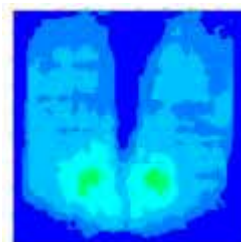


Anatomisesti muotoiltu istuintyynty:

- **Luonnollinen tuki** ischial tuberosity alueella, mikä vähentää henkilön taipumusta liukua eteenpäin istuimessa, mikä voi aiheuttaa hankausta ja kitkaa
- Tarjoaa **vakaan pinnan**, joka auttaa **lantion asemointia keskelle** ja parantaa **reisien suuntausta**, mikä tekee tyynystä sopivan niille, joilla istumatasapaino on heikentynyt esim. neurologisesta tilasta johtuen.

OMINAISUUDET

- Muotoonvalettu, ei leikattu, vaahtomuovi
- Muotoiltu ylin pintakerros, mukava, vakaa ja jakaa paineen uudelleen
- Sopii luiseville tai painaville ihmisille
- Kahteensuuntaan joustava, ilman työkaluja irrotettava, vesipestävä, vedenkestävä ja höyryä läpäisevä Dartex-inkotenssipäällinen, voidaan pestä koneessa +60–80 °C.
- Sekä tyynty että päällinen ovat paloturvallisesta materiaalista valmistettuja ja paloturvallisuustestattu EN597-1&2 ja BS: 7176:1995 5 mukaisesti.
- Black smooth (plyyshi) ja black spacer -päälliset saatavana lisävarusteena
- Saatavana valikoima eri kokoja
- Maksimikäyttäjäpaino 190.5 kg*

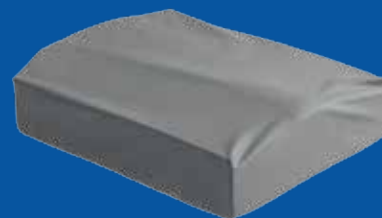

Tekniset tiedot

Vaahto: Asteikkoviite ja väri: FG 70/150 Harmaa
Nimellistiheys (kg / m): 65-75
Nimelliskovuus (N): 150
Väsymisluokka: Erittäin kestävä

Paloturvalli- EN 597 - 1 & 2
suustestattu: BS 7176: 1995 crib 5

* Maximikäyttäjäpaino riippuu tyynyn koosta

Knowledge bank

Invacare Limited
Pencoed Technology Park -
Pencoed - Bridgend CF35 5AQ
- United Kingdom
Tel: +44 1 656 776 222
Fax: +44 1656 776 220
E-mail: uk@invacare.com
Sales Order E-mail:
ordersuk@invacare.com
www.invacare.co.uk

Invacare Ireland Ltd
Unit 5 - Seatown Business
Campus
Seatown Road - SWORDS -
County Dublin - Ireland
Tel. +353 1 8107084
Fax +353 1 8107085
Email: Ireland@invacare.com
www.invacare.ie

rea
Confidence in posture solutions

INVACARE
Yes, you can.®