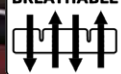


VICAIR®**Vicair® O2****PRESSURE
ULCER
TREATMENT****MACHINE
WASHABLE****100%
BREATHABLE**
**BOXING
EFFECT**
**READY FOR USE**

Vicair® O2 istuintyynt voi pestä kokonaan pesukoneessa

Vicair® O2 istuintyynt voi pestä pesukoneessa +60°C:ssa, päällisiä ja **SmarCells™** -soluja poistamatta. Istuintyynt sopivat sekä laitos- että kotikäyttöön tilanteisiin, joissa inkontinenssi, lämpö ja kosteus ovat ongelma.

Vicair® O2 -tyynyjä säädetään **SmarCells™** solujen avulla käyttäjän muotoihin yksilöllisesti

sopivaksi ja näin mahdollistetaan korkea-laatuinen istuma-asento paineaaariskitason ja asentoepäsymmetrioiden mukaisesti. Saatavana jopa 145 eri kokoa mallista riippuen. Katso kaikki koot kokotaulukosta. Tyynyistä voidaan muokata myös välikokoja **SmarCells™** -solujen määrää muuttamalla.

**CAMP
MOBILITY®**

Kokonaisena +60°C konepestävät istuintyyny

Vicair® O2 istuintyyny tarjoavat ratkaisun inkontinenssi-ongelmiin ja parempaan hygieniaan. Vicair® O2-tyynyjen avoin rakenne mahdollistaa tyynyjen pesun helposti kaikissa pesukoneissa ilman tarvetta pyykkipussiin tai poistamatta SmartCells-soluja. Nämä tyynyt ovat ihanteellisia sekä laitos- että kotikäyttöön tilanteisiin, joissa inkontinenssi, lämpötila ja kosteus ovat ongelma. Täysin konepestävä kaikissa pyykinpesukoneissa, + 60°C:ssa, ilman SmartCells™solujen poistoa.



Uudistuneet SmartCells™-solut

Jokainen tyyny koostuu sadoista **SmartCells™**-soluista, jotka ovat pieniä ilmatäytteisiä, pyramidin muotoisia soluja, jotka on jaettu istumisen kannalta strategisesti merkittäviin "osastoihin" tyynyn sisällä. Joustavat, kangaspäällysteiset solut aiheuttavat vain vähän hankausta kosketuksissa toisiinsa ja adaptoituvat jatkuvasti vartalon muotojen mukaisesti. Myös soluja kehitetään jatkuvasti mahdollisimman optimaaliseksi. Uusimmat solut tunnistat musta-valko-väriyhteydestä.



SmartCells™

Optimaalinen, painetta tasaava istuma-asento jopa korkean painehaavariskin potilaille

Korkealuokkaisen paineen vähennyksen lisäksi, tyynyt tarjoavat miellyttävän istuinmukavuuden ja erittäin hyvän istuma-asennon. Tämän ansiosta Vicair-istuintyyny soveltuvatkin myös erittäin korkean painehaavariskin omaaville potilaille.



Boxing Effect antaa lisätukea ja mukavuutta

Enemmän voluumia tyynyssä antaa paremman upotuksen ja lisää SmartCell-solujen tukea. Vetoketjun ansiosta helpompi säätää käyttäjän istuessa tuolissa.



Hygieniatyyny O2



Hygieniatyyny O2 8 cm

Aukollinen hygieniatyyny koostuu 4 osasta, **Voidaan mukauttaa sopivaan kokoon kuten kaikki muutkin Vicair-tyynyt.** Tyyny on suunniteltu sopimaan Acuatec Ocean Ergo suihkutuoleihin, mutta sitä voidaan käyttää myös muissa suihku- ja wc-tuoleissa tms. Tyyny kiinnitetään kiinnitysnauhoilla jokaisesta kulmasta, joka varmistaa, että tyyny pysyy paikallaan. Päälinen on nesteitä hylkivää materiaalia, ja alapuoli verkkomateriaalia, mikä helpottaa tyynyn puhdistamista.

Korkeus: 8 cm
Koko: 48x45 cm
Max. 250 kg.



Active O2



Active O2 6 cm ja 9 cm

Active O2 -malli on suunniteltu aktiiviselle pyörätuolin käyttäjälle. Tyyny ehkäisee painehaavoja, ja sitä voidaan käyttää painehaavojen hoito-ohjelman osana (tasot I-IV).

Tyynyn takaosassa on neljä SmartCells™-osiota ja edessä vaahtomuoviosio, joka helpottaa siirtymistä. Vaahtomuoviosio on suojattu helposti puhdistettavalla nesteenkäytävällä vuorauksella. Tyyny on kokonaan konepestävä SmartCell-ilmakartioineen, kun vaahtomuovivahvikkeen poistaa pesun ajaksi.

Tyynyn etuosassa on säilytuspussi henkilökohtaisille tavaroille esim. avaimet, puhelin ja lompakko.

Tyyny on käytettävissä sellaisenaan, mutta kovaan kulutukseen suosittelemme erillistä päällistä. Päällisvaihtoehdot viimeisellä sivulla.

Vakiokoot:

6 cm: 35x35 – 53x53 cm

9 cm: 35x35 – 60x60 cm

Max. 250 kg.



Adjuster O2



6 cm

10 cm



**Nyt myös
12 cm!**



Adjuster O2 6 cm 10 cm ja 12 cm

Adjuster O2 -malli on viidestä tarvittaessa säädettävästä SmartCells™-osiosta koostuva istuintyyny, joka ehkäisee painehaavoja, ja jota voidaan käyttää painehaavojen hoito-ohjelman osana (tasot I-IV).

Tyyny on kokonaisuudessaan konepestävä, mikä takaa optimaalisen hygienian. Tyynyn hengittävyys pitää lämpötilan sopivana ja ehkäisee kosteutta, mikä on tärkeää painehaavojen ehkäisyssä.

SmartCell-ilmakartioita lisäämällä tai poistamalla osioista saadaan tuettua epäsymmetristä asentoa.

Tyynyn kanssa käytetään ComfAir-vakiopäällistä, Top Cover -huppupäällistä tai inkopäällistä.

Tarpeen mukaan voidaan valita yksi tai useampi päällisvaihtoehto.

Vakiokoot:

6 cm: 35x35 – 53x53 cm

10 cm: 35x35 – 60x60 cm

12 cm: 35x35 – 58x58 cm

**Tilauksesta erikoiskokoja
35x35 – 60x60 cm välillä.**

Max. 250 kg.



Inkopäällinen

Xxtra O2

Xxtra O2 500 kg 10 cm

Xxtra O2 malli perustuu Adjuster O2 malliin, mutta se on saatavana kokoon 75x75 cm asti ja sopii vaikuttavaan 500 kg käyttäjäpainoon asti.

Tyyny on silti kevyt ja tarjoaa turvallisen ja vakaan istumapinta-alan.

Korkeus: 10 cm

Vakiokoot:

55x45 – 65x65 cm

**Tilauksesta erikoiskokoja
55x45 – 75x75 cm välillä.**

Max. 500 kg.



Multifunctional O2



Multifunctional O2 10 cm

Multifunctional O2 on muuten samanlainen Adjuster O2 10 mallin kanssa, mutta siinä on suurempi takaosa, mikä tekee siitä erittäin soveltuvan käytettäväksi kokoon-taitettavien pyörätuolien kanssa, jossa on säädettävä istuinsyvyys. Sopii myös käyttäjille, joilla on vakavia funktionaalisia ja/tai anatomisia vartalon epäsymmetrioita.

Tyynyn kanssa käytetään ComfAir-vakiopäällistä, Top Cover -huppupäällistä tai inkopäällistä.

Tarpeen mukaan voidaan valita yksi tai useampi päällisvaihtoehto

Korkeus 10 cm

Vakiokoot:

Leveydet: 37/40/45/50 cm

Syvyys 52 cm

Max. 250 kg.



Vector O2



Vector O2 6 cm ja 10 cm

Vector O2 -malli yhdeksästä tarvittaessa säädettävästä SmartCells™-osiosta koostuva istuintyyny, joka ehkäisee paineenvaajoja, ja jota voidaan käyttää paineenvaajojen hoito-ohjelman osana (tasot I-IV).

Istuintyynyn rakenteen ansiosta sillä voidaan keventää hyvin istuinkyhmyjen ja häntäluun aluetta. Sivuosiot tukevat lantiota ja estävät jalkojen ulko-kiertoa, kun taas etukeskiosa tukee reisiä ja estää sisäkiertoa.

Tyynyn kanssa käytetään ComfAir-vakiopäällistä, Top Cover -huppupäällistä tai inkopäällistä. Tarpeen mukaan voidaan valita yksi tai useampi päällisvaihtoehto.

Vakiokoot:

6 cm: 35x35 – 53x53 cm

10 cm: 35x35 – 60x60 cm

Tilauksesta erikoiskokoja 35x35 – 60x60 cm välillä.

Max. 250 kg.



Junior Vector O2



Junior Vector O2 8 cm

Vicair Junior Vector O2 on suunniteltu erityisesti lapsille ja pienikokoisille käyttäjille. Juniorissa on kaikki Vector O2:n ominaisuudet, mutta pienemmät koot.

Tyynyn mukana tulee aina ComfAir-vakiopäällinen.

Korkeus: 8 cm

Vakiokoot:

25x25, 30x30 ja 35x35 cm

Tilauksesta erikoiskokoja 25x25 – 35x35 cm välillä.

Max. 100 kg.



Centre Relief O2



Centre Relief O2 10 cm

Centre Relief on suunniteltu erityisesti käytettäväksi perianaalialueiden toimenpiteiden, synnytysten ja erityisen vaikeiden kohdennettujen painehaavojen hoidon yhteydessä. Tämän 10 cm korkean tyynyn SmartCells™ solut voidaan irrottaa kokonaan keskeltä, jolloin vältetään ihokosketus, vaikka tyyny muuten pysyy erittäin vakaana ja tukevana.

Tyynyn mukana tulee aina ComfAir-vakiopäällinen.

Korkeus: 10 cm

Vakiokoot:

43x43 cm ja 45x45 cm

Tilauksesta erikoiskokoja 35x35 – 60x60 cm välillä.

Max. 250 kg.



AllRounder O2



AllRounder O2 istuintyyny

Täysin konepestävä housumainen malli: Optimaalinen lämmön, kosteuden ja ihon suojaus. Pysyy mukana pyörätuolin ulkopuolella tapahtuvan toiminnan aikana.

Koot lantion leveyden mukaan:

S < 38 cm

M 38 – 42,5 cm

L 43-48 cm



Vicair selkäosat



Butterfly

Butterfly selkäosa

Voidaan käyttää molemmin päin selän tai rintakehän tukemiseen istuma-asennossa.. Kiinnitys pyörätuolin selkätuen ympäri joka mahdollistaa samalla portaattoman korkeudensäädön. Päällinen pesu 60°C.

Koot: 40x20cm 45x20cm tai 50x20cm.

Anatomic & Multifunctional O2 selkäosa

Universaalit selkäosat, joka mahdollistaa optimaalisen asennon ja korkean riskin painehaavojen ennaltaehkäisyn ja paineen tasauksen Käytä esim. Strap Back tarraselkäosan (Anatomic) tai kovan selkäosan kanssa (Multifunctional)

Koot: Leveydet 32-56 cm & 36-60 cm

Max. 150 kg.

Flex Back selkäosa

Flex-selkäosan kanssa käytettäväksi kehitetty selkäosatyyppi, jossa on sisäänrakennetut lateraaliset tuet ja johon on mahdollista lisätä optiona saatavat lisätukea antavat sivutuet.

Koot: 41, 45 ja 50 cm x 55 cm (lev. x kork.)

Max. 150 kg.



Anatomic & Multifunctional



Flex Back

Päälliset

ComfAir



Top Cover



Inkopäällinen



ComfAir -vakiopäällinen

ComfAir-vakiopäällinen on kokonaan tyynyn ympärille menevä vetoketjullinen päällinen, joka on 100 % hengittävä ja pestävä.

Top Cover -huppupäällinen

Top Cover -huppupäällinen on nimensä mukaisesti "huppuna" tyynyn päälle asetettava 100 % hengittävä ja pestävä päällinen. Päällisessä ei ole vetoketjua.

Incotec-inkopäällinen

Inkopäällinen on kokonaan tyynyn ympärille menevä vetoketjullinen inkontinenssipäällinen, jonka päällisosa on hengittävää polyuretaania.

Koot

Active O2 & Adjuster O2 & Vector O2

Standard (Sizes >53 cm height 10 only)
On request

Inch	CM	14	15	16	17 1/4	18	19	20	21	22	23	24
		35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
14	35											
15	38											
16	40											
17 1/4	43											
18	45											
19	48											
20	50											
21	53											
22	55											
23	58											
24	60											

Katso kokotaulukosta

www.campmobility.fi/tuotteet/istuintyyny/vicairistuintyyny
kaikki saatavilla olevat eri korkeudet ja vakio- ja erikoiskoot



Tyynyn ja päällisen ympäri kulkee vetoketju jonka avulla pystyy ylläpitämään tyynyn muotoa ja estämään SmartCells™-solujen liikkumisen pois käyttäjän alta. Lisäksi sen avulla pystyy helposti lisäämään tai poistamaan soluja käyttäjän istuessa istuimessa.

Tekniset tiedot



Jopa 145 kokoa*



6 /9/10/12 cm
Junior & Hygiene
8 cm



500-850 g



250 kg**
(Junior 100 kg)
(Xtra 500 kg)



Päällinen, ulko-
päällinen ja
SmartCells 60°



Valmistaja:
Vicair B.V.
Bruynvisweg 5
1531 AX Wormer
The Netherlands
+31 (0)75 - 642 9999

* Katso kaikki koot <http://www.campmobility.fi/tuotteet/istuintyyny/vicairistuintyyny>
_Vicair O2 istuintyyny kokotaulukosta tai pyydä myyjältä. Tilauksesta myös erikoiskokoja.

**Maksimikuormitus on määritelty olettaen, että tyynyn leveys on valittu asianmukaisesti aiotun käyttäjän mittojen mukaan.



Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa
tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
© 2023 Camp Mobility Finland



www.campmobility.fi

Asiakaspalvelu
09 350 76 310
info@campmobility.fi
Varaosapalvelu
09 350 76 312
varaosat@campmobility.fi