

Turvallisuus
MOBELI® – johtoajatuksena.

Innovatiivinen ja omaperäinen.

MOBELI®

Kiinnitys. Lukitus. Siinä kaikki.
Turvallisuus on tärkeintä.



EN-apuvälineet
Sillankorvankatu 25, 05810 Hyvinkää
Puhelin (019) 469 312
Faksi (019) 469 311
info@en-apv.com

ROTH®

D-72213 Altensteig
Telefon +49 (0) 7453 9381-0
Fax +49 (0) 7453 9381-23

www.mobeli.de
Sie erreichen uns unter info@mobeli.de

Siirrettävät apuvälineet
MOBELI® – pieni koko, suuri vaikutus.

Siirrettävät apuvälineet tuovat monipuolista helpotusta joka päiväiseen elämään.

Apuväline sijoitetaan haluttuun paikkaan ja siihen voi kiinnittää esim. hiustenkuivaajan, parranajokoneen tai hiusharjan.

Suihkunpidikkeessä on kääntyvä varsi. Siirrettävät teleskooppeilit, joihin on saatavana myös LED-valo, ovat nopeita ja helppoja kiinnittää.

Peili on oiva apuväline istuvalle tai esim. katetroinnin aikana. Jos kaatuilevat kävelysauvat aiheuttavat harmia, on siirrettävästä Duo-pidikkeestä apua. Duon voi kiinnittää seinään tai pöytätason alle ilman työkaluja. Se on aina tukeva ja turvallinen.



MOBELI®	Tilausnumero
Siirrettävä klipsipidike, nivel	14992 04 S
Duo kävelysauvan pidike	14002 06 S
Suihkunpidike, nivel	14992 02 S
Suihkunpidike	14002 02 S
Liikuteltava teleskooppeili (80 cm)	14002 09 S
LED-klipsivalo (sisältää 50 tunnin pariston)	14092 09



Nimensä mukaisesti: näkö- ja roiskesuoja. Erittäin suosittu ja ihanteellinen apuväline hoitotyössä. Saranoidun kannattimen voi kääntää ylöspäin tai vaakasuorassa asennossa myös sivuun. Integroitu jarru pitää Mobeli varren automaattisesti halutussa asennossa. Varsi on suunniteltu siten, että sen pitkä kolmiosainen ja joustava rakenne pienentää kannattelevaan seinään kohdistuvaa vipuvoimaa.



MOBELI®	Tilausnumero
Suojaverhontanko (ilman verhoa)	14002 05 S
Antibakteerinen verho (1200 x 800 mm)	140612 08

Tukijärjestelmät

Turvallisempi ote. Juuri siellä missä sitä tarvitaan.

Heti käyttövalmis turvallinen ote ilman porausta. Kun QuattroPower-tukijärjestelmä asetetaan haluttuun paikkaan ja painetaan kiristysalvat kiinni, saadaan käyttöön luotettava apuväline tasaisella, hengittämättömällä pinnalla.

Neljän imuelementin QuattroPower -tukijärjestelmässä on erityinen rakenne, joka vähentää vipuvaikutusta ja voi kantaa jopa 80 kg painon. Järjestelmän voi kiinnittää myös laatoitetuihin kevytväliseiniin.



MOBELI®	Tilausnumero
QuattroPower Tuki	14002 65 S
QuattroPower Tuki lisäkahvalla	14002 66 S
QuattroPower Amme	14002 61 S
QuattroPower Amme lisäkahvalla	14002 62 S



Optimaalinen kylpyammeeseen. QuattroPower Amme sopii erinomaisesti ammeen käyttäjälle. Se kestää jopa 50 kg veto-/painovoiman.

Nyt Mobelistä saa apua, vaikka laattakoko olisi pienempi kuin 14 cm ja kiinnityspinta huokoinen. Lisävarusteena saatava itsekiinnittyvä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu asennuslevy on helppo kiinnittää tasaiselle pinnalle imuelementin alle. Täähän kiinnitykseen ei tarvita poraa tai ruuveja.



MOBELI®	Tilausnumero
Asennuslevyt, ruostumaton teräs/pari (145x145 mm)	14614 14



MOBELI®

Vapautta liikkumiseen. Siirrettävät tukikahvat.

Siirrettävät tukikahvat

Lisää liikkuvuutta ja esteettömyyttä.

ROTHin patentoidut pikakahvat ovat osoittautuneet erittäin hyödyllisiksi apuvälineiksi liikuntarajoitteisten ja ikääntyneiden käyttäjien arjessa.

Siirrettävän kahvan kiinnittäminen ja irrottaminen on helppoa ja nopeaa. Läpimitaltaan 120 mm olevat imuelementit painetaan tasaiselle, hengittämättömälle pinnalle ja käännetään kiristyssalvat kiinni – siinä kaikki.

Korkealaatuiset kahvat on valmistettu ja hyväksytty käyttöön saksalaisen TÜV-kriteeristön mukaisesti. Kahvoissa on suuri imuteho ja niitä saa eripituisina. Lisälaitteet, kuten suihkupidike, kaksoiskoukut ja ammeenlyhennin, muodostavat yhdessä kahvojen kanssa toimivan Mobeli-tuoteperheen.

	Kahvan pituus mm	Käyttäjän maks.paino	Tilausnumero
MOBELI®			
2 käden kahva	210	100 kg	14002 25 S
2 käden kahva	350	95 kg	14002 26 S
2 käden kahva	650	95 kg	14002 27 S
2 käden kahva, teleskooppi	220-345	85 kg	14002 21 S
2 käden kahva, teleskooppi	340-465	85 kg	14002 22 S
2 käden kahva, teleskooppi	440-565	85 kg	14002 23 S
2 käden kahva, teleskooppi	665-790	80 kg	14002 24 S

MOBELI®

Teleskooppikahva

Ominaisuus kehitettiin, jotta kahvan voi asentaa kiinnityspaikan laattakoosta riippumatta. Kahvan halkaisija on 35 mm.

Imuelementit

Valmistettu erikoiskumista. Soveltuvat käytettäväksi mm. erilaisilla laattapinnoilla.

Pikakiinnitys

Kaikissa Mobeli-kahvoissa on pikakiinnitys. Erillisiä kiinnitysvälineitä ei tarvita, ja kahvan voi helposti irrottaa ja ottaa vaikka matkalle mukaan. Kiristyssalpa, kuten kaikki kahvan metalliosat, on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

Turvattunnistin

Vallankumouksellinen uutuu! Markkinoiden ensimmäinen kahva, joka valvoo omaa imutehoaan. Kun imuelementin kiristyssalvassa oleva tunnistin on alas painuneena, on imu kovimmillaan ja kahvan käyttö turvallista. Jos tunnistin nousee ylös ja punainen merkki näkyy, on kahvan imuteho heikentynyt. Silloin imuelementit on irrotettava, kiinnityspinta puhdistettava ja kahva kiinnitettävä uudelleen. Näkövammaiset voivat tunnustella salpaa ja päätellä tunnistimen asennosta, onko kahva turvallisesti kiinnitetty.


Siirrettävät apuvälineet

Lisää liikkuvuutta. Matkalla tai kotona.

Vaativampaan käyttöön tarkoitettu QuattroPlus voidaan kiinnittää seinälle kulmittain tai vaakatasoon esimerkiksi fyysisen harjoittelun tueksi.

Sarananivel tekee QuattroPlusista erittäin monikäyttöisen. Kahvassa olevan neljän imuelementin ansiosta kahvaa voi käyttää jopa 160 kg painava henkilö.

Käytettäessä vinoa niveladapteria QuattroPlusin kiinnittäminen on mahdollista joka suunnassa – kantavuus silloin max. 80 kg painava henkilö.

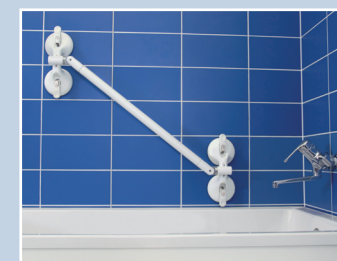

	Kahvan pituus mm	Käyttäjän maks.paino	Tilausnumero
MOBELI®			
QuattroPlus	200-325	160 kg	14002 41 S
QuattroPlus	320-445	160 kg	14002 42 S
QuattroPlus	420-545	160 kg	14002 43 S
QuattroPlus	645-770	150 kg	14002 44 S

Teleskooppikahvojen käyttömahdollisuuksia voidaan entisestään laajentaa sijoittamalla sarananivel tai liitossovitin imuelementin ja tukivarren (kahvan) väliin. Näin mahdollistetaan erilaiset kulmat ja päästään optimaaliseen tukikahvan sijoitteluun.

Mobeli on omaa luokkaansa siirrettävien tukikahvojen valikoimassa. Rothin tuoteperhe on johdonmukaisen tuotekehityksen tulos. Perinteikkään saksalaisyrityksen tukikahvat kehitetään ja valmistetaan Saksassa TÜV-valvonnassa.



	Käyttäjän maks.paino	Tilausnumero
MOBELI®		
Niveladapteri (pari)	50 kg	14005 55
Niveladapteri (pari)	riippuu kahvan pituudesta	14005 58
Niveladapteri (pari) QP:lle	80 kg	14615 57



Käytännöllinen ja mukava. Ammeenlyhentimen voi sijoittaa haluamaansa kohtaan ammetta. Se estää kylpijän vajoamisen veteen. Lyhennintä voi käyttää myös tarjottimena ammeen ulkokylkeen kiinnitettynä.

Stabilisaatiokahvat. Mobeli Stabi vakauttaa käden liikettä. Saatavana kahta eri mallia. Nopea kiinnitys kaikkiin ei-huokosiin pintoihin, esim. lakattu puu, muovi tai metalli.

Stabi Horisontaalinen vakauttaa käden vaakasuuntaista liikettä. Stabi Vario kääntyy kaikkiin haluttuihin suuntiin eli pystyyn, vaakaan, vasemmalle tai oikealle, 45 asteen kulmaan.



	Ammeen leveys mm	Tilausnumero
MOBELI®		
Ammeenlyhennin (2 imuelementtiä)	510-	14002 81 S
Ammeenlyhennin (3 imuelementtiä)	510-700	14002 82 S

	Kahva mm	Kantavuus	Tilausnumero
Stabi Horizontal	31	15 kg	14002 95 S
Stabi Vario	31	15 kg	14002 96 S

