

AQUATEC®

Ocean VIP Ergo **Ocean** Dual VIP Ergo

Edistyksellisimmät kallistettavat suihkutuolimme



Edistykselliset premium luokan ratkaisut

Kliinisesti suunniteltu design, säädettävä ja vakaa



Yes, you can.®

Uuden sukupolven kallistettavat suihkutuolit

Uusimmat Aquatec Ocean VIP Ergo ja Ocean Dual VIP Ergo ovat modulaarisia kallistavia suihkutuoleja, jotka on suunniteltu sopimaan monenlaisille henkilöille ja heidän asentotarpeilleen. Molemmissa malleissa on -5° - 40° istuimen kallistuskulma ja Ocean Dual VIP Ergossa on myös selkänojan kallistus 5° - 35° niille, joilla on monimutkaisemmat istuma- ja asentovaatimukset.

Kuten kaikki Ocean Ergo -mallit, VIP ja Dual VIP Ergo voidaan räätälöidä jokaiselle yksilöllisesti tekemällä yksinkertaisia säätöjä tai lisäämällä helposti istuvia lisävarusteita. Kliininen suunnittelu helpottaa suihkutuolin käyttöä hoitajalle ja tarjoaa samalla optimaalisen turvallisuuden ja mukavuuden käyttäjälle.

UUSI

Parannettu ergonominen pääntuen pidike

Moniakselisäädöillä varustettu uusi ergonominen pääntuen pidike antaa erinomaisen asentotuen pään ja kaulan alueelle. (säätö leuka ylös / leuka alas). Säädöt ovat nopeita ja helppoja integroituja kiinnitysruuveja kääntämällä. Työkaluja ei tarvita.

UUSI

Uusi tilt-stop -toiminto

Uutena ominaisuutena kallistettavissa malleissa on Tilt Stop kallistuksen pysäytystoiminto, joka **estää tuolin kallistumista eteenpäin 0°:n yli**. Tämä varmistaa, että runko pysyy vaakasuorassa maahan nähden ja helpottaa siirtymisiä.



Edut ja ominaisuudet



Ainutlaatuinen tilt-in-space -toiminto

Tilt-in-space kallistusmekanismi tarkoittaa sitä kallistuksen aikana tuoli liikkuu alaspäin ja eteenpäin, joka pitää käyttäjän painopisteen lähellä tuolin painopistettä. Tämä tekee kallistuksesta kevyempää ja on enemmän intuitiivinen hoitajalle, luo pehmeämmän ja mukavamman kokemuksen käyttäjälle ja on pienentää tuolin kokonaistilaa tuotteen vakauteen vaikuttamatta.

Selkäosan kallistus

Ocean Dual VIP Ergossa on istuinkulman kallistuksen lisäksi myös selkäosankallistus 5° - 35°



Muotoiltu, ergonominen istuin

Istuin on suunniteltu niiden painaumien mukaan, joita ihmiset jättävät jälkeensä istumisen jälkeen, jotta varmistetaan pystysuorempi ja vakaampi istuma-asento, mikä lisää itsenäisyyttä ja mukavuutta. 5° istuimen kallistus nostaa polvet luonnolliseen kyökkyasentoon wc-käynnin ajaksi. Edessä on myös ns. wc- ja siirtotuet, joiden avulla käyttäjä voi asettua mukavaan asentoon wc- ja suihkukäyntejä varten.

5° - 35°



UUSI

Parannetut uudet käsituet

Uudet käsituet lisäävät tukea ja mukavuutta parannetun lepoasennon ja pehmeämmän pinnan ansiosta. Uusi käsitukien leveämpi muotoilu antaa paremman tuen kädelle. Käsituissa on myös helppokäyttöinen integroitu turvalukitusjärjestelmä. Uusiin käsituikiin lisävarusteena saatavana myös uusi etutukitanko.

Säädettävät käsituet ja jalkatuet

Käsitukien korkeus, jalkatukien korkeus ja istuimen korkeus ovat helposti säädettävissä.



Monipuolisesti konfiguroitava

Saatavana laaja valikoima istuinasettoa-, wckäyntejä ja istumista tukevia lisävarusteita, joita voidaan käyttää tukemaan monenlaisia tilanteita ja asentotarpeita.



Erittäin vakaa

Parannettu vakaus lisää turvallisuutta ja varmuutta jopa suurimmalla kallistuksella.



Pienempi koko

Optimoitu pienempi akseliväli helpottaa ohjaamista pienissä tiloissa.



Teräsrunko

Ruostumaton teräs.
Korroosiovapaa runko.



Konepestävä

Konepestävä kireyssäädettävä selkäosa.



Katso Ocean VIP Ergo
www.invacare.eu.com

Esittelyssä

Ocean Dual VIP Ergo

Tutustu edistyksellisimpiin omassa tilassaan kallistuviin suihkutuoleihimme, joissa on viimeisimmät suunnitteluparannukset. Erittäin muokattavat ja modulaariset Ocean VIP Ergo ja Ocean Dual VIP Ergo tarjoavat käyttömukavuutta ja asentotukea lisääviä kylpy- ja suihkuratkaisuja:



Ocean VIP Ergo

Edistyksellinen tilt-in-space kallistuva suihkutuoli
-5° - 40° istuinkallistuksella.




Ocean Dual VIP Ergo

Edistyksellinen tilt-in-space kallistuva suihkutuoli
-5° - 40° istuinkallistuksella ja
5° - 35° selkäosankallistuksella

UUSI

Ergonominen päätuen pidike

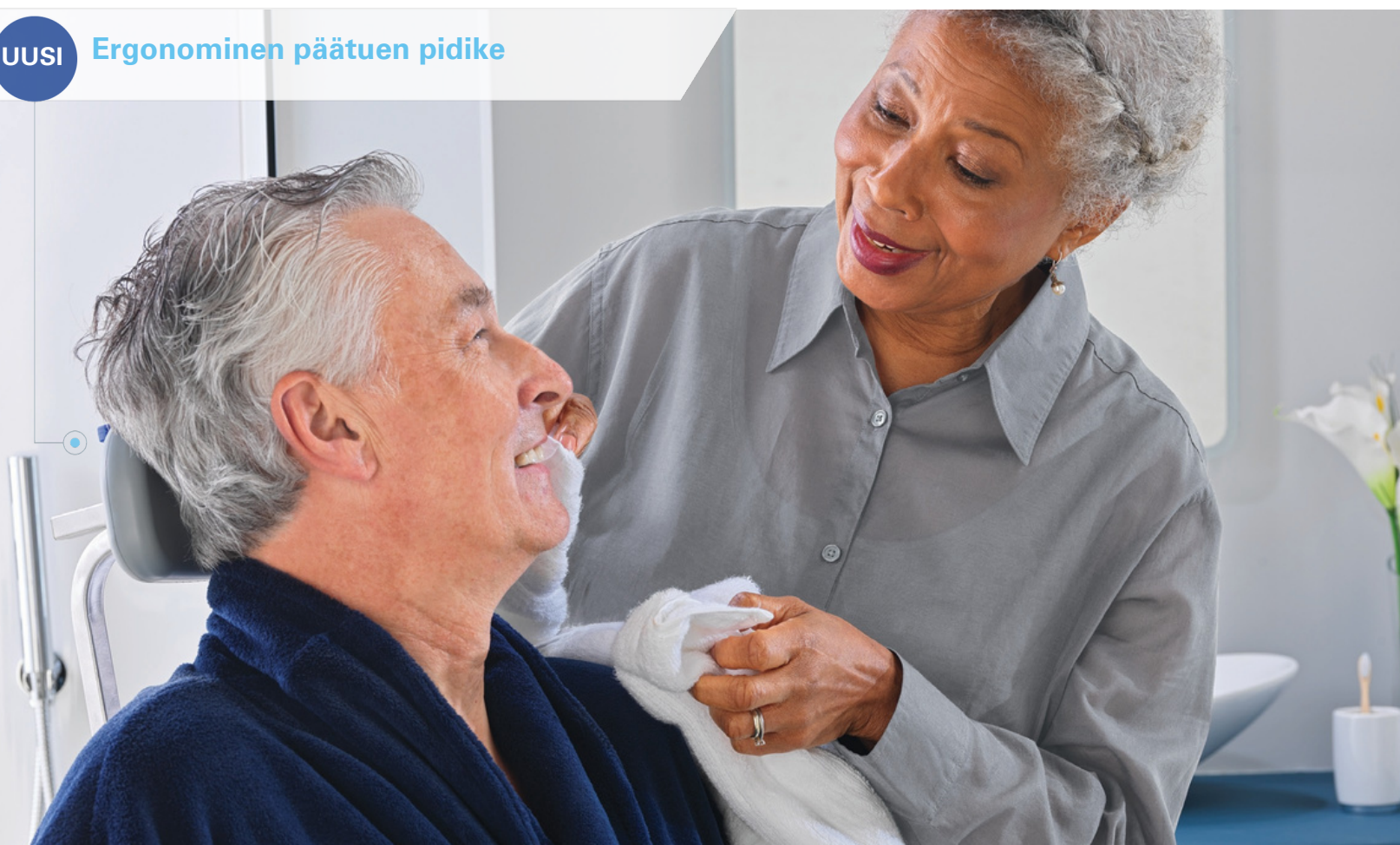

Tekniset tiedot

Saat kattavammat myyntitiedot tästä tuotteesta, mukaan lukien tuotteen käyttöohjeet, Invacaren verkkosivustolta tai www.campmobility.fi.

					
	Istuinleveys ▼	Istuinsyvyys ▼	Kokonaisleveys ▼	Kokonais-syvyys ▼	Leveys käsikien välissä ▼
Ocean VIP Ergo	480 mm	480 mm	565 mm	1000 mm	475 mm
Ocean Dual VIP Ergo	480 mm	480 mm	565 mm	1000 mm	475 mm

					
	Istuinkallistus ▼	Selkäosan-kallistus ▼	Paino ▼	Kuormitus-kapasiteetti ▼	Istuinkorkeus ▼
Ocean VIP Ergo	-5° - 40°	-	23.5 kg	150 kg	47,5 - 60 cm
Ocean Dual VIP Ergo	-5° - 40°	5° - 35°	28.3 kg	150 kg	47,5 - 60 cm

Valkoinen

Runkoväri

Tel: +41 61 487 70 70
hgeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com

Invacare International GmbH
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil
Switzerland

© 2021 Invacare International GmbH. All rights reserved. All information quoted is believed to be correct at time of print. Invacare reserves the right to alter product specifications without prior consultation. Invacare Ocean VIP Ergo and Ocean Dual VIP Ergo - EU - 04/2021

