

AQUATEC®

# Ocean

## Ergo-familjen



Möjligheternas mobila dusch- och toastol  
för personlig hygien

SÄKERHET | SJÄLVSTÄNDIGHET | ERGONOMI



# Designen är baserad på användarnas erfarenheter för att öka självständigheten, säkerheten och flexibiliteten.

Personlig hygien är något som är högst privat och en viktig del av en persons liv och välbefinnande. **Aquatec Ocean Ergo-familjens** dusch- och toastolar har utformats med användarkomfort, självständighet och värdighet i åtanke. Grunddesignen kommer från den väletablerade Aquatec Ocean-serien, som funnits på marknaden i många år. Ocean Ergo-familjen har en rad nya funktioner som har utformats för att underlätta rutiner för den personliga hygien, för såväl användare som vårdare.

## Säkerhet, självständighet och värdighet

Vi har tagit fram en ny konturformad sittyta för att uppmuntra till en mer upprätt, stabil sittställning,

vilket främjar användarens självständighet och den övergripande komforten. Ökad stabilitet på ramens främre del möjliggör kompaktare mått och erbjuder även ökad säkerhet och trygghet när brukaren sitter i stolen. Dessutom gör den optimerade hjulbasen det ännu lättare för en vårdgivare att manövrera stolen i trånga utrymmen, samtidigt som passformen över toaletter blir bättre, för självständiga toalettbesök

## Modulär och flexibel design

Ocean Ergo-familjens modulära konstruktion innebär att stolarna kan anpassas för att passa många olika användarbehov med endast några enkla justeringar, eller genom några av våra lättmonterade tillbehör.

## Exempel på **ANDRA** funktioner:

- ▶ Stabil ram i rostfritt stål
- ▶ Maskintvättbart ryggstöd med justerbara snabbspännen
- ▶ Enkel demontering för transport och förvaring



**NYA**

## INNOVATIVA FUNKTIONER

### 1 Innovativ ergonomisk sits

- Designen utgår från användarens behov och hjälper till att få en upprätt sittställning för ökad stabilitet och komfort.

### 2 Fler anpassnings- möjligheter

- Med ytterligare höjdjusteringsmöjligheter för både fotstöd och armstöd.

### 4 Stabil och lätthanterlig

- Den optimerade hjulbasen gör det enkelt att manövrera duschstolen i trånga utrymmen.

### 3 Utomordentligt stabil

- Med tippstödet fram ges möjlighet till förbättrad stabilitet för ökad säkerhet och trygghet, när behov finns.



## NYHET Konturformad, ergonomisk sits

- ▶ Utvecklad och baserad på de avtryck och tryckpunkter som människor lämnar efter sig när de sitter.
- ▶ Sitsen har en lutning på 5° som lyfter knäna till en naturlig hukande position för toalettbesök
- ▶ Överföringsstöd på sitsen som gör att användaren enkelt kan positionera sig



## Mycket konfigurerbar

Kan fås med ett brett sortiment av positionerings-, säkerhets-, toalettbesöks- och sitstillbehör som kan användas för att stödja en rad olika behov.

Se hela sortimentet av tillbehör online på [www.invacare.se](http://www.invacare.se) i vår tillbehörsbröschyr.



Positionering



Säkerhet



Toalettbesök



Sitsar och ryggstöd

## Modeller som är justerbara i tilt och sitsvinkel

**Ocean Ergo VIP och Ocean Ergo Dual VIP**

- ▶ Båda har en sitsilt på -5° till 40° med en smart mekanism för förflyttning av tyngdpunkten som ger optimal stabilitet med kompakta mått. Ocean Dual VIP ger även möjlighet att anpassa ryggstödet vinkel mellan 5° och 35°.



# Ocean Ergo-familjen

Den flexibla serien med dusch- och toalettstolar erbjuder lösningar för den personliga hygienen för ett brett spektrum av fysiska förhållanden, från en vanlig upprätt duschstol till modeller med möjlighet att tilta och vinkla ryggstödet.



## **Ocean 24” Ergo XL ▲**

En självmanövrerad XL-modell med 24” drivhjul för en maxvikt på 180 kg

## **Ocean Ergo XL ▲**

XL-modell, för en maxvikt på 180 kg

## **Ocean VIP Ergo ▲**

För personer med extra behov av positionering. Max vikt 150 kg.

## **Ocean Ergo ▲**

Standard-modellen för dusch och toalett. Maxvikt 150 kg.

## **Ocean Dual VIP Ergo ▲**

För personer med komplexa sitt- och positioneringsbehov. Max vikt 150 kg.

## **Ocean 24” Ergo ▲**

Självmanövrerad modell med 24” drivhjul. Maxvikt 150 kg

## Tekniska data ▼

För mer detaljerad information gällande denna produkt, inkluderat produktens bruksanvisning, var vänlig besök vår hemsida [www.invacare.se](http://www.invacare.se).



Sittbredd ▼



Sittdjup ▼



Totalbredd ▼



Totaldjup ▼



Bredd mellan armstöden ▼

<b>Ocean Ergo</b>	480 mm	480 mm	565 mm	905 mm	455 mm
<b>Ocean Ergo XL</b>	480 mm	480 mm	645 mm	905 mm	535 mm
<b>Ocean 24" Ergo</b>	480 mm	480 mm	670 mm	1050 mm	455 mm
<b>Ocean 24" Ergo XL</b>	480 mm	480 mm	670 mm	1050 mm	535 mm
<b>Ocean VIP Ergo</b>	480 mm	480 mm	565 mm	1000 mm	455 mm
<b>Ocean Dual VIP Ergo</b>	480 mm	480 mm	565 mm	1000 mm	455 mm



Sitstill ▼



Ryggvinkel ▼




Vikt ▼



Max brukarvikt ▼

<b>Ocean Ergo</b>	-	-	17 kg	150 kg
<b>Ocean Ergo XL</b>	-	-	18 kg	180 kg
<b>Ocean 24" Ergo</b>	-	-	23 kg	150 kg
<b>Ocean 24" Ergo XL</b>	-	-	24 kg	180 kg
<b>Ocean VIP Ergo</b>	-5° - 40°	-	23.5 kg	150 kg
<b>Ocean Dual VIP Ergo</b>	-5° - 40°	5° - 35°	28.3 kg	150 kg

## Ramfärg ▼

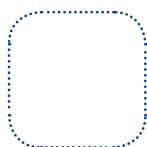

Vit

## Regulatoriska data ▼



CE

**Kundservice: 08-761 70 90**  
 Fax 08-761 81 08  
[sweden@invacare.com](mailto:sweden@invacare.com)  
[www.invacare.se](http://www.invacare.se)

Invacare AB  
 Box 66 - 163 91 Spånga  
 Sweden