



Täyttää
IEC 60601-2-52
vaatimukset



TÜV hyväksytty

**Aquatec[®] Ocean, Ocean XL,
Ocean Vip, Ocean Vip XL,
Ocean Dual Vip ja Ocean E-Vip**

Aquatec[®] Ocean suihku- ja wc-tuolisarjasta löydät laadukkaat mallit pienillä pyörillä, kelauspyörillä, kallistettavalla ja sähköisesti kallistettavalla istuimella sekä mallit XL -kokoisille käyttäjille. – Oikeat mallit kaikkiin käyttötarpeisiin.

AQUATEC[®]



Yes, you can.[®]



Ocean -suihkutuoli pienillä pyörillä

- Tukeva runko ruostumatonta terästä
- Yksilöllisesti säädettävä istuinkorkeus: ilman työkaluja.
- Konepestävä, säädettävä selkäosa pikalukituksella, voidaan säätää käyttäjän tarpeiden mukaan.
- Tilaa säästävä työntötanko mahdollistaa optimaalisen asemoinnin wc-istuimen päälle.
- Ergonomiset, ylöskääntyvät käsituet voidaan säätää kahdelle eri korkeudelle.
- Korkeussäädettävät, irrotettavat ja sivulle kääntyvät jalkatuet mahdollistavat helpot siirtymiset.
- Sivulle taittavat, teksturoidut jalkalaudat ja kantaremmit auttavat pitämään yllä turvallisen asennon.

Ocean suihkutuoli on saatavana seuraavilla eri kokoonpanoilla:

- Standardi malli pienillä pyörillä.
- Itselkeltava malli 24" kelauspyörillä, sis. pikalukitusakselit ja neljä pyörää.
- XL malli pienillä pyörillä. (180 kg max.kuormitus ja leveämpi käsitukien väli).
- Kaikki mallit voidaan varustaa jälkikäteen 24" kelauspyörillä ja/tai XL -malliksi.

Ominaisuuudet**Ocean 24" kelauspyörillä**

Itselkeltava malli 24" pyörillä. sis. kelauspyörien pikalukitusakselit ja neljä pyörää.

**Ocean XL**

Leveämpi käsitukien väli ja maksimikuormitus 180 kg saakka.

**Istuinkorkeuden säätö**

Yksilöllisesti säädettävän istuinkorkeuden säätöön ei tarvita työkaluja.

**Voidaan purkaa osiin**

Helppo purkaa ja koota kuljetusta varten tai esim. matkalle mukaan.

**Korroosiosuojattu**

Vakaa ja tukeva runko on korroosion kestävä ruostumatonta terästä.

Ocean Vip - kallistettava suihkutuoli

- Tukeva runko ruostumatonta terästä
- Yksilöllisesti säädettävä istuimen kallistus (kallistuskulma 0°- 35°)
- Kaasujousi ruostumatonta terästä
- Erittäin vakaa jopa äärimmäisessä kallistusasennossa
- 3 portainen istuinkorkeudensäätö ilman työkaluja
- Erittäin mukava, ergonomisesti muotoiltu istuin
- Konepestävä, säädettävä selkäosa pikalukituksella, voidaan säätää käyttäjän tarpeiden mukaan.

Ocean Vip suihkutuoli on saatavana seuraavilla eri kokoonpanoilla:

- Standardi malli pienillä pyörillä.
- Standardi malli pienillä pyörillä ja alusastian pidikkeellä
- Standardi malli pienillä pyörillä, alusastian pidikkeellä ja pehmeällä istuimella
- XL malli 150 kg, pienillä pyörillä (leveämpi käsitukien väli)
- Ocean Vip voidaan jälkikäteen varustaa XL käsituilla.

Aquatec Ocean Vip



Ominaisuudet



Istuimen kallistus (tiltti)

Istuinkulma 0°- 35° taaksepäin.



Päätuki

Korkeus- ja syvyyssäädettävä päätuki vakiona.



Suuntalukitus

Helppo käyttöiset jarrut 3 pyörässä, 1 pyörä on varustettu suuntalukituksella, joka helpottaa tuolin työntämistä suorassa.



Istuinkorkeuden säätö

3 portaiseen istuinkorkeuden säätöön ei tarvita työkaluja.



Ocean Dual Vip -kallistettava suihkutuoli istuimen ja selkäosan kallistuksella

- Yksilöllisesti säädettävä istuimen kallistus (kallistuskulma 0°- 35°)
- 2 lisäkaasujousta selkäosan kallistamiseksi (kallistuskulma 10°- 50°) ruostumatonta terästä
- Kaksi kallistusvipua turvalukituksella selkäosan ja istuimen kallistamiseksi
- Erittäin vakaa jopa äärimmäisessä kallistusasennessa sis. kaatumisesteet
- Konepestävä, säädettävä selkäosa pikalukituksella, voidaan säätää käyttäjän tarpeiden mukaan.

Ocean Dual-Vip suihkutuoli on saatavana seuraavilla eri kokoonpanoilla:

- Standardi malli pienillä pyörillä.
- Ocean Vipiin voidaan jälkiasentaa Ocean Dual Vipin kallistettava selkäosa ja kaatumisesteet
- Ocean Dual Vipiin voidaan jälkiasentaa XL käsituet

Ominaisuudet



Istuin 0°



Selkäosa 25°



Istuinkallistus 35°, selkäosan kallistus 50°



Kaatumisesteet vakiona

Ocean E-Vip - sähkötoimisesti kallistettava suihkutuoli

- Portaattomasti sähkösäädettävä istuin- korkeus 500-1050 mm välillä
- Sähkösäädettävä istuinkulma (kallistuskulma -5°-35°)
- Erittäin vakaa jopa äärimmäisessä kallistusasennossa ja korkeimmalla istuinkorkeudella
- Helppokäyttöinen käsiohjain istuinkorkeuden ja istuinkulman säätämiseen (vain 4 nappia)
- Koteloidut elektroniikkaosat: turvallinen käyttää myös suihkussa
- Koko tuoli on konepestävä jopa +85 °C:ssa!
- Helposti ladattava, irrotettava akkukotelo

Ocean E-Vip suihkutuoli on saatavana seuraavilla eri kokoonpanoilla:

- Standardi malli pienillä pyörillä.
- Ocean E-Vipiin voidaan asentaa jälkiasentaa XL käsituot

Aquatec Ocean E-Vip



Ominaisuudet



Sähköinen korkeudensäätö ja -kallistus

Maksimaalinen kallistuskulma ja maksimimaalinen istuinkorkeuden säätö.



Akkukotelo

Irrotettava akkukotelo.



Käsiohjain

Helppokäyttöinen käsiohjain.

Lisävarusteet



Pehmeä Universal istuin
1526032: Yhtenäinen istuin



Special Soft -istuin
Ergonominen, extra pehmeä istuin, teksturoitu pinta
1531259: sopii malleihin Ocean / Ocean XL / Vip / Vip XL / Dual Vip



Käännettävä Soft -istuin
Hygienia-aukko voidaan asentaa 4 eri suuntaan. Helppo asennus ilman työkaluja.
1544469: sopii malleihin Ocean / Vip / Dual Vip



Turvatanko
Antaa lisäturvaa. Pehmeä pehmuste. helppo asentaa.
10167-10: pituus: 540 mm
XL malleihin: 1470078: pituus: 620 mm



Turvavyöt
Takaa turvallisen asennon. Yksilöllisesti säädettävät. Helppo asentaa. Konepestävä.
1470081: rintavyö, harmaa
1470082: lantiovyö, harmaa



Käsitukien lukitus
Käsitukien lukitsemiseen.
1470077: sopii kaikkiin malleihin.



XL selkäosa
Lisää käsitukien välistä leveyttä 80 mm. Asennussarja Ocean: 1534979 SN14551780 saakka. 1558847 SN14551781 eteenpäin.



Kova selkäosa
Ergonomisesti muotoiltu kiinteä, kova selkäosa on helppo puhdistaa ja kuivata.
1575299 sopii malleihin Ocean / Vip / Dual Vip / E-Vip.



Pehmeä selkäosan tyyny
Antaa lisämukavuutta ja tukea - sopii myös pienille käyttäjille ja nuorille aikuisille.
1558769: sopii kaikkiin malleihin.



Leveät XL käsituet
Lisää leveyttä käsitukien väliin 40 mm kummallekin puolelle. Jälkiasennussarja 1470086: Vip/ Dual Vip / E-Vip (pari).



24" kelauspyörät (setti)
Sis. jarrut ja pikakiinnitysnavat.
16379: sopii malliin Ocean.



Reisi- ja amputaatiotuki
Pehmustettu, korkeus- ja kulmasäädettävä. Sopii kaikkiin malleihin.
1556894: vasen
1556893: oikea



Pehmeä Soft -istuin

key hole -hygienia-aukolla
16341: Ocean / Ocean XL / E-Vip
1470075: Vip / Vip XL / Dual Vip.



Soft -istuimen täytepala

key hole -hygienia-aukkoon
16343 :sopii kaikkiin malleihin.



Pehmeä Soft -istuin

pienellä ovaalin muotoisella
hygienia-aukolla
16342: sopii kaikkiin malleihin.



Roiskesuoja

16511: Yksinkertainen snap-on -roiskesuoja key hole -muotoiseen Soft-istuimeen.



Reisituki lisäjalkatuella

Pehmustettu, korkeus- ja kulmasäädettävä. sis. lisäjalkatuen. Sopii kaikkiin malleihin.
1546705: vasen
1546439: oikea



Lateraali vartalotuki

Lisää sivuttaistukea istuma-asentoon. Leveys- ja korkeus-säädettävä – sopii myös pienille käyttäjille ja nuorille aikuisille.
1535077: Sopii kaikkiin malleihin.



Ergonominen päätuenpidike

Lisää turvallisuutta ja käyttömukavuutta. Useita säätöasentoja (ei sis. pehmustetta).
1531613: sopii malleihin Vip / Dual Vip / E-Vip.



Pää-/niskatuki (kuvassa niskatuki)

1531465: Päätuki
1531608: Niskatuki
sopii malleihin Vip / Vip XL / Dual Vip / E-Vip



Kaatumiseste eteen

Antaa lisäturvallisuutta
1535936: sopii malleihin
Vip / Vip XL / Dual Vip



Alusastia

Pituus: 460 mm. sis. kahva ja kansi
10230: Alusastia, sopii kaikkiin malleihin.
1541289: Alusastian kansi
1527985 Alusastianpidike Ocean / Ocean XL
1470076: Alusastianpidike Vip / Vip XL / Dual Vip
1471233 Alusastianpidike E-Vip



Valmistaja: Invacare Rea AB
Växjövägen 303, 343 71 Diö, Ruotsi
p. +46 476 535 00

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2015 Camp Mobility Finland


Tekniset tiedot

Tuotenumerot (Camp/Invacare)	Aquatec Ocean	Aquatec Ocean 24"	Aquatec Ocean XL	Aquatec Ocean Vip kallistettava	Aquatec Ocean Vip XL kallistettava	Aquatec Ocean Dual Vip kahteen suun- taan kallistettava	Aquatec Ocean E-Vip sähköisesti kallistettava
Suihku-ja wc-tuoli pienet pyörät	802480010 1534327		802480012 1534328	802490010 1470000	802490012 1470788	802500010 1470829	802510010 1471208
Suihku-ja wc-tuoli 24" kelauspyörät		802480011 1534329					
Suihku-ja wc-tuoli pienet pyörät +alusastian pidikkeet				802490011 1470712			1522373
Suihku-ja wc-tuoli pienet pyörät, pehmeä istuin+alusastian pidik.				1470713			
Mittatiedot							
Istuinleveys	480 mm (A)	480 mm (A)	480 mm (A)	500 mm (A)	500 mm (A)	500 mm (A)	480 mm (A)
Istuinsyvyys	450 mm (B)	450 mm (B)	450 mm (B)	450 mm (B)	450 mm (B)	450 mm (B)	450 mm (B)
	450 mm (B)	475 - 600 mm (C)	475 - 600 mm (C)	475 - 600 mm (C)			
Istuinkorkeus	-	-	-	510 - 610 mm (C)	510 - 610 mm (C)	510 - 610 mm (C)	500 - 1050 mm (C)
Kokonaisleveys	560 mm (D)	675 mm (D)	640 mm (D)	595 mm (D)	625 mm (D)	625 mm (D)	730 mm (D)
Kokonaissyvyys	900 mm (E)	1060 mm (E)	900 mm (E)	1060 mm (E)	1060 mm (E)	1060 mm (E)	1010 mm (E)
Kokonaiskorkeus ilman päätukea	940 - 1070 mm (F)	940 - 1070 mm (F)	940 - 1070 mm (F)	1085 - 1185 mm (F)	1085 - 1185 mm (F)	1085 - 1185 mm (F)	1070 - 1620 mm (F)
Syvyys ilman jalkatukia	700 mm (G)	855 mm (G)	700 mm (G)	845 mm (G)	845 mm (G)	845 mm (G)	1010 mm (G)
Jalkatuen syvyys	155 mm (H)	155 mm (H)	155 mm (H)	160 mm (H)	160 mm (H)	160 mm (H)	155 mm (H)
Korkeus käsitukiin	680 - 850 mm (I)	680 - 850 mm (I)	680 - 850 mm (I)	720 - 860 mm (I)	720 - 860 mm (I)	720 - 860 mm (I)	730 - 1320 mm (I)
Korkeus jalkatuista istuimeen	255 - 495 mm (J)	255 - 495 mm (J)	255 - 495 mm (J)	345 - 465 mm (J)	345 - 465 mm (J)	345 - 465 mm (J)	345 - 465 mm (J)
Korkeus maasta istuin- reunaan: alusastian pidikkeellä:	390 - 520 mm (K)	390 - 520 mm (K)	390 - 520 mm (K)	420 - 520 mm (K)	420 - 520 mm (K)	420 - 520 mm (K)	420 - 970 mm (K)
ilman alusastian pidi- kettä:	410 - 540 mm (K)	410 - 540 mm (K)	410 - 540 mm (K)	440 - 540 mm (K)	440 - 540 mm (K)	440 - 540 mm (K)	465 - 1015 mm (K)
Korkeus istuimesta käsi- tukiin	210 / 250 mm (L)	210 / 250 mm (L)	210 / 250 mm (L)	215 / 245 mm (L)	215 / 245 mm (L)	215 / 245 mm (L)	230 - 270 mm (L)
Leveys käsitukien välissä	460 mm (M)	460 mm (M)	540 mm (M)	475 mm (M)	555 mm (M)	475 mm (M)	470 mm (M)
Hygienia-aukon leveys	205 mm	205 mm	205 mm	205 mm	205 mm	205 mm	205 mm
Hygienia-aukon syvyys	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm
Istuinkulman säätö	-	-	-	0° - 35°	0° - 35°	0° - 35°	-
Selkäosankulmansäätö	-	-	-	-	-	10° - 50°	-
Korkeudensäätöväli	25 mm	25 mm	25 mm	50 mm	50 mm	50 mm	portaaton
Ø Pyörät	5" (127 mm)	5" (127 mm)	5" (127 mm)	5" (127 mm)	5" (127 mm)	5" (127 mm)	5" (127 mm)
Ø Kelauspyörät	-	24" (610 mm)	-	-	-	-	-
Leveys kelauspyörien välissä	-	540 mm (N)	-	-	-	-	-


Lisätiedot							
Paino	14.5 kg	19.5 kg	14.5 kg	23.5 kg	23.5 kg	28.3 kg	39 kg
Max.kuormitus	150 kg	150 kg	180 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Väri	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen

Kantaremmit kuuluvat toimitukseen. Alusastian pidike ja alusastia eivät.


Ocean pienet pyörät

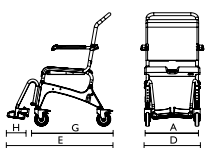


Ocean 24" kelauspyörät

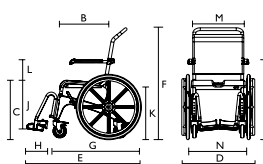

Ocean XL

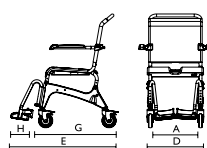

Ocean Vip / Vip XL / Dual Vip

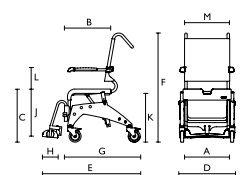

Ocean E-Vip

