



Täyttää  
IEC 60601-2-52  
vaatimukset

### WC-korottaja Aquatec 900

Aquatec 900 voidaan helposti säätää yksittäisen käyttäjän tarpeiden mukaan. Kolme eri korkeutta ja kolme eri istuinkulmaa sekä yksittäin kiinnitettävät ja irrotettavat käsitet mahdollistavat sopivuuden erikoisempiinkin käyttövaatimuksiin.

#### Käyttö- ja puhdistusohje:

Asetetaan wc-istuimen päälle ja säädetään istuimeen sopivaksi. Puhdistus neutraalilla tai miedosti emäksisellä pintapuhdistusaineella (Ph 7-9). Voidaan desinfioida pyyhkimällä alkoholipitoisella desinfiointiaineella (esim. etanoli 70%). Lue tarkemmat ohjeet käyttöoppaasta.

**AQUATEC****Yes, you can.®**




## Käytännölliset pikalukitusruuvit

Aquatec 900:n kiinnitys wc-istuimeen onnistuu hetkessä pikakiinnitysruuvien avulla.

## Kevyt ja helppo kiinnittää

Aquatec 900 ei paina paljon, käyttäjä voi kiinnittää sen wc-istuimeen itse.

### Ominaisuuksia

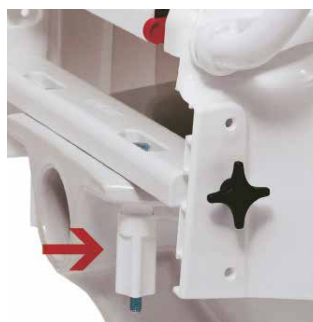

### Mukava käyttää:

Kansi nousee käsitukia nostamalla, mikä lisää istuimen käyttömukavuutta.











### Säädettävä korkeus:

Korkeudensäätö ilman työkaluja.

### Kestävä ja korroosio-vapaa:

Teräksiset käsituet ovat pulverimaalattu valkoiseksi. Kiinnitysruuvit ovat tehty ruostumattomasta teräksestä ja ovat kestävät ja ruostesuojatut.

### Tekniset tiedot

Aquatec 900					
	42,5 cm	36 cm	6 / 10 / 15 cm	51 cm	59 cm
Aquatec 900					
	43 cm*	22,5 cm	28,5 cm	5.0 kg käsituilla 2.7 kg ilman	120 kg

\* kokonaisleveys ilman käsitukia

### Värit ja materiaalit



Valkoinen



Harmaa

Valmistaja: Invacare Rea AB  
Växjövägen 303, 343 71 Diö, Ruotsi  
p. +46 476 535 00

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2015 Camp Mobility Finland