

Täyttää
EN597-1 ja -2
laatustandardien
vaatimukset.


Alova Pedia Comfort – viskoelastinen lastenpatja

WinnCare / Asklé Santé **Alova Pedia Comfort** lasten viskoelastiset painehaavaumia ehkäisevät patjat on suunniteltu 3-12 vuotiaalle lapsille, erityisesti Kalin lasten kotihoitosängyn kanssa käytettäväksi.

Alova-patjat ehkäisevät painehaavaumia ja ne sopivat keskikorkeasta korkean riskiluokan omaaville käyttäjille. Patjat koostuvat ylemmästä, 6 cm viskoelastisesta kerroksesta (75 kg/m³ / 1.8 kPa) ja alemmasta, tiheästä 8 cm:n (28 g/m³ / 3.6 kPa) vaahtomuovikerroksesta.

Kaikissa Alova-patjoissa on hengittävä, kahteen suuntaan joustava ja nesteitä läpäisemätön Promust PU HD-päällinen, joka on helppo poistaa puhdistamista varten. Vetoketju kolmella sivulla. Päällisen voi pestä koneessa +90°, nurinpäin käännettynä vetoketjut kiinni ja pyyhkiä 1000 ppm kloramiinilla.

Patjan koko on 160 x 80 x 14 cm. Max. käyttäjäpaino 90 kg.
Koko S on tarkoitettu 3–5-vuotiaille, noin 15–60 kg:n painoisille ja koko M 6–12-vuotiaille, noin 20–90 kg painaville lapsille.
Täyttää standardien EN597-1 ja -2 vaatimukset. Takuu 3 vuotta, päällinen 1 vuosi.

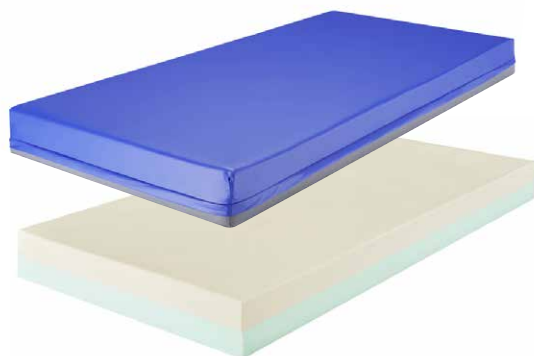**ASKLÉSANTÉ****WINN CARE**
g r o u p

Ominaisuudet

Braden scale s core



Viskoelastinen

painetta tasaava materiaali

Patjat sopivat keskikorkeasta korkean riskiluokan painehaavariskin omaaville käyttäjille, jotka ovat vuodelevossa jopa yli 15 h päivässä. Sopii myös jo olemassa olevien 1 ja 2 luokan painehaavojen hoitoon.

Kaksi mallia

Alova PEDIA Comfort 160x80x14 cm lastenpatjaa on saatavana kaksi versiota: mallit 3–5-vuotiaille, max. 60 kiloille ja 6–12-vuotiaille, max. 90 kg:n painoisille.

Hygieniapäällinen

Kahteen suuntaan joustava, kosteutta läpäisemätön, irrotettava päällinen voidaan pestä 90°C:ssa pesukoneessa ja pyyhkiä 1000 ppm kloramiinilla.


Tekniset tiedot



800 mm



1600 mm

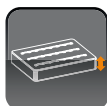

140 mm



12 kg



60 kg / 90 kg



90°

Värit ja materiaalit



Tummansininen
Promust PU HD -päällinen



6 cm viskoelastinen kerros
(75 kg/m³ / 1.8 kPa) ja
8 cm (28 g/m³ / 3.6 kPa)
vaahтомуovi



Valmistaja:
WinnCare / Asklé Santé
104, Avenue Albert 1er
Immeuble les passerelles
92 500 Rueil-Malmaison, France
p +33 (0)4 66 02 15 15
winnCare.com



Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2019 Camp Mobility Finland