

NordBed Kid



Turvallisuutta ja mukavuutta lapselle
kaikissa kehitysvaiheissa

TURVALLISUUS | SÄÄDETTÄVYYS | MUKAVUUS

INVACARE
Yes, you can.®

NordBed Kid

Turvallinen, konfiguroitava sänky, joka kasvaa lapsesi kanssa

Uusi NordBed Kid on ihanteellinen sänky koti- ja hoitoympäristöihin.

Suunniteltu sopimaan lapsille

NordBed Kid sängyt on suunniteltu 3-12-vuotiaille tai 75-154 cm pituisille lapsille. Saatavana kolme eri pituutta ja eri sivulaitavaihtoehtoja, joilla sänky voidaan konfiguroida vastaamaan parhaiten lapsen tarpeita.

Sivulaitavaihtoehtoina on taitettavat ovet, alaslaskettavat tai kiinteät sivulaidat, joko pinna- tai Perspex-pleksi-sivulaidoilla. 40 cm ja 80 cm korkeat saatavana kokoihin M ja L, kokoon S vain 80 cm korkeat, taitettavilla ovilla tai kiinteillä sivulaidoilla.

Patja-alustassa on säädettävät selkä-, reisi- ja jalkatuki, jotka on suunniteltu antropometrisen mittasuhteiden mukaan ja tarjoaa anatomisen tuen ja poikkeuksellisen hyvän käyttömukavuuden.

Saatavana myös suojapehmusteet hygieniapäällisillä. Pehmusteet kiinnitetään sängyn sisäpuolisiin kiskoihin koukulla ja silmukalla. Pehmusteet tarjoavat lisäsuojaa lapselle ja pysyvät paikallaan sivulaitoja liikuteltaessa.

Turvallisuus

Sänkyä suunniteltaessa turvallisuus on ollut ensiarvoisen tärkeää, aina taittuvien ovien turvallisesta lukitusmekanismista, käsiohjainpidikkeeseen, joka pitää käsiohjaimen pois lapsen ulottuvilta.

Lisäksi NordBed Kid täyttää EU:n uuden lastensängyille määritellyn lääkinällisten laitteiden turvallisuusstandardin EN5063: 2017, modernista ja kodikkaasta muotoilusta tinkimättä.

Turvallinen työympäristö hoitajalle

NordBed Kid -sängyt ovat korkeussäädettävät alimmasta 30 cm:n asennosta, josta lapset voivat siirtyä itse, 80 cm:n aikuisen työskentelykorkeuteen asti.

Keskuslukitus (optio), keskuslukitteinen sivulaidan lasku ja sähkökäyttöinen patja-alusta on suunniteltu varmistamaan turvallinen ja mukava työympäristö myös lapsen huoltajalle/hoitajalle.



Suunniteltu mukavaksi ja turvalliseksi

NordBed Kid tarjoaa maksimaalisen mukavuuden ja täyttää uudet tiukat EU-turvallisuusstandardit.

Sivulaitavaihtoehdot

NordBed Kid on saatavana erilaisilla sivulaidoilla, jotka voit valita lapsen tarpeiden mukaan. Sivulaitoihin on suunniteltu suurempi lujuus ja jäykkyys vastaamaan standardin EN50637: 2017 vaatimuksia. Saatavana olevat vaihtoehdot alla:

Taitettavat ovet

- ▶ Ovet voidaan avata osittain tai kokonaan. Helppo pääsy sängyn vakaus ja lapsen turvallisuus säilyttäen.
- ▶ Helppokäyttöinen kaksinkerroin taittuva ovi ja kiinnityssalpa säilyttää sivulaidan lujuuden.
- ▶ Salpa on suunniteltu estämään lapsen tarttuminen salpaan tai loukkaantuminen sängyssä ollessa.
- ▶ 40 cm:n korkeat ovet vain M ja L koon sänkyihin, 80 cm korkeat kaikkiin pituuksiin.

Alaslaskettava sivulaita

- ▶ Yksittäinen paneeli, jossa sivu laskeutuu yhdellä liikkeellä. Helppo päästä käsiksi.
- ▶ Helppokäyttöinen keskuslukitus antaa hoitajan pysyä lapsen luona myös sänkyä säätäessä.
- ▶ 40 cm korkea vain M ja L koon sänkyihin

Perspex -pleksisivulaidat

- ▶ Vaihtoehtoinen erityisoptio pinnasivulaidoille
- ▶ Läpinäkyvä, maksimoi näkyvyyden

Kiinteät sivulaidat

- ▶ Kiinteät sivulaidat saatavana 40 cm ja 80 cm korkeana

Pehmusteet

- ▶ Lisäsuojaa lapselle ja mielenrauhaa hoitajalle antavat suojapehmusteet hygieniapäällisillä saatavana kaikkiin sivulaitavaihtoehtoihin.
- ▶ Kaikki sivulaidat aukeavat ja sulkeutuvat sujuvasti myös pehmusteet asennettuina.



Avainominaisuudet NordBed Kid

Erityisesti suunnitellut

Dacapo-patjat
NordBed Kid

1. Ovisalpa

- ▶ Taittavissa ovilaidoissa on helposti lukittava ovisalpa.
- ▶ Suunniteltu niin, ettei lapsi loukkaannu tai vahingoita itseään sängyssä ollessaan.

2. Huomaamaton ja helpokäyttöinen käsiohjain turvalukituksen kanssa

- ▶ Käsiohjain painikkeet on värikoodattu toimintojen tunnistamisen helpottamiseksi.
- ▶ Magneettilukitusmekanismi varmistaa, että vain hoitaja voi käyttää ohjainta oikein ja turvallisesti.



3. Turvallinen käsiohjainkotelo

- ▶ Käsiohjain voidaan helposti ja turvallisesti sijoittaa koteloon ja piilottaa sängyn pätyyn, jotta vain hoitaja käyttää sänkyä.

4. Korkeussäädettävä

- ▶ Voidaan laskea jopa 30 cm korkeudelle, itsenäisiin siirtymiseen ja nostaa 80 cm korkeuteen hoitajan työskentelykorkeudelle.





Turvallisuusstandardi EN50637:2017

Uusi design täyttää uudet EU hoitosängkyjen turvallisuusstandardit



Uusi Design

Moderni, kodinomainen design ja kevyt ja valoisa pyökkipuupinta



Kokovalikoima

Saatavana pituudet small, medium ja large - jokaisen lapsen tarpeisiin

NordBed Kid patjat

sopivat erityisesti sänkyihin.



5. Valikoima erilaisia sivulaitoja

- ▶ Sivulaitavaihtoehdoilla sänky voidaan konfiguroida eri lasten erilaisten tarpeiden mukaiseksi.
- ▶ Vaihtoehtoina taitettavat ovet, alaslaskettavat tai kiinteä sivulaita, pinnoilla tai Perspex-pleksillä.
- ▶ Sivulaitojen korkeusvaihtoehdot 40 cm ja 80 cm.

6. Säädettävä patja-alusta

- ▶ Patja-alustan pituus on suunniteltu antropometrisen mittauksen mukaisesti, mikä antaa lapselle parempaa tukea ja poikkeuksellisen hyvän käyttömukavuuden.

7. Patja-alustan profiilit

- ▶ Patja-alusta voidaan varustaa eri konfiguraatioilla: joko täysin kiinteästä, ei säädettävästä, osittain manuaalisesti säädettävään tai täysin sähkönsäätöiseen.
– eri patja-alustaprofiilit mahdollistavat lapselle parhaan mahdollisen tuennan.



Invacare NordBed Kid patja-alustan eri konfiguraatiot ja profiilit:

Kiinteä



Moottoroitu selkäosa, kiinteä jalkaosa



Moottoroitu selkäosa ja manuaalisesti säädettävä jalkaosa



Moottoroitu selkä- ja reisisosa ja manuaalisesti säädettävä jalkaosa



Moottoroitu selkä-, reisi- ja jalkaosa



Tekniset tiedot ▼

Lisätietoja tuotteesta, mukaan lukien tuotteen käyttöohje, paikalliselta jälleenmyyjältä ja Invacaren verkkosivustolta.



Kokonaisleveys / Sisäleveys ▼




Sisäpituus / Kokonaispituus ▼




Korkeuden säätö ▼



Patja-alustan mitat ▼

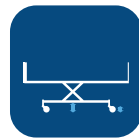

Maavara ▼

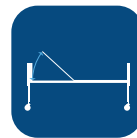

Selkäosan kulma ▼

Small	90/80cm	140/146cm	30-80cm	62-7-16-48cm	15cm	0-70°
Medium	90/80cm	160/166cm	30-80cm	67-13-18-55cm	15cm	0-70°
Large	90/80cm	179/185cm	30-80cm	78-15-23-57cm	15cm	0-70°



Reisikulma ▼



Jalkaosan nousukulma ▼



Max. käyttäjäpaino ▼




Paino (ilman päätyjä) ▼



Painavin yksittäinen osa ▼

Small	0-12°	0-24°	70kg	86kg	33kg
Medium	0-12°	0-30°	70kg	95kg	40kg
Large	0-12°	0-30°	70kg	97kg	42kg

Runkovärit ▼

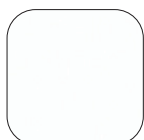

Traffic white
RAL: 9016



Beech (wood)



Tested by TÜV against
Standard EN50637:2017

Please note: Colours may vary slightly from those displayed above.

Tel: +41 61 487 70 70
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com

Invacare International GmbH
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil
Switzerland



Yes, you can.®