

KALIN

LASTEN HOITOSÄNKY



UUDISTUNUT KALIN

- ▶ Uudistunut KALIN on lapsille ja pienille aikuisille tarkoitettu adaptoituva kotihoitosänky ainutlaatuisilla ominaisuuksilla. Tarkoitettu 125 cm - 145 cm pitkille käyttäjille.
- ▶ Sänky täyttää viimeisimmät turvallisuus- ja suorituskykyvaatimukset standardin NF EN 50637: 2017 mukaisesti.

Hoitosänky KALIN (PO3)

Potilaille, joilla on motorinen autonomian menetys, joka voi olla tilapäinen tai pysyvä.

KALIN



TURVALLISUUS

Uudistettu
kohottautumisteline



ERGONOMIA

Taitettava
sähköinen jalkatuki
Painehaavan
ehkäisy ja potilaan
mukavuus



TURVALLISUUS JA AUTONOMIA

► Lukittava käsiohjain



TURVALLISUUS

Suojattu käsiohjainkotelo



ERGONOMIA


Korkeudensäätö
30 -76 cm



CE

MOOTTORI

LINAK
WE IMPROVE YOUR LIFE

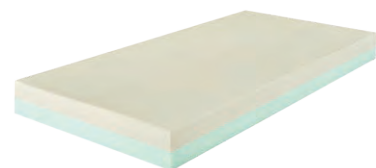

Sopiva patjavalikoima:
peruspatja tai ALOVA -
painehaavapatja

TURVALLISUUS

► Puusivulaidat vakiona



TURVALLISUUS

► Seinästopparit



EN 50637 -standardi lyhyesti, PÄÄASIAALLISET MUUTOKSET:

► Ihmisen ja siten myös lasten morfotyytit ovat kehittyneet: olemme pitempiä kuin esi-isämme:

► Tämä edellyttää eri sängyn osien mukauttamista näihin uusiin mittoihin. KALIN -sängyt sopivat 125-145 cm ja enintään 70 kg painaville lapsille. Näin ollen sängyn osien mittasuhteita ja rakojen etäisyyksiä on muutettu.

► Standardi NF EN ISO 60601-2-52 huomioi tarpeelliseksi suojata 3 kehon osaa sänkyyn ja sen lisävarusteisiin juuttumisen vaaralta, mikä voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman.

► **Uudet standardin mukaiset vaatimukset:**
rakojen etäisyydet eivät saa olla suurempia kuin:

- Kaula: alle 6 cm raot (kaulan halkaisija)
- Pää: alle 12 cm raot (pään halkaisija)
- Rintakehä: suurempi kuin 31,8 cm (rintakehän leveys)

► **Nämä 3 etäisyyttä on muutettu**
Kalin sänkyihin:

- Kaula: alle 4 cm raot (kaulan halkaisija)
- Pää: alle 6 cm raot (pään halkaisija)
- Rintakehä: suurempi kuin 30 cm (rintakehän leveys)

► Standardi ottaa huomioon myös pahimmat skenaarit, kuten kuristumisen käsiohjaimen johtoon ja / tai varren hihnaan.

► Varren kahva on siis erilainen, käsiohjain on lukittavassa laatikossa ja sängyssä olevat raot ja esteet ovat pienennetty uusien viite-ehtojen noudattamiseksi.

TEKNISET TIEDOT

Max. käyttäjäpaino	70 kg
Max.kuormitus	115 kg = 70 kg (käyttäjä) + 15 kg (patja) + 30 kg (lisävarusteet)
Käyttäjän pituus	125 cm -145 cm
Makuualustan mitat	170 cm X 80 cm
Korkeudensäätö	30 -76 cm
Moottori	Linak
Sängyn paino (ilman patjaa)	70 Kg
Värit	RAL 7030 sängynrunko ja sivulaidat, Lindberg Oak -paneelit
Vakiovarusteet	Yhtenäinen sängynjalusta / sähköinen selkäosan säätö / puiset sivulaidat / saksirunko / seinästopparit / sähkösäätöinen taittuva jalkaosa

OPTIOT ja LISÄVARUSTEET

Keskuslukitus

CPR-hätälaskutoiminto

Alapaneeli (yksittäin lukittavat jarrut)

KALIN sänkyyn sopivat patjavaihtoehtomme:

- ▶ Vaahtomuovipatja: VMS82-CIC
- ▶ Viskoelastinen patja: VMA82-CIC



Mekaniikka, elektroniikka ja käsiohjain



Patjat ja lisävarusteet



WINNCARE
F r a n c e

MYYN TIPALVELU
+ 33 (0) 2 51 98 55 64
www.winnicare.fr

Valmistaja

WINN CARE FRANCE

4, Le pas du Château
85670 Saint Paul Mont Penit

(EU) 2017/745, liite VIII asetuksen mukainen LUOKAN I lääketieteellinen laite.

Tämä dokumentti on tarkoitettu lääketieteellisten laitteiden palveluntarjoajille ja jakelijoille sekä terveydenhuollon ammattilaisille.