



Ormesa NOVUS kokoontaittavat rattaat

Kokoontaittavat NOVUS-rattaat kasvaa lapsesi mukana. Novuksessa on leveys- ja syvyyssäädettävä istuin, kulma- ja korkeussäädettävä selkäosa, korkeussäädettävät yhtenäinen jalkatuki ja työntökahva. Käyttöä helpottavat myös kääntyvät etupyörät, suuret takapyörät, rumpujarrut avustajalle sekä helppokäyttöiset kokoontaittolukkomekanismit.

Päällinen on Öko Tex 1. luokan hyväksytty, irrotettava, pestävä, sini-musta kangasverhoilu, jossa paikat lisävarusteiden asennusta varten. Saatavana istuinkoko 4: Max. käyttä-

jäpaino 65 kg. Paino 21,6 kg kokoonpanosta riippuen. Törmäystestettu ANSI RESNA WC 19, soveltuu käytettäväksi ajoneuvossa eteenpäin suunnattuna istuimena.

Lisävarusteena saatavana mm. päätuki, vartalotuet, abduktioreisiremmit, jalkaterää suuntaavat jalkaremmit, kuomu, sadesuoja ja lämpöpussi sekä erilaisia turvavyövaihtoehtoja.

Ominaisuudet



Päätuki (LI)
asennuspaikka päätuelle

5-piste liivivyö (LI)
asennuspaikka turvavöille

Vartalotuet (LI)
asennuspaikka vartalon
sivutuille

Pohjetuki
kangasta

Jalkatuki
yhtenäinen
jalkalauta

Kääntyvät etupyörät
7" (17,5 cm)
kääntyvät etupyörät

**Hengittävä
kangasverhoilu**

**Kokoontaitettava
runko**
taittuu helposti
kasaan

Takarenkaat jarruilla
12" (30 cm) ilmakumi-
renkaat
puhkeamattomat
takarenkaat pyynnöstä

SÄÄDETTÄVÄ ISTUIN

- Leveys- ja syvyyssäädettävä istuin
- Kasvaa yhdessä rungon kanssa
- Suunniteltu helpottamaan sivutukien asennon muuttamista ja kiinnittämään tai irrottamaan lisävarusteiden kiinnittämistä ja irrottamista aiheuttamatta ongelmia lapsen istuessa rattaissa.

ÖKÖTEX-1. luokan PÄÄLLINEN

- Tulenkestävä, kierrätettävä
- Maksimaalinen hankauksen kestävyys
- Ökö-Tex Classe 1. -luokitus: korkein saavutettava luokka lapsille tarkoitetuille tekstiilituotteille, jotka ovat suorassa kosketuksessa ihon kanssa.
- Värit kestävät hyvin hikeä, konepesua ja kevyitä kuivapesuja.



Kokoontaitettava alumiinirunko

Istuin on helppo taittaa kokoon sivussa olevan lukitusvivun avulla.

KOKOONTAITETTAVA RUNKO

- Alumiinia
- Maalattu myrkyttömällä epoksijauhemaaleilla

KESTÄVÄ SELKÄOSA

- Kulma- ja korkeussäädettävä
- Pehmustettu, ergonominen ja irrotettava
- Kiinnitetään istuimeen painonappien avulla.

IRROTETTAVAT PYÖRÄT (kuva 3)

- snap-off -lukitus, liukuu helposti kuulalakeereilla
- 17,5 cm. (7"), kääntyvät, puhkemattomat etupyörät
- 30 cm (12"), ilmakumirenkaat
- Pistokestävät kumirenkaat pyynnöstä

ULKOISET RUMPUJARRUT

- ilman lapselle vaarallisia ulokkeita



CERTIFICATE
MED annex A.1/3.19-20-21

Törmäystestettu, taksikoukut ja ÖKÖTEX 1. luokan päällinen

Lisävarusteet



852 Päätuiki sivutuilla. Korkeus- ja leveys-säädettävä



863 Päätuiki Occipital-parietal + **853 Liivivyö**. Korkeus- + leveys-säädettävä, kallistus, eteenpäin ja taaksepäin



853 Liivivyö



903 5-pisteliivivyö



906 5-pistevyö



838 Sivutuet, pehmustetut



868 Sivutuet, vartalon ympärille kiinnitettävät, joustavat sivutuet. Säädettävä korkeus ja leveys



894 45° lantiovyö



894 Lantiovyö



817 Abduktio-reisiremmit



844 Sivupehmusteet



834 Abduktiokiila



824 Tarjotin, läpinäkyvä



839 Etukahva



827 Jalkaremmit



892 Jalkalaudan pehmustettu päällinen



812 Suuntalukitus



818 Lämpöpussi



819 Kuomu



825 Sadesuoja
Käytetään 819 kuomon kanssa



854 Aurinkovarjo, yhteensopiva väri päällisen värin kanssa



905 Käsijarru (takanäkymä)



922 Mukiteline



858 Verkkokori alas



911 Kuljetustaso, lääketieteellisten laitteiden kuljetamiseen (takanäkymä)




891 4-piste-taksi-koukusetti eteenpäin suunnattuun kuljetukseen moottoriajoneuvossa (autot, paketti-autot, linja-autot)

Tekniset tiedot

A: Selkäosan leveys
B: Vapaa tila istuimen alla
C: kokonaisleveys
D: kokonaiskorkeus
E: kokonaispituus
F: syvyys istuimen alla
G: selkäosan korkeus
I: säärimita (istuin-jalkatuki)
L: pituus kokoontaitettuna ilman renkaita
M: korkeus kokoontaitettuna ilman renkaita
N: pituus kokoontaitettuna renkaiden kanssa
O: korkeus kokoontaitettuna renkaiden kanssa
H: Käyttäjän pituus
 Kokonaispaino renkaiden kanssa
 Kokonaispaino ilman renkaita
 Max. käyttäjäpaino

novus 4

46 cm
 28 -38 cm
 66 cm
 107 cm
 96 cm
 from 39 to 45 cm
 from 75 to 81 cm
 from 30 to 44 cm
 110 cm
 42 cm
 90 cm
 56 cm
 from 145 to 170 cm
 22,1 kg
 18,5 kg
 65 kg

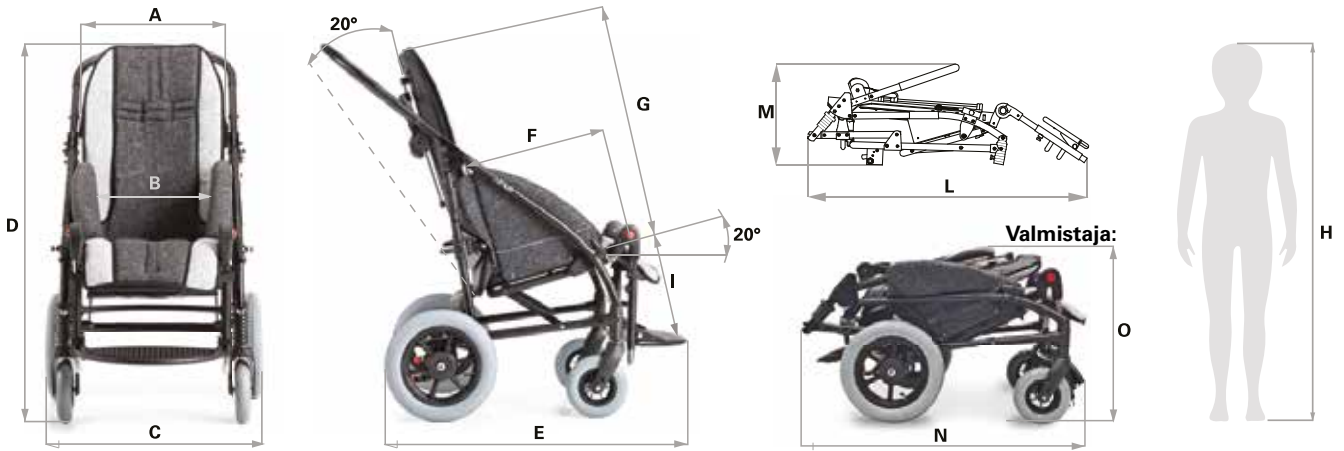

Turvallisuus

CE



Novus on törmäystestattu ISO7176-19 mukaisesti.

ORMESA®
 • MADE IN ITALY SINCE 1980 •

Via A. Da Sangallo, 1
 06034 FOLIGNO (PG) ITALY
 TEL. +39 0742 22927
 FAX +39 0742 22637
 info@ormesa.com
 www.ormesa.com
 © 2021 Camp Mobility Finland

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2021 Camp Mobility Finland



CERTIFICATE
 MED annex A.1/3.19-20-21

CAMP®
MOBILITY

www.campmobility.fi

Patamäenkatu 5
 33900 Tampere
 +358(0)9 350 76 310
 info@campmobility.fi