



ORMESA®
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

GRILLO
adaptive seating





Enemmän kuin pelkkä tuoli.

Ormesan Grillo Adaptive Seating on **kompakti, säädettävä aktiivituoli** lapsille ja nuorille. Se soveltuu erinomaisesti käytettäväksi monenlaisissa tilanteissa, kuten **päivittäisten toimintojen** suorittamiseen koulussa ja kotona.

Kansainvälisesti patentoidun **GRILLO-tuoteperheen** korkeudensäätö järjestelmä mahdollistaa kompaktin, tilaa säästävän alustan ja tarjoaa laajan valikoiman eri korkeudensäätövaihtoehtoja.

Grillo Adaptive Seating -istuimessa on **erittäin hengittävä, kestävä**, helposti **pestävä** ja **paloa hidastava kuormitusta kestävä** verhoilu.

Irrotettava päällinen on valmistettu erittäin **innovatiivisella pehmusteella**: materiaali mahdollistaa **optimaalisen painon jakautumisen, erittäin hyvän hengittävyyden ja erinomaisen käyttömukavuuden**. Saatavilla kolmessa värissä: punainen, pinkki ja sininen.

Laajan **lisävarustevalikoiman** ansiosta tuoli mukautuu helposti erilaisiin tarpeisiin. Saatavana **kolmessa koossa**.

PRODUCT
MARKED 

GRILLO ADAPTIVE SEATING IS A MEDICAL DEVICE COMPLYING WITH THE SAFETY REQUIREMENTS DEFINED BY REGULATION (EU) 2017/745



Kolme konfiguraatiota jokaiseen tarpeeseen

Ormesan Grillo Adaptive Seating on apuväline, joka on suunniteltu vastaamaan hoitajien ja lasten tarpeisiin: vanhemmat tietävät, että aktiivituolista tulee keskeinen väline lapsen kehityksessä ja kaikenlaisten toimintojen suorittamisessa; lapsi kehittää kykyään nähdä ympäröivä maailma uudesta näkökulmasta, osallistua paremmin arjen toimintoihin ja kommunikoida muiden kanssa aivan uudella tavalla. Kolme erilaista kokoonpanoa on suunniteltu vastaamaan kaikkiin tarpeisiin:

- › Grillo Adaptive Seating **komponentilla 863, ulkoinen vartaloa tukeva pääntuki**, joka soveltuu lapsille, jotka tarvitsevat säädettävää tukea päätuen kulman ja syvyyden suhteen.
- › Grillo Adaptive Seating **komponentilla 865, pehmustettu pääntuki**, tai **komponentilla 835, muotoiltu pääntuki**, riippuen sivuttaisen ja takaraivon alueen pään tuen tarpeesta.





863 Posturaalinen erillinen päätuki

Mukautuu pään muotoon. Korkeus, kallistus ja syvyys säädettävissä.

865 Pehmustettu päätuki

korkeussäädettävä



835 Moutoiltu päätuki

sivu- ja takaraivotuella, korkeussäädettävä.



Vakio ja matala alusta

PATENTED

Monipuolisuus, jota tarvitset

Grillo Adaptive Seating -tuolissa on **alumiininen kokoontaitettava runko**, joka on maalattu myrkyttömällä epoksijauhemaaleilla.

Patentoitu kaasujousella toimiva korkeudensäätöjärjestelmä mahdollistaa tuolin korkeuden säätämisen lapsen istuessa: ihanteellinen, jotta lapsi pääsee helposti ja mukavasti erikorkuisten pöytien ja työskentelytasojen ääreen sekä lähemmäs lattiaa helpompaa poistumista varten.

Turvajärjestelmä estää tahattoman käytön.

Älykkään muotoilunsa ansiosta tuoli mukautuu ympäristöönsä, mahdollistaen lapsen osallistumisen päivittäisiin toimintoihin sekä vuorovaikutuksen perheen ja muiden lasten kanssa.

NELJÄ KÄÄNTYVÄÄ PYÖRÄÄ, joissa on UUSI kumipäällyste estämässä lian kertymistä ja kaikissa seisontajarru. Mahdollistavat Grillo Adaptive Seating -tuolin vaivattoman siirtämisen lapsen istuessa siinä.

Matala alusta

mahdollistaa pääsyn lähemmäs lattiaa kuin vakiomallisella sisäkäyttöön tarkoitetulla alustalla (hyödyllinen julkisissa ympäristöissä, kuten päiväkodeissa ja peruskouluissa). Säilyttää samat ominaisuudet kuin vakiomallinen alusta ja on saatavana ko'issa mini ja small.

Huippusuorituskyky

Innovatiivinen tuuplapäällinen



Verkkomainen ja kiinteä, irrotettava tukirakenne yhdessä teknologisen verhoilun kanssa tarjoaa **erinomaisen vartalon ja lantion tuen lisäksi erittäin korkean hengittävyys**, mikä parantaa käyttömukavuutta ja ihon hyvinvointia.



- **Optimaalinen "itse kantava vaikutus"**: erittäin innovatiivinen pehmusterakenne mahdollistaa painon optimaalisen jakautumisen ja tarjoaa erinomaisen käyttömukavuuden. Paine jakautuu optimaalisesti, mikä vähentää merkittävästi pistemäistä painetta. Sillä on perinteistä vaahtokumia **korkeampi puristusjännityksen kestävyys** (Compression stress value) (DIN EN ISO 3386).
- **Kevyt ja hengittävä**: mahdollistaa erittäin tehokkaan ilmankierron, vähentää hikoilua ja edistää lämmönsäätelyä.
- **Hygieeninen**: helppo pestä ja kuivuu nopeasti
- **Kulutusta kestävä**: erittäin lujarakenteinen pinnoite säilyttää ominaisuutensa myös kovassa käytössä (ISO 12947 -testi).
- **Paloturvallinen**: standardien EN 1021-1:2014 ja EN 1021-2:2014 mukainen.
- **Oeko-Tex -sertifioitu**: kaikki ihoa vasten tulevat kankaat täyttävät laatu- ja terveysturvallisuusvaatimukset

Tekniset ominaisuudet ja säädöt



Selkäosa

Kallistuu kaasujousen avulla helposti ja turvallisesti fysiologisen nivelkohdan ansiosta, mikä tekee säädöstä mukavan. Korkeussäätö liu'uttamalla, ilman ruuvien irtoamisen riskiä. Kokoontaitettava kuljetusta varten.



Istuin

Ergonominen ja kaasujousella kallistettava lisäämään käyttömukavuutta. Syvyyssäädettävä liu'uttamalla ilman ruuvien irtoamisen riskiä sekä leveydeltään säädettävä monisäädettävien, pehmustettujen lantion sivutukien avulla.



Monisäädettävät lantion sivutuet

Tarkempaan asennon suuntaamiseen. kulma-, (rotaatio sisään) leveys- ja syvyyssäädettävät.



NEW

Monisäädettävät käsituet

pehustetut ja säädettävissä korkeuden, kallistuksen, kierron ja pituuden osalta.

Jalkatuki

Säädettävä korkeus, kulma, syvyys sekä istuin fysiologisella tukipisteellä, jotta säätö olisi mukavaa.



Pohjetuet Jalkalevyt

Pehmustetut, korkeus- ja syvyyssäädettävät flexio-extensio- ja kulmasäädettävät.

Kompakti ja vakaa säädöt ilman esteitä



Varusteet



947 Lantiovyö säädettävällä kulmalla

Saatavana kolmessa koossa.
Vakiovaruste.



920 4-piste lantiovyö

Saatavana kahdessa koossa.



838 Vartalon sivutuet

Säädettävissä korkeuden, leveyden ja kierron osalta.
Saatavilla kolmessa koossa.

Verhoiltu hengittävällä pehmustekankaalla, joka on irrotettavissa pesua varten.



868 Kietoutuvat ja joustavat vartalotuet

Korkeus, leveys ja kierto säädettävissä.
Saatavana kahdessa koossa.

*Verhoiltu hengittävällä
pehmustekankaalla, joka on
irrotettavissa pesua varten.*



961 Kyynärpäätuet

*Verhoiltu hengittävällä
pehmustekankaalla, joka on
irrotettavissa pesua varten.*



853 Turvavyöliivi

Saatavana kahdessa koossa.

Varusteet



853 4-pistevyoliivi, slim muotoiltu



834R Säädettyvä abduktiokiila
Säädettyvä syvyys ja abduktio. Saatavana kaksi kokoa.



834N Kapea abduktiokiila
Syvyyssäädettävä istuimen mukaan. Saatavana kaksi kokoa.



824 Pöytälevy syvennyksellä

Syvyys-, korkeus- ja kulmasäätö käsitukien kanssa.

Valmistettu kestävästä ja hygieenisestä materiaalista, ei reunamuotoilua, se ei säilytä ruokajäämiä.




960 Kantaremmit



962 Jalkaterä- ja kantaremmit

Grillo A.Seating

vakioalustalla: mitat (cm/In)

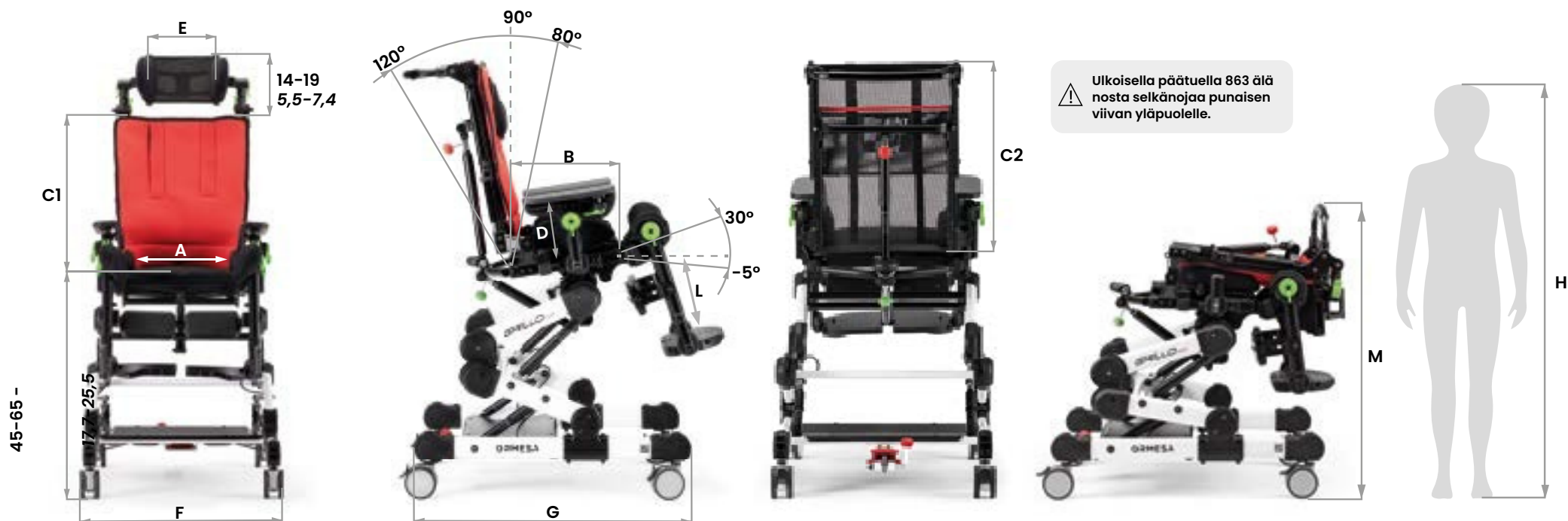


	A	B	C1	C2	D	E	F	G	L	M	käyttäjän pituus (H)	kokonais- paino	max. kuorm.
mini	16-26 6,2-10,2	16-26 6,2-10,2	30-41 11,8-16,1	30-50 11,8-19,6	12-15 4,7-5,9	15 5,9	49 19,2	59 23,2	15-25 5,9-9,8	68 26,7	75-105 29,5-41,3	20,4kg 44,9 lb	25 kg 55,1 lb
Small	20-30 7,8-11,8	20-30 7,8-11,8	35-47 13,7-18,5	35-60 13,7-23,6	15-18 5,9-7	17 6,6	53 20,8	65 25,5	20-31 7,8-12,2	68 26,7	90-120 35,4-47,2	22,6 kg 49,8 lb	35 kg 77,1 lb
Medium	25-35 9,8-13,7	28-43 11-16,9	40-55 15,7-21,6	40-70 15,7-27,5	16-20 6,2-7,8	20 7,8	58 22,8	74 29,1	25-40 9,8-15,7	70 27,5	110-145 43,3-57	24,3 kg 53,5 lb	45 kg 99,2 lb

Viivoilla erotetut numerot osoittavat vähimmäis- ja enimmäissäätöaluetta.

Grillo A. Seating

matalalla alustalla: mitat (cm/In)

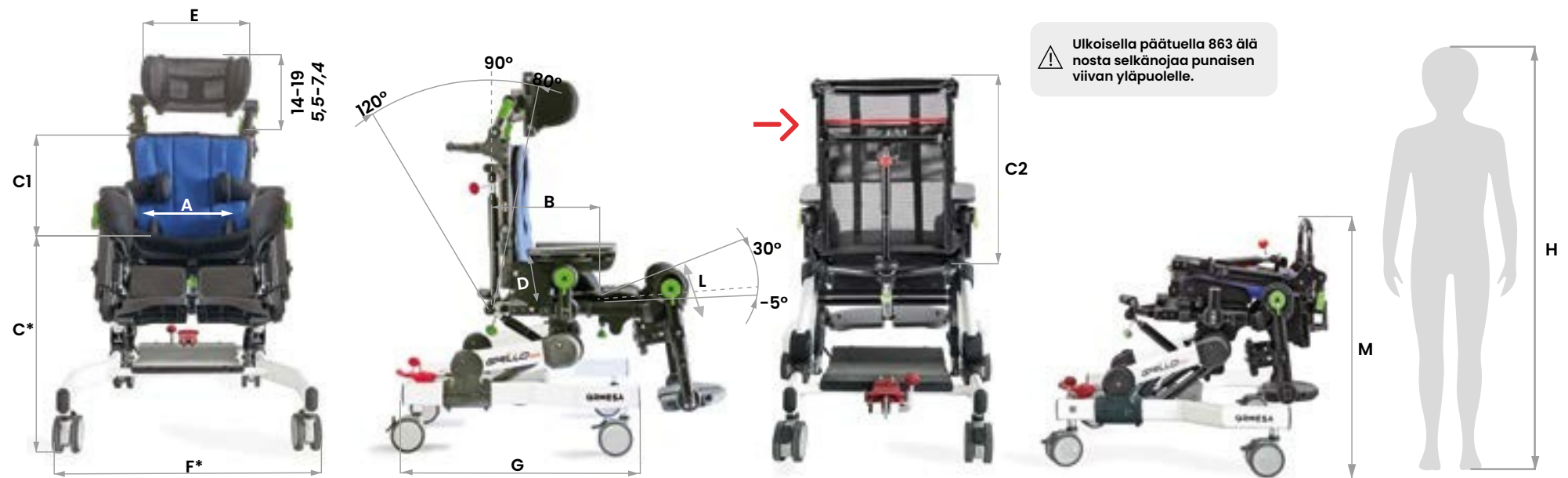

	A	B	C*	C1	C2	D	E	F*	G	L	M	käyttäjän pituus (H)	kokonais- paino	max. kuorm.
mini	16-26 6,2-10,2	16-26 6,2-10,2	30-40 11,8-15,7	30-41 11,8-16,1	30-50 11,8-19,6	12-15 4,7-5,9	15 5,9	55,5 21,8	57 22,4	15-25 5,9-9,8	58 22,8	75-105 29,5-41,3	18 kg 39,6 lb	25 kg 55,1 lb
Small	20-30 7,8-11,8	20-30 7,8-11,8	36-48 14-18,9	35-47 13,7-18,5	35-60 13,7-23,6	15-18 5,9-7	17 6,6	60 23,6	63 24,8	20-31 7,8-12,2	60 23,6	90-120 35,4-47,2	18,5 kg 40,7 lb	35 kg 77,1 lb

Viivoilla erotetut numerot osoittavat vähimmäis- ja enimmäissäätöaluetta.

Tessa ja hänen tarinansa odottavat sinua Ormesan virallisella verkkosivustolla yhdessä muiden fantastisen maailmanlaajuisen yhteisömmme päähenkilöiden kanssa.





A special thanks to the families who participated with enthusiasm in our project. It is thanks to our customers and their stories that we find the energy and stimuli to evolve day by day.

CE complies with MDR (EU) 2017/745

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
[ISO 13485](#)

Ormesa srl - Via delle Industrie 6/8 | 06034 Foligno (PG) - ITALY
Tel. +39 0742 22927 | FAX+39 0742 22637 | info@ormesa.com

www.ormesa.com

