



ORMESA®
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

GRILLO
adaptive seating



GRILLO
adaptive seating

Enemmän kuin pelkkä tuoli.

Grillo Adaptive Seating by Ormesa on **kompakti**, säädettävä korkea istuin lapsille ja nuorille. Ihanteellinen käytettäväksi monissa yhteyksissä, kuten päivittäisessä toiminnossa koulussa ja kotona.

Kansainvälisesti patentoidun **GRILLO-tuoteperheen** korkeudensäätöjärjestelmä mahdollistaa kompaktin, tilaa säästävän alustan ja tarjoaa laajan valikoiman eri korkeudensäätövaihtoehtoja.

Grillo Adaptive Seating -istuimessa on erittäin hengittävä, kestävä, helposti pestävä ja palosuojattu kuorimituksen kestävä verhoilu.

Irrotettavassa päällisessä on erittäin innovatiivinen pehmuste: Materiaali mahdollistaa optimaalisen painon jakautumisen, erittäin hyvän hengittävyuden ja erinomaisen mukavuuden. Saatavana **kolme väriä: punainen, pinkki ja sininen.**

Laajan komponenttivalikoiman ansiosta tuoli mukautuu helposti kaikkiin tarpeisiin. Saatavana **kolme kokoa.**

PRODUCT
MARKED 



GRILLO ADAPTIVE SEATING ON LÄÄKINNÄLLINEN LAITE, JOKA TÄYTTÄÄ (EU) 2017/745 ASETUKSELLA MÄÄRITELLYT TURVALLISUUSVAATIMUKSET

Kolme konfiguraatiota kaikkiin käyttötarpeisiin

Grillo Adaptive Seating by Ormesa on apuväline, joka on **suunniteltu vastaamaan huoltajien ja lasten tarpeita**: vanhemmat tietävät, että syöttötuolista tulee perustavanlaatuinen apuväline lapsen kehityksessä minkä tahansa toiminnan suorittamisessa; Lapsi toteuttaa kykyä nähdä ympäröivä maailma uudesta näkökulmasta, tuntee olevansa enemmän mukana jokapäiväisessä toiminnassa ja kommunikoi muiden kanssa aivan uudella tavalla. Kolme erilaista kokoonpanoa on luotu vastaamaan jokaiseen tarpeeseen:

› Grillo Adaptive Seating **lisävarusteella 863 erillinen päätuki** sopii lapsille, jotka tarvitsevat säädettävää tukea päätuen kulman ja syvyyden suhteen.

› Grillo Adaptive Seating **lisävarusteella 865 pehmustettu päätuki** tai **835 muotoiltu päätuki**, riippuen tarvitsevatko he päätuelta sivuttaistukea vai tukea takaraivoille tarpeesta riippuen.





863 Posturaalinen erillinen päätuki
mukautuu pään muodon mukaan. Säädettävä korkeus, kulma ja syvyys.

865 Pehmustettu päätuki
korkeussäädettävä



835 Muotoiltu päätuki
sivuttaistuki ja tuki takaraivolle, korkeussäädettävä.

High performance


Innovatiivinen tuplapäällinen

Grillo Adaptive Seating istuimessa on **hengittävä, miellyttävä, kestävä, helposti pestävä** ja **nopeasti kuivuva** kangas:

- › Kuormituksen kestävä kangasverhoilu, ei irrotettava: muotoilurakenne mahdollistaa erinomaisen hengittävyuden, joka vähentää hikoilua ja bakteerien muodostumista.
- › Kankaan koostumus mahdollistaa helpon puhdistamisen ja pesun nopealla kuivumisajalla. Tekstuuri säilyttää suorituskyvyn suurillakin kuormituksilla.
- › Palonkestävä paloteknisyysluokan 1 (syttymättömät palavat materiaalit) MD:n 26. kesäkuuta 1984 ja myöhempien muutosten ja lisäysten mukaan.
- › Irrotettava päällinen on valmistettu erittäin hengittävästä ja laadukkaasta materiaalista sekä sisältä että ulkoa. Sisäpehmusteessa on erittäin innovatiivinen etureunarakente, joka on kolmiulotteinen ja kevyt, ja joka tarjoaa erittäin hyvän ilmankierron, optimaalisen painonjakautumisen ja erinomaisen mukavuuden. Myös ulkokangas kestävä hyvin kulutusta. Palonestoaine EN 1021-1:2014 ja EN 1021-2:2014 standardien mukaan.



Kuormitusta kestävä kangasverhoilu

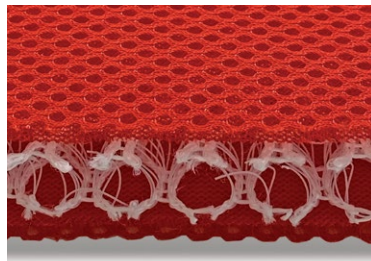

Irrotettava ja pehmustettu päällinen





Käytännöllinen ja mukava

Monipuolisuutta jota tarvitset

Grillo Adaptive Seating -istuimessa on **alumiininen kokoontaitettava runko**, joka on maalattu myrkyttömällä epoksijauheella.

Neljä kääntyvää pyörää, joissa kaikissa on jarrut, mahdollistavat tuolin siirtämisen huoneesta toiseen jopa lapsen istuessa.

Patentoitu kaasujousella toimiva korkeussäätöjärjestelmä mahdollistaa tuolin korkeuden muuttamisen lapsen istuessa: ihanteellinen, jotta hän pääsee helposti ja mukavasti erilaisille pöytätasolle ja työtasolle sekä tuo hänet lähemmäksi lattiaan helpottamaan laskeutumista.

Turvajärjestelmä estää tahattoman aktivoinnin.

Älykkään suunnittelunsa ansiosta se mukautuu ympäristöönsä, jolloin lapsi voi osallistua päivittäiseen toimintaan ja olla vuorovaikutuksessa perheen ja muiden lasten kanssa.



Tekniset tiedot ja säädöt



Selkäosa

Kallistus kaasujousella helposti ja turvallisesti fysiologinen painopiste, jotta säätö olisi mukavaa. Korkeuden säätö liu'uttamalla ilman irrotettavia ruuveja. Taittuu alas kuljetusta varten.



Istuin

Kallistus kaasujousella helposti ja turvallisesti Korkeuden säätö liu'uttamalla ilman irrotettavia ruuveja. Leveydensäätö monisäädettävillä pehmustetuilla lantion sivutuilla.



Monisäädettävät lantion sivutuet

Tarkempaan asennon suuntaamiseen. kulma-, (rotaatio sisään) leveys- ja syvyyssäädettävät.



Käsituet

Pehmustetut, korkeus- ja kulmasäädettävät

Jalkatuet

Säädettävä korkeus, kulma, syvyys sekä istuin fysiologisella tukipisteellä, jotta säätö olisi mukavaa.



Pohjetuet

Pehmustetut, korkeus- ja syvyyssäädettävät

Jalkalevyt

flexio-extensio- ja kulmasäädettävät.



Komponentit



947 Lantiovyö säädettävällä kulmalla

Saatavana kolme kokoa.



920 4-pistelantiovyö

Saatavana kaksi kokoa.



838 Vartalon sivutuet

Säädettävä korkeus, leveys ja kulma.

Saatavana kolme kokoa.

*Päällystetty hengittävällä
pehmustekankaalla, irrotettavissa
pesua varten.*



868 Joustavat kiinnitettävät vartalon sivutuet

Leveys-, korkeus- ja kulmasäätö

Saatavana kaksi kokoa.



961 Kyynärpäätuet



853 Turvavyöliivi vetoketjulla

Saatavana kaksi kokoa.

Komponentit



853 4-pistevyöliivi, slim muotoiltu



834R Säädettävä abduktiokiila
Säädettävä syvyys ja abduktio.
Saatavana kaksi kokoa.



834N Kapea abduktiokiila
Saatavana kaksi kokoa.



824 Pöytälevy syvennyksellä

syvyys-, korkeus- ja kulmasäätö käsitukien kanssa.

Valmistettu kestävästä ja hygieenisestä materiaalista, ei reunamuotoilua, se ei säilytä ruokajäämiä.




960 Kantaremmit



962 Jalkaterä- ja kantaremmit

Grillo A.Seating koot ja painot

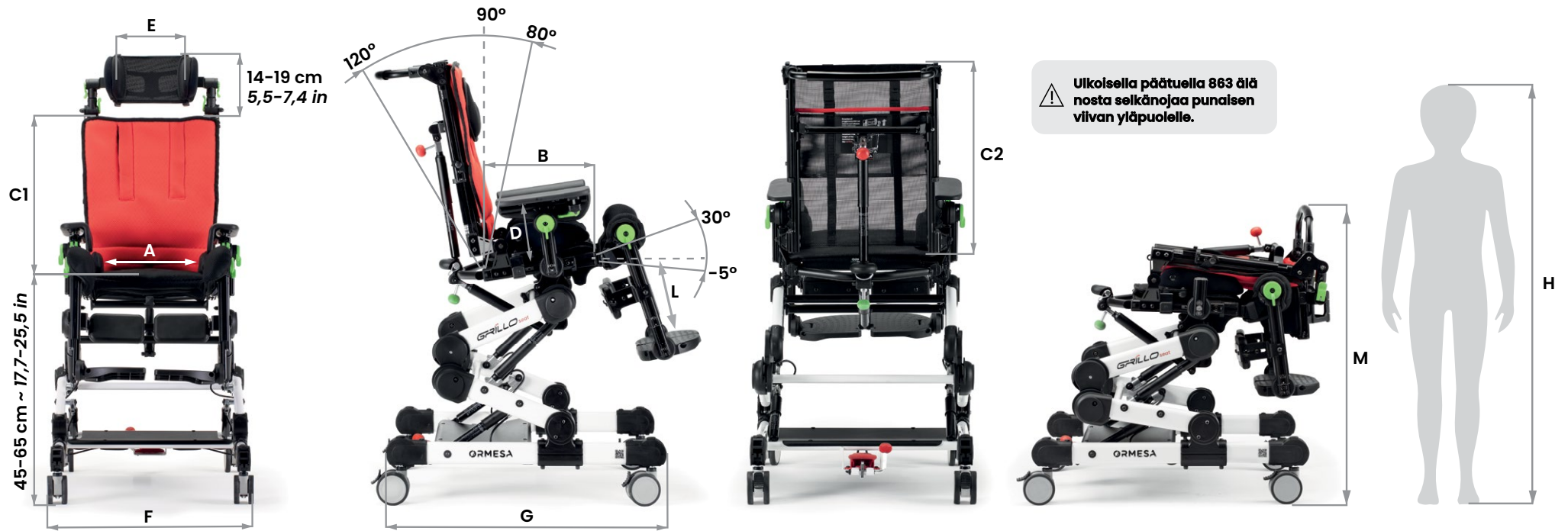


	A	B	C1	C2	D	E	F	G	L	M	Käyttäjän pituus (H)	kokonais- paino	max. kuorm.
mini	16-26 cm 6,2-10,2 in	16-26 cm 6,2-10,2 in	30-41 cm 11,8-16,1 in	30-50 cm 11,8-19,6 in	12-15 cm 4,7-5,9 in	15 cm 5,9 in	49 cm 19,2 in	59 cm 23,2 in	15-25 cm 5,9-9,8 in	68 cm 26,7 in	75-105 cm 29,5-41,3 in	20,4kg 44,9 lb	25 kg 55,1 lb
Small	20-30 cm 7,8-11,8 in	20-30 cm 7,8-11,8 in	35-47 cm 13,7-18,5 in	35-60 cm 13,7-23,6 in	15-20 cm 5,9-7,8 in	17 cm 6,6 in	53 cm 20,8 in	65 cm 25,5 in	20-31 cm 7,8-12,2 in	68 cm 26,7 in	90-120 cm 35,4-47,2 in	22,6 kg 49,8 lb	35 kg 77,1 lb
Medium	25-35 cm 9,8-13,7 in	28-43 cm 11-16,9 in	40-55 cm 15,7-21,6 in	40-70 cm 15,7-27,5 in	16-20 cm 6,2-7,8 in	20 cm 7,8 in	58 cm 22,8 in	74 cm 29,1 in	25-40 cm 9,8-15,7 in	70 cm 27,5 in	110-145 cm 43,3-57 in	24,3 kg 53,5 lb	45 kg 99,2 lb

Viivoilla erotetut numerot osoittavat vähimmäis- ja enimmäissätöalueen.

Tessa ja hänen tarinansa odottavat sinua Ormesan virallisella verkkosivustolla yhdessä muiden fantastisen maailmanlaajuisen yhteisömmme päähenkilöiden kanssa.



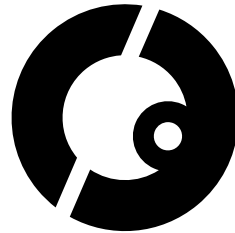

A special thanks to the families who participated with enthusiasm in our project. It is thanks to our customers and their stories that we find the energy and stimuli to evolve day by day.

CE complies with MDR (EU) 2017/7

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= **ISO 13485** =

Ormesa srl - Via A. Da Sangallo, 1 | 06034 Foligno (PG) - ITALY
Tel. +39 0742 22927 | FAX +39 0742 22637 | info@ormesa.com

www.ormesa.com