



ORMESA®
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

GRILLO chair





Tuhannen toiminnon tuoli.

Grillo Chair on ergonominen ja säädettävä tuoli vammaisille lapsille, jotka tarvitsevat tukea virkistys-, koulu- ja päivittäisissä toiminnoissa.

Tuolissa on ergonominen istuin, joka on suunniteltu tarjoamaan maksimaalista mukavuutta lapselle, mikä istuma-asentoa parantamalla rohkaisee kehittämään mekaanisia motorisia taitoja, tarkkaavaisuutta ja lisää sosiaalista osallisuutta.

Kuormituksen kestävä verhoilu on erittäin hengittävä ja kestävä, mahdollistaa lapsen palkitsevan ja vaivattoman istumakokemuksen. Saatavana vaaleanpunaisena ja sinisenä.

Kiitos laajan valikoiman asentokomponentteja, Grillo Tuoli on helposti muunneltavissa jokaisen lapsen tarpeisiin. Luokassa ja kotona lapsi tuntee olonsa turvallisiksi ja tämä auttaa häntä erilaisissa toiminnoissa ja lähestyä vertaisiaan.

PRODUCT
MARKED 

GRILLO CHAIR ON LÄÄKINNÄLLINEN LAITE, JOKA TÄYTTÄÄ (EU) 2017/745 ASETUKSELLA MÄÄRITELLYT TURVALLISUUSVAATIMUKSET



Perfect Match

Stabiliteetti, asento ja käytännöllisyys



Grillo Chairissa on kompakti **alumiinirunko**, joka on maalattu myrkyttömällä epoksijauheella.

Kaasujousella toimiva korkeudensäätöjärjestelmä mahdollistaa tuolin korkeuden muuttamisen myös lapsen istuessa tuolissa.

Lisäksi siinä on **Turvajärjestelmä** tahattoman toiminnan estämiseksi.

Grillo Chair on ihanteellinen ratkaisu kouluun ja kotiin: se voidaan yhdistää mihin tahansa pintaan opetus- ja leikkitoimintaan tai monitoimipöytiin, kuten

Ormesan monitoimipöytään, joka luo täydellisen yhdistelmän vakauden, asennon ja käytännöllisyyden välille.

Fiksu verhoilu

Uudenlainen päällinen

Grillo Chairin verhoilussa on **hunajakennomainen etureunarakenne**, joten se on erittäin hengittävä ihokosketuksessa.

Kankaan rakenne luo "**ilmakammion**", joka mahdollistaa sekä **ilmankierron**, maksimaalisen **hengittävyys** että tehokkaan luonnollisen **lämmöneristys**.

Kaksinkertainen kerros mahdollistaa:

- > **Hygienia:** erinomaisen hengittävyys ansiosta se vähentää hikoilua ja bakteerien muodostumista.
- > **Pesu:** Kankaan koostumus mahdollistaa helpon desinfioinnin ja pesun. Verhoilua ei voi irrottaa.
- > **Nopeasti kuivuva.**
- > **Kestävä:** Korkea kulutuskestävyys. Suuri vastustuskykyinen rakenne säilyttää suorituskykynsä jopa suurilla kuormituksilla (ISO 12947 -testattu).
- > **Paloturvallinen:** EN 1021-1:2014 and EN 1021-2:2014.



Tekniset ominaisuudet ja säädöt





Selkäosa

Kallistus kahdella vihreällä vivulla helposti ja turvallisesti. Korkeuden säätö liu'uttamalla. Ei irtavia ruuveja.



Istuin

Ergonominen ja hieman kallistettu istuin estää lantiota luisumasta ja lisää mukavuutta. Säädettävä syvyys liukumalla jatkuvasti ja tarkasti. Säädettävä leveys valinnaisen lisävarusteen **958 monisäädettävien pehmustettujen lantion sivutukien** ansiosta.



Käsituet

Pehmustetut, kulma ja korkeussäädettävät.

Komponentit




947 Lantiovyö
säädettävällä kulmalla

Saatavana kolme kokoa.



920 4-pistelantiovyö

Saatavana kaksi kokoa.

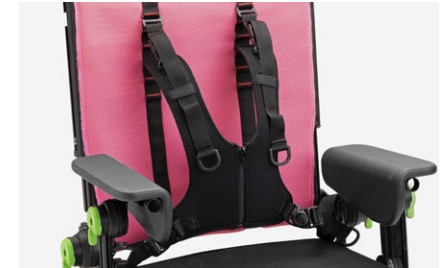

853 Turvavyöliivi
vetoketjulla

Saatavana kaksi kokoa.



834N Kapea abduktiokiila

Saatavana kaksi kokoa.



958R Pehmusetut lantion
sivutuet

Leveys- syvyys ja kulmasäätö



824 Pöytälevy syvennyksellä

syvyys-, korkeus- ja kulmasäätö
käsitukien kanssa.

*Valmistettu kestävästä ja hygieenisestä
materiaalista, ei reunamuotoilua, se ei
säilytä ruokajäämiä.*

Komponentit



853 4-pistevyöliivi, slim muotoiltu

Vain Grillo Chair koko M



959: 4 rengasta ja jalkatuki -setti


75 mm kääntyvät pyörät, joissa kaikissa on jarrut. Mukana jalkatuki.

Helppoa kuljetusta ja säilytystä varten. Mahdollistaa siirrot myös lapsen istuessa tuolissa.



Grillo Chair

koot ja painot

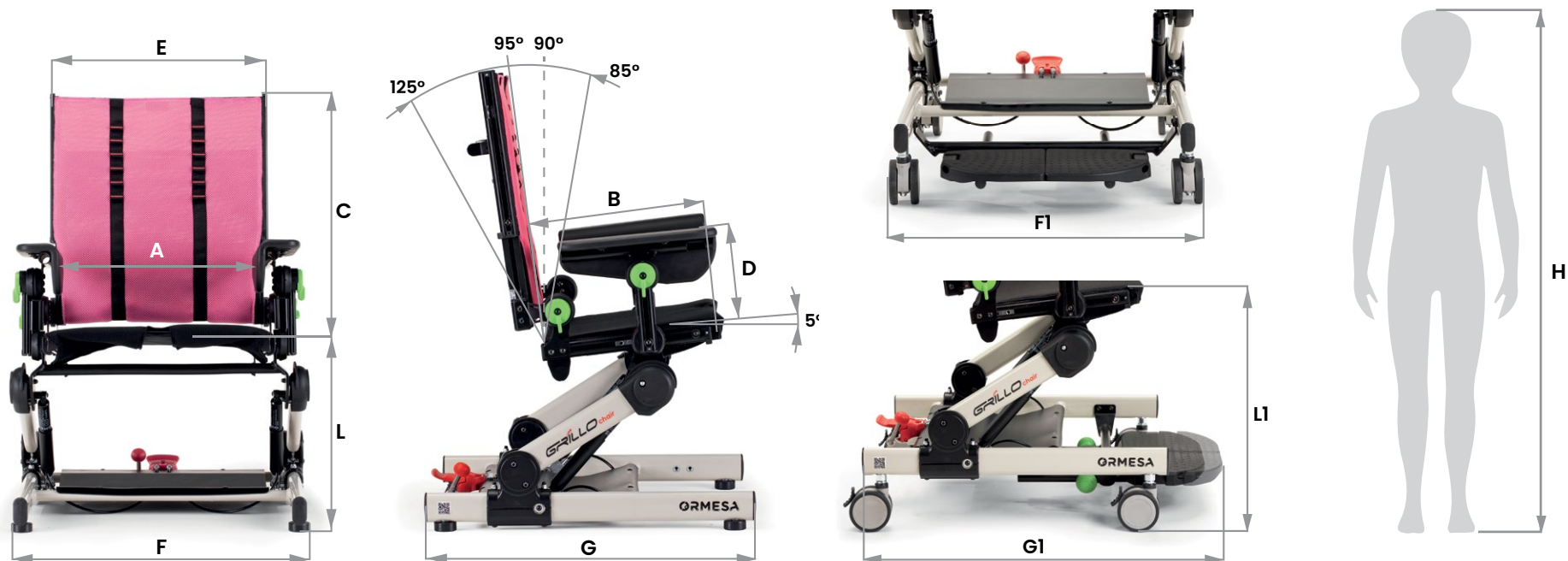

Lisävaruste 959:
4 renkaan ja jalkatuen setti


	A*	B	C	D	E	F	F1	G	G1	L	L1	H	Tot. paino	Max. kuormitus
Small	30 cm 11,8 in	20-30 cm 7,8-11,8 in	30-45 cm 11,8-17,7 in	15-18 cm 5,9-7 in	36 cm 14,1 in	48 cm 18,8 in	50,5 cm 19,8 in	50 cm 19,6 in	52-64 cm 20,4-25,1 in	20-31 cm 7,8-12,2 in	28-39 cm 11-15,3 in	90-120 cm 35,4-47,2 in	10,7 kg 23,5 lb	35 kg 77,1 lb
Medium	35 cm 13,7 in	28-43 cm 11-16,9 in	35-55 cm 13,7-21,6 in	16-20 cm 6,2-7,8 in	41 cm 16,1 in	52 cm 20,4 in	54,5 cm 21,4 in	56,5 cm 22,2 in	62-73 cm 24,4-28,7 in	25-40 cm 9,8-15,7 in	33-48 cm 12,9-18,8 in	110-145 cm 43,3-57 in	13 kg 28,6 lb	45 kg 99,2 lb

* lisävarusteen 958R moni-säädettävät lantio- / sivutuet kanssa: S 20-30 cm (7,8-11,8 in); M 25-35 cm (9,8-13,7 in)

Kiitos Sterpete's Preschool heidän
tuestaan ja vieraanvaraisuudesta.



Giulio ja hänen tarinansa
odottavat sinua Ormesan
virallisella verkkosivustolla
yhdessä muiden
fantastisen
maailmanlaajuisen
yhteisömme
päähenkilöiden kanssa.

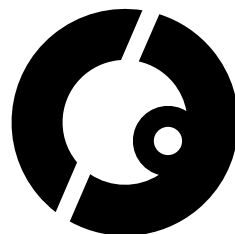

A special thanks to the families who participated with enthusiasm in our project. It is thanks to our customers and their stories that we find the energy and stimuli to evolve day by day.

CE complies with MDR (EU) 2017/7

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= **ISO 13485** =

Ormesa srl - Via A. Da Sangallo, 1 | 06034 Foligno (PG) - ITALY
Tel. +39 0742 22927 | FAX +39 0742 22637 | info@ormesa.com

www.ormesa.com