



Stabilo asentotyyny – ne kestävät ja pestävät

Stabilo asentotyyny tukevat käyttäjänsä istuma- ja makuuasentoa, tasaavat lantioon ja selkärankaan kohdistuvaa painetta ja vähentävät kipuja. Tuot soveltuvat erityisen hyvin CP-, skolioosi- ja kyfoosipotilaille sekä spastisuuden aiheuttamista kivoista ja kouristuksista kärsiville.

Polyuretaanirakeista ja Visco-vahtomuovista valmistettuja **tyhjiötyynyjä** on helppo muotoilla, mikä on selkeä etu esim. fysioterapiassa, jossa yhdellä tyynyllä voi olla useampi eri käyttäjä. Hyviä käyttökokemuksia on saatu myös allasterapiasta sekä eri harrastuksista.



Stabilo asentotyyny

Hygienia edellä

Stabiloita voidaan hyödyntää usean eri käyttäjän apuna, jolloin tuotteiden pesuominaisuuksilla on suuri merkitys. Asentotyynyt ovat helposti pestäviä ja erittäin kestäviä.

Tyhjiötyynyn voi muotoilla uudelleen ja uudelleen

Stabilo tyynyjen salaisuus on niiden tyhjiörakenteessa, joka mahdollistaa tuen muokkaamisen juuri sellaiseksi kuin käyttäjä tarvitsee. Haluttu muoto saadaan aikaan poistamalla tyynyn sisältä ylimääräinen ilma pois käsi- tai sähköpumpun avulla. Näin aikaansaatu muoto myös pysyy.

Tuoteperhe kasvaa


Uusia ideoita syntyy ja Stabilo-tuoteperhe kasvaa. Kuten tiedetään, vesi on elementtinä vapauttava ja keventävä – siksi haluttiin kehittää myös allas- ja ammekäyttöön apuväline, joka kelluttaa käyttäjäänsä turvallisesti, ilman että avustajan tarvitsisi koko ajan pitää kiinni avustettavastaan.

Bath Bagel -uimatyynyn kehitystyössä kiinnitettiin erityistä huomiota käyttäjän pään asennon muokattavuuteen. Esimerkiksi voimakkaasti hypotonisten käyttäjien kanssa Bagel saadaan tukemaan hyvin myös leukaa, eli altaassa tai ammeessa käyttäjän leuka jää riittävän korkealle veden pinnan yläpuolelle.

Paljon malleja ja lisävarusteita


Asentotyynyistä ja -patjoista löytyy useita malleja pään, raajojen sekä istuma- ja makuuasentojen tukemiseen ja siten käyttäjän olon helpottamiseen. Multiseat-mallia voi turvallisesti käyttää myös autossa, sillä se on testattu ja hyväksytty **ECE R44/04** -standardin mukaisesti.



Tuote	Koko	Vakio ID	Velcro ID	Mitat (cm)			
				A	B	C	D
 Base	S	2990583	2990583/V	25	38		
	S+	2990585	2990585/V	35	35		
	M	2990584	2990584/V	40	40		
	M+	2991160	2991160/V	45	45		
	L	2990586	2990586/V	50	50		

Tuote	Koko	Vakio ID	Velcro ID	Mitat (cm)			
				A	B	C	D
 Base Hilo	S	2990776	2990776/V	25	38		
	S+	2990777	2990777/V	35	35		
	M	2990778	2990778/V	40	40		
	M+	2990779	2990779/V	45	45		
	L	2990780	2990780/V	50	50		

Tuote	Koko	Vakio ID	Velcro ID	Mitat (cm)			
				A	B	C	D
 Comfortable	S	2990587	2990587/V	52	40		
	M	2990588	2990588/V	56	50		
	L	2990589	2990589/V	70	50		

Tuote	Koko	Vakio ID	Velcro ID	Mitat (cm)			
				A	B	C	D
 Comfortable Plus	S		2991031/V	30	50	58	28
	M		2991032/V	35	60	65	28
	L		2991033/V	40	75	75	35
	XL		2991034/V	45	75	85	35

Tuote	Koko	Vakio ID	Velcro ID	Mitat (cm)			
				A	B	C	D
 Wedge	M		2990611/V	40	40	25	
	L		2990613/V	45	60	40	

Tuote	Koko	Vakio ID	Velcro ID	Mitat (cm)			
				A	B	C	D
 Bath Bagel	S		2990755/V	30	35	10	12
	M		2990754/V	35	37	12	17
	M+		2990768/V	45	55	12	17
	L		2990723/V	45	60	17	22


Tuote	Koko	Vakio ID	Velcro ID	Mitat (cm)
 Hand pump		U	2990641	

Tuote	Koko	Vakio ID	Velcro ID	Mitat (cm)
 Electric pump		U	2990605	

Tuote	Koko	Vakio ID	Velcro ID	Mitat (cm)
 Carlighter's cable		U	2990606	

Tuote	Koko	Vakio ID	Velcro ID	Mitat (cm)
 Battery pack		U	2990607	

Tuote	Koko	Vakio ID	Velcro ID	Mitat (cm)			
				A	B	C	D
 Neoprene strap	M		2991269/V1	130	9		
	L		2991269/V2	160	9		

Tuote	Koko	Vakio ID	Velcro ID	Mitat (cm)			
				A	B	C	D
 Comfortable Plus Duo	S		2991035/V	30	80	58	28
	M		2991036/V	35	95	65	28
	L		2991037/V	40	115	75	35
	XL		2991038/V	45	120	85	35

Tuote	Koko	Vakio ID	Velcro ID	Mitat (cm)			
				A	B	C	D
 Comfortable Plus Duo Hilo	S		2990781/V	30	80	58	28
	M		2990782/V	39	95	65	28
	L		2990783/V	40	115	75	35
	XL		2990784/V	45	120	85	35


Tuote	Koko	Vakio ID	Velcro ID	Mitat (cm)			
				A	B	C	D
 Headrest	M		2990618/V	15	30	14	
	L		2990708/V	20	35	17	

Tuote	Koko	Vakio ID	Velcro ID	Mitat (cm)			
				A	B	C	D
 Armrest	M		2991261/V	20	30		
	L		2991262/V	25	45		

Tuote	Koko	Vakio ID	Velcro ID	Mitat (cm)				
				A	B	C	D	
 Grande	M		2990872/V	70	160			
	M+		2991163	2991163/V	90	200		
	L		2990591	2990591/V	130	200		

Tuote	Koko	Vakio ID	Velcro ID	Mitat (cm)
 Mounting strap		U	2991273	140 5

Tuote	Koko	Vakio ID	Velcro ID	Mitat (cm)
 Stabilization vest		U	2990610	

Tuote	Koko	Vakio ID	Velcro ID	Mitat (cm)			
				A	B	C	D
 Shorts stabilizing the pelvis and provides abduction of thighs	M		2990730	40	28		
	L		2990731	50	35		

Tuote	Koko	Vakio ID	Velcro ID	Mitat (cm)
 Headrest fastening		U	2991287	

Tuote	Koko	Vakio ID	Velcro ID	Mitat (cm)
 Splint - armrest fastening		U	2991263	30 10

Tuote	Koko	Vakio ID	Velcro ID	Mitat (cm)			
				A	B	C	D
 Membramed cover for Grande	M		2990734				
	M+		2990735				
	L		2990736				

Tuote	Koko	Vakio ID	Velcro ID	Mitat (cm)			
				A	B	C	D
 Membramed cover for Beanseat	M		2990732				
	L		2990733				

Tuote	Koko	Vakio ID	Velcro ID	Mitat (cm)				
				A	B	C	D	
 Beanseat	M		2991281	2991281/V	60	80	50	40
	L		2991282	2991282/V	70	100	70	50

Tuote	Koko	Vakio ID	Velcro ID	Mitat (cm)				
				A	B	C	D	
 Multiseat	M		2991296		38	35	53-62	49-58
	L		2991297		42	40	79-82	69-78

Tuote	Koko	Vakio ID	Velcro ID	Mitat (cm)			
				A	B	C	D
 Flat	M		2990745/V	80	50	6	
	L		2990746/V	100	50	8	

Tuote	Koko	Vakio ID	Velcro ID	Mitat (cm)			
				A	B	C	D
 Banana	S		2990737/V	50	25		
	M		2990738/V	55	35		
	L		2990739/V	80	35		

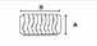
Tuote	Koko	Vakio ID	Velcro ID	Mitat (cm)			
				A	B	C	D
 Roll	S		2990740/V	50	25		
	M		2990741/V	50	35		
	M+		2990742/V	80	18		
	L		2990743/V	80	25		
XL		2990744/V	80	35			

Tuote	Koko	Vakio ID	Velcro ID	Mitat (cm)			
				A	B	C	D
 Flexible cover with foam for Comfortable Plus Duo	S		2990771				
	M		2990772				
	L		2990773				
	XL		2990774				

Tuote	Koko	Vakio ID	Velcro ID	Mitat (cm)			
				A	B	C	D
 Flexible cover set with foam for Multiseat	M		2990792				
	L		2990793				

Tuote	Koko	Vakio ID	Velcro ID	Mitat (cm)
 Tubo		U	2990784	

Tuote	Koko	Vakio ID	Velcro ID	Mitat (cm)			
				A	B	C	D
 Beanroller - wheelbase	M		2990770	80	60	44	66
	L		2990769	100	70	50	66

Tuote	Koko	Vakio ID	Velcro ID	Mitat (cm)
 Armadio		M+	2990747	90 200

Materiaalit

Stabilo-tuotteet on valmistettu polyuretaanirakeista ja Visco-vaahdotuovista. Pintamateriaalina on käytetty neopreeniä eli samaa materiaalia kuin märkäpuvissa ja siksi Stabilot ovatkin niin kestäviä ja vedenpitäviä. *Tuotteissa ei ole käytetty lateksia.* Tyynyt voi pestä juoksevan veden alla, kylpyammeessa tai pesukoneessa (maks. 40 °C: ssa käyttäen tekokuiduille soveltuvia pesuaineita). Tyynyn puhdistuksessa voi käyttää myös lääketieteellisten tekstiilien desinfiointiin tarkoitettuja puhdistusaineita. Tuote ei kutistu pesussa eivätkä sen ominaisuudet muutu.

Stabilo Velcro

Stabilo-tuotteisiin saa myös Velcro-kankaisen taustan, johon on helppo kiinnittää lisävarusteina saatavia tukia ja vöitä. Comfortable Plus, Comfortable Plus Duo, Bath Bagel, Wedge, Roll, Fiat ja Banana toimitetaan aina Velcro-taustalla.

Stabilo-tyynyihin ja -patjoihin on saatavana erilaisia lisävarusteita:

- sähköpumppu sekä akku- ja autolaturi (käsipumppu aina vakiona)
- neopreenivyö
- kiinnityshihna
- tukiliivi
- shortsit, jotka vakauttavat lantiota ja tukevat reisiä
- pää- ja käsitukien kiinnityslevyt
- antibakteeriset suojukset Grandeen, Beanseatiin, Comfortable Plus Duoon sekä Multiseatiin
- Tubo-lisätuki
- Beanroller-kärry Beanseatia varten



Pyydä meiltä kustannusarvio!

Helpoin tapa on ottaa yhteyttä suoraan myyntineuvottelijoihimme, jotka tekevät kartoituksen ja tarjouksen, johon kuuluu kustannusarvio toimituskuluineen.



NOEL s.c.
ul. Romanowicza 6
30-702 Kraków
Tel.: +48 12 341 53 1 6
www.stabilo.krakow.pl
stabilo@stabilo.krakow.pl

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
© 2021 Camp Mobility Finland