



## Ormesa MiniStandy seisomatelineet lapsille

Ormesa **MiniStandy** -seisomatelineet tarjoavat yksilölliset säätömahdollisuudet. Niissä on tarrasäädettävät lantio- ja rintatuki, polvituet, kantapidikkeet sekä säädettävä iso pöytälevy. 3 kokoa. Saatavana myös versiot **MiniStandy DJ, Standy 3 ja Standy 4**.

Optiona saatavassa **MiniStandy DJ** seisomatelineessä on äänilähde, (patentoitu audiojärjestelmä) jonka värähtely tuntuu seisomatelineen rungossa ja muissa osissa. Tämä antaa lapselle stimuloivan aistikokemuksen ja parantaa vuorovaikutusta ympäristön kanssa. 3 kokoa.


## Ominaisuuksia

**Metallirunko** on maalattu epoksimaalilla ja myrkyttömillä aineilla. Kromatut ja säädettävät osat, joiden säätöön ei tarvitse työkaluja. Ei kallistettava alusta.

**Korkeus- ja syvyyssäädettävät polvituet** (säädettävä korkeus, syvyys, leveys ja polvikulma).

DJ: Seisomatelineenkantopaneelilla ja QR-koodilla voidaan hyödyntää sovelluksia.

DJ: Seisoma-alustan pohjassa on kiinteä patentoitu moduulijärjestelmä, joka pystyy tuottamaan ääni- ja videosignaaleista värähtelyä.

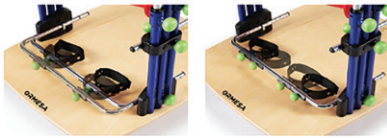


Jalkojen lähennys ja loitonus säätö, nilkkaremmien kiinnitys tarranauhoilla



Syvyyss-, korkeus- ja kulmasäädettävä päätuki lisävarusteena

**Irroitettava pöytälevy** (säädettävä korkeus, syvyys ja kallistus)

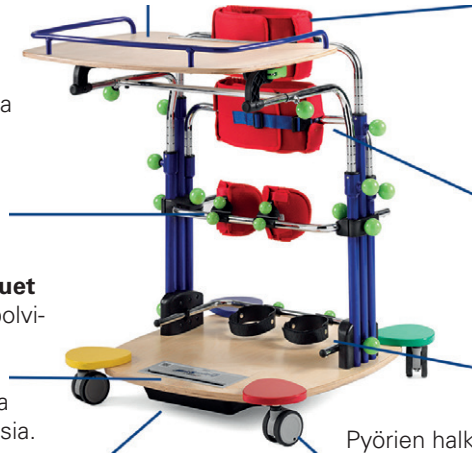

**Korkeus- ja leveysäädettävä rintakehän tuki** lisäksi rotaatiosäätö eteen ja taakse.

Säädettävä tuenta tarranauhoilla


**Korkeus- ja leveysäädettävä lantiotuki** lisäksi rotaatiosäätö eteen ja taakse.

Kantapäätukien leveys ja syvyys säädettävissä. **Nilkkaremmessä tarrakiinnitysmekanismi**

Pyörien halkaisija on 75 mm. **Lukittavissa takapyörissä** on toimintavarmat jarrut. Pyörien ansiosta lasta on helppo siirtää eri tilojen välillä.



Edestä ja takaa säädettävä rintatuki ja lantiotuki.

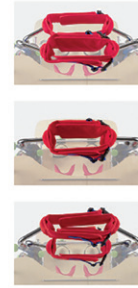

Lisävarusteena saatavana kavennuspalat (-3 cm)

**Verhoiluosat voi pestä ja desinfioida.**

## Tekniset tiedot





	koko 1	koko 2	koko 3
<b>A: Alustan pituus</b>	60 cm	70 cm	80 cm
<b>B: Kokonaispituus</b>	74 - 86 cm	78 - 90 cm	83 - 95 cm
<b>C: Korkeus jalkatuki - pöytälevy</b>	49 - 77 cm	59 - 87 cm	69 - 100 cm
<b>D*: Kokonaisleveys</b>	64 cm	65 cm	70 cm
<b>E: Korkeus jalkatuki - polvituki</b>	14 - 26 cm	14 - 32 cm	14 - 42 cm
<b>F: Korkeus jalkatuki - lantiotuki</b>	41 - 55 cm	52 - 68 cm	62 - 86 cm
<b>G: Korkeus jalkatuki - rintatuki</b>	53 - 72 cm	67 - 94 cm	82 - 110 cm
<b>L: Tukien minimi ympäröymitta</b>	60 cm	65 cm	70 cm
<b>M**: tukien sisäleveys</b>	18 cm	22 cm	29 cm
<b>N: käyttäjän pituus</b>	75 - 100 cm	95 - 125 cm	120 - 150 cm
<b>Kokonaispaino</b>	19 kg	21 kg	23 kg
<b>Max. kuormitus</b>	35 kg	45 kg	55 kg

**ORMESA**  
MADE IN ITALY SINCE 1980

ORMESA SRL  
Via A. Da Sangallo,1  
06034 FOLIGNO (PG) ITALY  
TEL. +39 0742 22927  
FAX +39 0742 22637  
info@ormesa.com  
www.ormesa.com


Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.  
© 2022 Camp Mobility

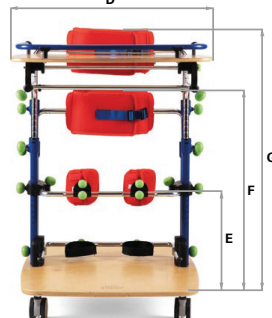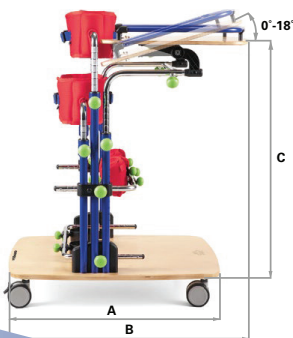

\* koko 1: leveys: pöytälevyn leveys  
koko 2 ja 3: leveys nupuista



\*\* etäisyys mitattu pystytankojen kohdalla

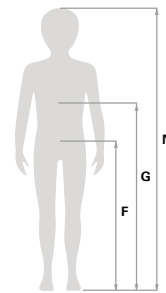

Varmista että mitat F ja G ei ylitä ehdotettuja tuille annettuja mitta-arvoja.

**CAMP**  
MOBILITY

www.campmobility.fi

Asiakaspalvelu  
+358(0)9 350 76 310  
info@campmobility.fi  
Varaosapalvelu  
+358(0)9 350 76 312  
varaosat@campmobility.fi