

Birdie[®]EVO



Paras mahdollinen design turvallisiin siirtoihin

SLOW'R® | SMARTLOCK™ | RIPUSTUSKOUKKUJEN UUSI DESIGN



Siirrettävien nostinten evoluutio

Uusissa **Birdie^{EVO}** nostimissa on valittavissa monipuolisia ominaisuuksia yhdistettynä uusiin teknologisiin ratkaisuihin. Ne tarjoavat parhaan mahdollisen mukavuuden ja turvallisuuden kun henkilöä nostetaan tai siirretään sängystä, tuolista tai jopa lattialta.

Uusi nostinsarja perustuu tunnettuun Birdieen, mutta on suunniteltu käyttäjiä ajatellen. Nostimissa yhdistyvät kaikki Birdien arvostetut ominaisuudet uusiin ominaisuuksiin, jotka entisestään parantavat sekä siirrettävän että nostimen käyttäjän kokemusta.

Vaikuttava nostoalueen laajuus

Uudet **Birdie^{EVO}** nostimet mahdollistavat ergonomiset nostot joissa nostettava voidaan helposti kääntää 360°. Tällöin hoitajan on helpompi asetella siirrettävän asentoa ja siten vähentää siirrettävän jännittyneisyyttä.

Maximimoitu nostotila

Korkea nostopuomi takaa sen, että nostettavalla on aina tilaa, myös silloin kun nostopuomi on ylimmässä asennossa. Moottorin edessä on riittävästi tilaa siirrettävän polville jolloin riski polvien loukkaantumiseen pienenee.



Helppo käsitellä, kuljettaa ja säilyttää

Uudet **Birdie^{EVO}** nostimet voidaan taittaa helposti kokoon ja koota uudelleen ilman työkaluja. Ne vievät säilytyksessä minimaalisesti tilaa ja niitä on helppo työntää ja kuljettaa. Tarvittaessa runko voidaan helposti irrottaa alustasta (ilman työkaluja).

Birdie^{EVO} COMPACT on vielä helpompi kuljettaa ja säilyttää, sillä se painaa ainoastaan 31 kg.



UUTTA

UNIIKIT OMINAISUUDET



Slow'R®

- Integroitu rajoitin vähentää keuvaa liikettä merkittävästi.



SMARTLOCK™

- Pikalukituksella ripustinvarren vaihto on nopeampaa, turvallisempaa ja helpompaa kuin koskaan ennen. Ilman työkaluja.



Hook Design

- Uusien, käyttäjäystävällisiksi suunniteltujen ripustuskoukkujen ansiosta nostoliinujen kiinnitys onnistuu turvallisesti yhdellä kädellä.

UUDET lisäominaisuudet



- Ergonominen työntökahva tekee käsittelystä entistä helpompaa.



- Erityislaatuisten, kaareviksi muotoiltujen nostopuomin ja ripustinvarsien ansiosta hoitajat voivat säilyttää katsekontaktin siirrettävän kanssa kaikissa siirron vaiheissa.



- Jalat on suunniteltu ergonomisesti kaareviksi ja sileiksi, jolloin ne ikään kuin kietoutuvat siirrettävän henkilön alustan ympärille ja liikkuvat helposti comfort-pyörätuolin tai sähköpyörätuolin ympärille.






3 avainominaisuutta kiteytettynä

◀ **Slow'R®** PATENTED Vähentää keinumista

Uusi rajoitin on suunniteltu ja integroitu nostopuomiin vähentämään siirrettävän keinuntaa ja siten tuottamaan siirrettävälle **mukavamman kokemuksen** ja antamaan hoitajalle **enemmän hallintaa** nostojen ja siirtojen aikana

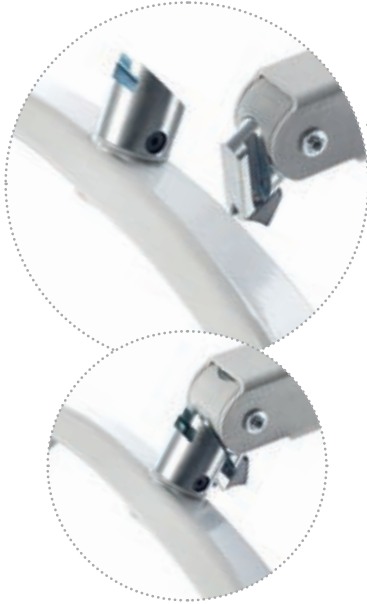

◀ **SMARTLOCK™** PATENTED Yksinkertaistaa ja varmistaa lukituksen

Uuden pikalukituksen ansiosta on yksinkertaista ja turvallista vaihtaa ripustinvarsi ilman työkaluja. **Turvallisuutta lisää** lukitussokallinen halkiöyhdistin, joka varmistaa, että järjestelmän molemmat osat pysyvät paikoillaan.



◀ **Uusi Ripustin Design** Nostoliinojen kiinnitys helposti

Uudet ergonomisesti suunnitellut ripustuskoukut mahdollistavat liinojen kiinnittämisen yhdellä kädellä. Leveämpi koukku tekee **liinan lenkkien kiinnittämisestä helpompaa**, samalla kun koukun sisäpuolella oleva väkä **estää lenkin liukumisen ulos** tahattomasti, vähentäen näin loukkaantumisen riskiä.

Helppo käsitellä, kuljettaa ja säilyttää

Uudet **Birdie^{EVO}** nostimet voidaan taittaa helposti kokoon ja koota uudelleen ilman työkaluja. Ne vievät säilytyksessä minimaalisesti tilaa ja niitä on helppo työntää ja kuljettaa. Tarvittaessa runko voidaan helposti irrottaa alustasta (ilman työkaluja).



Esittelyssä **Birdie^{EVO}**-perhe



► Pienempi alusta,
helpompi käsitellä

Pienempi koko mahdollistaa
Birdie^{EVO COMPACT} :in käytön
ahtaissa tiloissa.

Nostoväli 530 - 1590 mm

Max.kuormitus 150 kg

Kääntö Ø 1210 mm

Liikuteltavien lattianostinten sarja.
Suunniteltu siirrettäviä ja hoitajia ajatellen.



Birdie^{EVO}

▲ Uusi siirtämisen ja
nostamisen standardi

*Uusittu versio markkinajohtaja
Birdie nostimesta, suunniteltu
turvallisiin siirtoihin niin koti-
hoidossa kuin laitoksissa.*



Birdie^{EVO PLUS}

▲ Ylivoimaiset ominaisuudet,
parempi toiminnallisuus

*Korkealuokkaisimmassa
mallissamme on edistyksellisessä
ohjausyksikössä huoltotoimen-
piteiden tarkkailu, suojaavat päälliset
ja isot takapyörät.*



Birdie^{EVO XPLUS}

▲ Edistysellinen nostin
raskaammille käyttäjille

*Raskaammille käyttäjille suunnattu
nostin on edelleen kehitelty versio
suositusta Birdie Evo Plus -mallista*

Nostoväli ► 415 - 1660 mm

Max.kuormitus ► 180 kg

Kääntö Ø ► 1400 mm

► 415 - 1660 mm

► 180 kg

► 1400 mm


► 415 - 1660 mm

► 210 kg

► 1430 mm

Lisävarusteet ja ominaisuudet:

- Sähköinen tai mekaaninen jalkojen levitys
- Sähköinen tai mekaaninen hätälasku
- Painonappilukitus turvallisuuden optimoimiseksi
- Valikoima eri kokoisia 2- tai 4-pisteripustinvarsia
- Laaja valikoima kestäviä, eri mallisia, kokoisia ja eri kangasmateriaalisia nostoliinoja
- Kahva mekaaniseen jalkojen levitykseen
- Vaaka koti- tai laituskäyttöön

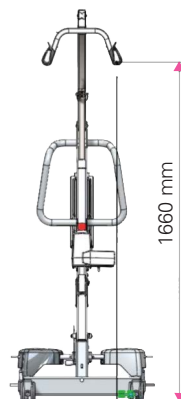

Tekniset tiedot ▼

Lisätietoja näistä tuotteista, ja käyttöohjeet ovat saatavilla paikallisen jälleenmyyjän tai Invacaren kotisivuilta.

						
	Jalustan pituus	Jalustan leveys	Sisäleveys jalat auki	Nosto-alue**	Tuotteen paino	Max. kuormitus
Birdie^{EVO}	1220 mm	640 mm	1020 mm	415 - 1660 mm	40 kg	180 kg
Birdie^{EVO COMPACT}	1080 mm	520 mm	815 mm	530 - 1590 mm	31 kg	150 kg
Birdie^{EVO PLUS}	1280 mm	640 mm	1020 mm	415 - 1660 mm	41 kg	180 kg
Birdie^{EVO XPLUS}	1280 mm	640 mm	1020 mm	415 - 1660 mm	41 kg	210 kg

					
	Jalkojen korkeus	Maavara	Korkeus kokoonaitettuna	Kääntöympyrän halkaisija	*Nostojen määrä
Birdie^{EVO}	115 mm	35 mm	455 mm	1400 mm	40 kertaa
Birdie^{EVO COMPACT}	115 mm	35 mm	455 mm	1210 mm	40 kertaa
Birdie^{EVO PLUS}	115 mm	35 mm	470 mm	1400 mm	40 kertaa
Birdie^{EVO XPLUS}	115 mm	35 mm	470 mm	1430 mm	40 kertaa

Kaikki mitat 100 mm:n pyörillä ja 2-pisteripustinvarrella. 75mm:n pyörillä korkeusmitat ovat 15 mm matalammat.

* kun akun lataus 50%-100% täydestä kapasiteetista
 ** nostokorkeus = liinan ripustuskorkeus

Runkovärit ▼

	
Vaalea harmaa masto, puomi ripustinvarsi RAL: 7035	Antrasiitti harmaa: alusta ja työntökahva RAL: 7016

Huom: Värit voivat hieman erota yllä esitetyistä.

Säädösten mukaisuus ▼



Jälleenmyynti Suomessa
Camp Mobility
 +358(0)9 350 76 310
 info@campmobility.fi
 www.campmobility.fi

Invacare International GmbH
 Benkenstrasse 260
 4108 Witterswil
 Switzerland

Tel: +41 61 487 70 70
 hqeuropa@invacare.com
 www.invacare.eu.com

