



ISA Seisomanojanostimet

Invacare ISA on monipuolinen akkukäyttöinen, sähköisesti seisomaannostava henkilönostin, joka on suunniteltu sopimaan käyttäjille, jotka pystyvät varaamaan hieman jaloilleen, mutta tarvitsevat apua siirron aikana. Nosto tapahtuu seisomaannostavalla nousu-/nostoliinalla.

ISA tarjoaa turvallisuutta, mukavuutta ja miellyttävän käyttökokemuksen sekä asiakkaille että hoitajille. Myös hoitajille käytettävyyden on olennainen tekijä, minkä vuoksi ISA:ssa on mm. pienennetty, kaareva jalusta ja pienempi kokonaispaino.

Monissa tapauksissa hoitaja voi olla perheenjäsen, ja siksi helppokäyttöisyys on välttämätöntä. ISA voidaan purkaa kasaan ilman työkaluja ja kuljettaa sujuvasti.

Saatavana 4 mallia: **Compact** 140 kg, **Standard** 160 kg, **Plus** 180 kg ja **XPlus** 200 kg.

Stand Assist nostoliinat saatavana lisävarusteena. Saatavana myös **Transfer Stand Assist** nostoliinat jalkaosilla.

Ominaisuudet

ISA on suunniteltu tarjoamaan parhaan mahdollisen nostokokemuksen sekä asiakkaille että hoitohenkilöille.

ISA:ssa on monia vaihtoehtoja ja lisävarusteita hoitohenkilön työergonomian parantamiseksi ja mukauttamiseksi nostettavan kehon muotoihin ja pituuteen.



Paranneltuja ominaisuuksia nostettavalle

- **Ergonomiset kädensijat:** sopivat käsien luonnolliseen muotoon ja ranteen asentoon.
- **Pidennettävä nostovarsi:** eri pituusasetukset eri henkilöiden koon mukaan.
- **Korkeussäädettävä polvituki:** monet korkeusasetukset sopivat eri pituisten käyttäjien erilaisiin säärimittoihin.
- **Jalkalauta:** erilaisia malleja, erilaisille käyttäjille, jalkalaudalle mahtuu jopa 48 koon jalat.

Paranneltuja ominaisuuksia hoitajalle

- **Työntötanko:** muoto ja ulottuvuus, joka perustuu tyyppillisen hoitajan keskimääräiseen kyynärpään korkeuteen ja olkapään leveyteen, joilla varmistetaan ohjattavuuden sujuvuus ja helppous.
- **Jalkapoljin:** Manuaaliseen jalasten levitykseen. Luistamaton, suuri pinta, sopii kaikille kenkätyypeille.

Mallit



ISA COMPACT

Sopii erityisesti ahtaasiin tiloihin

Turvallinen
max. työskentelykuorma

140 kg

Käyttäjän
suositeltu
pituus

140-180 cm

ISA STANDARD

Paljon optioita
joustaviin siirtoihin

160 kg

150-190 cm

ISA PLUS

Edistyneet, luotettavat ja
turvalliset siirrot

180 kg

140-190 cm

ISA XPLUS

Erinomainen hoito plus-
kokoisille asiakkaille

200 kg

140-200 cm

Saatavana mekaanisella tai sähköisellä jalkojen levityksellä, kiinteä tai kääntyvä polvituki, eri jalkalautakorkeuksia ja eri elektroniikkavaihtoehtoja.

Pidennettävä nostopuomi

TelescoLift teleskooppipuomi

voidaan säätää yhdeksään eri pituus-asentoon asiakkaiden koon ja toimintakunnon mukaan, mikä tarjoaa maksimaalisen joustavuuden.

Ergonomiset kädensijat

Ainutlaatuinen muotoilu sopii täydellisesti käden luonnolliseen muotoon turvallisen otteen saamiseksi.

Matalammat polvituet

Korkeussäädettävä jalkatuki pehmuste voidaan säätää 6 eri korkeusasentoon. Lisävarusteena saatava, kääntyvä **ErgoSupport**, takaa parhaan mahdollisen mukavuuden.

Lisäominaisuudet

- **Jalkalauta:** kolme korkeutta, irrotettava kantapää ja pyöreä muoto helpottavat wc-pöntön lähestymistä.
- **Työntötanko ja jalkapoljin:** ergonominen muoto helpottaa nostimen käyttöä.
- **Kiinnityskoukut:** joustavat ja kiinni tyskoukut nopeaan ja suoraviivaiseen kiinnitykseen.
- **Jalkatukiremmi:** pehmustettu lisävaruste mukavuuden lisäämiseksi. Helppo vaihtaa ja pestä.
- **Kaarevat jalat:** ergonominen muoto, helpottaa liikkumista tuolien ja wc-istuinten ympärillä.

Ergonomiset kädensijat



Luonnollinen, miellyttävä ja intuitiivinen käsien asento

- Muotoillut kädensijat, jossa on kaareva kulma, tarjoaa luonnollisemman asennon käsille.
- Mukautettu leveys keskikokoiselle olkapään mallille, pientää kehon rasitusta.
- Pehmeä otemateriaali takaa mukavuuden siirron aikana.

Pidennettävä nostopuomi



Nostimen voi mukauttaa nostettavan pituuteen, kuntoon ja mieltymyksiin

- Yksi joustava nostin, jossa on yhdeksän pituus-asentoa eri kokoisten henkilöiden nostamiseen.
- Helppokäyttöinen vipu, jossa on itselukittuva mekanismi nopeaa ja turvallista nostamista varten.
- Erittäin kompakti nostoasento, joka on helppo säilyttää koko noston ajan.

Matalammat polvituet



Jalkojen asennon ylläpitäminen mahdollisimman mukavasti

- Yksinkertainen yhden käden korkeuden-säätö, kuusi asentoa, työkaluja ei tarvita.
- Tasaiset vaahtomuovipehmusteet, jotka voidaan tarvittaessa vaihtaa helposti.
- Käänneltävä ErgoSupport lisävarusteena, joka noudattaa luonnollista alaraajojen liikerataa, takaa optimaalisen mukavuuden.

Lisävarusteet



Uusi musta pyyhkimällä
desinfiointava pohjeremmi
(PU/nylon)

Lisävarusteet

- Stand Assist nostoliinat
 - 2-pistekiinnitys tai
 - 4-pistekiinnitys
 - + jalkatuet jokaiseen kokoon
- Uusi musta nylon pohjeremmi on helposti pyyhittävä ja hygieenisempi
- Suojakuoret nostimen jaloille
- Käsivipu manuaaliseen nostimen jalkojen levittämiseen
- Elektroniikka: ylimääräinen akku, laturi, ja ohjelmisto



Tekniset tiedot




Max. ▼
kuormitus



Jalustan ▼
pituus



Jalustan ▼
leveys

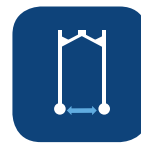

Sisäleveys jalat
suljettuna ▼



Sisäleveys jalat
auki ▼



Kääntösäde/
halkaisija ▼

	Max. ▼ kuormitus	Jalustan ▼ pituus	Jalustan ▼ leveys	Sisäleveys jalat suljettuna ▼	Sisäleveys jalat auki ▼	Kääntösäde/ halkaisija ▼
ISA COMPACT	140 kg	925 mm	535 mm	380 mm	735 mm	1060 mm
ISA STANDARD	160 kg	1080 mm	635 mm	495 mm	960 mm	1260 mm
ISA PLUS	180 kg	1220 mm	640 mm	495 mm	1020 mm	1400 mm
ISA XPLUS	200 kg	1280 mm	640 mm	495 mm	1020 mm	1430 mm



Kokonais-
paino ▼




Max. korkeus
(nostopuomi
lyhennettynä /
pidennettynä) ▼



Nostoalue
(nostopuomi
lyhennettynä
/ pidennettynä) ▼



Maavara ▼

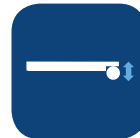

Jalkojen
korkeus* ▼



Nosto- ***
nopeus ▼



Työskentely-
kyky (nostoja
per lataus)** ▼

	Kokonais- paino ▼	Max. korkeus (nostopuomi lyhennettynä / pidennettynä) ▼	Nostoalue (nostopuomi lyhennettynä / pidennettynä) ▼	Maavara ▼	Jalkojen korkeus* ▼	Nosto- *** nopeus ▼	Työskentely- kyky (nostoja per lataus)** ▼
ISA COMPACT	43 kg	1650 / 1800 mm	505 / 675 mm	35 mm	115 mm	46 mm/s	82
ISA STANDARD	48 kg	1650 / 1800 mm	505 / 675 mm	35 mm	115 mm	46 mm/s	82
ISA PLUS	49 kg	1650 / 1800 mm	505 / 675 mm	35 mm	115 mm	46 mm/s	82
ISA XPLUS	52 kg	1650 / 1800 mm	505 / 675 mm	35 mm	115 mm	46 mm/s	82

Mitat otettu 100 mm pyöriillä, keskijalkalevyillä ja 80 kg henkilöllä.
Jos 75 mm pyörät (COMPACT), vähennä korkeusmitoista 15 mm.
Kaikissa mitoissa +3% toleranssi.

* sis. 5 mm suojakuoret
** Akkulataus 100% :sta 50%:iin
*** 80 kg painava henkilö

Värit ja materiaalit



Light Grey:
masto, puomi ja
nostopuomi
RAL: 7035



Anthracite Grey:
jalusta, jalat ja
työntökahva
RAL: 7016



Valmistaja:
Invacare International Sàrl
Route de Cité-Ouest 2 - 1196
Gland Switzerland
Tel: +41 (0)22 354 60 10
Fax: +41 (0)22 354 60 11
hgeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com

Pidätämme itsellämme oikeuden
muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä
ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
© Camp Mobility Finland 2022