

# TriGO<sup>o</sup>



## Vermeiren Trigo Ristikkorunkoinen aktiivipyörätuoli, säädettävä

Vermeiren **Trigo T** on kokoontaitettava aktiivipyörätuoli uusilla huippumoderneilla ja kevyillä kolmioprofiilisilla runkoputkilla ja lähes rajattomilla säätö- ja varustelumahdollisuuksilla. Trigo-tuoleissa on mm. sisäänrakennettu selkäosan, istuin korkeuden ja camber-kulman säätömahdollisuus.

**Trigo T:ssä** on vakiona irrotettavat jalkatuet (70°, 80°, 90°) korkeus- ja kulmasäädettävillä jalkalevyillä. Valittavissa mm.

3 eri selkäosaa, 5 eri työntökahvaa, 10 erilaista käsituki- tai vaatesuojavaihtoehtoa. Istuinleveydet 30–50 cm. Max.130 kg, koosta riippuen.

Saatavana myös kevyempi **Trigo S** kiinteillä jalkatuilla. Tutustu optioihin erillisen lisävarusteet esitteen avulla!

**CAMP**<sup>®</sup>  
**MOBILITY**

## Ominaisuudet ja optiot



### UUSI DESIGN

**Trigo** on huippumoderni pyörätuolin jokaiseen makuun. Trigon voi konfiguroida täysin yksilölliseksi tilauksen yhteydessä; rungosta pyöriin, sis.mm. paljon varustevaihtoehtoja ja yli 30 eri väriä. Trigo-tuoleja on lähes yhtä monta erilaista kuin on käyttäjiäkin!



### UUDET KOLMIOPROFIILISET RUNKOPUTKET

muodostavat perustan kaikille Trigo-malleille. Ne luo pyörätuolille modernin ja yksilöllisen ilmeen ja tekevät tuolista kevyemmän optimaalisen lujuuden säilyttäen.



### Tukipyörät

Saatavana 7 erilaista tukipyörää, koot 3", 4", 5", 6".



### LOPUTTOMASTI SÄÄTÖMAHDOLLISUUKSIA

Sen lisäksi, että kokoonpano valitaan tilauksen yhteydessä (koko, malli, selkäosa, käsituet, runko, optiot...), on Trigo myös edelleen dynaamisesti säätövä tuoli. Useita muutoksia voidaan tehdä tuolin säätöihin jälkikäteen kuten camber-kulmat, istuinkorkeus jne.



### SÄÄDETTÄVÄ CAMBER

Nerokkaan järjestelmän ansiosta kelauspyörän camber-kulmaa voidaan muuttaa suoraan tuolissa! Camber voidaan muuttaa haluttaessa 0°, 2°, 4° tai 6° kulmaan (kokoonpanosta riippuen). Tuoli toimitetaan tilauksen yhteydessä valitsemallanne camber-kulmalla.



### Kelauspyörät ja kelausvanteet

Saatavana 6 erilaista kelauspyörä+kelausvanne -vaihtoehtoa. Koot Standard 18", Design 20"-26, muu 24". Valikoiman löydät lisävarusteet esitteestä!

Lisää vaihtoehtoja ja lisävarusteita  
lisävaruste-esitteessä ja  
tilauskaavakkeessa!



### SAATAVANA MYÖS LASTEN KOOT!

Trigo pyörätuolit on suunniteltu siten, että ne sopivat sekä aikuisille että lapsille. Tästä syystä, **Trigo** on saatavana alkaen 30 cm istuinleveydestä jopa 50 cm saakka. Myös pieniin kokoihin on saatavana, laaja valikoima lisävarusteita ja tarvikkeita.



### RENKAIDEN ASEMOINTI

Trigo mukautuu käyttäjän tarpeisiin ja sen voi säätää "enemmän tai vähemmän aktiiviseksi", kelauspyörien asentoa voidaan säätää suoraan pyörätuolin rungosta. Pyörät voidaan säätää eteen- tai taaksepäin, 8 eri asentoon. Tuoli toimitetaan tilauksen yhteydessä valitsemallanne renkaiden asennoilla.

### SELKÄOSAN KALLISTUS

Saatavana 3 eri vaihtoehtoa: kiinteä selkäosa, kallistettava selkäosa (82° - 102°), ja kallistettava ja alastaitettava selkäosa. 2. ja 3. vaihtoehdon selkäosan kulmaa voidaan säätää helposti tuolin rungosta.



### Käsituki- ja vaatesuojavaihtoehtoja

Saatavana irrotettavat, korkeussäädettävät tai putkikäsituet ja 8 erilaista kiinteää tai irrotettavaa vaatesuojavaihtoehtoa.



### Työntökahvat

Valittavana 5 erilaista työntökahvamallia. Kuvassa kokonaan alas taittuva malli.

## Lisävarusteet ja optiot




Monobloc alumiiniputket




Monobloc, taitettava alumiinilauta



Monobloc, taitettava hiilikuitulauta

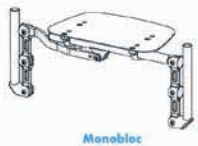


Monobloc korkeampi lauta

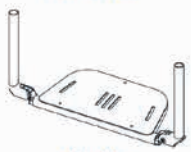


Monobloc, sisäänvedettävä jalkalauta




Erilliset jalkatuet

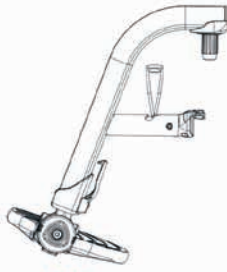


70°

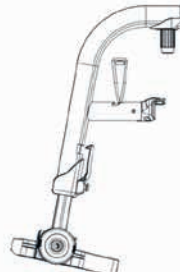

80°

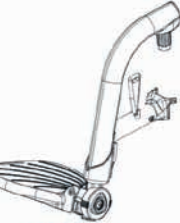

5 cm lyhennetty

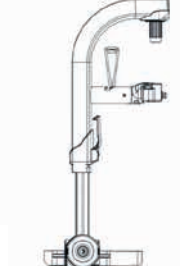

90°



### Jalkalautavaliikoima (Trigo S)


Valittavana 5 erilaista jalkalautaa tuolimallista riippuen. Kaikki saatavana 70°, 80° ja 90°.

### Jalkatukivalikoima (Trigo T)


Valittavana 4 erilaista irrotettavaa jalkatukea: 70°, 80° ja 90° tai 5 cm lyhennetty -malli.

### Jarruvaihtoehdot


Valittavana 3 erilaista jarrumallia: Perinteiset vipujarrut, vetojarrut ja Sport-jarrut.

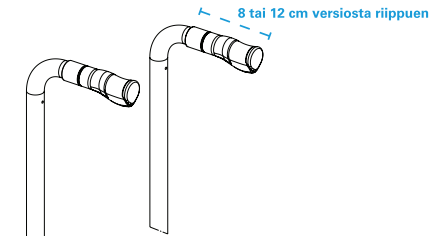


PH 01 Kiinteät työntökahvat, pitkät (12 cm)  
PH 02 Kiinteät työntökahvat, lyhyet (8 cm)

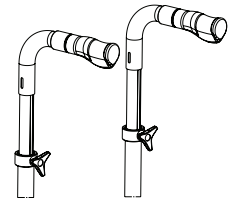


PH 04 Korkeussäädettävät työntökahvat (selkäosan putkien sisään)

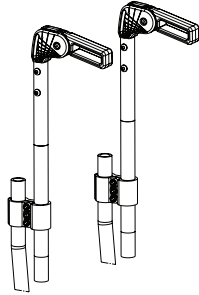

PH 06 Korkeussäädettävät, kokoonlaitettavat työntökahvat (selkäosan putkien taakse)

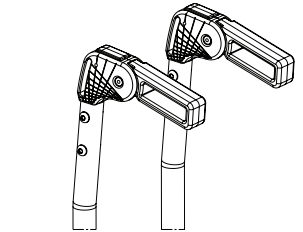

PH 03 Kiinteät kokoonlaitettavat työntökahvat

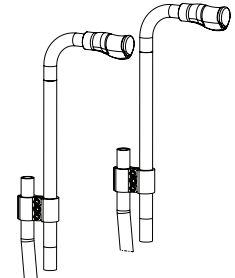

PH 05 Korkeussäädettävät, työntökahvat (selkäosan putkien taakse)



Työntökahvat PH 03 ja PH 06 ovat täysin kokoonlaitettavat



B82-S tai B82-C KIINTEÄ  
Fixed, adjustable clothing protectors, aluminium or carbon



B82 KIINTEÄ  
Fixed, adjustable clothing protectors, aluminium with mudguard



B15 Korkeussäädettävät käsituet



TUBE käsituet taaksekäännettävät (vain kiinteän selkäosan kanssa)



B82S-A Irrottavat ja säädettävät vaatesuojat, alumiinia



B82L-A Pitkät, irrottavat ja säädettävät vaatesuojat lokasuojilla, alumiinia



B82-A Irrottavat ja säädettävät vaatesuojat lokasuojilla, alumiinia



B82S-C Irrottavat ja säädettävät vaatesuojat lokasuojilla, hiilikuitua




B82-C Pitkät, irrottavat ja säädettävät vaatesuojat lokasuojilla, hiilikuitua




B82SL-A Pitkät, irrottavat vaatesuojat, alumiinia

## Lisävarusteet ja optiot


Tukipyörät ja kelausvanteet ks. ed. aukeama.

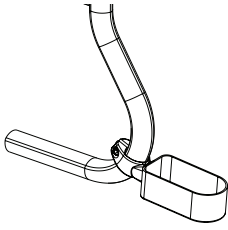


**Keppiteline  
vas/oik**  
B31L / B31R

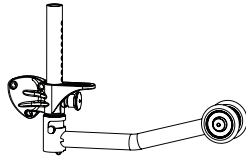


**Kaatumiseste  
vas/oik**  
B78L / B78R

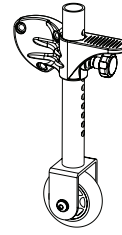


**Siirtopyörät**  
B86

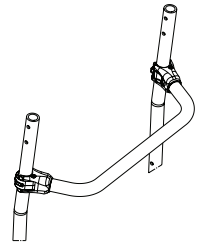


**Selkäosan poikkitanko /  
stabilointiputki**  
B90

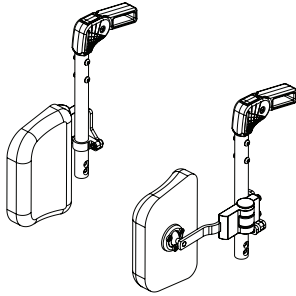

**Sivutuuet vas/oik  
(L koko )**  
L04 L / L04 R

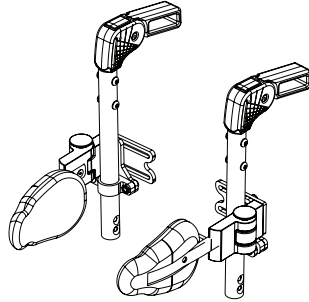

**Sivutuuet vas/oik  
(S koko )**  
L04S L / L04S R

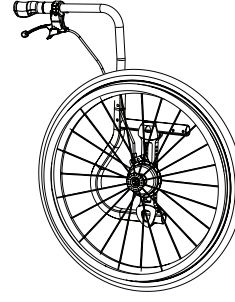

**Avustajan rumpujarrut  
harmaat renkaat**  
24" x 1/3 8"



**Neoflex turvavyöt**  
Tutustu kaikkiin  
vaihtoehtoihin  
[www.vermeiren.com](http://www.vermeiren.com)

**Pinnasuojat**  
Tutustu kaikkiin  
vaihtoehtoihin  
[www.vermeiren.com](http://www.vermeiren.com)

## Tekniset tiedot



Kokonais-  
leveydet



Istuin-  
leveydet



Istuin-  
korkeudet



Istuin-  
syvydet



Selkäosan  
korkeus



Tukipyörät



Kelauspyörät



Paino



Max.  
käyttäjäpaino

46-66 cm  
(camber 0°)

30-50 cm  
(2 cm välein)

38-51 cm\*

32-50 cm  
(2 cm välein)

25-51 cm\*

3", 4", 5", 6"

18", 20", 22", 24", 26"

alk. 10 kg\*

70-130 kg\*

\*kokoonpanosta riippuen.



## Väri vaihtoehdot

Vakiovärit:  
Tilauksesta myös paljon erikoisvärejä.

 C4M - Bright Red Mat C4G - Bright Red Gloss	 C5M - Black Mat C5G - Black Gloss	 C8M - Yellow Mat C8G - Yellow Gloss	 C29M - Bright Grey mat C29G - Bright Grey Gloss
 C53M - Orange Mat C53G - Orange Gloss	 C55M - Inox Mat C55G - Inox Gloss	 C56M - Blue Grey Mat C56G - Blue Grey Gloss	 C59M - Champagne Mat C59G - Champagne Gloss
 C71G - Metallic Deep Blue	 C72G - Metallic Cherry Red	 C73G - Metallic Bright Green	 C76M - Metallic White Mat C76G - Metallic White Gloss
 C78G - Soft Blue Gloss	 C79M - Metallic Bright Blue Mat C79G - Metallic Bright Blue Gloss	 C85M - Grass Green Mat C85G - Grass Green Gloss	 C87M - Melon Orange Mat C87G - Melon Orange Gloss



NV VERMEIREN BELGIUM  
Vermeirenplein 1/15  
2920 Kalmthout Belgium  
Tel: 00 32 (0)3 620 20 20  
Fax: 00 32 (0)3 666 48 94  
[www.vermeiren.com](http://www.vermeiren.com)

Pidätämme itsellämme  
oikeuden muuttaa tarvittaessa  
tässä esitteessä ilmoitettuja  
tuotespesifikaatioita.

© 2022 Camp Mobility Finland