

# AKTIIVI- PYÖRÄTUOLIT

---

Camp Mobility



WOLTURNUS

# W5

- ✓ Yksilöllinen kiinteärunkoinen aktiivipyörätuoli
- ✓ Adaptoidaan yksilölliseksi tarpeidesi mukaan
- ✓ Kiinteä tai säädettävä selkäosa, taka-akseli ja jalkatuki
- ✓ Helppo käsitellä ja liikutella minimaalisella voimalla
- ✓ Törmäystestattu
- ✓ Paino alkaen 6,5 kg
- ✓ Käyttäjäpaino max. 170 kg

## 1 KIIENTEÄ TAI SÄÄDETTÄVÄ SELKÄOSA

Kiinteä taka-akseli vakauttaa pyörätuolia ja tekee siitä tukevamman ja kevyemmän. Kulmasäädettävä, alastaattava selkäosa helpottaa tuolin nostamista ajoneuvoon ja sieltä pois.

## 2 ERGONOMINEN ISTUIN


Tarrasäädettävä istuin ja selkäosan verhoilu takaa ergonomisen, suoran asennon ja liikkumisen vapauden.

## 3 KIIENTEÄ TAI SÄÄDETTÄVÄ TAKA-AKSELI

Kiinteä taka-akseli varmistaa pyörätuolin lujuuden, jäykkyyden ja vähentää painoa. Säädettävä taka-akseli optimoi painopisteen ja mahdollistaa erilaiset istuma-asennot.



▲ W5 kiinteällä selkäosalla ja taka-akselilla

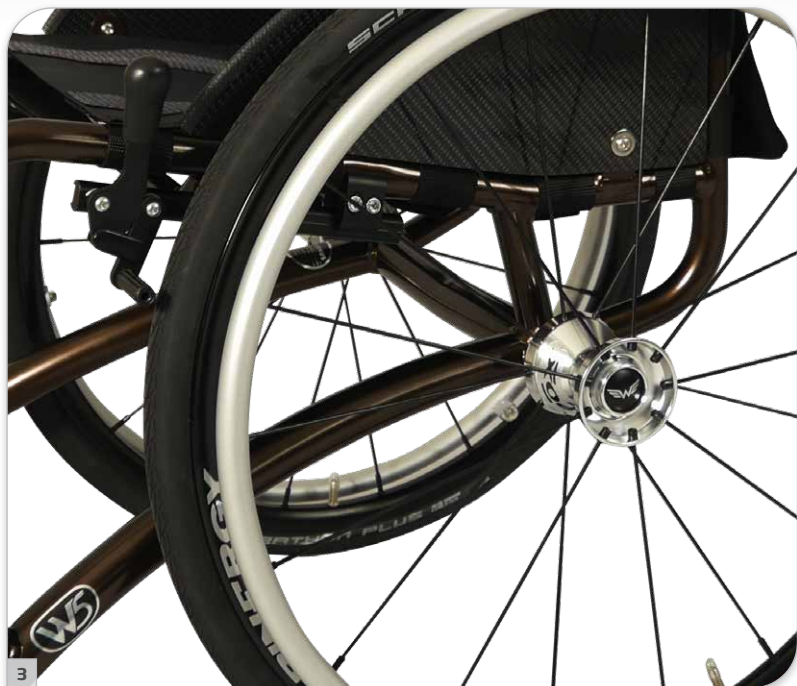

## Vahva ja vakaa aktiiviseen elämään

W5 on suunniteltu aktiiviseen elämään. Tällä kevyellä, tukevalla kiinteällä pyörätuolilla on optimaalinen lujuus-painosuhte ja se käyttää siksi energiaasi optimaalisesti.

W5 on yksilöllisesti kustomoitu malli. Se tehdään mittojesi ja tarpeidesi mukaan. Tämä malli on saatavana sekä täysin hitsattuina että säädettävänä. Täyshitsatussa mallissa ei ole liikkuvia osia ja siinä on täysin hitsattu selkänoja ja taka-akseli. Se on erittäin jäykkä ja vankka, mikä tarkoittaa, että kaikki energiasi valjastetaan kelausvoimaan.

Säädettävässä W5-mallissa voi mukauttaa säätää istuma-asentoa ja pyörätuolin asentoa tarpeidesi ja toiveidesi mukaan. Säädettäviä ominaisuuksia ovat portaattomasti säädettävä painopiste, kulma- ja korkeussäädettävä selkäosa sekä kulma- ja korkeussäädettävät jalkatuet.



▲ W5

W5 alastaittuvalla selkäosalla ja säädettävällä taka-akselilla



# W5-Sarja

## W5 S

- ✓ Täyshitsattu tai eri säätömahdollisuuksilla
- ✓ Kevyt ja elegantti, kaarevat runkoputket
- ✓ Käyttäjäpaino max. 140 kg
- ✓ Törmäystestattu



## W5 K

- ✓ Täyshitsattu tai eri säätömahdollisuuksilla
- ✓ Korkealle asennettu jalkatuki lyhyemmillä säärimitoilla
- ✓ Käyttäjäpaino max. 140 kg
- ✓ Törmäystestattu



## W5 SL

- ✓ Täyshitsattu tai eri säätömahdollisuuksilla
- ✓ Kevyempi runko ja kapeammat putket
- ✓ Käyttäjäpaino max. 80 kg



## W5 D

- ✓ Täyshitsattu tai eri säätömahdollisuuksilla
- ✓ Erilliset, sivulietaitettavat jalkalevyt
- ✓ Käyttäjäpaino max. 140 kg
- ✓ Törmäystestattu



## W5 XXL

- ✓ Vahvistettu runko ja kuljetuspyörät paineilmarenkailla kovaan käyttöön ja painaville käyttäjille
- ✓ Törmäystestattu
- ✓ Käyttäjäpaino max. 250 kg



## W5 Junior

- ✓ Aktiivisille lapsille
- ✓ Täyshitsattu tai eri säätömahdollisuuksilla
- ✓ Käyttäjäpaino max. 75 kg
- ✓ Törmäystestattu



| SPESIFIKAATIOT                                                                                           | W5         | W5 SL      | W5 S       | W5 XXL     | W5 K       | W5 D       | W5 JUNIOR  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  MAX KÄYTTÄJÄPAINO      | 170 KG     | 80 KG      | 140 KG     | 250 KG     | 140 KG     | 140 KG     | 75 KG      |
|  PAINO                  | ALK 6,5 KG | ALK 6 KG   | ALK 7 KG   | ALK 12 KG  | ALK 8 KG   | ALK 9 KG   | ALK 5 KG   |
|  ISTUINLEVEYDET         | 32 - 50 CM | 32 - 45 CM | 32 - 50 CM | 48 - 72 CM | 32 - 50 CM | 32 - 50 CM | 16 - 40 CM |
|  ISTUINSYVYYDET         | 34 - 52 CM | 34 - 52 CM | 34 - 52 CM | 39 - 55 CM | 34 - 52 CM | 34 - 52 CM | 16 - 40 CM |
|  ISTUINKORKEUDET EDESTÄ | 36 - 55 CM | 36 - 55 CM | 36 - 55 CM | 36 - 55 CM | 36 - 55 CM | 36 - 55 CM | 30 - 45 CM |
|  ISTUINKORKEUDET TAKAA  | 36 - 55 CM | 36 - 55 CM | 36 - 55 CM | 36 - 55 CM | 36 - 55 CM | 36 - 55 CM | 28 - 45 CM |
|  SELKÄOSANKORKEUDET     | 25 - 46 CM | 25 - 46 CM | 25 - 46 CM | 30 - 50 CM | 25 - 46 CM | 25 - 46 CM | 20 - 40 CM |
|  SOPII LAPSELLE         | NO         | NO         | NO         | NO         | <b>YES</b> | NO         | <b>YES</b> |
|  ISO TÖRMÄYS-TESTATTU   | YES        | <b>NO</b>  | YES        | YES        | YES        | YES        | YES        |



Mohsin Hassan Dar Assi työskentelee jälkiasennuksien parissa Woltornuksen tuotanto-osastolla.

# W5 Suspension

- ✓ Täyshitsattu taka-akseli
- ✓ Wolturnus Pivot Point Kinematics (WPPK) jousitus
- ✓ Säädettyvä ilmajousitus
- ✓ Kiinteä tai säädettyvä selkäosa
- ✓ Maximi käyttäjäpaino: 150 kg

## 1 SULJETTU RUNKO

Suljettu runko, joka on valmistettu 7020-alumiinista optimaalisen lujuuden takaamiseksi.

## 2 SIVUSUOJAT

Valitse hiilikuitu-, dibond- tai alumiinisivusuojat vaatesuojalla tai ilman.

## 3 TAKAJOUSITUS


Säädettyvä, elegantti takajousitus erityisellä Wolturnus Pivot Kinematics (WPPK) -järjestelmällä. Jousitus toimii kuin nelitankoinen vivusto, jossa on kaksi kineettistä vipua, jotka mahdollistavat pyörätuolin itsenäisen liikkumisen pystysuoraan ja vaakasuoraan.

## 4 ITSENÄINEN ISKUNVAIMENNUS & ILMAJOUSITUS

DebonAir+ on ilmajousitusjärjestelmä, joka maksimoi hienosäätömahdollisuudet. Iskunvaimennin tarjoaa tarkat säätövaihtoehdot sekä paino- että paluujousen säädöllä, minkä ansiosta se selviytyy erilaisista esteistä ja maastoista. Rockshox DebonAir+ on jousi-/iskunvaimennin, jota suositetaan sen säätöominaisuuksien ja helppohoitoisuuden vuoksi.



▲ W5 Suspension on suunniteltu aktiivisille käyttäjille, jotka haluavat lisämukavuutta jousituksen avulla.

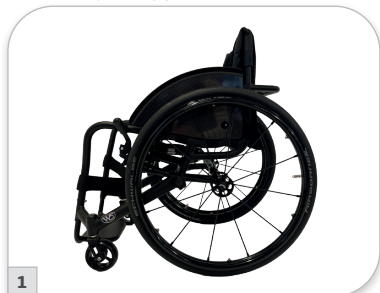

## Kevyt ja kestävä - aktiiviseen elämään

W5 on suunniteltu aktiiviseen elämäntyyliin. Se on kestävä ja kevyt kiinteärunkoinen pyörätuoli, jossa on optimaalinen tasapaino lujisuuden ja painon suhteen, ja se hyödyntää käyttäjän liike-energian mahdollisimman tehokkaasti.

W5 Suspension on W5-sarjan uusi malli, ja kuten kaikki muutkin W5-mallit, se on mittatilaustyönä valmistettu.

W5 Suspensionin erottaa muista sen ilmajousitettu taka-akseli ja Wolturnus Pivot Point Kinematics (WPPK) -järjestelmä, jotka on suunniteltu tarjoamaan tasaisen ja mukavan ajokokemuksen.

Wolturnus Pivot Point Kinematics (WPPK) on ainutlaatuinen niveljärjestelmä, joka tarjoaa käyttäjälle erinomaisen jousituksen ja iskunvaimennuksen. Jousitus toimii kuin nelitankoinen vivusto, jossa on kaksi kineettistä vipua, joiden avulla pyörätuoli joustaa itsenäisesti pysty- ja vaakasuunnassa. Tämä auttaa vähentämään iskuja epätasaisessa maastossa ajettaessa ja minimoimaan käyttäjän väsymyksen. Järjestelmä poistaa myös mahdolliset tärinät ja värähtelyt pyörätuolin liikkuessa.

Tämä pyörätuoli sopii erityisesti aktiivisille käyttäjille, jotka tarvitsevat jatkuvaa istuma-asennon säätöä ja tasaisia ajo-ominaisuuksia. W5-jousitus voi olla erityisen hyödyllinen esimerkiksi pyörätuolin käyttäjille, joilla on selkäkipuja.



| TEKNISET TIEDOT |                     | W5 SUSPENSION |
|-----------------|---------------------|---------------|
|                 | MAX. KÄYTTÄJÄPAINO  | 150 KG        |
|                 | PAINO               | ALK. 6,5 KG   |
|                 | ISTUINLEVEYDET      | 32 - 50 CM    |
|                 | ISTUINSYVYYDET      | 34 - 52 CM    |
|                 | ETUISTUINKORKEUDET  | 36 - 55 CM    |
|                 | TAKAISTUINKORKEUDET | 36 - 55 CM    |
|                 | SELKÄÖSAN KORKEUDET | 25 - 46 CM    |
|                 | LAPSILLE & NUORILLE | KYLLÄ         |

# Tukan

- ✓ Kiinteä aktiivipyörätuoli avoimella rungolla
- ✓ Saatavana kiinteällä tai alastaittuvalla selkäosalla
- ✓ Erittäin hyvä stabiileetti ja kevyt
- ✓ Paino alkaen 9 kg
- ✓ Käyttäjäpaino max. 120 kg



## 1 SIVULAI DAT

Valittavana kiinteät tai irrotettavat sivulaidat

## 2 OPEN FRAME - AVOIN RUNKO

Kevyt Open frame helpottaa esim. autossa kuljettamista

## 3 SELKÄOSAT

Valittavana kiinteä tai alastaittuva, kulma- ja korkessäädettävä selkäosa

## 4 ERGONOMINEN ISTUIN

Säädettävä istuin ja selkänosan verhoilu varmistaa ergonomisen, suoran asennon ja paineentasauksen.

▲ Tukan A  
säädettävällä taka-akselilla



## Elegantti ja kestävä itsenäiseen elämään

Tukan on vahva, kiinteä aktiivipyörätuoli open frame rungolla, joka antaa kevyen ja elegantin ulkonäön.

Tukan pyörätuoli on vahva ja kestävä kiinteärunkoinen aktiivipyörätuoli, jossa on erittäin tukeva runko ja tyylikäs ulkonäkö. Runko on valmistettu alumiini 7020:sta, joka on vahvin hitsattavissa oleva alumiiniseos.

Avoimen rungon ansiosta Tukan on helppo puhdistaa ja pakata pieneen autoon. Tämä tekee Tukanista täydellisen valinnan käyttäjille, jotka elävät aktiivista, liikkuvaa ja itsenäistä elämää.

Tukanissa on täysin hitsattu selkänoja ja taka-akseli. Siksi se sopii mieluiten kokeneille asiakkaille, jotka tietävät kaiken erityisvaatimuksistaan ja tarpeistaan.

Tukan A:han voi valita eri säätömahdollisuuksia. Tämä varmistaa maksimaalisen joustavuuden istuma-asennon yksilölliseen säätöön. Taka-akselia, alastaitettavaa selkänojaa ja jalkatukea voidaan säätää portaattomasti.



▲ Tukan Wing Back ILSA selkäosalla ja kiinteä taka-akseli

### 5 WING BACK ILSA

Ainutlaatuinen monisäädettävä selkäosajärjestelmä, joka mahdollistaa selän portaattoman säätämisen hetkessä.

### 6A KIIENTEÄ TAKA-AKSELI

We offer a fixed rear axle which ensures strength, rigidity and less weight on the wheelchair.

### 6B SÄÄDETTÄVÄ TAKA-AKSELI

Optimise the balance point and try out different seating positions.



6A

6B



| SPESIFIKAATIOT         | TUKAN      |
|------------------------|------------|
| MAX KÄYTTÄJÄPAINO      | 120 KG     |
| PAINO                  | FROM 9 KG  |
| ISTUINLEVEYDET         | 34 - 48 CM |
| ISTUINSYVYYDET         | 36 - 50 CM |
| ISTUINKORKEUDET EDESTÄ | 36 - 50 CM |
| ISTUINKORKEUDET TAKAA  | 36 - 50 CM |
| SELKÄOSAN KORKEUDET    | 25 - 46 CM |
| SOPII LAPSELLE         | NO         |
| ISO TÖRMÄYS-TESTATTU   | NO         |



#### **WOLTURNUS**

Phone +45 96 71 71 70

info@wolturnus.dk

[www.wolturnus.com](http://www.wolturnus.com)

---

#### **Wolturnus A/S**

Skalhuse 31

9240 Nibe

Denmark

#### **MYYNNTI SUOMESSA 2023->**

#### **CAMP MOBILITY**

Tel. +358 (0) 350 76 310

info@campmobility.fi

[www.campmobility.fi](http://www.campmobility.fi)

---

**Etsi Wolturnus-konsultit**

**lähelläsi. Skannaa QR-koodi.**



MYYNNTI SUOMESSA:

#### **CAMP MOBILITY**

P +358 (0) 350 76 310

info@campmobility.fi

[www.campmobility.fi](http://www.campmobility.fi)

