



W5 Junior
Lapsille

W5 perusmalli.
Sopii nuorille ja aikuisille

Wolturnus W5 Junior **- kiinteärunkoinen lasten aktiivipyörätuoli**

Wolturnus W5 Junior on W5-sarjan erityisesti lapsille ja kouluikäisille nuorille suunniteltu kiinteärunkoinen aktiivipyörätuoli. Saatavana hitsattuna tai täysin säädettävänä versiona. Hitsatussa mallissa on täysin hitsattu selkänöja ja taka-akseli eikä liikkuvia osia. Siksi se on erittäin jäykkä ja vankka, mikä tarkoittaa, että kaikki lapsen energia valjastetaan työntövoimaan. Säädettävässä versiossa on säädettävä painopiste, selkäosa ja jalkatuki. Tämä tarkoittaa, että istuma-asentoa ja pyörätuolin kokoonpanoa voi jatkuvasti mukauttaa ja varustella esim. lisävarusteilla lapsen kasvaessa.

Muita mukautuvia ominaisuuksia ovat säädettävä istuinsyvyys ja syvyys-, kulma- ja korkeussäädettävä jalkalauta sekä ergonominen istuin- ja selkäpehmuste. Tämä varmistaa ergonomisen pystyasennon, optimaalisen paineentasauksen ja liikkumisvapauden. Tukipyörien sijainti jalkalaudan edessä varmistaa korkean vakauden ja alhaisen kelausvastuksen. Törmäystestattu. Max. 75 kg.

Ominaisuuksia ja optioita



Erlaisia istuinjärjestelmiä ja selkösia



Eri sivu- / vaatesuojaja käsitukioptiota



3 eri jalkatukea



Kiinteä tai säädettävä taka-akseli



3 päätukivaihtoehtoa



Useita eri jarruvaihtoehtoja



Rumpujarrut ja kaatumisesteet



4 erilaista työntökahvavaihtoehtoa



Erlaista tukipyöriä 3"-6"



4 eri kelauspyörävaihtoehtoa



Erlaisia kelausvanteita




... ja kelausrenkaita



4 eri haarukan tehosteväriä



14 eri runkoväriä

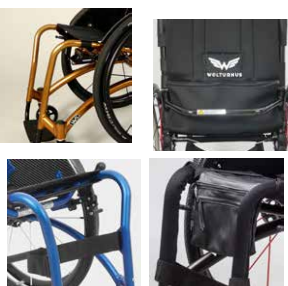

Paljon muita pehmuste- ja lisävarustevaihtoehtoja!



Tekniset tiedot



Soveltuu istuimeksi ajoneuvoon ISO 7176-19 mukaisesti

SPESIFIKAATIOT	W5 JUNIOR	W5 SL	W5 S	W5
MAX KÄYTTÄJÄPAINO	75 KG	80 KG	140 KG	170 KG
PAINO	ALK 5 KG	ALK 6 KG	ALK 7 KG	ALK 6,5 KG
ISTUINLEVEYDET	16 - 40 CM	32 - 45 CM	32 - 50 CM	32 - 50 CM
ISTUINSYVYYDET	16 - 40 CM	34 - 52 CM	34 - 52 CM	34 - 52 CM
ISTUINKORKEUDET EDESTÄ	30 - 45 CM	36 - 55 CM	36 - 55 CM	36 - 55 CM
ISTUINKORKEUDET TAKAA	28 - 45 CM	36 - 55 CM	36 - 55 CM	36 - 55 CM
SELKÄOSANKORKEUDET	20 - 40 CM	25 - 46 CM	25 - 46 CM	25 - 46 CM
ISO TÖRMÄYSTESTATTU	YES	NO	YES	YES



Wolturnus A/S
Skalhuse 31
9240 Nibe, Denmark
Phone +45 96 71 71 70
info@wolturnus.dk
www.wolturnus.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
© 2023 Camp Mobility Finland

Esitteissä perusmitat. Tilauskaavakkeissa ja custom-malleissa lisää kokoja ja varusteluvaihtoehtoja.