

GTM LISÄVARUSTEET

TUKIPYÖRÄT



roller 3"



roller 4"



muovi
4"x25mm



alumiini
4"x25mm



muovi
4"x26mm



muovi
4"x32mm



alumiini
4"x35mm



alumiini
koteloitu
4"x35mm



muovi
5"x29mm



alumiini
5"x35 mm



alumiini
koteloitu
5"x35mm

KELAUSPYÖRÄT



17" sädepinnat



20", 22" sädepinnat



24" sädepinnat



24" ristipinnat



24"-28" sport,
ristipinnat



24" Spinerger LX12



24" Spinerger L18



24"-28" Spinerger SLX24



24" Spinerger Blade



24" off-road

RENKAAT



Innova grey



kiinteä harmaa



kiinteä musta



Kendra Kontender



Schwalbe Maraton
Plus black



Schwalbe Maraton
Plus Reflex



Schwalbe Downtown



Schwalbe Right Run
sininen



Schwalbe Right Run
harmaa



Schwalbe Right Run
punainen



Tufo MS3 sin/pun

GTM LISÄVARUSTEET

KELAUSVANTEET



alumiini



kiillotettu teräs



titaani



kumipäällyste



tetra grip



red rugby



silikonipäällyste

TYÖNTÖKAHVAT



SMYK TYÖNTÖKAHVA
korkeussäädettävä,
suunniteltu aikuisten
työnnettäväksi,
helppoa ohjausta
pyörätuolin kelausten ja
ohjauksen opetteluun



**INTEGROIDUT
ALUMIINIKAHVAT**
hitsattu sivuputkiin,
pituus voidaan määrittää
yksilöllisesti käyttäjän
tarpeiden mukaisesti.



**KORKEUSSÄÄDETTÄVÄT
KIINNITYS SELKÄOSAN
TANKOON**
kolme eri pituutta,
pehmeä korkeudensäätö,
helppo irrottaa



**KORKEUSSÄÄDETTÄVÄT
KIINNITYS SIVUPUTKIIN**
kaksi pituutta,
pehmeä korkeudensäätö,
optiona alastaitettavuus
kuljetuksen ajaksi



KIINTEÄT
ruuvattu selkäosan
sivuputkiin,
helppo irrottaa



**ALASTAITETTAVAT
MUOVIKAHVAT**
helppokäyttöiset,
erittäin kevyet,
voidaan taistaa alas
kuljetuksen ajaksi

SELKÄTASKU



tarrakiinnitys



vetoketjukiinnitys

NOKKAPYÖRÄ



Enää tarvitse istua sivussa, aina pyytää apua ja jäädä pois kaikesta hausasta. Nokkapyörän avulla on helppo liikkua esimerkiksi ruoholla, lumessa, retkeilyreiteillä ja laskeutua turvallisesti alas kuoppaisia polkuja, jalkakäytäviä ja katukivetyksiä.


Kun nokkapyörä on liitetty pyörätuoliin, käännä pyörää 180 astetta ja pyörätuolin tukipyörät nousevat ylös ja pyörätuoli liikkuu takapyörien ja nokkapyörän päällä ja tuolin tukipyörät eivät kosketa maata.

Nokkapyörän kokonaispaino on vain 2,34 kg. Kun et käytä sitä, kiinnitä se vain pyörätuolin selkänojaan samalla kiinnittimellä, millä se on liitetty jalkatukeen.

Nokkapyörä on erinomainen matkoille kompaktin koonsa ansiosta.

GTM LISÄVARUSTEET


VAATESUOJAT

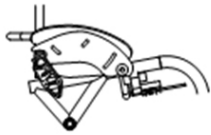


irrotettavat




selkäosan mukana taitettava

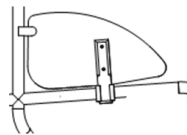


ylöskääntyvät

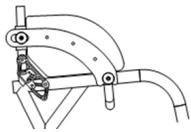


selkäosan päälle taitettava

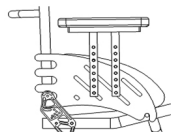


irrotettavat, käsituilla

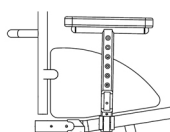


ylöskääntyvät, käsituilla

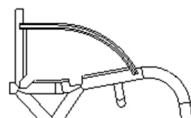

hitsatut alumiinisuojat

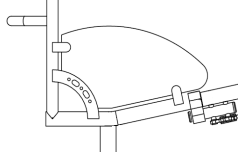

kiinteät, kiinnitetty runkoon

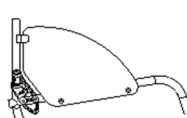


istuimen päälle taitettavat

ANODISOINTI

RUNKOVÄRIT



maalaamaton*

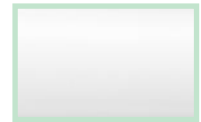

valkoinen



hopea



keltainen



vanha hopea



oranssi



grafiitti



punainen



kiiltävä musta




cherry



matta musta



tummanvihreä

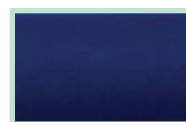

navy sininen



kirkas vihreä




kirkas sininen




kiillotettu*

JARRUT

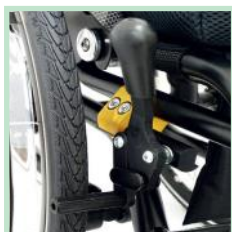

lasten sivujarrut

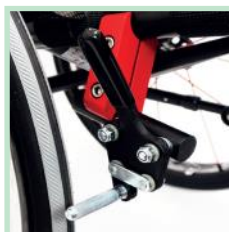

sivujarrut



saksijarrut



compact saksijarrut



GTM