

BATEC MINI 2

The minimum expression of Batec, the maximum expression of you



BATEC MINI2 sähköinen ajolaite max. 20 km/h

Batec MINI 2 manuaalipyörätuoliin asennettava ajolaite säästää aikaa ja voimia päivittäisissä asioinneissa ja lisää liikkuvuutta niin kaupungissa, maaseudulla, pitkillä matkoilla kuin vain lyhyilläkin retkillä.

Entistä pienemmässä MINI 2:ssa on pienempi 12" rengas, se taivuttaa kasaan, mahtuu paremmin auton tavaratilaan, on kevyempi, kulkee pidemmälle ja liikkuu paremmin ylä- ja alamaässä. Pieni koko ja peruutusvaihteet tekevät siitä lyömättömän liikkumisen apuvälineen ahtaissa tiloissa.

Vakiona mm. All-in-one LCD-näyttö, 3 eri ajonopeutta ja kantokahva.

Ajomatka 28 km 280 Wh akulla tai jopa 52 km 522 Wh akulla.

Ajonopeus voidaan ohjelmoida yksilöllisesti, huippunopeus 20 km/h.

Saatavana versiot myös tetra- ja hemiplegiapotilaille. Lisätiedot ja lisävarusteet www.batec-mobility.com.

CAMP
MOBILITY

Ominaisuuksia



ENTISTÄ MINIMPI BATEC MINI2

BATEC MINI 2:n pieni koko, pienempi 12" rengas, kokoontaittuva ohjaustanko, Special kantokahva ja kevyempi paino tekevät siitä lyömättömän liikkumisen apuvälineen ahtaissakin tiloissa. Se mahtuu paremmin auton tavaratilaan, on kevyempi, kulkee pidemmälle ja liikkuu paremmin ylä- ja alamäessä.

VAKIOVARUSTEET

BATEC MINI 2:ssä on vakiona mm. All-in-one LCD-näyttö, kolme eri ajonopeutta, 350 RPM ja 350W moottori ja peruutusvaihte, 100-lumenin etuvalo, LED-takavalot, äänitorvi ja USB-portti. Valittavana 280 Wh (7.8 Ah) akku, jolla ajomatka 28 km tai 522 Wh (14.5 Ah) akku, jolla ajomatka jopa 52 km.



KOLME ERI AJONOPEUTTA 6 km/h 15 km/h JA 20 km/h

Ajonopeus voidaan ohjelmoida yksilöllisesti, 6 km/h, 15 km/h tai huippunopeus 20 km/h.

BATEC MINI2 SPECIAL KANTOKAHVA

Batec MINI2:ssa erityisesti MINI2:seen suunniteltu special kantokahva, jonka avulla se on helppo nostaa vaikka auton tavaratilaan.

PIKAKIIINNITYS ja -IRROTUS ja SEISONTATUKI

Helppo irrottaa ja kiinnittää takaisin pyörätuoliin Batec EASY-FIX-kiinnitysapapterin avulla. Helppokäyttöinen seisonatuki pitää Batecin pystyssä, kun sitä ei tarvita. QR-pikalukitus renkaassa helpottaa renkaan ja sisäkumin vaihtoa.





HEMIPLEGIA VERSIO

Versiossa hemiplegikoille on peukalo-ohjausjarrut ja mahdollista valita kaikki hallintalaitteet yhdelle kädelle, joko vasemmalle tai oikealle.



QUADROPLEGIA VERSIO

Saatavana myös versio nelirajahalvauspotilaille eli monitoimiohjaustanko ilman jarrukahvoja tai kaasukahvaa, joka mahdollistaa pehmeät liikkeet sekä jarruttaessa että kiihdyttäessä.



ERIKOISIA LISÄVARUSTEITA

Kaikissa MINI2 -laitteissa mukana ACOPLA selkärepun / matkalaukun pidike. Lisää lisävarusteita www.batec-mobility.com ja tilauskaavakkeessa.

**Lisää lisävarusteita
www.batec-mobility.com
ja tilauskaavakkeessa!**

TAITETTAVA OHJAUSTANKO

Ohjaustanko kokoonlaitettuna MINI2 mahtuu hyvin vaikka työpöydän alle tai mukaan ravintolaan.



MINI vs. MINI 2

**250 RPM
1050 W / 900 W
moottori**

500-lumenin etuvalo

**Akku
280 Wh (7.8 Ah) tai
522 Wh (14.5 Ah)**




14,7 kg < vs > 12,9 kg
22 km/40 km < vs > 28 km/52 km
83-97 cm < vs > 73,6-87 cm
16" < vs > 12"

**350 RPM
600 W / 350 W
moottori**

100-lumenin etuvalo

**Akku
280 Wh (7.8 Ah) tai
522 Wh (14.5 Ah)**




736 mm - 870 mm




Tekniset tiedot



AVATTUNA

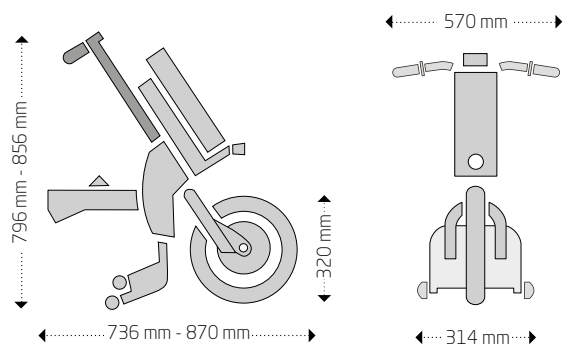

KOKOONTAITETTUNA

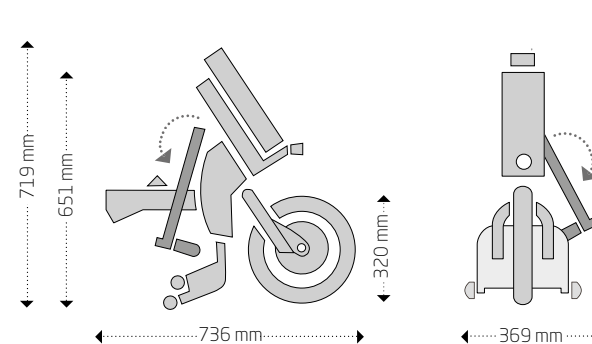

12,9 kg
ilman akkuja



Max. 20 km/h



Max. 28 km / 52 km



Väri:
grafiitinharmaa



Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
© 2020 Camp Mobility Finland

Valmistaja:
BATEC MOBILITY S.L.
Illa de Buda, 2
08192 Sant Quirze del Vallès
(Barcelona) - SPAIN
+34 93 544 2003
info@batec-mobility.com
www.batec-mobility.com

CAMP
MOBILITY

www.campmobility.fi

Asiakaspalvelu
+358(0)9 350 76 310
info@campmobility.fi
Varaosapalvelu
+358(0)9 350 76 312
varaosat@campmobility.fi