

ECO ASSIST

EMPOWER YOUR MOBILITY



REHASENSE

UUSI
TUOTE!



ECO ASSIST

KEVYT JA EDULLINEN AJOKEULA



Eco Assist on Rehasensen uusi kevyt ajokeula, jossa on vahva rakenne, joka on valmistettu erittäin lujasta alumiinista ja teräksestä, nopea 350 W moottori ja tehokas Li-Ion-akku.

Lisää ajomukavuutta ja turvallisuutta yksilöllisesti säädettävien ohjauslaitteiden, luotettavien jarrujen ja tyylikkään muotoilun avulla.

Koe taloudellinen ja nautinnollinen tapa ajaa Eco Assistilla!

OMINAISUUDET

- Manuaalinen kiinnitys
- Pyörätuoliin kiinnitys leveysalue – 210-480 mm
- Pyörätuoliin kiinnitys korkeusalue – 260-420 mm
- Sopii kiinteisiin ja kokoontaitettaviin pyörätuoleihin joissa kiinteä eturunko
- Ø160 mm levyjarrut
- Kävelytoiminto
- Luistonesto
- Peruutusvaihe
- Lisävarusteena isompi akku: 48 V, 11.6 Ah, 556.8 Wh
- Vakionopeussäädin (optiona)

VÄRI

Musta

Etuhaarukka: tummanharmaa



TEKNISET TIEDOT

Kokonaispaino	Kuljetuspaino	Max. käyttäjäpaino	Rengaskoko	Moottoriteho	Max. moottorivääntö	Nopeusmodit	Max Nopeus	Esteenylityskyky	Vakioakku	Ajomatka
15.5 kg	10 kg	110 kg	12"	350 W	39 Nm	3	20 km/h	10%	Li-on, 48 V/ 5,8 Ah/ 278 Wh	30 km

* Ajonopeus tulee aina mukauttaa maakohtaisten lakien mukaiseksi.

VOIMAKAS & KEVYT

Eco Assistissa on erinomaiset vakio-ominaisuudet ja tehokas akku. Koska Eco Assist on kevyt ja kompakti, se on erittäin helppo kuljettaa ja säilyttää.

URBAANI DESIGN

Ketterän ja tyylikkään suunnittelun ansiosta Eco Assist navigoi vaivattomasti kaupunkiympäristössä, mikä tekee jokaisesta matkasta kaupungilla rentouttavan kokemuksen.

FIKSUJA OMINAISUUKSIA

Roiskeenkestävä värillinen LCD-näyttö, vakionopeussäädin, luistonesto, LED-ajovalvo ja äänitorvipainikkeet parantavat ajokokemustasi ja tarjoavat sujuvan ja turvallisen ajokokemuksen.


ERITYISOMINAISUUDET



Kaksoisjarrujärjestelmä: mekaaninen levyjarru ja elektroninen jarru.



Tukijalat ovat korkeussäädettäviä ja takaavat parhaan sopivuuden pyörätuoliin min. 260 mm ja max. 420 mm.

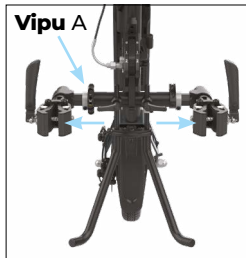

Leveyden säätö: käytä vipua A kiristysleukojen helppoon ja nopeaan leveyden säätämiseen. Kiinnitysalue: leveys 210 mm - 480 mm.



Pikakiinnitys helpottaa kuljetusta ja säilytystä. Lukitusyksikön kytkeminen tai irrottaminen vaatii vain yhden yksinkertaisen vaiheen. Turvalukko varmistaa turvallisen kiinnityksen.



Myynti Suomessa:

Camp Scandinavia Oy / Camp Mobility
Patamäenkatu 5, 33900 Tampere
p. 09-350 76 310
info@campmobility.fi
www.campmobility.fi

VI-2023



Rehasensen laatujärjestelmä täyttää sekä ISO 9001- että ISO 13485 -standardit, TUV NORD mukaisesti. Rehasensen lääkinälliset laitteet ovat CE-merkittyjä ja täyttävät EU-asetuksen 2017/745 (MDR) vaatimukset. Rehasensen lääkinälliset laitteet ovat UKCA-merkittyjä ja täyttävät MHRA-määräysten vaatimukset.

