

Action^{®3} Junior



label 2018
observateur
du design


JUNIOR

Sinä itse ja sinun tavallasi!


Yes, you can.®

Kevyt ja **kokoontaittuva**


Action³ Junior, kokoontaitettava lasten perus-/ puoliaktiivipyörätuoli, on suunniteltu lasten ehdoilla vapaus, hauskuus ja tyyli etusijalla. Modernit designratkaisut tekevät siitä pyörätuolin, josta voi olla ylpeä. Integroidun leveyden ja syvyyden kasvukyvyn ansiosta lapsi ja tuoli voivat kasvaa yhdessä, joka tekee siitä todellisen kumppanin.

- ▶ Innovatiivinen teleskooppi-ristikkorunko kasvaa lapsen mukana
- ▶ Suunniteltu yksilöllisesti kustomoitavaksi
- ▶ Säädetty istuinleveys, -syvyys, -korkeus ja painopiste



AVAIN

ERITYIS- OMINAISUUDET

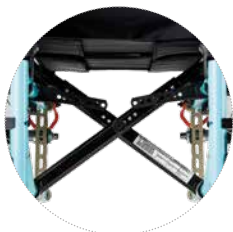

Innovatiivinen teleskooppi- ristikkorunko

1

Action³ Junior voidaan säätää lapsen kasvun mukana tuolia vaihtamatta, mikä takaa täydellisen ja mukavan istuvuuden lapsen kasvaessa. Teleskooppisäädettävä poikittaisjousi mahdollistaa istuimen leveyden ja syvyyden säätämisen ja istuimen ja selkänojan verhoilu mahdollistaa nopean ja helpon leveyden säädön, jolloin lisäosia ei tarvita!



Säädettävä istuinkorkeus ja painopiste

2

Tämä **Action³ Junior**:n ominaisuus on suunniteltu parantamaan lapsen ajoa ja suorituskkyä, koska se mahdollistaa kelauspyörien asentamisen useisiin eri painopisteisiin (CoG -asentoihin) ja mahdollisuuden valita kolme eri istuinkorkeutta: 410, 435 ja 560 mm. Tällä varmistetaan, että pyörätuoli on säädetty optimaalisesti parhaan ajon saavuttamiseksi.



3

Suunniteltu kustomoitavaksi

Action³ Junior lasten pyörätuolit on suunniteltu personoitavaksi paitsi lapsen tarpeiden, myös yksilöllisen tyylin ja mieltymysten mukaan. Valitse runkoväri kuudesta kirkkaasta tai pehmeästä runkoväristä ja pinnasuojat kolmesta modernista design vaihtoehdosta. Laajasta lisävarustevalikoimasta voi valita vielä mieleiset tukipyörät, käsituet, jalkatuet ja muut extra lisävarusteet.

Ominaisuudet ja optiot ▼



◀ Valikoima design vaatesuojia

Valittavana 3 erilaista design vaatesuojaa ja 6 eri runkoväriä!



◀ Tukipyörävalikoima

Valittavana 3 erilaista tukipyörävaihtoehtoa:
① 5" x 1" vilkkuva, puhkeamaton ② 5" x 1 3/4" puhkeamaton ③ 5" x 1" puhkeamaton.



◀ Käsitukivalikoima

Valittavana pöytäkäsituet ① tai junior käsituet ② joko vaatesuojalla ③ tai kurasuoja ④ vaihtoehtolla.



▲ Jalkatuet

① 90° jalkatuki ② 80° jalkatuki ③ vaakatasoon säätävä jalkatuki 0°-80°



▲ Kevyt istuinverhoilu

Leveyssäädettävä istuinverhoilu on helppo säätää ja taittaa kasaan kuljetuksen ajaksi.

Optiot ▼



▲ Pöytälevy / tarjotin

Standardi liukupöytälevyn lisäksi saatavana swingaway-sivullekääntyvä pöytälevy, joka on helppo irrottaa ja voidaan kääntää sivulle kuljetuksen ajaksi, tai kun sitä ei tarvita.



▲ Istuintyyny

30-50 mm
perusistuintyyny
antaa
lisämukavuutta.



▲ Ergonomiset työntökahvat

Säädettävät, helppokäyttöiset työntökahvat lisäävät työntömukavuutta. Tuoliin voidaan lisätä myös leveyssäädettävä selkätukiputki (tai käyttää itsenäisesti), joka jäykistää selkätukea ja jota voidaan käyttää myös päätuen kiinnitykseen, joka antaa enemmän istuinmukavuutta.



▲ Abduktiojalkatuet

30° abduktio-asento on mahdollista säätää 80° jalkatukiin lapsille, joilla on lonkan asento-ongelmia.



▲ Transit versio

Transit versiossa on istuinkorkeus 460 mm ja 12" kuljetuspyörät



▲ Nilkkaremmi

Saatavana 3 kokoa, nilkkaremmien avulla jalat voidaan asemoida oikeaan asentoon, sopii erityisen hyvin spastisille lapsille.



▲ Etuhaarukan stabilointi

Tarjoaa vakautta aktiivisille lapsille, jotka todennäköisesti kiipeilevät pyörätuolille ja niille, joilla on taipumus olla innostunut tuolilla kelattaessa.

Tekniset tiedot

Löydät kattavampia tietoja tuotteesta, mukaan lukien tuotteen käyttöohje, paikallisen Invacare-jälleenmyyjäsi verkkosivustolta:
www.campmobility.fi

	Istuinleveys	Istuinsyvyys	Istuinkulma	Istuinkorkeus	Selkäosan kulma	Selkäosan korkeus	Eturungon kulma
Evolutive	205 / 230 / 255 / 280 / 305 / 330 / 355 / 380 mm	200 - 250 / 250 - 300 / 300 - 350 / 275 - 325 / 325 - 375 mm	1.5° / 5° / 8.5°	410 / 435 / 460 mm	0° / 7° / 0° - 30°	350 - 430 mm	80° / 90° / 0° - 80°
Standard	305 / 330 / 355 / 380 mm	250 - 300 / 300 - 350 mm	1.5° / 5° / 8.5°	410 / 435 / 460 mm	0° / 7° / 0° - 30°	350 - 430 mm	80° / 90° / 0° - 80°

	Jalkatuen pituus	Käsituen pituus	Ajoyksikön leveys	Kokonaisleveys kokoontaitettuna	Kokonaispituus sis. jalkatuet	Kokonaispituus ilman jalkatukia	Kokonaiskorkeus
Evolutive	125 - 450 mm	150 - 250 / 180 - 280 mm	ist.lev. + 190 / + 170 ¹ mm	315 / 270* mm	740 - 965 mm	510 - 740 mm	870 - 1130 mm
Standard	125 - 450 mm	150 - 250 / 180 - 280 mm	ist.lev. + 190 / + 170 ¹ mm	315 / 270* mm	900 - 1000 mm	670 - 770 mm	870 - 1130 mm

	Max.kallistus	Kääntösäde	Max.käyttäjäpaino	Kokonaispaino	Painavin osa
Evolutive	12°	750 mm	80 kg	15 / 14.5 ¹ kg	8.5 / 12 ¹ kg
Standard	12°	750 mm	80 kg	15 / 14.5 ¹ kg	8.5 / 12 ¹ kg



1. Transit version

Runkovärit



Please note: colours may vary slightly from those displayed above.

Verhoilu

Black Nylon



Scan here to access
the website.

Tel: +41 61 487 70 70
hqeuropa@invacare.com
www.invacare.eu.com

Invacare International GmbH
 Benkenstrasse 260
 4108 Witterswil
 Switzerland



© 2018 Invacare International GmbH. All rights reserved. All information quoted is believed to be correct at time of print.
 Invacare reserves the right to alter product specifications without prior consultation. Action3 Junior - EU - 10/2018