



Loop^{SORG} RS



Sorg Loop RS - Lepoasentoon säädettävä kallistettava lasten pyörätuoli

Loop^{SORG} RS on kaasujousella kallistettava lasten pyörätuoli, joka kasvaa lapsen mukana. Kaikki säädöt kuten istuinleveys ja -korkeus, selkäosan korkeus, istuimen sijainti ja painopiste, jalkatukien/-laudan etäisyys jne. voidaan säätää täsmälleen lapsen mittojen mukaan. Istuinleveydet ja -syvyydet 30-48 cm (+2 cm ja + 4 cm). Kallistusalue -5°-35°. Max. 120 kg.

CAMP[®]
MOBILITY

Optimaalista vartalonhallintaa

Loop^{SORG} RS on kaasujousella kallistettava lasten pyörätuoli, joka kasvaa lapsen mukana. Kaikki säädöt kuten istuinleveys ja -korkeus, selkäosan korkeus, istuimen sijainti ja painopiste, jalkatukien/-laudan etäisyys jne. voidaan säätää täsmälleen lapsen mittojen mukaan.

Istuinleveydet ja istuinsyvyydet 30-48 cm (+/- 2 cm ja +/- 4 cm ja max. +6 cm). Kallistusalue -5°-35°. Max. 120 kg.

Valittavana 22" tai 24" pikalukittavat, ilmatäytteiset, pistosuoijatut kelauspyörät, säätömahdollisuus sekä ylös / alas että eteen / taakse. Camber-kulma 0 - 3°. Vakiona alumiinikelausvanteet ja läpinäkyvät pinnasuojat. (4") 5" - 7" x 35-40 mm, PU-tukipyörät korkeussäädettävillä metallihaarukoilla.

Vakiona kova kaareva kourumallinen selkäosa. Selkäosan verhoilut ovat irrotettavissa ja pestävät. Selkäosan kallistus ja istuinkulman kallistus kaasujousella. Valittavissa korkeus- ja kulmasäädettävä työntötanko tai korkeussäädettävät työntökahvat.

Kova istuinalusta, jossa muotoiltu geelivahto-istuintyyny. Istuintyyny on irrotettavissa ja verhoilu pestävissä.

Korkeus-, kulma-, syvyys ja sivusuunnassa -säädettävä päätuki pestävällä päällisellä. Käsituet korkeus- ja kulmasäädöillä.

Runkoon asennettavissa 4-pistelantiovyö. Kiinnityspaikat rintatukivoille. Törmäystestatut kuljetuskiinnikkeet autokuljetusta varten.

Valittavissa erilliset jalkalevyt tai yhtenäinen, korkeus- ja kulmasäädettävä jalkalauta, joissa nilkkaremmien kiinnitys ja kulmansäätö lukittavissa.

Loop^{SORG} RS

ERGO - System

3-os. ERGO-selkälevy kasvaa leveyssuunnassa

Muotoiltu ERGO-selkätyyny

ERGO-sivupaneeli

Anatomisesti muotoiltu istuintyyny

ERGO-sivupaneelin pehmuste

ERGO-polviohjaus pehmuste

Loop^{SORG} RS

Istuinleveydet	30-48 cm (2 cm välein)
Istuinsyvytydet	30-48 cm (+/- 2 cm välein +/- 3 cm liukusäätö)
Istuinkorkeudet	41- 55,5 cm*
Selkäkorkeudet	30-60 cm (+/- 5 cm)*
Kallistus	-3°- 35° (Standard 38°)
Kelauspyörät	22"-24"
Tukipyörät	4", 5", 5,5", 6", 7"
Max.	120 kg

*(riippuu konfiguraatiosta)

Varusteluvaihtoehtoja

- ERGO-istuin ja -selkäosa ja -polviohjaus
- Jäykempi kaasujousi spastisille tai suurille kuormituksille
- Useita kelaus- ja tukipyörävaihtoehtoja
- Korkeus- ja kulmasäädettävät työntökahvat tai työntötanko
- Tuplakelausvanne yhden käden ohjaukseen
- Eri tukipyöriä alumiinihaarukalla
- Valtava valikoima pinnansuojia
- Nokkapyörä ulkokäyttöön
- Sisäänvedettävä pidennettävä selkänöja
- Paljon asemointiapuvälineitä, kuten sivuuntaitettavat vartalotuet ja pehmusteet, pää-/niskatuet, käsitukenpehmusteet jne.
- Hemi-adapteri matalille istuinkorkeuksille
- Erilaisia jalkatukivaihtoehtoja
- ja paljon muuta. ...


STANDARD - System

Muotoiltu kova selkälevy ja päällinen

STANDARD-selkätyyny

STANDARD istuintyyny tai anatomisesti muotoiltu istuintyyny

STANDARD-sivupaneelit ohjaimella tai ilman

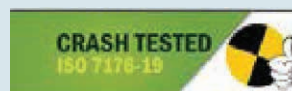


Soveltuu käytettäväksi istuimena ajoneuvossa ISO 7176-19 mukaisesti.



Loop^{SORG} RS,
erilliset jalkatuet

Kaikki lisävarusteet tilauskaavakkeissa huom! asentovoille on oma kaavake

Runkoväri valikoima

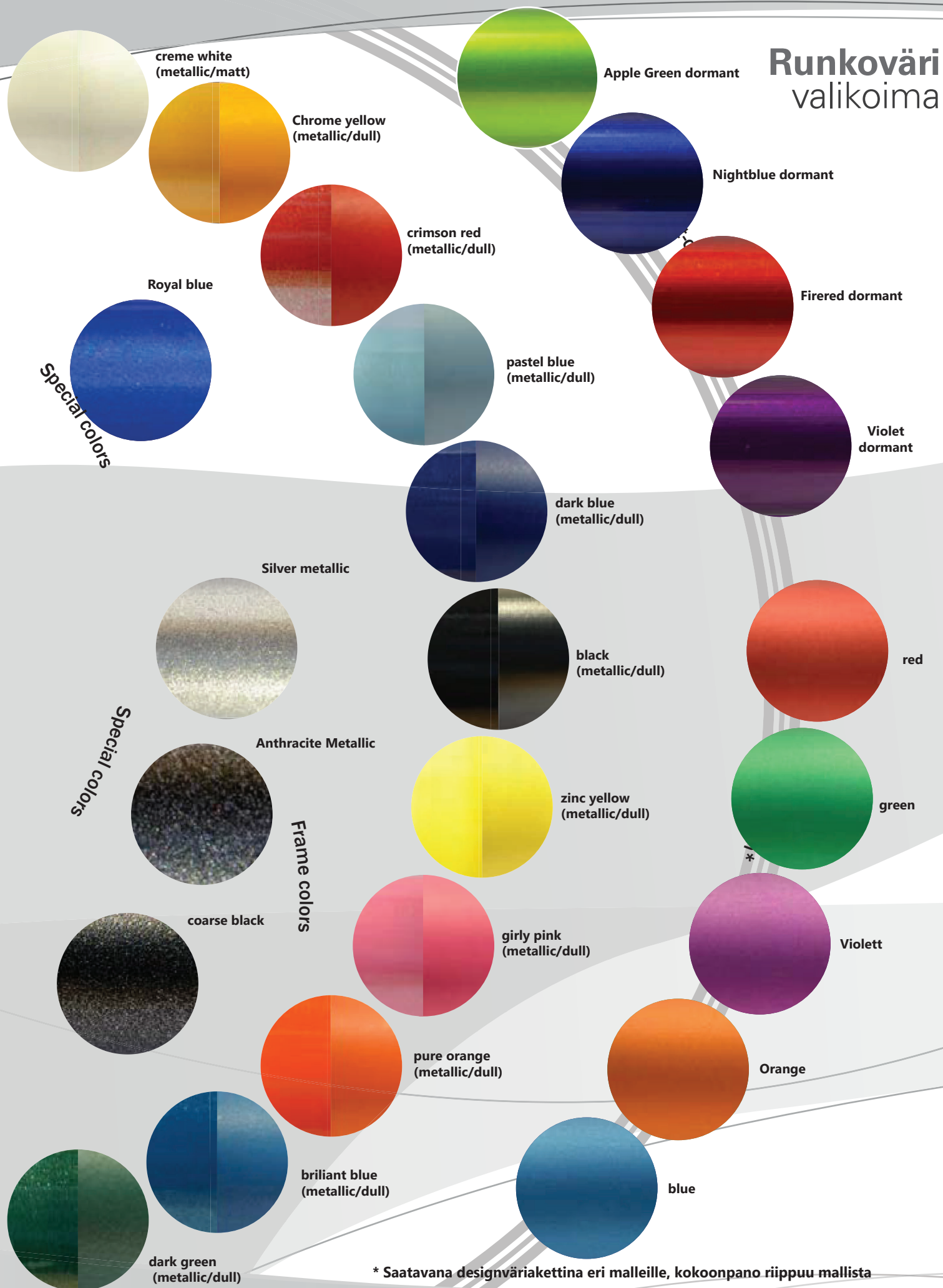


Verhoiluväri valikoima

lime




apple green

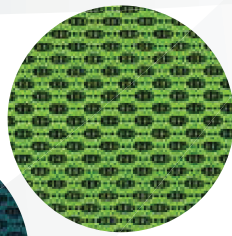


petrol




ultramarine blue

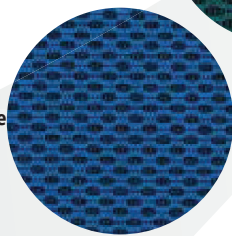


Blau

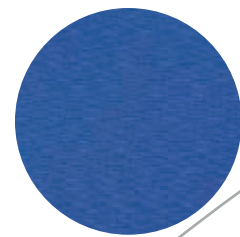


night blue

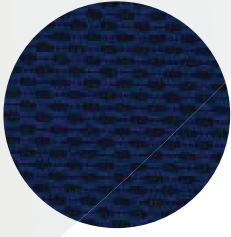


Schwarz

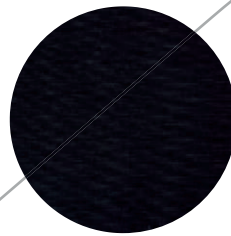


black

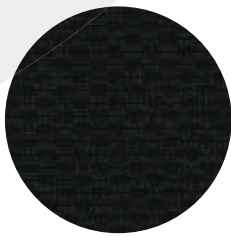

Grau

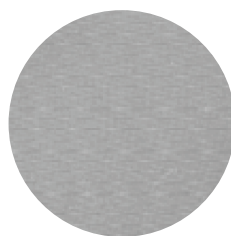


grey

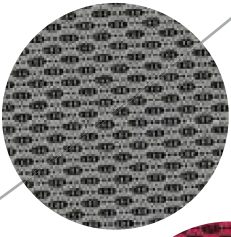


pink




Rot

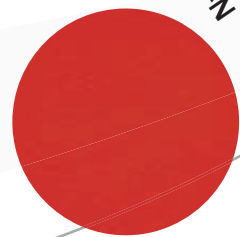


red

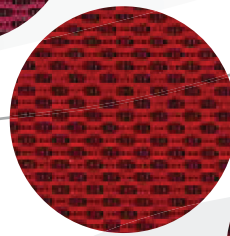


burgundy

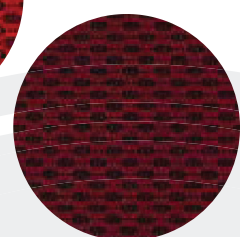

firered

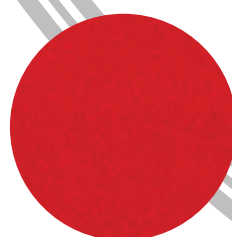


violet

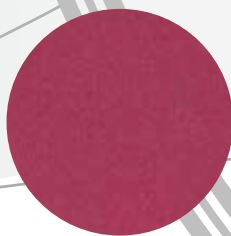


black




turquoise

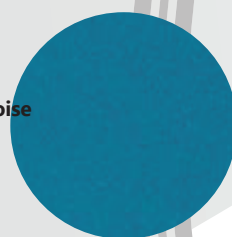

powder blue

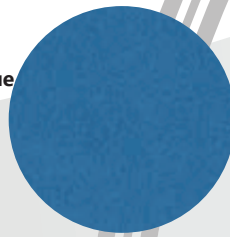


green

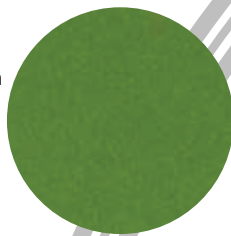


Synthetic leather for pads for standing drivers

Trevira cover fabrics for all seat and back cushions

Nylon fabric for seat and back cover

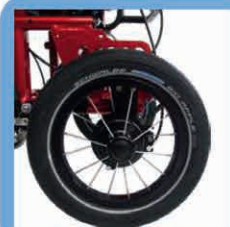

Optiona 12"
kuljetuspyörät

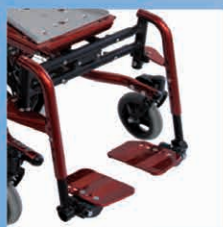

Irrotettavat erilliset
jalkatuet



Istuimen
adapterikiilat



Rumpujarru, 12"
kuljetuspyörä ja
kaatumaeste



Pyörällinen kork.sääd.
kaatumaeste käännettä-
vissä ilman työkaluja.



ERGO-selkäosa (LI)



Korkeus- ja kulma-
sääd.työntötanko ja
Avustajan
rumpujarrut



Runkoon kiinnitetty
bush-to-brake käyttäjän jarrut




Tekniset tiedot

Läpinäkyvät pinnasuojat vakiona
+ satoja pinnasuojavaihtoehtoja:
www.wheelchairgadgets.com



Soveltuu istuimeksi ajo-
neuvoon ISO 7176-19

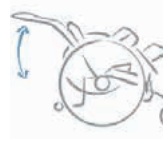

LOOP RS

30-48 cm
(+2 cm)

30-48 cm
(+/- 2 cm +/- 3 cm)

30-60 cm
(+5 cm)

20" - 24"

4", 5", 5.5", 6" 7"
(lev. 35-40 mm)

-3° - +35°

120 kg

Esitteissä perusmitat. Tilauskaavakkeissa ja custom-malleilla lisää kokoja ja varusteluvaihtoehtoja.


Värit ja materiaalit

Runkovärit: Kaikki perusvärit saatavana kiiltävä-metallilhohto- tai matta -versiona.



Erikoisvärit:

Metal-effect:

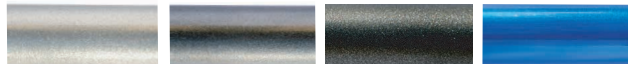

Dormant colours: Double-coated:




Eloksoidut: (vain tietyt mallit ja konfiguraatiot)



Verhoilu:

TREVIRA

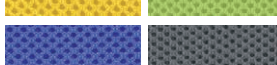

Nylon/ keino nahka:



SORG Rollstuhltechnik GmbH + Co
Benzstraße 3-5; 68794
Oberhausen-Rheinhausen
Tel: +49 (0) 7254 9279-0
Fax: +49 (0) 7254 9279-10
e-mail: info@sorgrollstuhltechnik.de
www.sorgrollstuhltechnik.de

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa
tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja
tuotespesifikaatioita.
© 2022 Camp Mobility Finland