



Sorg Mio



Mio Carbon

Sorg Mio kiinteärunkoinen lasten aktiivipyörätuoli

SORG Mio, Mio Carbon ja Mio Move ovat pienikokoisia, keveitä ja helposti liikuteltavia aktiivipyörätuoleja, jotka kasvavat kolmiolotteisesti (ist.leiv./-syv./-korkeus) lapsen mukana.

Mio on täydellinen lapsen 1. tuoli jo 12 kk iästä alkaen. Mioissa on innovatiivinen, kompakti uusi design sekä paras stabiliteetti.

Optiona saatava Mio Carbon on erittäin kevyt ja ketterä: istuinlevy, kaareva selkäosa, sivusuojat ja jalkalaudat ovat ultra kevyttä hiilikuitua.

Toisessa optiossa Mio Move:ssa on -5° - 35° kallistettava selkäosa, jonka ansiosta vaihtelu aktiivisen ja lepo-asennon välillä on helppoa. Vakioistuinleveydet 18-34 cm (move 20-34), ja -syvyydet 18-36 cm (carbon 18-30). Muita kokoja erikoistilauksesta.

2-eturunko- ja abduktiovaihtoehtoa: "Taurus ja Retro".

SORG-värikartastosta voit valita lähes rajattomasti eri runko- ja verhoiluväri-

vaihtoehtoja ja pinnasuojia. Saatavana myös kattava valikoima muita SORG-lisävarusteita. SORG-pyörätuolit tilataan ja varustellaan yksilöllisesti aina myyjän kanssa tilauskaavaketta täyttäen.

CAMP
MOBILITY

Varhainen interventio

Pois vaunusta itsenäiseen liikkumiseen! "Halu liikkua" syntyy jo kehdoissamme. Erityisesti ensimmäisinä kehitysvuosina lapset asettavat uskomattoman nopean tahdin. Tässä ei ole eroa vammaisten lasten eikä "normaalisti" kehittyneiden lasten välillä.

Mitä aikaisemmin tuet ja rohkaiset motorikkavammaisia lapsia liikkumaan, sitä paremmin heidän motoriset, kognitiiviset ja psykologiset kykynsä voivat kehittyä samalla tavalla kuin muidenkin lasten.

Lapset kokevat ympäristönsä aisti-vaikutelmien tulvana, he ovat tekemisissä toisten ihmisten kanssa, rakentavat ihmissuhteita, kohtaavat rajoja ja murtautuvat sieltä eteenpäin.

He oppivat päivittäin olemaan mukana maailmassa ja omaksumaan ja käsittelemään vaikutelmia omasta maailmastaan. Tällä tavalla heistä tulee leikkisästi osa elämäämme ja yhteiskuntaamme.

Mion mukana kasvavat toiminnot ja hyväksi havaittu modulaarinen järjestelmä mahdollistaa lasten pyörätuolin mukauttamisen hoidon kulkuun ja käyttäjän mittoihin, mikä tekee Mio:sta pitkäaikaisen kumppanin.

Mio taurus-rungolla ja pienellä abduktiolla



Mio taurus-rungolla ja pienellä abduktiolla



Mio Design 2018

Equipment examples



soveltuu istuimeksi kuljetukseen moottoriajoneuvossa
ISO 7176-19 mukaisesti

Istuinleveydet	18- 34 cm (+/-2 cm välein)
Istuinsyvyydet	15*/18-36 cm (2 cm välein)
Istuinkorkeudet	34-44,5 cm (riippuu renkaiden koosta)
Selkäkorkeudet	17-40 cm (5 cm välein)
Kelauspyörät	20", 22" 24"
Tukipyörät	3"* 4", 5" solid & pneumatic*
Camber	7°, 9°, 11°
Max.	50 kg

* erikoistilauksesta

Perusvarustus

- Kiinteä runko, valittavana retro tai taurus eturunko
- Pienellä tai suuremmalla abduktiolla
- Tarrakiristettävä selkäosa (kova optiona)
- Suora sivusuoja + kiinnitysosat
- Yhtenäinen jalkalauta, kork.sääd.
- 1 kaatumiseste
- Pinnasuojat, kirkas
- 20" kelauspyörät
- Kiinteät tukipyörät
- Työntökahvat
- 4-pistelantiovyö

Säädettävä
päätuki
on myös
kevyt



Mio Retro
rungolla ja
abduktiolla

Tuplakelaus-
vanteet



Kuomu



Nökkapyörä



Mio

vahva
abduktio



pieni
abduktio



Mio taurus-rungolla ja
pienellä abduktiolla

Lisävarusteita ja optioita

- Kova istuin- ja muotoiltu kova selkälevy, kulma säädettävissä
- Anatomisesti muotoillut istuin- ja selkätyyny laaja valikoima eri värejä
- Jalkalaudan korkeus, syvyys ja kulma portaattomasti säädettävissä, voidaan tarvittaessa taittaa ylös
- Akselivälin laajennus
- Korkeus- ja kulmasäädettävät työntökahvat tai työntötanko tai -koukku
- Erilaisia asemointiapuvälineitä (pää-/niskatuet, tukivyöt, pehmusteet ja abduktiokiila)
- Laaja valikoima pinnansuojuksia
- Terapiapöytä / pöytälevy ja vesipullo
- Nokkapyörä
- Kiinnityssilmukat
- Anodisoitu väripaketti
- Jatkettava selkätuki
- Kaatumisesteet
- ja paljon muuta...

**Kaikki lisävarusteet tilauskaavakkeissa
huom! asentovoille on oma kaavake**

Optimaalinen ja erittäin tarkka skaalaus

Istuma-asentoa voidaan säätää fyysisten mahdollisuuksien tai terapeuttisten vaatimusten mukaan - myös jälkikäteen. Tämä mahdollistaa pysyvän sopeutumiskyvyn lapsen kliinisen kuvan muutoksiin.

Kuten kaikki pyörätuolimme, myös Mio perustuu modulaariseen järjestelmään. Monet komponentit voidaan myös jälkiasentaa tai muuttaa. Mio (design 2018) -mallissa on monia asemointimahdollisuuksia eri lisävarusteilla kuten sivuun taitettavat vartalotukipehmusteet, pää-/niskatuet, abduktiokiilat, anatomisesti muotoillut istuintyyny...

Mion (design 2018) rungolle on ominaista erityisen vahva vääntöjäykkyys. Tämän seurauksena se selviytyy aktiivisen lapsen erittäinkin raskaasta kuormituksesta ja saavuttaa korkean käyttöiän ja laadun.

Myös istuinkuoren rakentaminen tai kaksoiskelausvanteen kiinnitys on mahdollista ja moni asia on saavutettavissa erikoisrakenteella. - kysy vain meiltä ja etsimme ratkaisun!

* Kaikki mitat, parametrit ja retro-version komponentit ovat identtisiä taurus-version kanssa.




LED-valo-
tukipyörät
- ei lisämaksua!

Sivu-/vaatesuoja kurakaarella
ja sisäänrakennetulla
vaijerijarrulla




Mio


Runkoväri valikoima

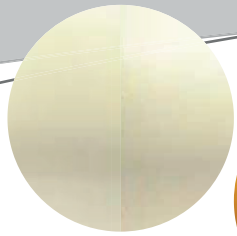


creme white
(metallic/matt)

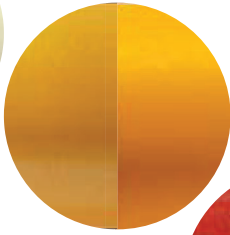


Chrome yellow
(metallic/dull)

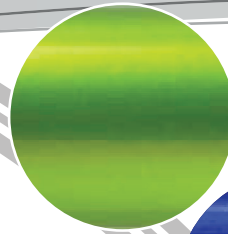

Apple Green dormant

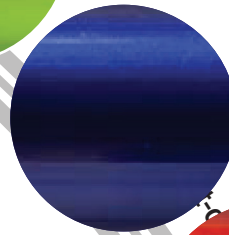


Nightblue dormant

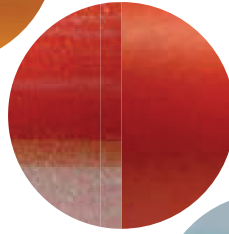

crimson red
(metallic/dull)



Fired red dormant

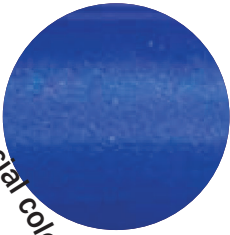

Royal blue




pastel blue
(metallic/dull)




Violet
dormant


Special colors

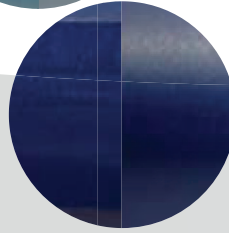


dark blue
(metallic/dull)

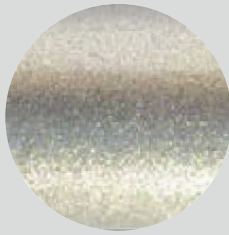

Silver metallic

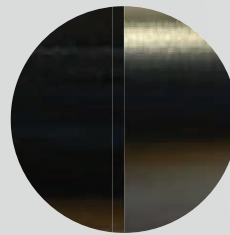

black
(metallic/dull)

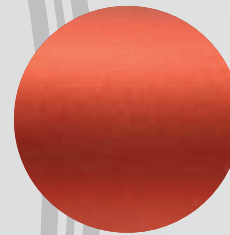


red


Special colors



Anthracite Metallic

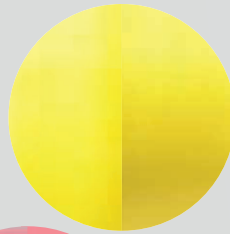


zinc yellow
(metallic/dull)

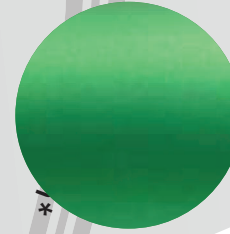

green

Frame colors

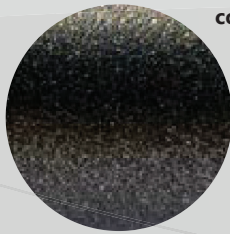


coarse black



girly pink
(metallic/dull)




Violet

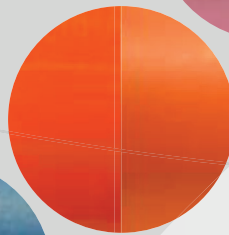


pure orange
(metallic/dull)



Orange

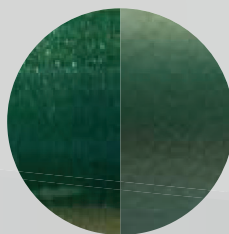

dark green
(metallic/dull)

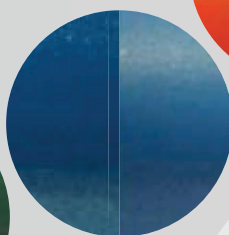

brilliant blue
(metallic/dull)



blue


* Saatavana designväriakettina eri malleille, kokoonpano riippuu mallista

Verhoiluväri valikoima

lime




apple green

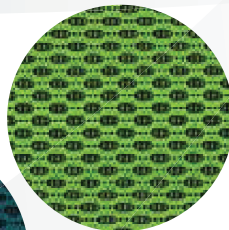


green




petrol

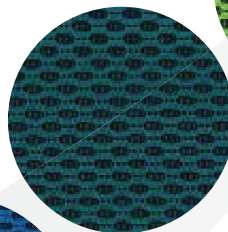

ultramarine blue

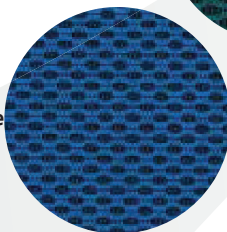


Blau

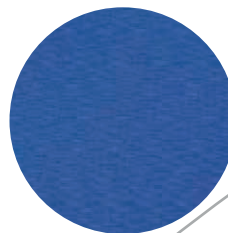

powder blue




night blue

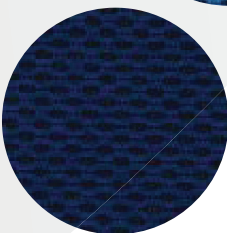


Tevira cover fabrics for all seat and back cushions


Schwarz

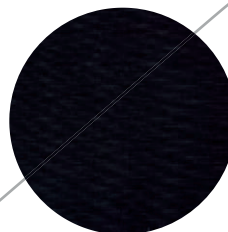

turquoise

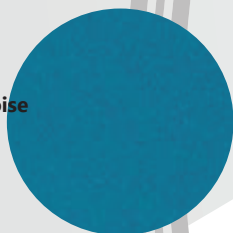


black

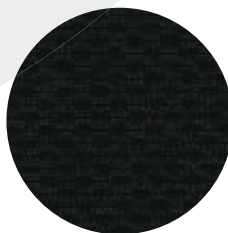


Nylon fabric for seat and back cover

grey

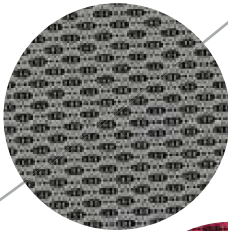

Grau

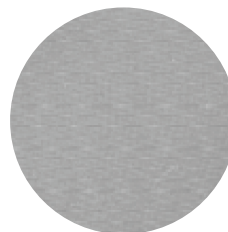


black




pink




Rot

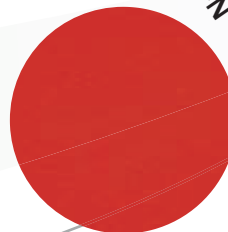


violet

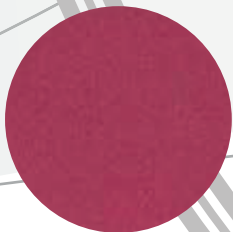


red

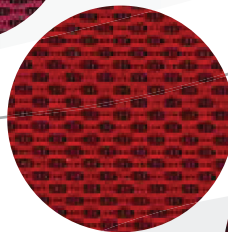

burgundy

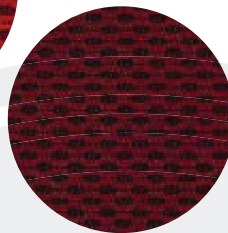

firered

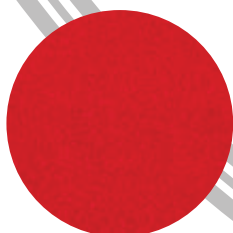

Ominaisuuksia ja optioita



Erlaisia sivu-/vaatesuojia, kurakaaria, käsitukia ja vartalotukia optiona



Mio Move (optiona) selkäosan kallistus -5° - 35°



Nokkapyörä

Kuomun sivuosiin intergroidut avustajan jarrut

Tupla-kelausvanteet

Selkäosaalevy ilman selkäosan putkia

2-eturunkovaihtoehtoa taurus ja retro



Taittavat jalkatuet/ jalkalauta

Erlaisia työntokahvoja optiona

Korkeus ja pituussäädettävät, kääntyvät kaatumisesteet

Terapiapöytä

Happipullo-teline

Läpinäkyvät pinnasuojat vakiona + satoja muita iloisia vaihtoehtoja:
www.wheelchairgadgets.com



Esitteissä perusmitat.

Tilauskaavakkeissa ja custom-malleilla lisää kokoja ja varusteluvaihtoehtoja.



Soveltuu istuimeksi ajoneuvoon ISO 7176-19 mukaisesti

Tekniset tiedot




MIO	15*/18-34 cm (+2 cm)	18-36 cm (+4 cm)	17,5-40 cm (+5 cm)	18" - 24"	3"*, 4", 5"	50 kg
MIO CARBON	18-34 cm (+2 cm)	18-30 cm (+4 cm)	17,5-35 cm (+5 cm)	20" - 24"	4", 5"	50 kg
MIO MOVE	20-34 cm(+2 cm)	18-36 cm (+4 cm)	25-45 cm (+5 cm)	20" - 24"	4", 5"	50 kg

* erikoistilauksesta


Värit ja materiaalit

Runkovärit: Kaikki perusvärit saatavana kiiltävä-metallinhohto- tai matta -versiona.

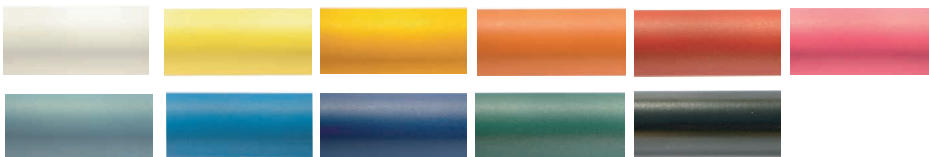

Erikoisvärit:

Metal-effect:

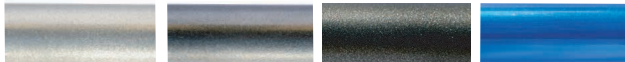

Dormant colours: Double-coated:




Eloksoidut värit: (vain tietyt mallit ja konfiguraatiot)



Verhoilumateriaali:

TREVIRA

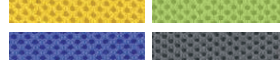

Nylon / keino nahka:



SORG Rollstuhltechnik GmbH + Co
Benzstraße 3-5; 68794
Oberhausen-Rheinhausen
Tel: +49 (0) 7254 9279-0
Fax: +49 (0) 7254 9279-10
e-mail: info@sorgrollstuhltechnik.de
www.sorgrollstuhltechnik.de

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
© 2022 Camp Mobility Finland



www.campmobility.fi

Asiakaspalvelu
+358(0)9 350 76 310
info@campmobility.fi
Varaosapalvelu
+358(0)9 350 76 312
varaosat@campmobility.fi