

*Vector rumpujarruilla ja
työntökaarella*



VECTOR

Sorg Vector - kiinteärunkoinen lasten, nuorten ja aikuisten aktiivipyörätuoli

SORG Vector ja **Vector BSA** (=erilliset jalkatuet) rakennetaan aina yksilöllisesti tarvittavien mittojen ja tarpeiden mukaan. **Vector** ja **Vector BSA** ovat helposti käsiteltäviä ja kevyesti liikkuvia, kiinteärunkoisia aktiivipyörätuoleja, jotka mukautuvat täydellisesti kunkin yksittäisen käyttäjän terapeuttisiin vaatimuksiin, lapsuudesta aikuisuuteen. Istuinlevyettä, -syvyyttä ja -korkeutta voi säätää. Fix-istuinlevyllä varustettua versiota voi kallistaa 13° ja selkäosan kulmaa välillä 80°-116°.

Vector-mallissa on kiinteä, yhtenäinen jalkalauta ja **BSA**-mallissa irrotettavat erilliset jalkatuet. Eturungoksi voi valita, suoran tai alaosaan levenevän abduktio-version. SORG-värikartastosta voit valita lähes rajattomasti eri runko- ja verhoiluväri vaihtoehtoja. Saatavana myös kattava valikoima SORG-lisävarusteita, kuten niskatuki (irrotettava, kiinnikkeet), Grip-kelausvanne ja eri lantio- ja muita turvavyö vaihtoehtoja sekä korkeus- ja kulmasäädettävä työntötanko.

Kelauspyörät: valittavissa 20", 22" tai 24" pikalukittavat, ilmatäytteiset, pistosuojatut renkaat, säätömahdollisuus ylös / alas / eteen / taakse. Camber-kulma 0 - 11°. Vakiona alumiinikelausvanne, oteleveys säädettävissä ja läpinäkyvät pinnasuojat. Tukipyörät 4 - 7" umpikumia tai PU 35 tai 40 mm. Tukipyörissä metallihaarukat ja 3 korkeudensäätökohtaa. Istuinlevydet **22- 46 cm**, istuinsyvydet **24- 46 cm**. Istuinkorkeudet: **37,5 - 55,5 cm***.

Vahtomuovi-istuintynny 3 cm + pestävä inkontinenssipäällinen vakiona. Tarrakiristettävä, eteentaittuva selkäosa korkeussäätö **20 - 50 cm (+5 cm)** myös selkäosan verhoilut ovat irrotettavissa ja pestävät. Vaatesuojat/kurakaaret vakiona.

Valittavana korkeussäädettävät erilliset työntökahvat, kulmasäätö sivusuunnassa tai levennetyt työntökahvat. Yhtenäinen, kulmasäädettävä jalkalauta portaattomalla korkeussäädöllä vakiona.

Alle taittuva, korkeussäädettävä kaatumaste käännettävissä ilman työkaluja. Tarrakiinnitteinen pohjeremmi. Runkoputkeen kiinnittyvät käyttäjäjarrut ym.

* riippuu renkaiden koosta

Kiinteärunkoinen pyörätuoli kaikille ikäryhmille

Poikkeuksellisen monipuolinen erittäin kestävä

Vector on poikkeuksellisen vakaa pyörätuoli, jolla on erinomaiset ajo-ominaisuudet. Sen silmiinpistävän ominaisuus on varioitavuus, jolla voidaan kattaa poikkeuksellisen laaja valikoima hoito- ja terapiatarpeita. Se voi olla yhtä yksilöllinen kuin sen käyttäjät ja yhtä dynaaminen kuin heidän kehityksensä.

Kasvuun liittyvät joustavat muutokset kliinisessä kuvassa, hienovaraiset muutokset tai jopa täydellinen muutos terapeuttisessa lähestymistavassa eivät ole Vectorille ongelma.

Sen lähes vertaansa vailla oleva monipuolisuus johtuu modulaarisesta periaatteesta: se on perusta valtavalle määrälle muita komponentteja, joita voidaan muuttaa ja asentaa jälkikäteen milloin tahansa. Lapsista täysikasvuisiin aikuisiin, joiden käyttäjäpaino voi olla jopa 120 kg.



Vector

Soveltuu käytettäväksi istuimena ajoneuvossa
ISO 7176-19 mukaisesti.



Istuinleveydet	22- 46 cm (2 cm välein)
Istuinsyvyyydet	26-46 cm (2 cm välein)
Istuinkorkeudet	37,5 - 55,5 cm (riippuu renkaiden koosta)
Selkäkorkeudet	25-50 cm (5 cm välein)
Kelauspyörät	22", 24" 26"
Tukipyörät	4", 5" 5,5" 6" 7"
Camber	0°, 2°, 5°, 8°, 11°
Max.	120 kg

Kiinteä runko, valittavana suora
tai abduktio eturunko

Perusvarustus

- Runko suora tai abduktio
- Monet Vector-versiot ilman ostettuja lisäosia, kasvavat kaikkiin suuntiin
- Aktiivisuusastetta voidaan säätää itsenäisesti akselivälistä istuimen tukikannattimesta
- Sopii myös omaan yksilölliseen istuinrunkoon
- Jalkatuen kiinnitys: ulkoinen tai sisäinen

Säädettävät selkä-
ja istuinosa



Equipment examples

Säädettävä camber



Vector,
ja nokkapyörä



Istuinlevyllä ja
anatomisesti
muotoillulla
istuintyynyllä



Jarruvipu optiona
asennettavissa sivulevyyn

Vector



Kiinteärunkoiset pyörätuolit kaikille ikäryhmille



Vector rumpujarruilla ja yhtenäisellä
työntötangolla

Monipuolinen ja uskollinen kumppani lapsuudesta aikuisuuteen

Vector on kiinteärunkoinen aktiivipyörätuoli joka voidaan adaptoida optimaaliseksi kasvun mukaan ja joka vastaa käyttäjiensä tarpeita lapsuudesta aikuisuuteen.

Molemmat Vector-mallit kasvavat lapsen mukana kolmessa suunnassa: istuimen leveys, istuimen syvyys ja selkänöjan korkeus voidaan säätää ilman lisäosia.

Vector on monipuolinen ja poikkeuksellisen vakaa kiinteärunkoinen pyörätuoli, joka kestää suuria kuormia, koska arki sisältää monia odottamattomia haasteita.

Vector-konseptin monimuotoisuus on lyömätön. Laajan adaptoitavuuden ansiosta se voidaan mukauttaa optimaalisesti. Olipa kyseessä aktiivinen käyttäjä tai kokonaan yksilöllinen istuinjärjestelmä, Vector voidaan mukauttaa lähes kaikkiin vaatimuksiin sen laajojen varusteluvaihtoehtojen ansiosta.

Vector BSA täydentää perhettä: Se on kiinteärunkoinen pyörätuoli, jossa on kääntyvä jalkatuki - ja jopa abduktiorungossa. Kuten Vector, myös Vector BSA voidaan säätää erittäin tarkasti käyttäjän fysiologisten mahdollisuuksien mukaan. Tämä on täysin riippumaton alustasta. Siinä on myös sama laaja valikoima varusteoimaisuuksia.

**Molemmat
versiot saatavana
myös XL-rungolla
erittäin pitkille
käyttäjille.**



Vector BSA, erillisillä jalkalevyillä



Vector anodisoidulla erikoisväreillä
"musta-oranssi"



Vector BSA, sivullekääntyvällä
jalkalaudalla ja jalkatuilla



Vector,
päätuella

Tupla-
kelausvanteet
lisävarusteena



Paljon jalkatuki-
vaihtoehtoja



Lisävarusteita ja optioita

- Kova istuin- ja muotoiltu kova selkälevy
- Anatomisesti muotoillut istuin- ja selkätyyny
- Selkänojan kulma säädettävissä 74° -118°
ristikolla - voidaan taittaa eteenpäin
- Ylimääräiset katetri- tai ruokailuvälinepussit
- Sisäänvedettävä selkänojan jatke muotoillulle
kovalle selkälevylle
- Erilaiset jalkalaudat- ja -levyt: jatkuvat tai jaetut,
sisä- tai ulkokiinnitys, korkeus, syvyys ja kulma
säädettävissä, ulospäin käännettävissä tai
yksinkertainen putki
- Erilaisia vartalon asemointiapuvälineitä (pää-/
niskatuet, pehmusteet, abduktiokiila)
- Apuvälineet yksikätiseen käyttöön (yhden käden
ohjaus, tuplakelausvanne, yhden käden jarru)
- Kelausvanteiden eri pintamateriaalit
ja/tai erikoisrenkaat
- Erilaiset työntökahvat tai työntötangot, joiden korkeus ja
kulma on säädettävissä
- Erilaisia jarruja (mukaan lukien kevyet pyörät rumpujarruilla
- jopa noin 1,1 kg:n painonsäästö paria kohden verrattuna
normaaleihin rumpujarrurenkaisiin)
- Anti-Rollback-lukko (lisäjarru rinteissä)
- Terapiapöytä / pöytälevy
- Nokkapyörä
- Tarta-selkänojan kiinnitysmahdollisuus
- Laaja valikoima värejä
- Valtava valikoima pinnasuojia

**Kaikki lisävarusteet tilauskaavakkeissa
huom! asentovoille on oma kaavake**

Helppo kustomoida - Muutettavissa milloin tahansa

Istuinyksikköä säädetään itsenäisesti rungosta muutamalla ruuvilla säätämällä istuintuen kautta. Tämä on erittäin helppo säätää optimaalisen fysiologisen tartuntapisteen löytämiseksi ja positiivisen voimien tasapainon saavuttamiseksi.

Kaikkia fysiologisia parametreja voidaan muuttaa milloin tahansa - jopa jälkikäteen - ja ne voidaan asettaa erittäin tarkasti: tartuntakohta, tartuntareitti, istuma-asento, aktiivisuusaste, istuin- ja selkäkulma, jalkatila tai jalkaohjaus, jalkojen ojennuskulma ja renkaiden camber.

Sama koskee (melkein) kaikkia muitakin osia. Modulaarisen järjestelmämme ansiosta vaihtaminen, säätäminen, muuntaminen tai lisääminen ei ole ongelma. Siksi Vector on yksi markkinoiden monipuolisimmista kiinteärunkoisista pyörätuoleista. Ja se tarjoaa runsaasti tilaa yksittäisille lisälaitteille kuten: pää-/niskatuet, sivutuet, abduktiokiilat, anatomiset istuin- ja selkätyyny tai jopa erillisest istuinkuoret.



Tarta-selkäosat
optiona
erikoistilauksesta



Nokkapyörä



Vector



Soveltuu istuimeksi
ajoneuvoon
ISO 1716-19



3 päätukivaihtoehtoa: suojapäällisen
väri valittavissa verhoiluvärikartastosta.


Valittavana korkeussäädettävät erilliset
työntökahvat kulmasäätö sivusuun-
nassa tai levennetyt työntökahvat ja
avustajan rumpujarrut



Tekniset tiedot


Värit ja materiaalit

Runkovärit: Kaikki perusvärit saatavana kiiltävä-metallinhoito- tai matta-versiona.

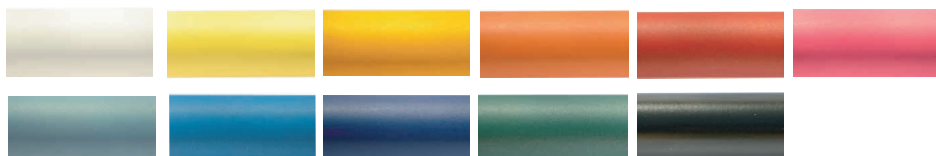

Erikoisvärit:


Metal-effect:

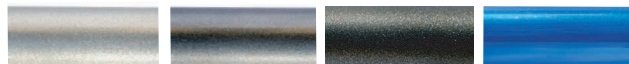

Dormant colours: Double-coated:




Eloksoidut: (vain tietyt mallit ja konfiguraatiot)

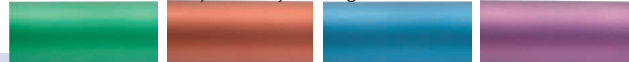

Verhoilu:

TREVIRA:

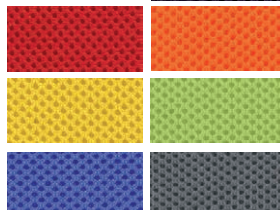

Nylon / keino nahka:



Läpinäkyvät pinnasuojat vakiona
+ satoja pinnasuojavaihtoehtoja
tilattavissa lisävarusteena yhteistyössä
Sorg & www.wheelchairgadgets.com



22-46 cm (+2 cm)



24-50 cm (+4 cm)



25-50 cm (+5 cm)



20" - 24" 26" 4", 5", 5.5", 6" 7"



120 kg

Esitteissä perusmitat.

Tilaukskaavakkeissa ja custom-malleissa lisää kokoja
ja varusteluvaihtoehtoja.



SORG Rollstuhltechnik GmbH + Co
Benzstraße 3-5; 68794
Oberhausen-Rheinhausen
Tel: +49 (0) 7254 9279-0
Fax: +49 (0) 7254 9279-10
e-mail: info@sorgrollstuhltechnik.de
www.sorgrollstuhltechnik.de

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa
tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja
tuotespesifikaatioita.

© 2022 Camp Mobility Finland



www.campmobility.fi

Asiakaspalvelu
+358(0)9 350 76 310
info@campmobility.fi
Varaosapalvelu
+358(0)9 350 76 312
varaosat@campmobility.fi