



Pyörätuolien lisävarusteet



Optimaaliseen istuvuuteen ja mukavuuteen



Yes, you can.

Invacare® Rea® kallistettavien pyörätuolien tuoteperhe koostuu *Rea Azalea®*, *Rea Clematis Pro®* ja *Rea Dahlia®* pyörätuoleista. Jokainen tuoli on yhteensopiva lähes kaikkien Rea-lisävarusteiden kanssa, mikä takaa käyttäjälle optimaalisen istuvuuden ja paremman mukavuuden. Paremman tuen ansiosta käyttäjät voivat osallistua monenlaisiin jokapäiväisiin toimiin. **Kirjain osoittaa, mikä lisävaruste voidaan kiinnittää mihinkin Rea-tuoliin:**

A = Azalea

C = Clematis

D = Dahlia

Selkäosat



▲ Selkänojalevy

Tukeva korkeussäädettävä selkäosalevy
(C) (D)



▲ Flex 3 kova selkäosa

Tarjoaa vakaan tuennan yhdessä tyynyjen kanssa. Selkänoja on sekä korkeus- että leveysäädettävä.

(A) (D)



▲ Flex 3 tarrakiristettävä selkäosa

Selkänoja voidaan räätälöidä käyttäjälle säätämällä remmejä. Selkänoja on sekä korkeus- että leveysäädettävä. Se voidaan myös verhoilla tai siihen voidaan lisätä tyynyjä

(A) (D)



▲ Laguna tarrakiristettävä selkäosa

Perus tarrasäädettävä selkäosa asennetaan suoraan selkätuen sivuputkiin. Voidaan varustaa päällisellä tai selkätyynyillä.

(D)



▲ Lateral päällinen

Lateral päällisessä ei ole kiiloja ja se on ohuempi kuin edellinen. Siinä on enemmän ompeleita paremman istuvuuden takaamiseksi.

(A) (D)



▲ Laguna selkätyyny

Laguna selkätyyny tarjoaa hyvän tuen myös sivusuunnassa. Tyynyn korkea muotoilu parantaa istuinmukavuutta.

(A) (C) (D)



▲ Mistral 2 selkätyyny

Mistral 2 selkätyyny on syvä muotoilu ja vahvistetut lateraalituet. Muotoilu tukee vyötäröä ja helpottaa olkapään liikettä.

(A) (D)



▲ Passad 2 selkätyyny

Korkean hartiatuen ansiosta **Passad 2** tarjoaa tukea käyttäjille, joiden asento on heikentynyt. Korkeat vahvistetut sivutuet.

(A) (D)

Helppo Selkäosaopas:

Selkäosa levy	Kova Selkäosa	Tarrakiristettävä selkäosa	Laguna tarrakiristettävä selkäosa
Cover Lateral		A + D	D
Laguna	C	A + D	C
Mistral 2	A + D	A + D	
Passad 2	A + D	A + D	
Shoulder High	A + D	A + D	
Vicair	A + D	A + D	
A Azalea	C Clematis	D Dahlia	



▲ Shoulder High 05 selkätyyny

Shoulder High on sama kuin **Passad 2** mutta 10 cm korkeampi, suunniteltu pitkille käyttäjille



▲ Vicair® Multifunctional selkätyyny

Selkätyyny, joka mukautuu käyttäjän muodon mukaan ja tarjoaa yksilöllisen istuvuuden.

(A) (D)

(A) (D)



▲ Invacare® Matrix® Elite E2

Selkäosa yksilölliseen asemointiin, pehmustettu Ripple Foam-materiaalilla ergonominen alumiiniselkälevy, jossa on 80 mm:n muotoiltu syvyys, ja lantion ja lapaluun leikkaukset. Säädetty syvyys, korkeus, kulma ja rotaatio. (A) (D)



▲ Invacare® Matrix® Elite E2 Deep

Selkäosa yksilölliseen asemointiin, pehmustettu Ripple Foam-materiaalilla ergonominen alumiiniselkälevy, jossa on 150 mm:n muotoiltu syvyys, ja lantion ja lapaluun leikkaukset. Säädetty syvyys, korkeus, kulma ja rotaatio. (A) (D)



▲ Invacare® Matrix® Elite TR

Selkäosa paksulla verhoilulla. Muotoiltu syvyys, ja lantion ja lapaluun leikkaukset. Säädetty syvyys, korkeus, kulma ja rotaatio.



▲ Selkäosan levennyspalat


Saatavana selkäosan levennyspalat, jos tuolissa käytetään esim. leveää selkösä kapeamman istuinleveyden kanssa. (D)

Työntökahvat



▲ Työntökahva

Korkeussäädettävä työntökahva, johon voi kiinnittää erilaisia pää- ja niskatukia. Yhteensopiva Invacare® Matrix® -niskatukiin. (A) (D)

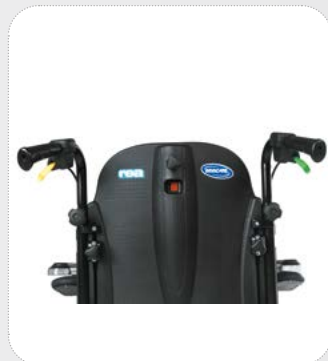

▲ Erilliset työntökahvat

korkeussäädettävät työntökahvat. (C) (D)



▲ Liitetyt erilliset työntökahvat

Yhdistetyt työntökahvat, joiden korkeus säädettävissä. Hieman ulospäin suuntautuvaa kulmaa ergonomisen otteen takaamiseksi. (A) (D)



▲ Kulmasäädettävä työntötanko

Voidaan nostaa ylös tai alas avustajan tarpeiden mukaan. Helppo säätää kahdella painikkeella (A) (C) (D)

Istuimen kallistuksen ja selkäosan säätö



▲ Istuinkallistus

Kaikissa Rea-tuoleissa on istuin tility painonsiirrolla. (**Clematis** pienin) joka lisää stabiiliteettia **Clematis** 20°, **Azalea** 25°, **Dahlia** 30° ja jopa 45°.

(A) (C) (D)



▲ Selkäosan kallistus (avustajan säädettävä)

Kaikissa Rea-tuoleissa on vähintään 30 asteen kallistus korkealla pivot pointilla, joka vähentää hankausta.

(Kuvassa 30° kallistus **Dahlia**)

(A) (C) (D)



▲ Kallistusvipu (käyttäjän säädettävä)

Kallistusvipu on saatavilla runkoon kiinnitettäviin käsinojiin (ei säädettävät) ja standardi leveyssäädettäviin käsinojiin

(D³⁰)

Moottoroitu tility ja selkäosan kallistus



Clematis



Azalea



Dahlia 30



Dahlia 45

▲ Saatavana Clematis, Azalea, Azalea Max, Dahlia 30 ja Dahlia 45

Sähköhjauksen avulla avustaja ja/tai käyttäjä voi turvallisesti kallistaa ja kallistaa tuolia tarpeiden mukaan. Tämä eliminoi tarpeen kallistaa tuolia manuaalisesti.

(A) (C) (D)

Istuimet ja istuintyynt



▲ Liukuva istuin

Käytetään siirrettäessä ja auttamaan asemoinnissa. (A)



▲ Floshape

Suuritehkeinen vaahtomuovityyny, istuintyyntä muokkautuu muotojen perusteella, mikä takaayksilöllisen istuvuuden (A)(D)



▲ Vicair Multifunctional

Istuintyyntä muokkautuu muotojen perusteella, mikä takaayksilöllisen istuvuuden (A)(D)

▲ Mistral 2

Perusistuintyyntä, parantaa istuimukavuutta. (C) (D)



▲ Istuintyyntyn päällinen

Pestävät, moneen suuntaan joustavat PU-päälliset.

(A) (D)



▲ Kulmasäädettävät jalkatuet

Kestävät jossa ergonominen ote ja visuaalinen säätö. Pohjapehmusteet ovat muotoiltuja ja ne voidaan taistaa sekä eteen- että taaksepäin siirron helpottamiseksi.


(A) (C) (D)



▲ Kiinteät 80° jalkatuet

Kiinteät tai säädettävät jalkalevyt lisävarusteena. Helppo kääntö sisään ja ulos toiminto vapauttamalla kahvan lukitusmekanismi.

(A) (D)

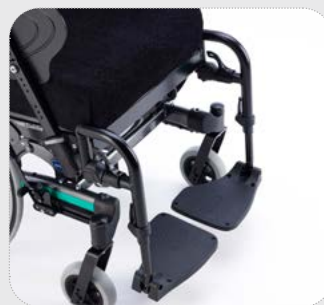

▲ Kiinteät 90° jalkatuet

Tue jalkatuet lähemmäs vartaloa. Käytä vain pienillä tukipyörillä.

(A)

(D)



▲ Korkealle asennettu jalkatuki

Käyttäjille, joilla on lyhyet jalat tai käyttäjille, jotka tarvitsevat jalkatukea matalalla.

(A) (D)



▲ Keskijalkatuki

Jalkatuessa on säädettävissä korkeus, syvyys ja kulma. Se tarjoaa käyttäjälle kompaktin tuen jaloille. Jalkatuki auttaa käyttäjää pitämään jalat yhdessä.

(A) (D)



▲ Amputaatiojalkatuki

Jalkatuessa on säädettävissä korkeus, kulma, ja syvyys. Se tarjoaa vakaan tuennan. Helposti käännettävissä sivuun siirtotilanteissa.

(A) (C) (D)



▲ Amputaatiojalkatuki

Jalkatuessa on vinotuki pohkeelle.

(A)



▲ Kipsijalkatuki

Kiinteä 90° kulma, säädettävät pehmusteet ja jalkalevy.

(A) (D)



▲ 90 asteen jalkatuen kiinnitys

Mahdollistaa jalkatuen asentamisen lähemmäs istuinta.

(A) (D)



▲ Jalkatuen kiinnitys

Saatavilla on standardi versio (yläkuva) ja 50 mm pidempi versio (alempi kuva). Sopii pitkäjalkaisille käyttäjille, jotka käyttävät kulmasäädettävää jalkatukea tai kiinteää jalkatukea tarvitseville lyhytjalkaisille käyttäjille.



▲ Yksiosainen jalkalauta

Taittuu ylöspäin ja voidaan myös irrottaa. Kulma- ja syvyyssäädettävä ja sopii kaikkiin jalkatukiin.

(A) (D)



▲ Ylöstaitettava jalkalevy

Vakauden parantamiseksi ylä- ja ala-asennossa on "puolilukitus".

(A) (C) (D)

Jalkatuet ja jalkalevyt



▲ Taitettava, säädettävä jalkalevy

Säädettävissä kulma, korkeus, syvyys ja sivusuunnassa.

(A) (C) (D)



▲ Jatkettu jalkalevy

Extender tarjoaa suuremman jalkatuen, joka sopii säädettävään jalkalevyyn. Voidaan asentaa sekä eteen että taakse.

(A) (C) (D)



▲ Yksiosasisen jalkalaudan pehmuste

12 mm paksu pehmuste antaa jaloille pehmeämmän ja mukavamman tuennan.

(A) (D)



▲ Jalkalevyn pehmuste

Kulma- ja syvyyssäädettävälle jalkalevyille. Helppo irrottaa, 25 mm paksu

(A) (C) (D)



▲ Jalkalevyjen lukitus

Lisävakautta varten: säädettävät jalkalevyt voidaan lukita yhteen.

(A) (C) (D)



▲ Pehmustettu pohjetuki

Pehmeä, säädettävä pohje remmi, joka voidaan vaihtaa kulmasäädettävän jalkatuen pohjepehmusteen tilalle tai käyttää täydentämään kiinteää jalkatukea

(A) (D)

Käsituet



▲ Dahlia 30 & 45

Säädettävä korkeus ja sivusuoja on syvyyssäädettävissä

(D)



▲ Azalea & Clematis

Käsituki suoralla käsipehmusteella, saatavana 50 mm korkeampana versiona.

(A) (C)



▲ Muotoiltu käsituki

Tukeva käsinoja muotoillulla pehmusteella. Takaosa on korkeampi ja leveämpi, mikä lisää tukea kallistetussa asennossa.

(A) (C) (D)



▲ Leveä käsitukipehmuste

Tukeva käsinoja leveällä ja pehmeällä pehmusteella. Tarjoaa leveämmän kosketusalueen käsivarrelle.

(A) (D)



▲ Suora, kapea käsitukepehmuste

Kapeat käsinajapehmusteet itsekelavia varten, helpottavat pääsyä kelauspyöriin.

(D)



▲ Lisäpehmuste

Suunniteltu suorille käsinajo pehmusteille lisäämään mukavuutta. Vetoketjukiinnitys.

(D)



▲ Yksiosainen pehmustettu käsituki

Pehmustettu käsinajo lonkkaohjausta varten ja tarjoaa "suljetun" istuimen.

(A)

(C)



▲ Hemi-käsituki

Pehmustettu kourumallinen pitkä hemiplegikon käsituki on kulma- ja korkeussäädettävä

(A) (C) (D)



▲ Sivutuen pehmuste

Peittää sivulevyn muovin. Multi stretch PU-pinnoitettu kangas yhdessä sisäpehmusteen kanssa tekee siitä pehmeämmän.

(A) (C)



▲ Pehmustetyyny sivun pehmusteeseen

20 mm paksu tyyny vähentää istuimen leveyttä. Kiinnitettävä sivulevyn yläosaan, ei häiritse sivutuen peittämää istuintyynyä. Istuimen leveys pienenee 20 mm.

(A) (C)



▲ Sivutukityyny

Tekee sivutuesta mukavamman ja pienentää sen leveyttä. 22 mm paksu.

(A) (D)



▲ Vahvistettu sivutuki

Käytetään, kun sivusuojiin kohdistuu painetta.

(D)

Istuin- ja selkäosien lisäosat



▲ Sivuttaissäädettävä päätuki

Päätuessa on kulmasäädettävät sivutuet. Syvyys-, kulma-, sivuttais- ja korkeussäätö yksilöllisen tuen saamiseksi

(A) (C) (D)



▲ Päätuki poskituilla

Poskituella varustetussa päätuessa on samanlainen kiinnitys kuin sivuttain säädettävässä päätuessa, mutta sen muoto on suunniteltu tarjoamaan optimaalinen tuki passiiviselle käyttäjälle. Korkeus, syvyys ja kulma säädettävä.

(A) (C) (D)



▲ Korkeussäädettävä niskatuki

Muotoiltu pään ja kaulan ääri viivojen mukaan hyvän tuen saamiseksi

(A) (C) (D)



▲ Pestävät päälliset

Pesun ja huollon helpottamiseksi pää- ja niskatuille on saatavilla päälliset.

(A) (C) (D)

Istuin- ja selkäosien lisäosat



▲ Universal niska- ja päätuen pidike

Pidike erityyppisille niska- ja päätuille (A) (D)



▲ Istuinleveyden levennys

Istuinleveyttä voidaan leventää 10 mm puoli

(C)



▲ Abduktiokiila

Ovaali abduktiokiila voidaan asentaapolvien väliin, irrotettava ja syvyyssäädettävä. (A) (C) (D)



▲ Lumbar selkätukityyny

Voidaan sijoittaa selkänojan päällisen/tyynyn taakse selkänojan muodon lisäämiseksi ja parantamiseksi. (A) (D)



▲ Turvavyöliivin kiinnike

Kiinnityspidike voidaan lisätä niska-/pätuen putkeen.

(A)

(D)



▲ Istuinlevyn pidennys

Levyperi, jota voidaan käyttää istuinlevyn jatkeena eri asennoissa.

(D)



▲ Istuinlevyn korkeudensäätö

Hook&Loop kiinnitettävä lisälevy istuinlevyn päälle nostaa istuinkorkeutta 20 mm.

(D) (A)



▲ Kiilat

Istuimen ja/tai selkänojan tyynyn alla käytettävä asemointipalat

(A) (D)



▲ Vartalotuki

Irrotettava tukeva runkotuki, jonka leveys ja syvyys on säädettävissä. Saatavana myös **Azalea Maxiin**.

(A) (C) (D)



▲ Vartalotuki

Monia säätömahdollisuuksia, helppo muotoilla käyttäjän yksilöllisten tarpeiden mukaan. Voidaan käyttää kaikissa selkänojissa ja selkänojan ja tyynyjen yhdistelmissä. Saatavilla myös **Azalea Maxiin**.

(A)

(D)



▲ Vartalotuki swing away

Vartalotuessa on säädettävä varsi ja kiinnitysvivut ja se voidaan kallistaa käyttäjän tarpeiden mukaan. Siirtoa varten se voidaan taittaa pois. Irrotettava versio saatavana optiona.

(A) (C) (D)



▲ Vartalotuki pidennetyllä varrella

Mahdollistaa vartalotuen sijoittamisen 50 mm korkeammalle tai alaspäin, pitkille käyttäjille. (A) (D)

Istuin- ja selkäosien lisäosat



Yes, you can:



▲Turvavyöt ja -liivit

Turvavyöliivi asetetaan rintakehän päälle
(Azalea Minor)

Tukipyörät ja kiinnitysosat



▲ QR-pikakiinnitys tukipyöriin

Tukipyörä on helppo irrottaa nuppia painamalla. Se pienentää pyörätuolia kuljetusta varten.
(D)



▲ Rungon jatkopalat

Siirtää tukipyöriä 50 mm eteenpäin.
(A)



▲Tukipyörien suuntalukitus▲ Tukipyörä optioita

Pitää tukipyörät suorassa asennossa.
(A)



Valittavana erilaisia pyöriä 4" - 8" eripaksuuksia, mukaan lukien pneumaattiset, pehmeät tai kiinteät.

(A) (C) (D)

Kuljetuspyörät, optiot



▲Kelausvanteet

Saatavana alumiini tai muovipinnoitettu (vakiovalikoima) ja ruostumaton teräs, vaahtopinnoitettu tai black grip (erikoistilaus).
(A) (D)



▲Tuplakelausvanteet

Yksikätiseen käyttöön (D)



▲Pinnasuojat

Huurrettu tai kirkas
(A) (C) (D)



▲ Rumpujarrut 16", 20", 22" ja 24" kuljetuspyöriin

Avustajan rumpujarrut lisäävät turvallisuutta.

(A) (C) (D)

Kuljetuspyörät, optiot



▲ Jarruvivun jatke

jarruvarren pidennys
helpompaa käsittelyä varten.

Saatavilla myös

Azalea Maxiin

(A) (C) (D)



▲ Esteenylittäjä / polkaisuputki

Helpottaa tuolien siirtämistä
reunusten ja esteiden yli.

Asennetaan aina oikealle puolelle

(D)

Muut lisävarusteet



▲ Pöytälevy

Säädettävä syvyys ja helppo
irrottaa. Kiinnitä pyörätuoliin joko
napsauttamalla molemmilta
puolilta tai swing away -käännä
sivulle.

(A) (C) (D)



▲ Pöytälevyn pehmuste

Pehmeä 30 mm tyyny
kiinnitetään joustohihnoilla.

(A) (C) (D)



▲ Pöytälevyn lukitus

Jousilukko on kiinnitetään
vastakappaleeseen.



▲ Swing away pöytälevy

Optiona swing away pöytä
voidaan kääntää pois tieltä, kun
käyttäjä siirtyy tuoliin ja sieltä
pois. Se on myös irrotettava.



▲ Lisälaite vyön kiinnitykseen

Sijaitsee käsituen edessä

(D)



▲ Asemointivyön kiinnitysosat

Käytetään vakiokiinnityksen
täydennykseksi useiden
kiinnityspisteiden luomiseksi.

(A)



▲ Lantiovyö

Turvaa ja asemoi tuolissa
istujaa

(A)

(C) (D)



▲ Tarvikelaatikko alatasolle


Tarvikelaatikkoa voidaan käyttää
hengityskoneiden, laukkujen ja
muiden laitteiden
kuljetukseen pyörätuolissa. Se
ei häiritse tuolin
tai selkänojan kallistusta.

(D)

Muut lisävarusteet



Yes, you can:

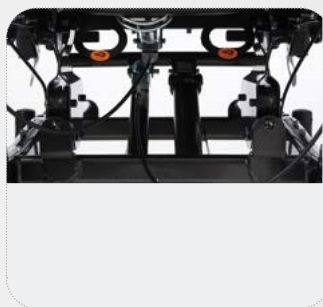

▲ Kuljetushakaset

Takakiinnitys on istuimen alla. Etupuolelle kuljetushakaset on käsinojien lisävaruste.

(D)



▲ Heijastinsarja

Heijastaa valoa pimeässä ja lisätä pyörätuolin näkyvyyttä.

(A) (C) (D)



▲ Kallistusasteikko

Kallistusasteikolla on helppo lukea istuimen ja selkänöjan kallistusasento

(A) (D)



Kelaus- ja työntöavut



▲ Alber e-motion®

Kelausapu (ei myynnissä meillä)

(A)



▲ Alber e-fix®

Kelausapu (ei myynnissä meillä)

(A) (C) (D)



▲ Alber scalamobil®

Porraskiipijä (ei myynnissä meillä)

(C) (D)



▲ Alber viamobil®

Työntöapu (ei myynnissä meillä)

(A)

(C) (D)

Invacare Rea malli	e-fix E35	e-fix E36	e-motion M25	scalamobil S35	scalamobil S38	viamobil eco V12	viamobil eco V14	viamobil V25	twion T24
Rea Azalea	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	No	Yes	No
Rea Azalea Assist	No	No	No	Yes	No	No	No	Yes	No
Rea Azalea Base	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	No	Yes	No
Rea Azalea Tall	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	No	Yes	No
Rea Azalea Max	Yes	Yes	Yes	No	No	No	No	Yes	No
Rea Azalea Minor	Yes	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No
Rea Clematis	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	No	Yes	No
Rea Dahlia 30	Yes	Yes	Yes	No	No	No	No	Yes	No
Rea Dahlia 45	Yes	Yes	Yes	No	No	No	No	Yes	No

Please note, there may be limitations in wheel sizes, seat heights etc. depending on the configuration of the chair.

Dual Stability System (DSS®)

Kallistettavien pyörätuolin käyttäjät ovat voimakkaasti riippuvaisia pyörätuolista ja tarvitsevat paljon apua avustajilta. Keskivertokäyttäjä viettää suurimman osan päivästäan tuolissa, joten istuinkallistus- ja selkäosan kallistustoiminto on avainasemassa paineen jakamisessa.

Tavallisissa kallistavissa tuoleissa tuolin kääntöpisteet eivät ole kohdakkain, ja myös stabiiliteetti on vaarassa tuolia kallistettaessa.




Kun tuolin ja käyttäjän painopiste ei ole linjassa...

- Tuloksena ei-synkronoitu liike
- Kun tuoli kallistuu, niskatuki ja selkätuki liikkuvat ylöspäin, jolloin käyttäjä on liu'uttava alas tuolin kompensoimiseksi.
- Tämä johtaa hankaukseen ja kitkavoimien lisääntymiseen
- Jalkatukia nostettaessa kääntöpisteiden ei-synkronoitu liike johtaa polvien kohoamiseen, mikä pakottaa käyttäjän selkänöjää kohti, mikä aiheuttaa puristusta

Stabiiliteetti katoaa


- Kallistuminen voi aiheuttaa käyttäjälle ahdistuneisuutta ja turvallisuuden tunteen katoamista
- Ei painonsiirtokykyä
- Nostaa tuolin etuosan korkealle

Näiden riskien ja huolenaiheiden poistamiseksi Invacare® Rea® -pyörätuolisarjassa on jokaiseen tuoliin sisäänrakennettu DSS, painopisteen siirtojärjestelmä, joka parantaa vakautta ja varmistaa anatomisesti oikean asennon aina, kun tuolin istuin ja selkäosa kallistuu. Hienostunut järjestelmä on ollut osa Rea pyörätuoleja jo 1990-luvun alusta lähtien ja se koostuu korkeista kääntöpisteistä ja painonsiirtokyvystä.

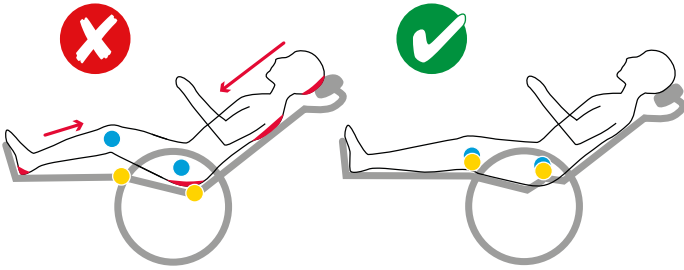

Rea-tuoleille suunniteltu korkea kääntöpiste mahdollistaa kehon ja selän pituuden kompensoinnin ja vähentää siten hankausta, kitkaa ja puristusta. Kun tuoli kallistuu käyttäjän pää, kaula ja vartalo pysyvät samassa asennossa niskatuessa ja selkänöjässä, mikä estää liukumisen ja liikkeen.

Rea-tuoleihin on sisäänrakennettu painopisteensiirto, jotta pyörätuoli pysyy vakaana riippumatta siitä, missä kulmassa tuoli on. Pohjimmiltaan se mahdollistaa istuimen liikkumisen alas- ja eteen, mikä mahdollistaa vakauden säilyttämisen taaksepäin kallistetusta asennosta huolimatta. Istuin liikuu yksinkertaisesti alustaa kohti.

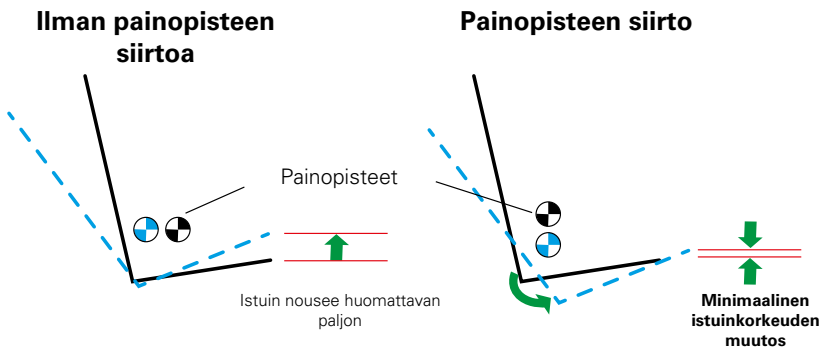

Scan here to access the website.



To view our short video on DSS, please visit the 'Invacare Europe' YouTube channel or simply scan here.

Tel: +41 61 487 70 70
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com

Invacare International GmbH
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil
Switzerland

