

rea®

Dahlia®



Helposti liikuteltava ja kompakti
kallistettava pyörätuoli



Yes, you can.

Invacare Rea Dahlia:ssa on kaikki; puhdaslinjainen, moderni design, laajat kallistusvaihtoehdot ja helppo säädettävyys. Monimuotoinen Rea Dahlia on täydellinen ratkaisu niin aktiivisille kuin passiivisille asiakkaille, jotka tarvitsevat sekä liikkuvuutta, istuinmukavuutta, voimakasta tuentaa ja paineentasausta.

Rea Dahlian voi valita joko 30° tai 45 ° kallistuskulmalla, joka parantaa asentovaihteluja ja vähentää ihoon kohdistuvaa painetta. Rea Dahlia on yhteensopiva kaikkien tuoteperheen muiden tuotteiden ja varusteiden kanssa. Vakiona edistysellinen **Flex 3** -istuinjärjestelmä. Optiona esim. uusi **OneSolution Matrix** istuinjärjestelmällä.

Painonsiirtoa helposti

Optiona 45° kallistuksella tarjoaa enemmän asentovaihtoehtoja ja erinomaiset paineentasausominaisuudet asiakkaan painehaavariskialtteimmilla alueilla. Kallistusmekanismin ainutlaatuinen rakenne mahdollistaa keveät säädöt, joihin tarvitaan vain vähän lihasvoimaa.



Ideaali tuoli itsepotkutteluun ja itsekelaukseen

Versio 30° kallistuksella sopii asiakkaille, jotka pystyvät kelaamaan tuolilla itse. Istuinkorkeuden saa säädettyä erittäin matalaksi 32,5 cm:n korkeudelle, mikä mahdollistaa myös itsepotkuttelun. Valitsemalla itsesäädettävän vaihtoehdon, käyttäjät voivat myös itse säätää istuma-asentoaan melko helposti.



Dahlia 30°
itsepotkuteltava:
istuinkorkeus 325 - 500
mm.



Dahlia 30° Henkilöille, jotka haluavat aktiivisesti vaihdella asentoa itse.



Dahlia 45° Optimaalinen paineenkevennys ja asennonvaihtelu.



DSS -toiminto (Dual Stability System) vähentää hankausta kallistettaessa.

Avainominaisuudet ja edut



◀ Edut ja hyödyt Dahlia 30 ja 45

- Helppo liikutella, takapyörät lähellä runkoa, kevyt työntää
- Pieni kokonaisleveys – kapea kokonaispinta-ala
- Helppo käyttää pienellä kevyellä liikkeellä, tasainen kallistus
- Invacare Rea -perheen komponenttien ristiinyhteensopivuus
- Valmiiksi muotoillut istuinjärjestelmät tai yksilöllisesti räätälöidyt istuimet ovat mahdollisia



◀ MatrX Elite E2 selkäosat

Optiona kevyet ja ergonomiset MatrX E2 selkänojat tukevaan mutta mukavaan tuentaa. Valitse muotoillut syvyydet 80 mm tai 150 mm käyttäjä vartalon hallinnan mukaan.

- Ripple Foam -teknologia mikroilmaston hallintaan
- Muotoillut selkänojat, joissa lantio- ja vapaa tila leikkaus lavan kohdalla takaavat maksimaalisen vapauden
- MatrX-hardware asennusosat tukevaan asennukseen ja yksinkertaiseen säätöön



◀ Dual Stability System (DSS)

- Dual Stability System (DSS) pitää yllä vakautta ja tasapainoa äärimäisen kallistetussakin asennossa
- Helppo kääntää takapyörät tasapainottavat painopistettä
- Selkänojan korkean pivot-/ kääntöpisteiden ansiosta minimaalinen hankaus kallistuksen aikana

Tekniset tiedot ▼

Löydät kattavampia tietoja tuotteesta, mukaan lukien tuotteen käyttöohje, paikallisen Invacare-jälleenmyyjäsi verkkosivustolta: www.campmobility.fi



Istuinleveys ▼ Istuinsyvyys ▼ Istuinkorkeus ▼ Selkäosan korkeus ▼ Käsitukien korkeus ▼ Jalkatukien pituus ▼ Istuinkulma ▼ Selkäosan kulma ▼

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|----------|
| Rea Dahlia | 390-440/ 440-490/ 490-540 16" (390-490/ 440-540/490- 590 mm) | 430 - 500 mm | 30° : 330 - 500 mm 45° : 350 - 500 mm | 500 - 800 mm (ilman istuintynnyä cushion) | 250 - 320 mm | 330 - 667 mm | 30°: -1 - 30° 45°: 0 - 45° | 0° - 30° |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|----------|



Kokonaisleveys ▼ Kokonaiskorkeus ▼ Kokonaispituus sis.jalkatuot ▼ Kokonaispaino ▼ Max. käyttäjäpaino ▼ Kuljetuspaino ▼ Kääntösäde ▼ Törmäystestattu ▼

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------|--------------------------------------|--------|-------------|
| Rea Dahlia | SW + 160 mm (16") SW + 180 mm (24") | 30°: 825 - 1250 mm 45°: 850 - 1250 mm | 900 - 1195 mm | >35kg ¹ | Max 135 kg | 21/25 kg (SW 390 mm) ² | 755 mm | ISO 7176-19 |
|-------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------|--------------------------------------|--------|-------------|



Max. kallistus seisontajarrun käyttöön ▼

Rea Dahlia 7°

Optiot ja lisävarusteet katso "Rea Accessory" lisävarusteet esite.

- Kokonaispaino istuimen leveydellä 39 cm ja kevyimmällä kokoonpanolla. Sähköinen kallistus- ja kallistusvaihtoehto lisää kuljetuspainoa 4,2 kg
- Kuljetuspaino kasvaa 4,2 kg, jos käytetään Power Tilt & Recline -vaihtoehtoa.



Runko väri ▼

Heijastava tehostetarra ▼

Verhoilu ▼



Black



Silver



Blue



Champagne




Red



Petroleum Green



Black PU TR26

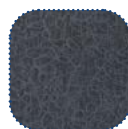

Black plush TR35



Black spacer TR36

Rea, Rea design and DSS (Dual Stability System) design are registered trademarks of Invacare International. The Rea Azalea is designed with DSS (Dual Stability system). It provides the user with enhanced stability and safety when being tilted or the backrest is reclined.

Tel: +41 61 487 70 70
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com

Invacare International GmbH
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil
Switzerland



Scan here to view our Rea Dahlia video



Scan here to access the website.



Yes, you can.®



© 2021 Invacare International GmbH. All rights reserved. All information quoted is believed to be correct at time of print. Invacare reserves the right to alter product specifications without prior consultation. Rea Dahlia - EU - 12/2021