

Action^{®3} NG Rocking Chair



6-pyöräinen pyörätuoli itsenäiseen elämään

LIKUTELTAVUUS | KONFIGUROITAVUUS | KÄYTTÖMUKAVUUS



Action³_{NG} RC on 6-pyöräinen manuaalipyörätuoli, joka on suunniteltu tunnetun **Action³_{NG}** :n pohjalta. Laajan Action-sarjan ristiin yhteensopivien lisävarusteiden ja varaosien ansiosta, tuoli on erittäin konfiguroitava ja yksilölliset tarpeet täyttävä, kokoonlaitettava pyörätuoli. **Action³_{NG} RC** on kehitetty helpottamaan kelausvanteisiin ulottumista. Se tarjoaa paramman liikuteltavuuden ja vaivatonta kelattavuutta. Ainutlaatuinen design tarjoaa uniikin lepoasennon taakse asennettujen lisäpyörien ansiosta. Tuoli on helppo kallistaa jopa 25° kulmaan.

- ▶ Parempi liikuteltavuus verrattuna tavallisiin 4-pyöräisiin manuaalipyörätuoleihin.
- ▶ Mekaaninen tasaisella liikkeellä toimiva kallistusasento, jonka käyttäjä voi säätää itse tai avustajan suorittamana.
- ▶ **Action³_{NG} RC** on uusi ratkaisu, kun halutaan kokoonlaitettava, kevyt ja helposti kuljetettava comfort-pyörätuoli

Parempi liikuteltavuus

Erytysuunnittelun ansiosta käyttäjän paino voidaan jakaa tasaisesti kaikille pyörille, joka lisää käännettävyyttä ja ohjattavuutta. Keskipyörien ansiosta kääntösäde on lyhyempi kuin tavallisessa manuaalipyörätuolissa, joka mahdollistaa vaivattoman käytön sisätiloissa.

6-pyöräisyyden edut:

- ▶ Helpompi ulottua kelausvanteisiin
- ▶ Yläraajat pysyvät luonnollisemmassa ja ergonomisemmassa asennossa
- ▶ Kelaamiseen tarvitaan vähemmän voimaa, joka parantaa suorituskykyä
- ▶ Ehkäisee hartiakipuja



Lepoasento

Vakiona olevien 6" tai 5,5" tukipyörien ja 22" tai 24" kelauspyörien lisäksi, **Action³_{NG} RC** on varustettu myös kahdella nivelletyllä 5" takapyörällä, jotka tarjoavat mahdollisuuden kallistaa tuolin 25° kallistuskulmaan.

Kallistaaksesi tuolia itsenäisesti, käyttäjän tarvitsee vain työntää käsillä takaapäin eteen kohti kelausvanteita. Vaihtoehtoisesti myös avustaja pystyy kallistamaan tuolia keskus- ja takapyörille vaivattomasti.

Tämä innovatiivinen ominaisuus tarjoaa lepoasennon milloin tahansa päivän aikana ja mahdollistaa painepisteiden muutoksen ja paineen vapautumisen. Kelattaessa tuolissa olevat turvavivut aktivoituvat automaattisesti, jotka sekä käyttäjä että avustaja voivat poistaa käytöstä vaikeuksitta kallistustoiminnon käyttämiseksi.



7

ERITYIS- OMINAISUUDET

Kulmasäädettävä selkäosa

- ▶ Voidaan säätää käyttäjän istuessa tuolissa

Sivullekäännettävät, irrotettavat käsituet

- ▶ Ergonomiset, vaahtomuovi-pehmustetut, sivulle käännettävät käsituet helpottavat sivuttaissiirtoja.

Turvavipu

- ▶ Aktivoituu ajettaessa, voidaan poistaa käytöstä tuolin kallistuksen ajaksi

Mekaaninen kallistus

- ▶ 25 asteen kallistus mahdollistaa lepoasennon

Parempi liikuteltavuus

- ▶ Verrattuna 4-pyöräisiin standardi-pyörätuoleihin



Kompakti design ja kontrolloitu paino

- ▶ Ajoyksikön leveys ja kokonaisleveys kokoontaitettuna ovat täsmälleen samat kuin **Action³_{NG}**:ssä, jotka ovat:

- Ajoyksikön leveys: istuinleveys + 190 mm
- Kokonaisleveys kokoontaitettuna: 295 mm

Kokonaispaino on 17.6 kg, joka on vain + 3.4 kg painavampi kuin **Action³_{NG}**. Kokonaispituus on optimoitu samaksi kuin **Action³_{NG}** kaatumisesteillä.



Kulmasäädettävä ja alastaitettava selkäosa

- ▶ Patentoitu, portaattomasti kulmasäädettävä selkäosa mahdollistaa säätöjen tekemisen käyttäjän istuessa tuolissa.

Lisäksi eteenpäin taitettava selkäosa pienentää säilytys- ja kuljetuskokoa.

Avainominaisuudet ja edut




◀ Säädettävät akselikiinnikkeet

Akselikiinnikkeet ovat säädettävissä kolmeen eri asentoon käyttäjälle sopivaan painopisteeseen sopivaksi. Tämä säätö määrittelee myös sekä kallistuspisteen että tukipyörien sijainnin.



◀ Turvavipu

Turvavipujen ansiosta käyttäjä voi kallistaa tuolin lepoasentoon. Turvavivussa on 65 mm:n pieni joustovara, joka sallii pienten esteiden ylittämisen myös turvavivut aktivoituna.

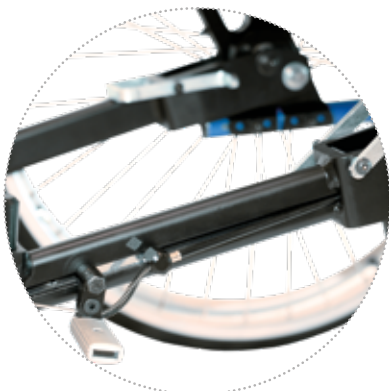

◀ Jarruvaijerit

Ainutlaatuinen vaijereilla toimiva jarrujärjestelmä seuraa keskipyörien asentoa. Siksi jarruja ei tarvitse erikseen aktivoida, kun tuoli on lepoasennossa.

Esittelyssä

Action³_{NG} RC tuoteperhe

Action³_{NG} RC saatavana 3 eri mallia

Action³_{NG} RC

Action³_{NG} RC :iin on saatavana laaja valikoima lisävarusteita ja optioita vastaamaan kunkin käyttäjän erityistarpeita mm. erilaisia selkäosavaihtoehtoja: kiinteä, taitettava, kaasujousella kallistettava tai kulmasäädettävä ja alas käännettävä.



Action³_{NG} RC *Matrx*

Standard *Matrx Elite* selkäosa, jossa 80 mm kaareva syvyys tai *Elite Deep* selkäosa, jossa 160 mm kaareva syvyys . Myös valikoima istuintyynyjä, joista valita: *Classic Visco*, *Matrx Vi* tai *Libra* ja monta muuta!



Action³_{NG} RC *Comfort pack*

Action³_{NG} RC *Comfort pack* todellinen kokoontaitettava, kevyt, Comfort-tuoli, joka on helppo kuljettaa! Comfort-paketti sisältää kallistettavan selkäosan, *Laguna* selkäosatyyntyn, sivullekäännettävät, syvyys- ja kulmasäädettävät jalkalevyt (pari) ja Dartex- pää-/niskatuen.



Saatavana valikoima myös muita kokoonpanoja eri asiakkaiden ja avustajien erilaisiin tarpeisiin.

Tekniset tiedot ▼

Lisätietoja tuotteesta, mukaan lukien tuotteen käyttöohje, paikalliselta jälleenmyyjältä ja Invacaren verkkosivustolla.



Istuinleveys ▼



Istuinsyvyys ▼



Istuinkulma ▼



Istuinkorkeus ▼



Selkäosan kulma ▼



Selkäosan korkeus ▼



Jalkaosan kulma ▼

Action³NG RC

380 / 405 /
430 / 455 /
480 /
505 mm

400 /
450 mm

3°

460 -
485 mm

7° / 0° - 30° /
- 15° - +15°

350 - 510 mm

80° / 0 - 75°




Jalkatukien pituus ▼



Käsitukien korkeus ▼



Ajoyksikön leveys ▼

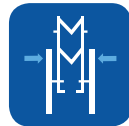

Kokonaisleveys taitettuna ▼



Kokonaispituus sis.jalkatuet ▼



Kokonaispituus ilman jalkatukia ▼



Kokonaiskorkeus ▼

Action³NG RC

200 - 400 /
330 - 460 /
440 - 510 mm

230 /
170 - 295 mm

istuinleveys
+ 190 mm

295 mm

1036 -
1124 mm

816 -
890 mm

810 -
1040 mm



Max. kallistus- kulma ▼



Kääntö- säde ▼



Max.käyttäjä- paino ▼



Kokonais- paino ▼



Painavin osa ▼

Action³NG RC

4°

800 mm

125 kg

17,6 kg

11,2 kg

Runkovärit ▼



Slate grey



Matt black



Blue pop



Matt red

Verhoilu ▼



Musta nylon

Huom: värit voivat hieman vaihdella yllä olevista

Tel: +41 61 487 70 70
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com

Invacare International GmbH
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil
Switzerland



Yes, you can.®

© 2019 Invacare International GmbH. All rights reserved. All information quoted is believed to be correct at time of print.

Invacare reserves the right to alter product specifications without prior consultation. Action3NG RC - EU - 05/2019