

Action^{®4}
NG



Tyylikäs, vakaa,
erinomainen toiminnallisuus
ja suurempi maksimikuormitus



Stabiliteetti ja funktionaalisuus

Uusi paranneltu **Action⁴_{NG}** :n paino on keventynyt lähes 1 kg :n aikaisempaan malliin verrattuna. **Action⁴_{NG}** on painonpudotuksen lisäksi entistäkin toimivampi: Kaksoisristikkoputket tarjoavat entistä vakaampaa ja helpompaa ajoa.

Action⁴_{NG} on myös helppo koota, sovittaa ja säätää. Lisäksi saatavana entistäkin kattavampi ActionNG -tuoteperheen ristiinsopiva vaihtoehto-, varaosa- ja lisävarustevalikoima, jotka kattavat vaativimmatkin käyttäjätarpeet.

- ▶ Huomattavasti entistä keveämpi kokonaispaino
- ▶ Paremmat toiminnallisuudet ja varustevaihtoehdot
- ▶ Päivitetty design ja enemmän värivaihtoehtoja



AVAIN

ERITYIS- OMINAISUUDET

Huomattava painon pudotus

1

Action⁴_{NG} :n paino on pudonnut lähes 1 kg ilman että tuolin säädettävyydestä ja toiminnallisuudesta on tarvinnut tinkiä tippaakaan. Tämä on uusien alumiinisten uudelleen muotoiltujen, kevyempien tukipyörien haarukoiden ja uusien optimoitujen kelauspyörien kiinnityksien ansiota.

Action⁴_{NG} on entistäkin helpompi kelata ja nostella autoon kuljetuksen ajaksi.

2

Huomio yksityiskohtiin

Action⁴_{NG} 's on uudelleen muotoiltu useista eri kohdista. Uusi tyylikäs etuhaarukoiden design antaa kevyemmän ulkonäön, selkäosan verhoilu paremman peittävyuden ja uudet raikkaat väri vaihtoehdot vastaavat tyylikkäästi ajan vaatimuksiin. Jokaiseen yksityiskohtaan on kiinnitetty huomiota, jotta tuolista tulisi mahdollisimman tyylikäs ilman kompromisseja.

Helppo säätää ja muuttaa

3

Huolimatta monista uusista parannuksista **Action⁴_{NG}** on edelleen yksinkertainen varustaa ja kaikki ActionNG -tuoteperheen osat ja muut Invacare-tuotteet ovat ristiinyhteensopivia, ja sopivat siis yhteen myös aikaisempien versioiden osien kanssa.

Parannettu toiminnallisuus

4

Uudet, fiksusti suunnitellut toiminnallisuudet tekevät **Action⁴_{NG}** :stä entistä helpokäyttöisemmän.

Uusi käsikien irrotusmekanismi helpottaa irrotusta ja siirtymistä pyörätuolista. Uudessa Open Zone-vaatesuojassa on avoin leikkaus ja vaahtomuovi pehmuste sujuvamman siirron mahdollistamiseksi (versio korkeussäädettävällä käsituella).

Uusi patentoitu, intuitiivinen, portaattomasti kulmasäädettävä, taittoiminnolla varustettu selkätuki mahdollistaa selkänojan asennon optimoinnin täydellisesti istuvaksi. Lisäksi ylimitoitettu selkätuen kangaspäällinen peittää nyt myös selkätuen putket, mikä lisää mukavuutta ja lannetukivyo on tehty korkeussäädettäväksi, mikä mahdollistaa täydellisen asemoinnin tyynyn korkeudesta riippumatta.

Olemme lisänneet kaikki nämä toiminnot, koska tiedämme, että yksityiskohdilla on merkitystä joka päivä.



► Kevyempi

Action⁴_{NG} :n käsittely, varastointi ja kuljetus on helppoa 14.7 kg:n painon ja 8 kg:n kuljetuspainon ansiosta. Uusilla keveillä komponenttinvaihtoehtoilla painoksi saadaan pienennettyä 14 kg.



► Kelauspyörien alumiinikiinnitys

Uusi alumiininen kelauspyörien kiinnitys lisää keveyttä ja toiminnallisuutta.



► Tukipyörien ripustus ja haarukat

Uusi alumiininen tukipyörien kiinnitys ja haarukat yhdistettynä uuteen muotoiluun, parantavat tuolin keveyttä ja tyylikästä ulkonäköä.



▲ Taaksekääntyvät käsitet 2. ja 3.

Molemmat käsitukivaihtoehdot ovat taaksekääntäviä ja varustettu uudella pehmeästi toimivalla käsitukien lukitusmekanismilla ja uudella avoimella Open Zone -vaatesuojalla ja otepehmusteella, joka mahdollistaa helpommat siirtymiset tuoliin ja tuolista pois. Lisäksi vaihtoehto 3. on täysin korkeussäädettävä.

Portaattomasti säädettävä, kokoontaittuva selkäosa

Innovatiivinen, patentoitu, *Invacare Action⁵* - mallista adoptoitu portaattomasti kulmasäädettävä selkäosa mahdollistaa selkäosan säätämisen käyttäjän istuessa tuolissa. Eteenpäin kallistettuna, kokoontaittuva selkäosa vähentää huomattavasti tuolin kuljetus- ja varastointikokoa. Lisäksi sisäänrakennettu mitta-asteikko mahdollistaa entistäkin tarkemman selkäosan kulman säädön.





◀ Amputaatiotuki

Korkeus-, kulma- ja syvyys-säädettävä amputaatiotuki kosteutta kestävällä pinalla, on myös sivulle kääntyvä, joka helpottaa siirtymisiä.



◀ Kiinnityskoukut

Uudet, kirkkaanväriset, helposti havaittavat kiinnityskoukut mahdollistavat helpon ja nopean autokiinnityksen kuljetuksen ajaksi.



◀ Kaksoiskelausvanteet

Erityisesti hemipleegikoiden käyttöön tarkoitettu kelausvanne, jonka teleskooppikaasujousiputki voidaan irroittaa, jolloin tuoli säilyy kokoonlaitettavana.

200x30



125x30



150x30



▲ Tukipyörät

Tukipyörät 5", 6" ja 8" ilmakumi- tai kiinteillä puhkeamattomilla renkailla. Saatavana useita eri leveyksiä.



▲ Turvavyöt

Saatavana valikoima eri valmistajien 2-piste ja 4-pisteturvavöitä sekä turvavyöliivejä

Optioita ▼



▲ **Matrx® istuinjärjestelmä**

Saatavana laaja valikoima perusistuintyyneistä korkean riskin *Invacare **Matrx Libra*** istuintyyneihin, jokaisen käyttäjän tarpeiden mukaan. *Invacare **Matrx Elite** ja **Elite Deep*** selkäosat yhdessä ***EasyMount-*** pikakiinnitysjärjestelmän kanssa mahdollistavat nopean ja helpon irrotuksen, kun tuoli halutaan taittaa kasaan. Yhteensopivuus laajan istuin- ja selkänojavälikoiman kanssa muodostaa ***Action⁴_{NG}*** :n ytimen: poikkeuksellisen hyvän stabiiliteetin ja istuunmukavuuden.



▲ **Pituuskompensoituvat, vaakatasoon säätävät jalkatuet**

Vaakatasoon säätävät, optimaalisesti pituuskompensoituvat jalkatuet voi nostaa 0-80° kulmaan.



▲ **Kallistettava selkäosa**

Kaasuajousella kallistettavan selkäosan avulla hoitajat voivat helposti säätää käyttäjän selän asentoa yhdellä jatkuvalla liikkeellä ja nostaa avustetusti.

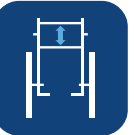
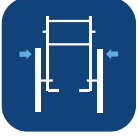


▲ **Päätuet**

Saatavana niskatuki, päätuki tai poskituellinen testivoittaja ELAN -pätuki käyttäjän tarpeista riippuen. Kaikkien näiden korkeutta, syvyyttä ja kulmaa voidaan säätää optimaalisen asennon varmistamiseksi.

Tekniset tiedot

Löydät kattavampia tietoja tuotteesta, mukaan lukien tuotteen käyttöohje, paikallisen Invacare-jälleenmyyjäsi verkkosivustolta: www.campmobility.fi.

							
Kelattava	380/405/430/ 455/480/505/ 555/605 mm	400 / 450 / 500 mm	0° / 3° / 6°	360 / 385 / 410 / 435 / 460 / 485 / 510 mm	0° / 7° / 0° - 30° / - 15° - +15°	325 - 510 mm	80° / 0° - 80°
Transit	380/405/430/ 455/480/505/ 555 / 605 mm	400 / 450 / 500 mm	0° / 3° / 6°	460 / 485 / 510 mm	0° / 7° / 0° - 30° / - 15° - +15°	380 - 460 mm	80° / 0° - 80°
							
Kelattava	200 - 400 / 330 - 460 / 440 - 510 mm	200 - 280 / 240 / 170 - 300 / 210 - 350 mm	Ist.lev. + 190 mm	305 mm	995 - 1170 mm	850 - 1025 mm	810 - 1040 mm
Transit	200 - 400 / 330 - 460 / 440 - 510 mm	200 - 280 / 240 / 170 - 300 / 210 - 350 mm	Ist.lev. + 160 mm	265 mm	950 - 1050 mm	805 - 905 mm	910 - 1040 mm
							
Kelattava	18°	850 mm	125 / 160 kg ¹	14.0 kg	8.0 kg		
Transit	18°	850 mm	125 / 160 kg ¹	14.5 kg	11.7 kg		



1. HD versio

Runkovärit



Verhoilu



Huomaa, että värit voivat vaihdella yllä olevasta tulostusjäljestä.

Tel: +41 61 487 70 70
hqeuropa@invacare.com
www.invacare.eu.com

Invacare International GmbH
 Benkenstrasse 260
 4108 Witterswil
 Switzerland



© 2020 Invacare International GmbH. All rights reserved. All information quoted is believed to be correct at time of print. Invacare reserves the right to alter product specifications without prior consultation. Action4NG - EU - 06/2020