



YHTEENSOPIVA



Uudistettu Action -perheen perusmalli

.....

Invacare **Action3 Basic** on yksi parhaista esimerkeistä Invacare tuotteiden muunneltavuudesta ja Action-perheen lisävarusteiden yhteensopivuudesta.

Action3 Basic pyörätuolin osien säädeltävyys ja muunneltavuus lisävarusteiden avulla tarjoaa tehokkuutta tuotteiden jakelijoille ja lukuisia vaihtoehtoja käyttäjille.

Uudistetussa kokoontaittuvassa, uuden sukupolven **Action3 Basic** pyörätuolissa yhdistyy uusi tyylikäs design, parennettu käytettävyys, vakaus ja istuinmukavuus.

**Yes, you can.®**



Toiminnallisuutta

Action3 Basic:ssä on uudistettu tukevampi runkoputki ja taittomekanismi istuimen alla, mikä lisää tuolin vakautta ja mahdollistaa entistäkin helpomman kokoontaittamisen.

Yhdessä uudistettujen uudelleen muotoiltujen jalkalevyjen kanssa **Action3 Basic** on loistava valinta kaikkeen käyttöön, sekä yleiseen sairaala- ja lainaamokäyttöön että yksilölliseen käyttöön.

Kestävyyttä

Adaptoitava ja modulaarinen **Action3 Basic** mukautuu käyttäjän muuttuviin tarpeisiin. Se on myös yksinkertainen varustaa laajan lisävarustevalikoiman avulla.

Action3 Basic on loistava esimerkki toisen sukupolven pyörätuolista, jossa aikaisemmat käyttäjäkokemukset ja tuotteen historia on huomioitu tuolin uudelleen suunnittelussa.

Action3 Basic on Invacaren suosituin tuttu ja turvallinen malli pitkäikäisen päivittäiseen käyttöön.

Helppo kuljettaa!

Keveyen kuljetuspainon ja kokoontaittuvan selkäosan ansiosta

Action3 Basic on helppo purkaa osiin ja kuljettaa jopa erittäin pienissäkin autoissa.

Lisävarusteet ja ominaisuudet



Kevyt

Käsittelyä, kuljetusta ja varastointia on helpotettu kevyellä 14,2 kg kokonaispainolla. Keveimmillään paino (ilman käsitukia, työntökahvoja ja kelauspyöriä) on 7,6 kg.



Jarruvipu

Jarruvivun voi taittaa sivuun, mikä helpottaa sivuttaisuu-
ntaisia siirtymisiä.



Pituussäädettävä jalkatuki

3° / 5° kulmaan säädettävä jalkatuki mahdollistaa optimaalisen pituuden säätämisen.



Jalkatuet

10 mm välein korkeussäädettävät, sivulle kääntyvät swing-away jalkatuet.

Lisävarusteet ja ominaisuudet



Amputaatiotuki

Korkeus-, kulma- ja syvyyssäädettävän amputaatiotuen voi kääntää myös sivulle.



20 kelauspyörän kiinnitysmahdollisuutta

Kelauspyörät voi kiinnittää 20 eri kohtaan.



Kelausvanteet

Valittavana muovipäällysteinen tai anodisoitu alumiininen kelausvanne.



Kallistettava selkätuki

Saatavana myös kaasujousella toimivalla taakse kallistettavalla selkäosalla. Kallistettava selkätuki helpottaa siirtymisiä ja mahdollistaa käyttäjän selän asennon vaihtelut.

Lisävarusteet ja ominaisuudet



Kaksivärinen selkäosa

Vakioselkäosan (musta nylon) lisäksi saatavana tyylikäs kaksivärinen selkäosa lisävarusteena. Takana käytännöllinen säilytystasku.



Siirtotuoli

Transit versio on saatavana istuinleveyksillä 460, 485 ja 510 mm sekä 12" muovisilla siirtopyörillä.



Kaksoiskelausvanteet

QR mekanismilla tekevät tuolista helposti kokoon-taitettavan.



Turvavyö

Lisää turvaa istuttaessa.



Tukipyörät

Saatavana 5", 6" ja 8" ilma-täytteisillä tai puhkeamatto-milla tukipyörillä, myös useita eri rengasleveyksiä.



Jalkalevy

Kiinteän jalkalaudan uusi muotoilu lisää käyttömukavuutta ja antaa lisää tilaa jaloille.



Päätuki

Saatavana niskatuki, päätuki ja leukatuki käyttäjän tarpeen mukaan. Päätuet asennetaan työntötankoon ja voidaan korkeus- ja syvyysäättää optimaaliseen asentoon.

Lisävarusteet ja ominaisuudet



Käsitukivalikoima

1. Swing away: sivulle käännettävä, irrotettava 2. Swing away: Sivulle käännettävä, korkeussäädettävä 3. 4. ja 5. irrotettava ja korkeussäädettävä 6. Comfort-käsituki: irrotettava, korkeussäädettävä 7. hemikäsituki



Kaatumiseste

Lisäturvaa kynnyksissä, mäissä ja epätasaisella maalla.



Tarjotin

Kätevä ruokailemalla ja vapaa-ajan aktiviteeteissa.



Yhtenäinen jalkalauta

Syvyys- ja kulmasäädettävä yksiosainen jalkalauta saatavana lisävarusteena.



Keppiteline

Pitää kävelykepin tukevasti paikallaan kiinni pyörätuolissa.



Yhden käden kelausapu

Tämän järjestelmän avulla käyttäjä, jolla on vain vähän lihasvoimaa voi kelata pyörätuolia itse. Vivun avulla voi kelata eteen ja taakse. Integroidut jarrut.



Selkäosavaihtoehdot

Kiinteän selkäosan lisäksi (kallistuskulma 0° tai 7°), saatavana 4 eri selkäosaa. Työntökahvat valitaan selkäosan mukaan:

1. kokoontaitettava
2. kulmasäädettävä (-6°/+24°)
3. vipukallistus (0°/30°)
4. kaasujousi kallistus (0°/30°)



Istuintyynt

Vakioistuintyynt: 1. 50 mm paksu vaahtomuovityyny, 2. Mistral2 comfort-tyyny ja 3. viskoelastinen istuintyynt.

Tekniset tiedot


							
Itse-Kelattava	405 / 430 / 455 / 480 mm	400 / 450 mm	0° / 3° / 6°	*(360 / 385 / 410) / 435 / 460 / 485 / 510 mm *pienempi tukipyörä	0° / 7° / 0° - 30° / -6° - +24°	350 - 510 mm	80° / 0 - 80° / 90°
Siirto-pyörillä	405 / 430 / 455 / 480 mm	400 / 450 mm	0° / 3° / 6°	460 / 485 / 510 mm	0° / 7° / 0° - 30° / -6° - +24°	390 - 510 mm	80° / 0 - 80° / 90°
							
Itse-Kelattava	200 - 400 / 330 - 460 / 440 - 510 mm	200 - 280 / 240 / 170 - 300 / 210 - 350 mm	Ist.lev + + 190 mm	295 mm	980 - 1105 mm	835 - 960 mm	820 - 1050 mm
Siirto-pyörillä	200 - 400 / 330 - 460 / 440 - 510 mm	200 - 280 / 240 / 170 - 300 / 210 - 350 mm	Ist.lev + + 160 mm	260 mm	950 - 1050 mm	710 - 910 mm	920 - 1050 mm
							
Itse-Kelattava	9°	870 mm	125 kg	14,2 kg	7,6 kg		
Siirtopyörillä	9°	870 mm	125 kg	13,5 kg	10,7 kg		

All product dimensions are in millimetres to apply EN 12183 standards. Our wheelchairs comply with ISO 7176-19 standards and with ISO 10542, and have additional features providing increased levels of occupant security and safety whilst travelling in a motor vehicle. Wheelchair users should however transfer to the vehicle seat and use the vehicle installed restraint system whenever it is feasible. For more pre-sales information about this wheelchair, please consult the www.invacare.eu.com website. It can be found under the section Medium Active Wheelchairs / Action3NG / Sales and Images in the product catalogue. For information about typical user description, intended use, adjustments and transportation, please refer to the user guide.

Värit ja materiaalit



Hypnotic Purple

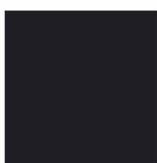

Matt Black



Blue Pop



Matt Red



Black Nylon
(verhoilu)




Pearl White



Slate Grey



Electric Green

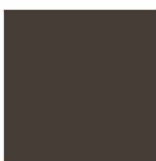

Anthracite Black



Valmistaja:

Invacare International Sàrl
Route de Cité-Ouest 2 - 1196
Gland Switzerland
Tel: +41 (0)22 354 60 10
Fax: +41 (0)22 354 60 11
hqeuropa@invacare.com
www.invacare.eu.com

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© Camp Mobility Finland 2019