

# Action<sup>®3</sup><sub>NG</sub> Rocking Chair



## Invacare Action<sup>3</sup><sub>NG</sub> Rocking Chair

Action<sup>3</sup><sub>NG</sub> RC on 6-pyöräinen manuaalipyörätuoli, joka on suunniteltu tunnetun Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>:n pohjalta. Laajan Action-sarjan ristiin yhteensopivien lisävarusteiden ja varaosien ansiosta, tuoli on erittäin konfiguroitava ja yksilölliset tarpeet täyttävä, kokoontaitettava pyörätuoli.

## 6-pyöräinen manuaalipyörätuoli

Action<sup>3</sup><sub>NG</sub> RC on kehitetty helpottamaan kelausvanteisiin ulottumista. Se tarjoaa paremman liikuteltavuuden ja vaivatonta kelausvanteiden käyttöä. Ainutlaatuinen design tarjoaa uniikin lepoasennon taakse asennettujen lisäpyörien ansiosta. Tuoli on helppo kallistaa jopa 25°.

**CAMP**<sup>®</sup>  
**MOBILITY**

## KULMASÄADETTÄVÄ SELKÄOSA

1

Patentoitu, portaattomasti kulmasäädettävä selkäosa mahdollistaa säätöjen tekemisen käyttäjän istuessa tuolissa.

## SIVULLEKÄÄNTYVÄT, IRROTETTAVAT KÄSITUET

3

Ergonomiset, vaahtomuovi-pehmustetut, sivulle käännettävät käsituet helpottavat sivuttaissiirtymisiä.

2

## TURVAVIPU

Aktivoituu kelattaessa, voidaan poistaa käytöstä tuolin kallistuksen ajaksi

4

## KALLISTUS

25° kallistus mahdollistaa lepoasennon

5

## PAREMPI LIIKUTELTAVUUS

Verrattuna 4-pyöräisiin pyörätuoleihin



6

## KOMPAKTI JA KEVYT

Leveys ja kokonaisleveys kokoontaitettuna ovat täsmälleen samat kuin Action3NG :ssä, jotka ovat:

7

## ALASTAITETTAVA SELKÄOSA

Kulmasäädettävä ja eteenpäin taitettava selkäosa pienentää säilytys- ja kuljetuskokoa.



### Säädettävä akseli

Akselikiinnikkeet ovat säädettävissä kolmeen eri asentoon käyttäjälle sopivaan painopisteseen sopivaksi. Tämä säätö määrittelee myös kallistuspisteen ja tukipyörien sijainnin.



### Turvavivut

Turvavipujen ansiosta käyttäjä voi kallistaa tuolin lepoasentoon. Turvavivuissa on 65 mm:n pieni joustovara, joka sallii pienten esteiden ylittämisen myös turvavivut aktivoituna.



### Vaijerijarrut

Ainutlaatuinen vaijereilla toimiva jarrujärjestelmä seuraa keskipyörien asentoa. Siksi jarruja ei tarvitse erikseen aktivoita, kun tuoli on lepoasennossa.

## PAREMPI LIIKUTELTAVUUS

Erityissuunnittelun ansiosta käyttäjän paino voidaan jakaa tasaisesti kaikille pyörille, joka lisää käännettävyyttä ja ohjattavuutta. Keskipyörien ansiosta kääntösäde on lyhyempi kuin tavallisessa manuaalipyörätuolissa, joka mahdollistaa vaivattoman käytön sisätiloissa. Parempi liikuteltavuus verrattuna tavallisiin 4-pyöräisiin manuaalipyörätuoleihin.

Action3NG RC on uusi ratkaisu, kun halutaan kokoontaitettava, kevyt ja helposti kuljetettava comfort-pyörätuoli.




## LEPOASENTO

Mekaaninen tasaisella liikkeellä toimiva kallistusasento, jonka käyttäjä voi säätää itse tai avustajan suorittamana. Vakiona olevien 6" tai 5,5" tukipyörien ja 22" tai 24" kelauspyörien lisäksi, Action3NG RC on varustettu myös kahdella nivelletyllä 5" takapyörällä, jotka tarjoavat mahdollisuuden kallistaa tuolin 25° kallistuskulmaan.

Kallistaaksesi tuolia itsenäisesti, käyttäjän tarvitsee vain työntää käsillä takaapäin eteen kohti kelausvanteita. Vaihtoehtoisesti myös avustaja pystyy kallistamaan tuolia keskus- ja takapyörille vaivattomasti.

Tämä innovatiivinen ominaisuus tarjoaa lepoasennon milloin tahansa päivän aikana ja mahdollistaa painepisteiden muutoksen ja paineen vapautumisen. Kelattaessa tuolissa olevat turvavivut aktivoituvat automaattisesti, jotka sekä käyttäjä että avustaja voivat poistaa käytöstä vaikeuksitta kallistustoiminnon käyttämiseksi.

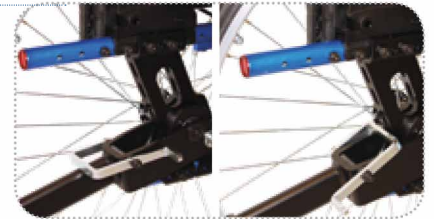

## Mallit



Action<sup>3</sup>NG RC



Action<sup>3</sup>NG RC Matrix



Action<sup>3</sup>NG RC Comfort Pack

Action<sup>3</sup>NG RC :iin on saatavana laaja valikoima lisävarusteita ja optioita vastaamaan kunkin käyttäjän erityistarpeita mm. erilaisia selkäosavaihtoehtoja: kiinteä, taitettava, kaasujousella kallistettava tai kulmasäädettävä ja alas käännettävä.

Action<sup>3</sup>NG RC Matrix-selkäosalla ja istuintyynyillä voit valita mm: **Matrix Elite** selkäosa, jossa 80 mm kaareva syvyys tai **Elite Deep** selkäosa, jossa 160 mm kaareva syvyys. Myös valikoima istuintyynyjä, joista valita: Klassinen **Visco**, **Matrix Vi** tai **Libra** ja monta muuta!

Action<sup>3</sup>NG RC Comfort Pack todellinen kokoontaitettava, kevyt comfort-tuoli, joka on helppo kuljettaa! Comfort-paketti sisältää kallistettavan selkäosan, Laguna selkäosatyynyn, sivullekäännettävät, syvyys- ja kulmasäädettävät jalkalevyt (pari) ja Dartex-pää-/hiskatuen.



## Ominaisuudet



### 6-pyöräisyyden edut:

- Helpompi ulottua kelausvanteisiin
- Yläraajat pysyvät luonnollisemmassa ja ergonomisemmassa asennossa
- Kelaamiseen tarvitaan vähemmän voimaa, joka parantaa suorituskykyä
- Ehkäisee hartiakipuja

## Tekniset tiedot



Istuinleveys ▼



istuinsyvyys ▼



Istuinkulma ▼



Istuinkorkeus ▼



Selkäosan kulma ▼



Selkäosan korkeus ▼



Jalkaosan kulma ▼


<b>Action<sup>3</sup>NG RC</b>	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm	400 / 450 mm	3°	460 - 485 mm	7° / 0° - 30° / -1 5° - +15°	350 - 510 mm	80° / 0 - 75°
--------------------------------	--------------------------------------	--------------	----	--------------	------------------------------	--------------	---------------



Jalkatukien pituus ▼



Käsitukien korkeus ▼

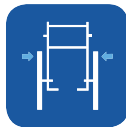

Ajoyksikön leveys ▼



Kokonaisleveys taitettuna ▼



Kokonaispituus sis.jalkatuet ▼



Kokonaispituus ilman jalkatukia ▼



Kokonaiskorkeus ▼

<b>Action<sup>3</sup>NG RC</b>	200 - 400 / 330 - 460 / 440 - 510 mm	230 / 170 - 295 mm	istuinleveys +1 90 mm	295 mm	1036 - 1124 mm	816 - 890 mm	810 - 1040 mm
--------------------------------	--------------------------------------	--------------------	-----------------------	--------	----------------	--------------	---------------



Max. kallistus-kulma ▼



Kääntö-säde ▼



Max.käyttäjä-paino ▼



Kokonais-paino ▼



Painavin osa ▼

<b>Action<sup>3</sup>NG RC</b>	4°	800 mm	125 kg	17,6 kg1	1,2 kg
--------------------------------	----	--------	--------	----------	--------

## Runko- ja tehostevärit




Slate grey



Matt black



Blue pop

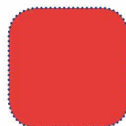

Matt red

Valmistaja:  
Invacare International Sàrl  
Route de Cité-Ouest 2 - 1196  
Gland Switzerland  
Tel: +41 (0)22 354 60 10  
Fax: +41 (0)22 354 60 11  
hqeurope@invacare.com  
www.invacare.eu.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.  
© Camp Mobility Finland 2020