



REHASENSE
more than mobility

Icon²⁰
Icon²⁰ XL



Icon²⁰ - kokoontaitettava peruspyörätuoli

Icon²⁰ on kevyt, kokoontaitettava, alumiinirunkoinen pyörätuoli lyhytaikaiseen tai sairaala- ja lainaamokäyttöön, jossa on laaja valikoima säätömahdollisuuksia käyttäjän tai terapeutin yksilöllisten toiveiden ja vaatimusten mukaan.

Icon²⁰:ssa jalkatukien lukitus on sivulla, mikä muodostaa tasaisen etuosan ilman riskiä, että raajat, vaatteet tai huonekalut tarttuvat tuoliin, jos jalkatuet poistetaan.

Icon²⁰ :ssa on säädettävät istuinkorkeus ja -syvyys, työntökahvat, käsi- ja jalkatuet ja -laudat. Vakiona myös vipujarrut, vaatesuojat, käsitukipehmusteet, puhkeamattomat renkaat ja kelausvanteet. Istuinleveydet 40–50 cm, istuinsyvyydet 40 cm tai 45 cm (vakio). **Max. 140 kg.**


Saatavana myös **Icon²⁰ XL**
Max. 180 kg istuinleveydet
53, 57 ja 61 cm.

CAMP[®]
MOBILITY

Ominaisuudet



Säädettävä istuinsyvyys
Istuinsyvyys säädettävissä +/- 11 cm.

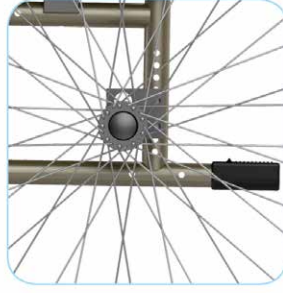

Säädettävä istuinkorkeus
Istuinkorkeus säädettävissä 5 eri korkeusasentoon aktiivisella / passiivisella säädöllä



Säädettävät jalkatuet
Jalkatuet kääntyvät ulos, sisään, ja alle. Irrotettavat, ylöskääntyvät kulma- ja kork.säädettävät jalkalevyt, joissa kantaremmit.



Säädettävät käsituet
Siirtymisiä helpottaa sivulle kääntyvät, irrotettavat, korkeussäädettävät käsituet sis. vaatesuojat ja pitkät käsitukipehmusteet.



Vipujarrut vakiona



Korkeussääd. työntökahvat



Kokoontaitettava ristikkorunko
helpottaa kuljetusta ja varastointia.



Polkaisuputki
pyörätuolin taakseallistukseen



Puhkeamattomat kelauspyörät alukelausvanteilla ja pikakiinnitysnavoilla



Säädettävät tukipyörät
7" / 170 x 40 mm mustat, kiinteät PU-tukipyörät 3 eri korkeuteen säädettävillä alumiinihaarukoilla.

LISÄVARUSTEET:

- Vaakatasoon säädettävät jalkatuet
- Amputaatiojalkatuet
- Kaatumiseste/ polkaisuputki
- Kepinpidike



Tekniset tiedot



Istuinleveys
45 cm (vakio)
muut: 37,5–50 cm*
XL: 53, 57 tai 61 cm



Leveys
kokoontaitettuna
34 cm



Selkäosan
korkeus
42 cm



Istuinkorkeus
48 cm
(sääd.)



Korkeus
kokoontaitettuna
91 cm



Kokonaispituus
101 cm
ilman jalkatukia
76 cm



Istuinsyvyys
40 cm tai
45 cm (vakio)



Kuljetuspaino
7 kg
Kokonaispaino
14,2 kg



Max. käyttäjäpaino
140 kg
XL 180 kg

* istuinleveydet: 37,5 - 40 - 42,5 - 45 - 47,5 tai 50 cm

Väri



Takuu: rajoitettu 2 vuoden takuu valmistusvirheille.



Musta verhoilu



Champagne

Kaikki Rehasense tuotteet ovat testattu ja hyväksytty ISO 11199-2:2005 laatustandardin mukaisesti, ovat CE-merkittyjä ja täyttävät lääkinnällisten laitteiden EU direktiivin 93/42/EEC vaatimukset.

Valmistaja:
Rehasense Sp.z o.o.
Sulejowska 45
97-300 Piotrków Trybunalski
Poland
www.rehasense.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
Camp Mobility
© 2020